ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Azzurro 803D 3 motorji




Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da je stol v brezhibnem stanju.
3. Kozmetični stol postavite v prostor, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtaknite omrežni vtič v ustrezno vtičnico.


Opomba! Otroci in neizkušene osebe tega aparata ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:

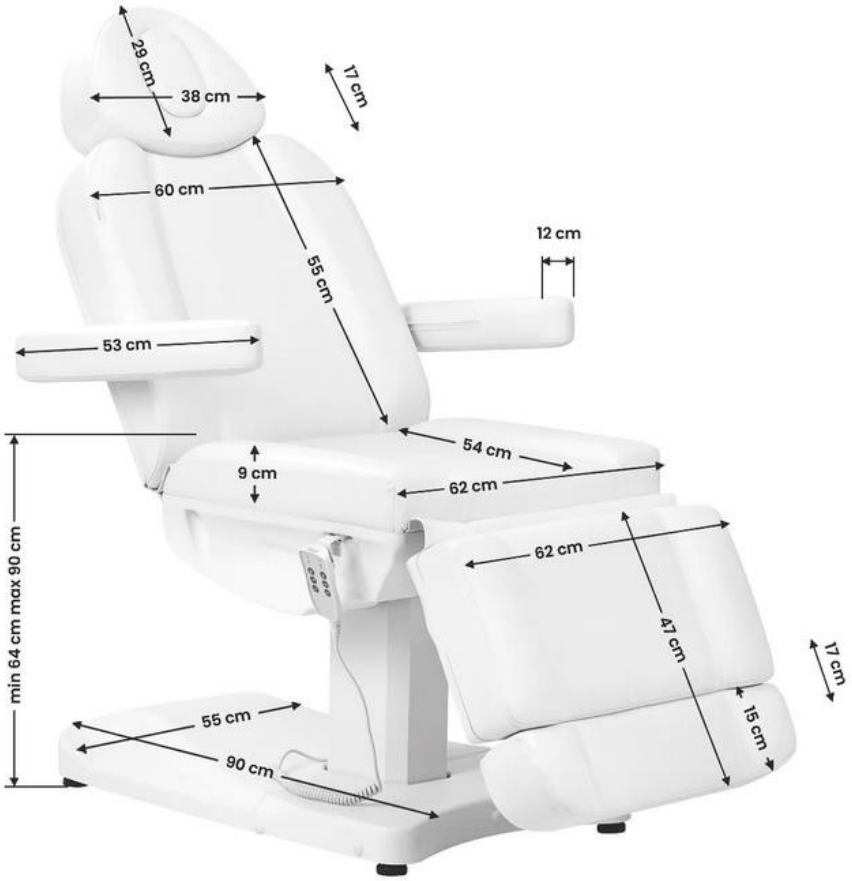



Konstrukcija naprave:

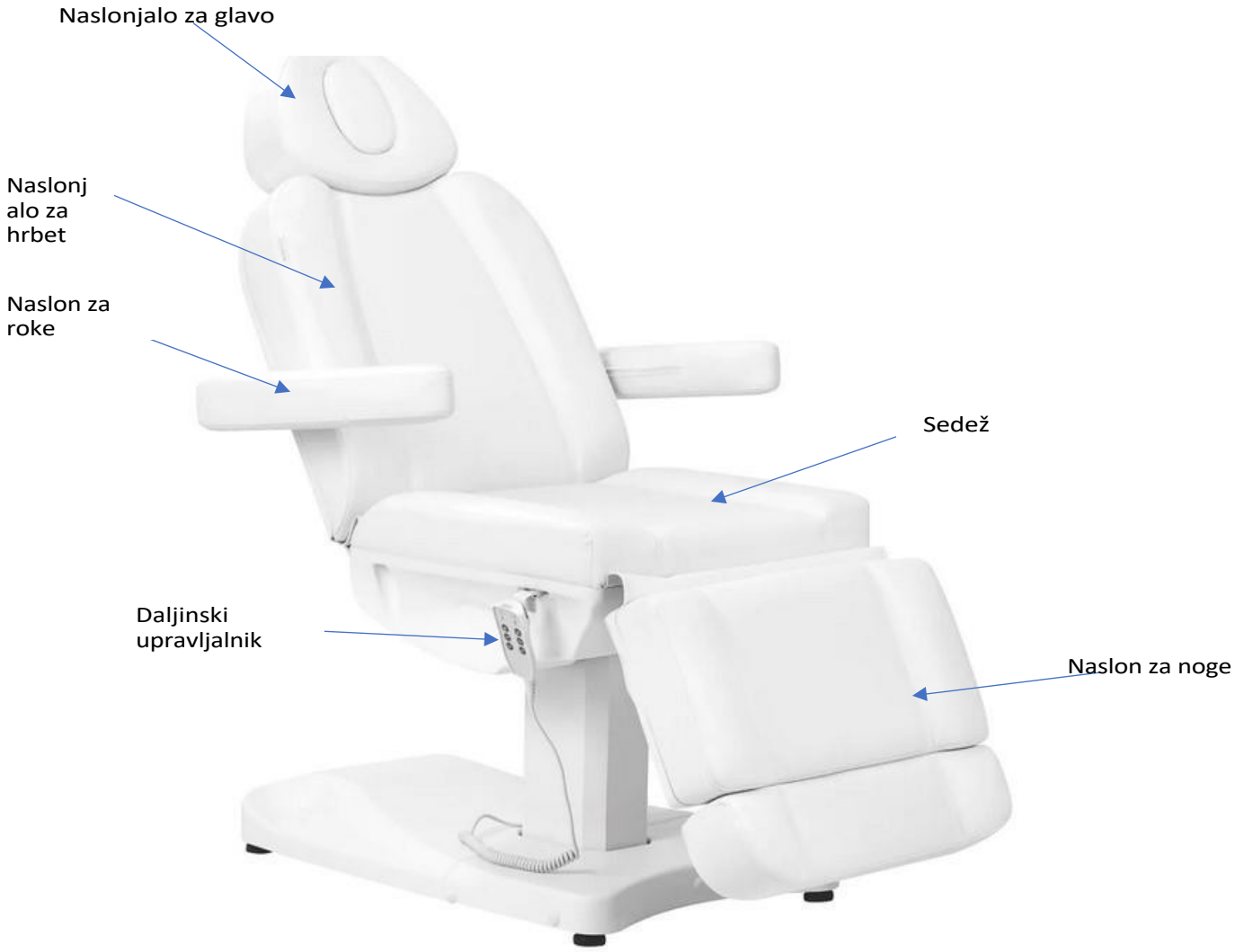

Opozorilo:

1. Podstavek za noge ni namenjen prenašanju celotne teže odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslon za roke in naslon za noge.
3. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Opozorilo:


1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
5. Osebi, ki ne izvaja tretmaja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
6. Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
7. Prepričajte se, da je okoli stola dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.

8. Prepričajte se, da v bližini sedeža ni ostrih ali nevarnih predmetov, ki bi lahko poškodovali enoto.
9. Naprave ne spreminjajte sami. Če fotelj ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.


Fotelj ima možnost ročnega upravljanja z daljinskim upravljalnikom ter možnost upravljanja z nogami. Višino fotelja, položaj naslonjala za hrbet in naslonjala za noge lahko nastavite po potrebi.

Funkcije daljinskega upravljalnika:

1. Nastavitev višine sedeža (med 64 in 90 cm)
2. Nastavitev naslona za hrbet
3. Nastavitev podnožja

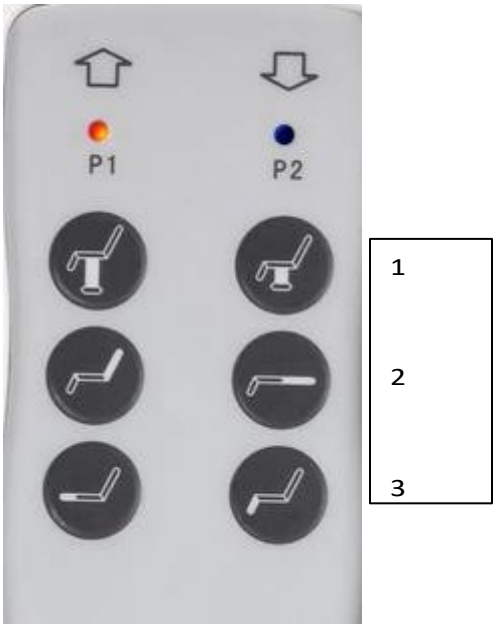


Funkcije nožnega upravljalnika:

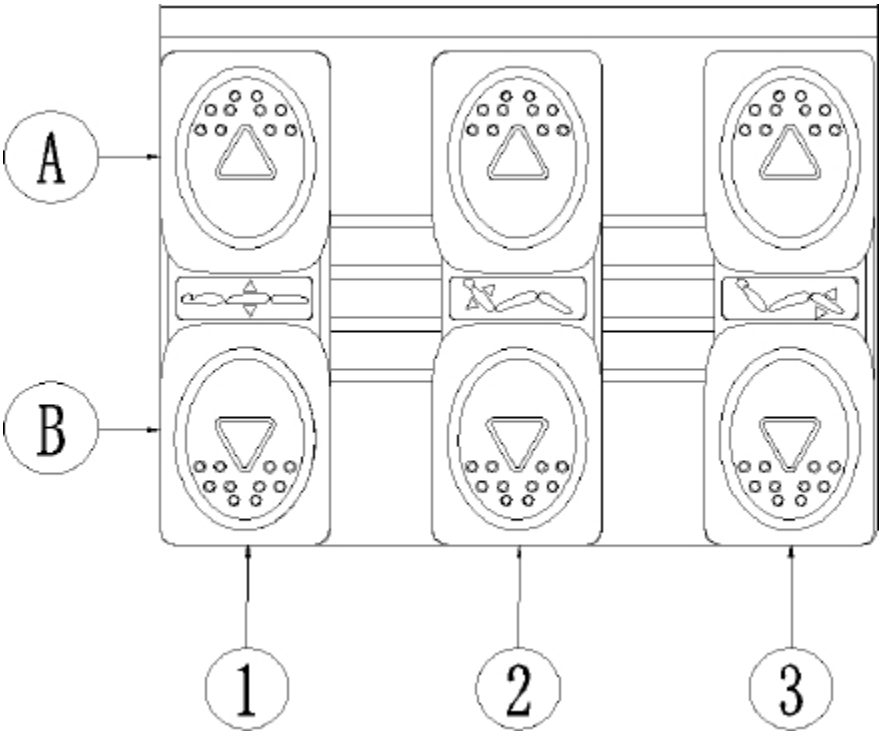

1. Nastavitev višine sedeža. Pritisnite A, da dvignete sedež, ali B, da ga spustite.
2. Nastavitev položaja naslonjala. Pritisnite A, da dvignete naslonjalo, ali B, da ga spustite.
3. Nastavitev naslona za noge. Pritisnite A, da dvignete naslon za noge, ali B, da ga spustite.

Podstavek za noge se podaljša

Stol ima tudi možnost podaljšanja naslona za noge, kar olajša izvajanje posegov pri višjih osebah in izboljša udobje. Največja dolžina podaljška podnožja je približno 17 cm. Podstavek za noge se nastavlja z gumbom na spodnji strani podstavka za noge.

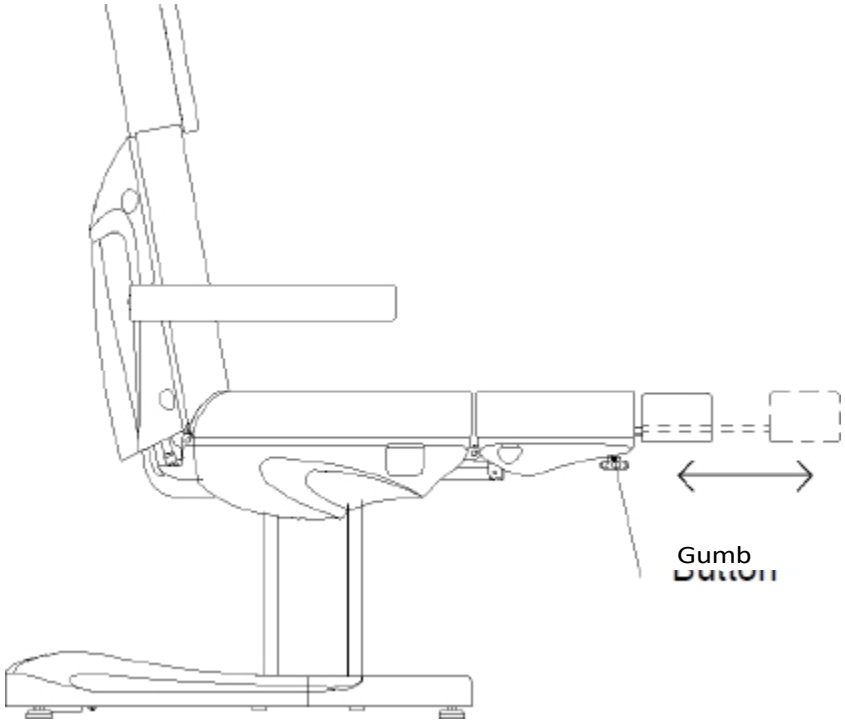


Namestitev naslona za roke:

Vstavite naslon za roko v odprtino na strani naslona za hrbet. Naslon za roko mora biti trdno pritrjen. Potisnite ga v desno ali levo, da se pravilno namesti. Enako storite z drugim naslonom za roke. Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.

Namestitev naslona za glavo:

Naglavni naslon potisnite v odprtino na vrhu naslona sedeža. Ko je naslon za glavo v pravilni višini, zategnite ročico, ki se nahaja na hrbtišču, da naslon za glavo pritrdite.
Če želite naslon za glavo spustiti ali podaljšati, odvijte ročico, nastavite naslon za glavo in zategnite ročico.

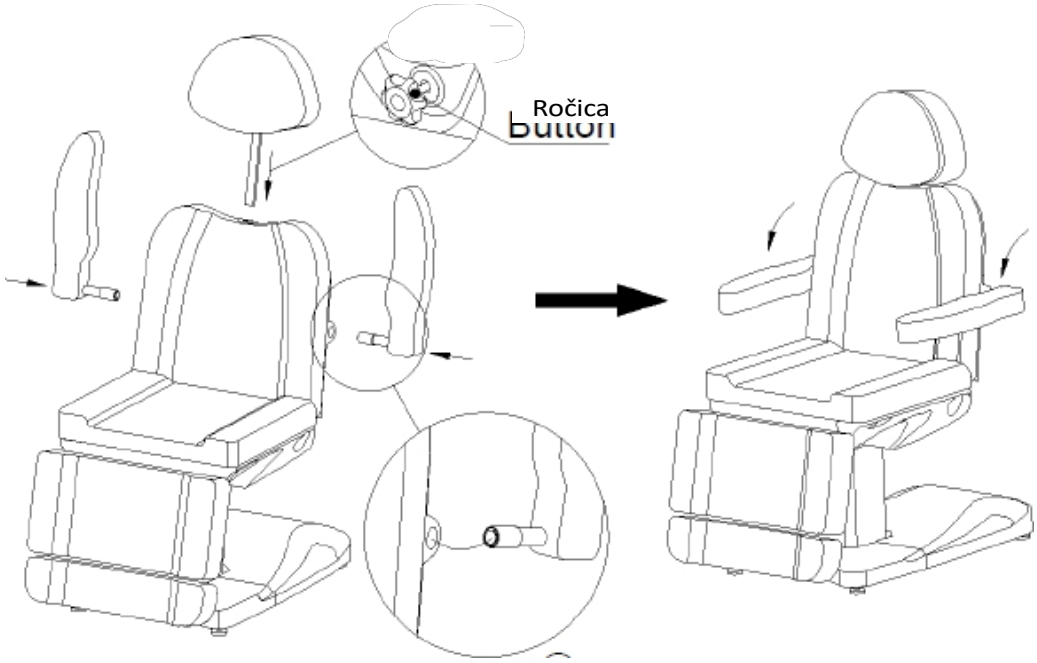

Čiščenje in razkuževanje enote:

Pred čiščenjem odklopite enoto iz električnega omrežja.

Da bi ohranili površino sedeža v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Lakirane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Enote ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter je ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatkov ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.

4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema za zaklepanje

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja samo izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Način rešitve
Ni odziva, ko pritisnete gumbe na daljinskem upravljalniku	1. Gumb za vklop se sproži ali pa se ne sproži. 2. Preverite, ali je pedal maksimalno pritisnjen. 3. Preverite, ali je enota priključena na električno omrežje. 4. Preverite, ali je bilo vse pravilno priključeno.	1. Poskusite ponovno sprožiti gumb za vklop. 2. Poskusite vklopiti druge gumbe in preverite, ali delujejo. 3. Odklopite napravo iz električnega omrežja in jo ponovno priključite na električno omrežje. 4. Odklopite vtiče in jih ponovno priključite.
Naprava povzroča čudne zvoke	Ohlapen vijak	Privijte vijake

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.

4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center družbe ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) je v aparat vstopila tekočina, (b) aparat oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,

c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadkih izrabljenih električnih in elektronskih izrabljenih električno opremo je treba zbirati ločeno, nato pa jo odnesti na zbirna mesta za

zbiralnice za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.