ACTIVESHOP®

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Azzurro 803D elektrisk kosmetisk stol 3 motorer




Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Kontrollera att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen på den plats där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.


Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Apparatens mått:

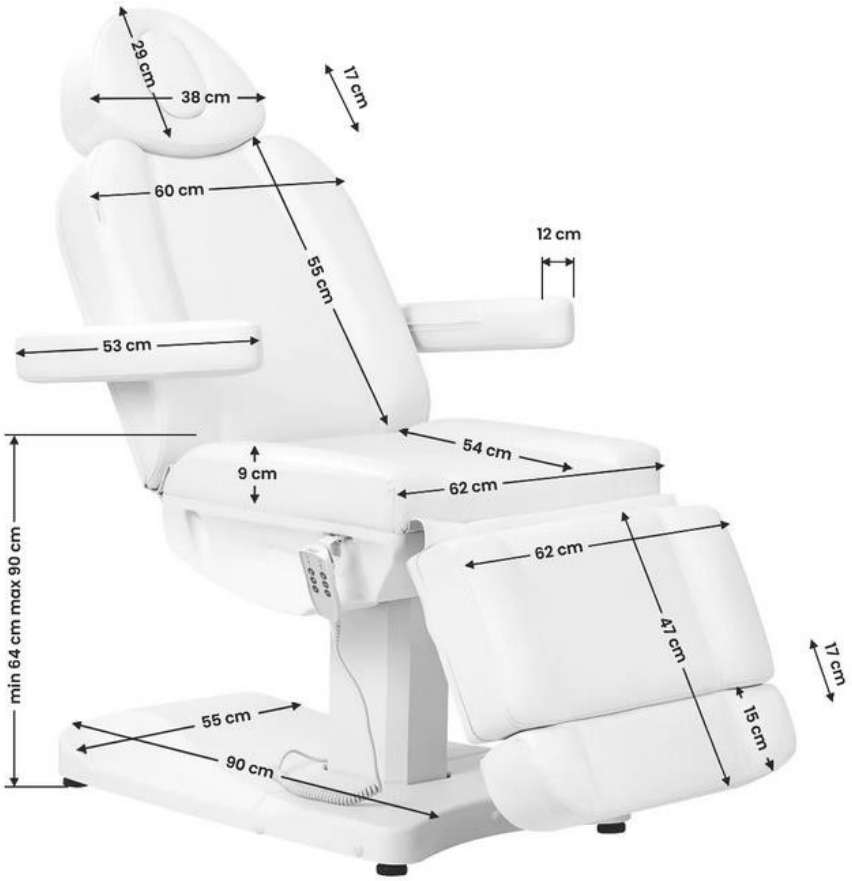



Apparatens konstruktion:

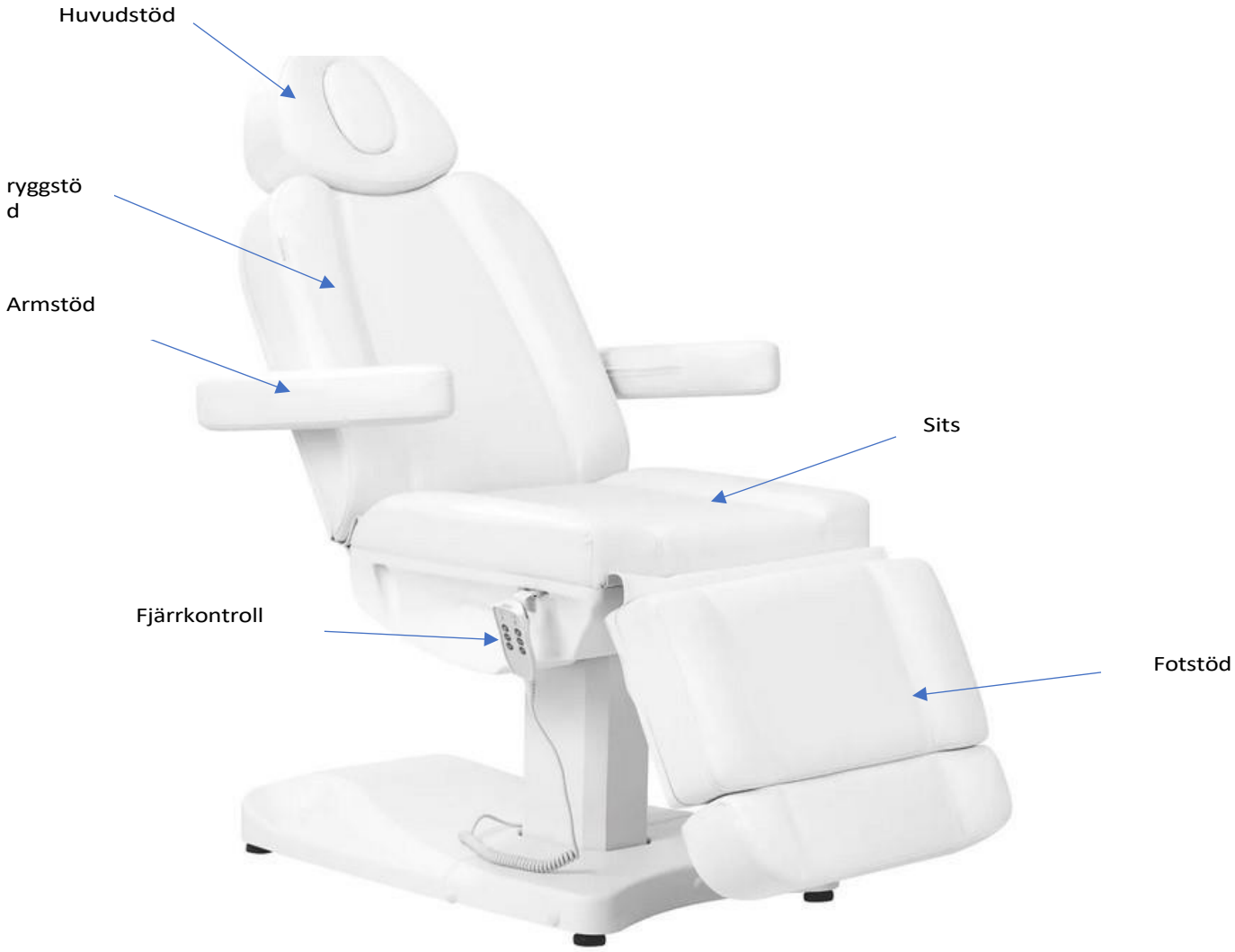

Varning för fotstödet:

1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet och fotstödet.
3. Se till att avståndet mellan uttagen inte överstiger 2 meter.

Försiktighetsåtgärder


1. Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta nätkabeln till ett jordat uttag.
2. Bind inte fast nätsladden i enheten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden lätt kan tas bort i en nödsituation.
3. Ta bort nätsladden innan du flyttar den elektriska skönhetsstolen så att den inte fastnar mellan några av stolens delar.
4. Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ur sladden, inte använda stolen och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Använd endast den ursprungliga nätsladden.
5. Tillåt inte en person som inte utför behandlingen att styra fjärrkontrollen.
6. Placera inga föremål under stolen.
7. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolen så att den kan fällas ihop och fällas ut fritt.

8. Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt sätet som kan skada enheten.
9. Gör inga egna ändringar på enheten. Om fåtöljen inte fungerar som den ska ska du sluta använda den och kontakta ett auktoriserat servicecenter.


Fåtöljen kan styras manuellt med fjärrkontrollen och med hjälp av fotpedaler. Stolens höjd, ryggstödets och fotstödets läge kan justeras efter behov.

Fjärrkontrollens funktioner:

1. Justering av sitthöjd (mellan 64-90 cm)
2. Justering av ryggstöd
3. Justering av fotstöd

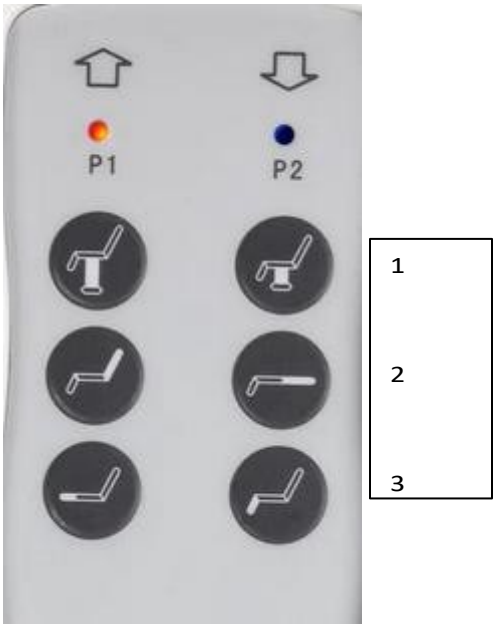


Funktioner för fotpedal:

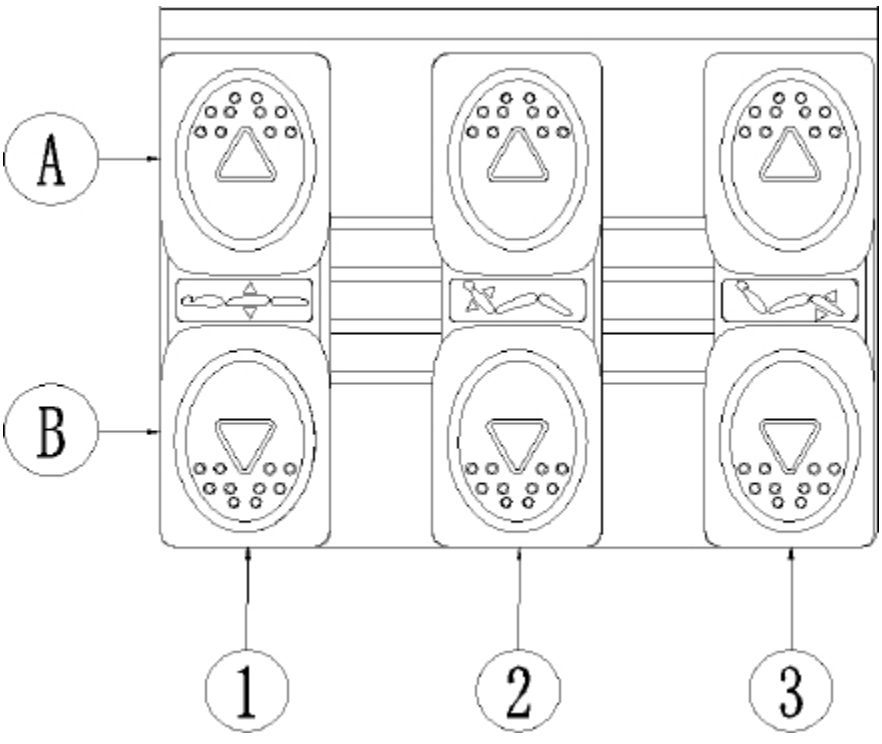

1. Justering av sitshöjden. Tryck på A för att höja sätet eller på B för att sänka sätet.
2. Justering av ryggstödets läge. Tryck på A för att höja ryggstödet eller på B för att sänka ryggstödet.
3. Justera fotstödet. Tryck på A för att höja fotstödet eller på B för att sänka fotstödet.

Förlängning av fotstöd

Stolen har också en möjlighet att förlänga fotstödet, vilket gör det lättare att utföra behandlingar på längre personer och förbättrar komforten. Den maximala längden på fotstödsförlängningen är ca 17 cm. Fotstödet justeras med hjälp av ett vred på undersidan av fotstödet.

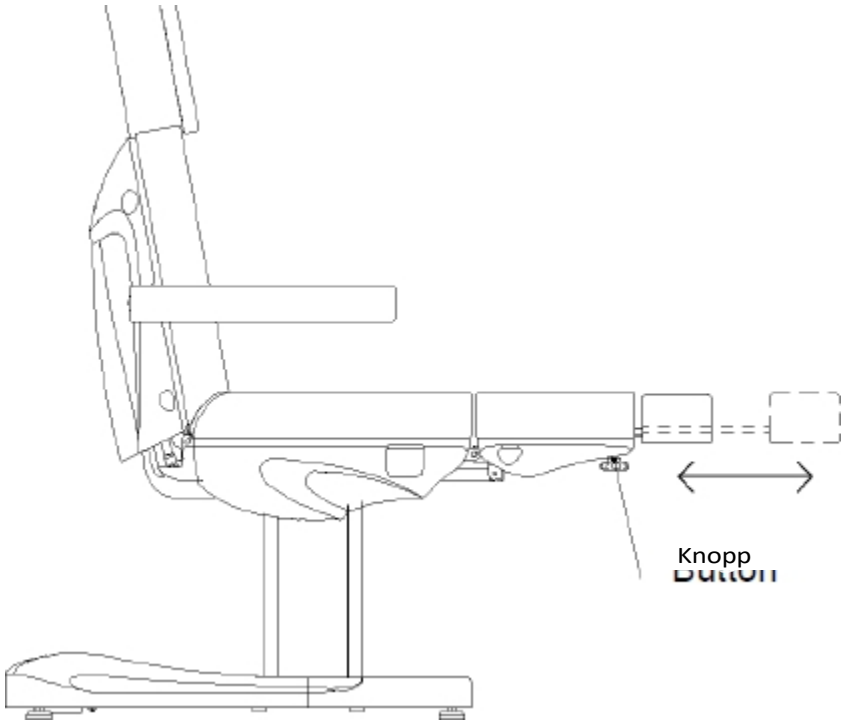


Montering av armstöd:

Skjut in armstödet i hålet som finns på sidan av ryggstödet. Armstödet ska vara ordentligt fastsatt. Skjut det åt höger eller vänster så att det kommer på plats ordentligt. Gör likadant med det andra armstödet. Armstödet är vinkelrätt mot marken (oberoende av sitsens vinkel). Det kan vridas 180°.

Montering av nackstöd:

Skjut in nackstödet i hålet som finns längst upp på ryggstödet. När huvudstödet är i rätt höjd, dra åt veven som sitter på baksidan för att säkra huvudstödet.
För att sänka eller höja huvudstödet, skruva loss veven, justera huvudstödet och dra åt veven.

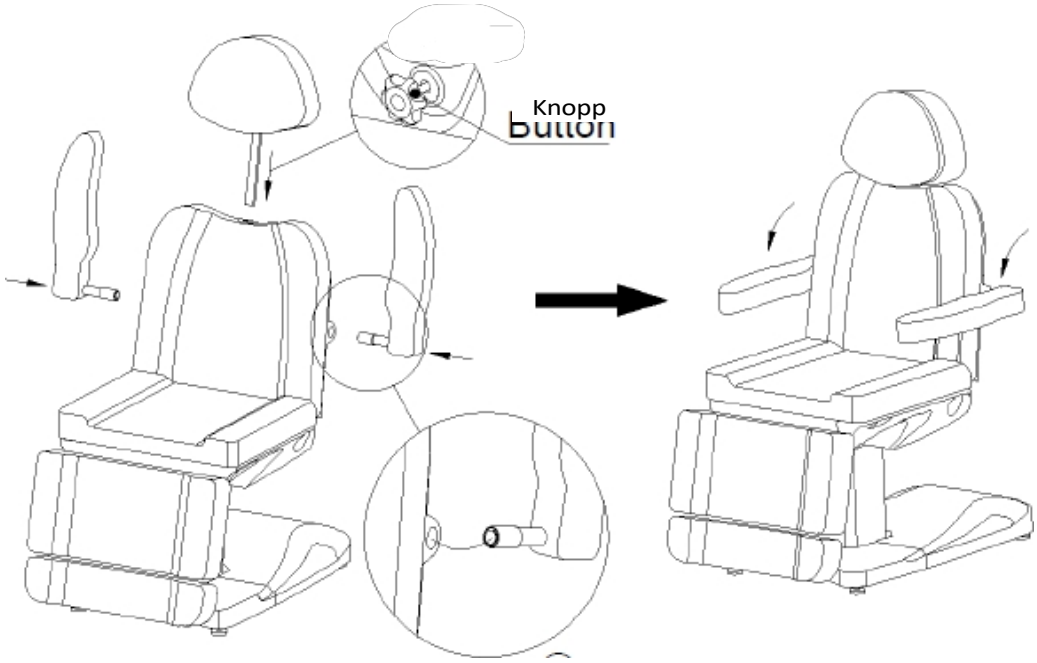

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla ur enheten före rengöring.

För att hålla sitsens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Rengöring med ett milt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte i höga temperaturer eller hög luftfuktighet och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska kosmetikstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.

4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömförsörjningskabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Manöverboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.
Om någon del av utrustningen är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Felsökning och felavhjälpning

Problem	Orsak	Lösning metod
Inget svar när knapparna trycks in på fjärrkontrollen	1. Strömknappen aktiveras eller aktiveras inte. 2. Kontrollera att pedalen är nedtryckt till max. 3. Kontrollera att enheten är inkopplad. 4. Kontrollera att allt är korrekt anslutet.	1. Försök starta om strömbrytaren. 2. Försök att slå på de andra knapparna och se om de fungerar. 3. Koppla ur enheten och koppla in den igen. 4. Koppla ur kontakterna och sätt i dem igen.
Enheten ger ifrån sig konstiga ljud	Skruv sitter löst	Dra åt skruvarna

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.

2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.

4. Dra omedelbart ut apparatens stickkontakt ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,

c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.

5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.

7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.

2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektrisk utrustning ska samlas in separat och sedan föras till insamlingsställen för

insamlingsanläggningar för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas till upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga insamlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.