ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Sedia estetica elettrica Sillon Classic 2 motori Modello:

C501C



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

III CE


***PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI*.**
Questo manuale contiene informazioni dettagliate sul funzionamento e la manutenzione dell'unità. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni che lo accompagnano. Utilizzare l'apparecchio come descritto. Conservare questo manuale e assicurarsi che tutte le persone che possono utilizzare l'apparecchio lo conoscano.

La poltrona estetica elettrica Sillon è un'apparecchiatura professionale perfetta per qualsiasi salone di bellezza. È ideale per massaggi, trattamenti cosmetici e podologici, nonché per la fisioterapia. La poltrona è stata progettata per offrire un comfort completo durante il trattamento. La poltrona è composta da quattro parti e da un cuscino rimovibile. Su entrambi i lati del sedile sono presenti delle maniglie a cui appendere il telecomando per averlo sempre a portata di mano.

Capacità di carico del prodotto: 150 kg


La capacità di carico massima del corpo del sedile è di 150 kg. Non sollevare pesi superiori a quelli che la sedia può sostenere.

Non saltare sullo schienale e non esercitare una forte pressione sui braccioli per evitare di danneggiare il prodotto.

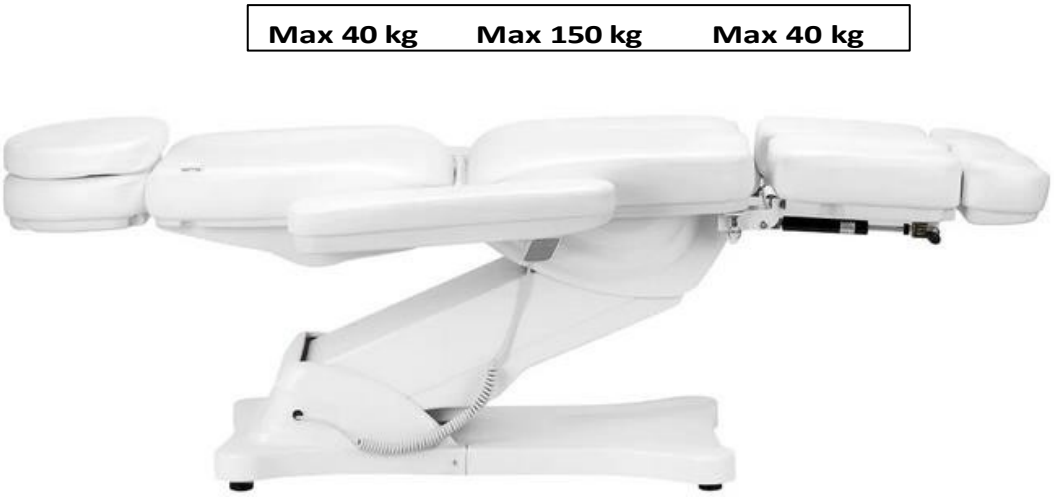

Attenzione

Per l'imballaggio vengono utilizzati cartone e cartoni esterni, con un totale di 10 strati di carta per garantire la protezione dei vostri prodotti. Si consiglia di conservare l'imballaggio originale per un uso futuro, soprattutto per le restituzioni durante il periodo di garanzia. Per motivi di sicurezza, è necessario che due persone sollevino la sedia dalla scatola di cartone. Durante il sollevamento, posizionarsi su entrambi i lati del poggiatesta e del poggiapiedi della sedia. Ricordare che la sedia può essere sollevata solo dalle posizioni del poggiatesta e del poggiapiedi, non da entrambi i lati dei braccioli.

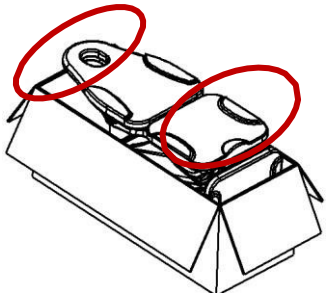

Prima di utilizzare la sedia, verificare che l'imballaggio sia intatto e non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di problemi, si prega di informare il trasportatore o il personale post-vendita entro 2 giorni dal ricevimento dell'unità. Assicurarsi che tutti gli accessori siano completi al momento della consegna. In caso di mancanza di accessori al momento della consegna, si prega di contattare tempestivamente il personale post-vendita.


La poltrona elettrica deve essere utilizzata in un ambiente chiuso e asciutto. La temperatura della stanza deve essere compresa tra+ 10° e -40° e l'umidità relativa tra il 30% e il 75%. Se la poltrona elettrica è stata esposta a temperature inferiori a 0°, attendere almeno 5 ore prima di utilizzarla in modo che l'apparecchio abbia il tempo di raggiungere la temperatura ambiente.

Prima di utilizzare la poltrona elettrica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona nell'area in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa di corrente adeguata.


Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona elettrica. Per motivi di sicurezza, staccare la spina dell'apparecchio e non lasciarlo incustodito. Staccare anche il cavo di alimentazione.

Dimensioni dell'apparecchio:

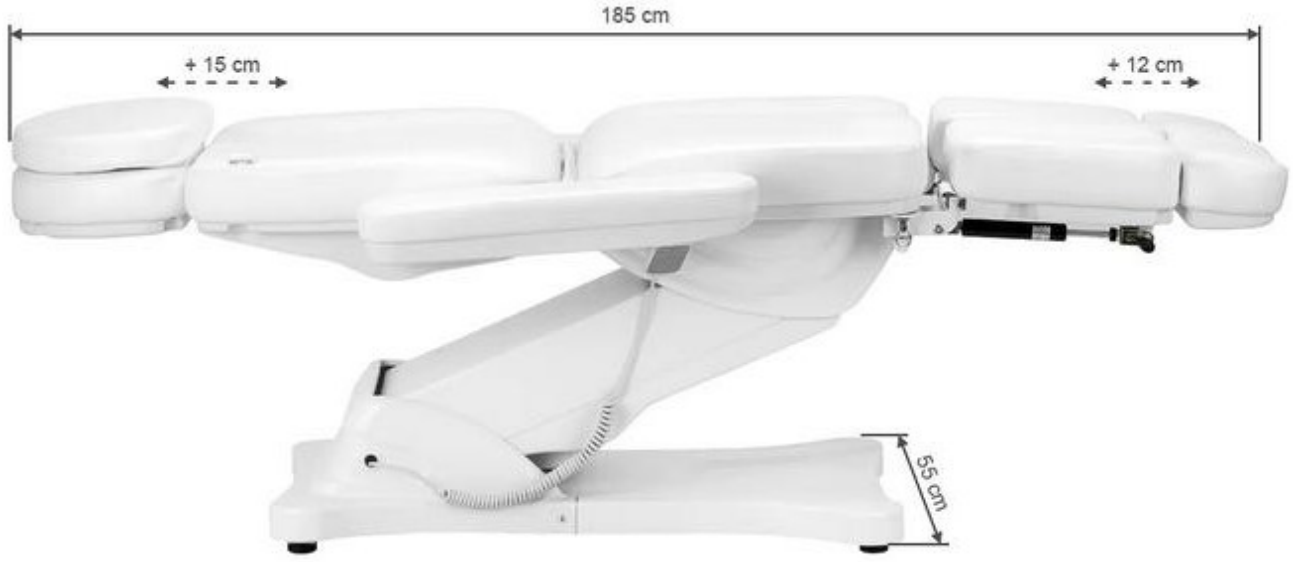



Struttura dell'apparecchio:

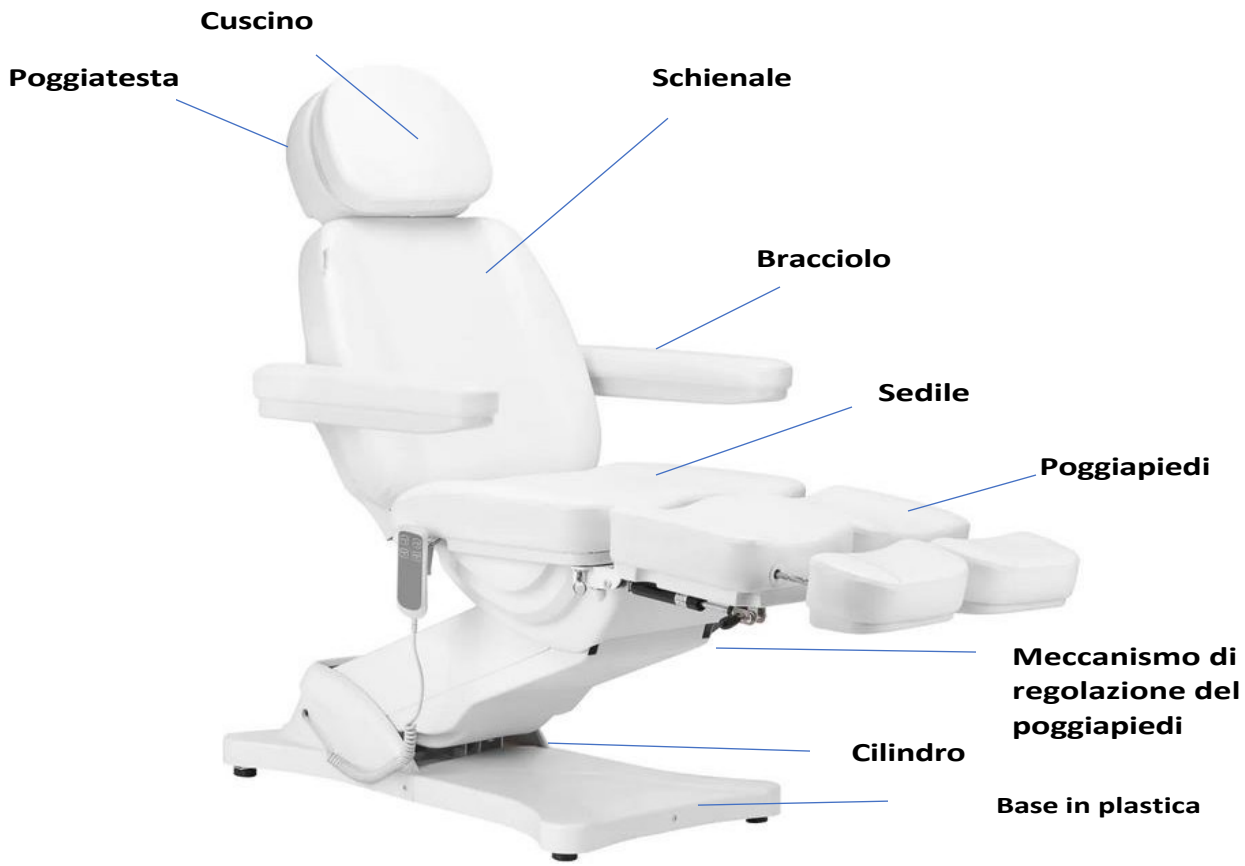

Avvertenze

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo o sul poggiapiedi.
3. Non sollevare un peso superiore a quello che il sedile può sostenere.
4. Assicurarsi che la distanza tra le prese non superi i 2 metri.

Attenzione

1. Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Non legare il cavo di alimentazione all'unità. Sollevando o tirando il cavo di alimentazione si rischia di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
3. Rimuovere il cavo di alimentazione prima di spostare la poltrona elettrica, per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione originale.
5. Non permettere a una persona che non esegue il trattamento di controllare il telecomando.
6. Non collocare oggetti sotto la poltrona.
7. Assicurarsi che intorno alla poltrona vi sia uno spazio sufficiente per poterla piegare e dispiegare liberamente.
8. Assicurarsi che intorno alla poltrona non vi siano oggetti appuntiti o dannosi che potrebbero danneggiare l'unità.
9. Non modificare il dispositivo da soli. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Utilizzo dell'apparecchio:

1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentazione esterna 110V~240V.

Metodo di installazione del bracciolo:

La poltrona deve essere in posizione orizzontale per potervi installare il bracciolo. Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo a destra o a sinistra in modo che si inserisca correttamente. Procedere allo stesso modo con l'altro bracciolo.

Il bracciolo è perpendicolare al suolo (indipendentemente dall'angolo del sedile). Può essere ruotato di 180°.



2. Funzione di controllo manuale (altezza di sollevamento: il letto è a 58~ 82 cm da terra)



A B

B



A

3. Funzione di controllo manuale (angolo di sollevamento della schiena 0-80°, angolo di sollevamento delle gambe 0-90°)

C D




C

D



4. Funzione poggiapiedi a scomparsa (poggiapiedi, lunghezza: 0~ 12cm)

0~ 12cm

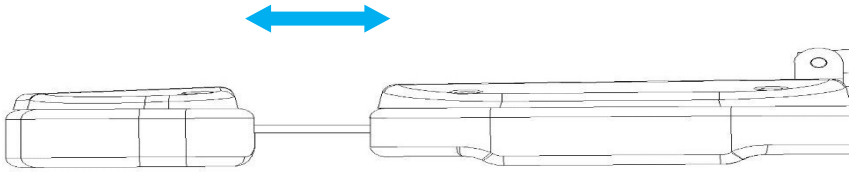

Ciascun poggiapiedi è regolabile separatamente, consentendo il posizionamento indipendente delle gambe. L'angolo del poggiapiedi è regolabile manualmente. Il meccanismo di cui è dotato il poggiapiedi consente anche di inclinarlo lateralmente. Questo rende la poltrona ideale per i trattamenti podologici.



Meccanismo per l'inclinazione laterale del poggiapiedi **Leva di sollevamento/abbassamento del poggiapiedi**

Per sollevare il poggiapiedi, tirare verso l'alto l'impugnatura della leva, sollevando così il poggiapiedi verso l'alto.

Per inclinare lateralmente il poggiapiedi, tirare verso il basso la rotella del meccanismo di inclinazione, inclinando così il poggiapiedi lateralmente.

Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.

- Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1 Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. 2. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.

3. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
4. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
5. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo attacco
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. se gli accessori sono montati
5. Il normale funzionamento del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e contattare un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.
Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'utilizzo. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	**Metodi di soluzione**
Il controllo manuale non risponde	Verificare che l'interfaccia che collega la linea di controllo manuale sia allentata (verificare che non vi siano problemi con la scheda di circuito) e ricordarsi di segnare la posizione della spina originale.
Il motore non risponde	Commutare la posizione della spina del motore

Per sostituire la centralina di controllo e ordinare altre parti di ricambio, contattare il servizio di assistenza, descrivendo il problema prima di contattarlo:

1. Modello
2. Data di acquisto

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Non installare o utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nel dispositivo.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:

(a) il dispositivo è entrato nel liquido, (b) il dispositivo emette uno strano odore, fumo o fa strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) il dispositivo è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, vi è il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danni o addirittura di bruciature. **ATTENZIONE:**

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi devono essere portati in un centro di riciclaggio compatibile con l'ambiente. Non smaltire le apparecchiature elettriche nei contenitori con rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

smaltimento di questo tipo di apparecchiatura. Al fine di proteggere l'ambiente

in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.