ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Sillon Classic 2 motory

Model: C501C



Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

***PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ*.**
Tento návod obsahuje podrobné informace o provozu a údržbě přístroje. Před použitím jednotky si přečtěte přiložený návod. Přístroj používejte tak, jak je popsáno. Tento návod si uschovejte a zajistěte, aby se s ním seznámily všechny osoby, které mohou spotřebič používat.

Elektrické kosmetické křeslo Sillon je profesionální zařízení, které je ideální pro každý kosmetický salon. Je ideální pro masáže, kosmetické a podiatrické ošetření i fyzioterapii. Křeslo bylo navrženo tak, aby během ošetření poskytovalo naprosté pohodlí. Křeslo se skládá ze čtyř částí a odnímatelného polštáře. Na obou stranách sedadla jsou úchyty, na které lze zavěsit ovládací ovladač, aby byl vždy po ruce.

Nosnost výrobku: 150 kg

Maximální nosnost těla křesla je 150 kg. Nezvedejte větší váhu, než je uvedená hmotnost, kterou křeslo unese.


Neskákejte po opěradle a nevyvíjejte velký tlak na područky, aby nedošlo k poškození výrobku.

Maximální hmotnost 40 kg Max. 150 kg
Max. 40 kg



Pozor

K balení se používá lepenka a vnější kartony s celkem 10 vrstvami papíru, které zajišťují ochranu vašich výrobků. Doporučujeme uschovat původní obal pro další použití, zejména pro případ vrácení v záruční době. Z bezpečnostních důvodů jsou ke zvednutí židle z kartonu zapotřebí dvě osoby. Při zvedání se postavte na obě strany opěrky hlavy a opěrky nohou židle. Nezapomeňte, že židli lze zvedat pouze z polohy opěrky hlavy a podnožky, nikoli z obou stran područek.

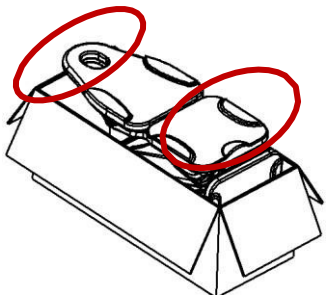


Před použitím židle zkontrolujte, zda je obal neporušený a nebyl poškozen při přepravě. V případě jakéhokoli problému informujte přepravní společnost nebo poprodejní personál do 2 dnů od obdržení jednotky. Ujistěte se, že veškeré příslušenství je v době dodání kompletní. Pokud zjistíte, že příslušenství v době dodání chybí, kontaktujte včas poprodejní personál.
Elektrické kosmetické křeslo musí být používáno v uzavřené, suché místnosti. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi+ 10° a -40° a relativní vlhkost mezi 30 % a 75 %. Pokud bylo elektrické kosmetické křeslo vystaveno teplotám pod 0°, počkejte před použitím alespoň 5 hodin, aby měl přístroj čas dosáhnout pokojové teploty.

Před použitím elektrického kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.


Poznámka! Děti a nezkušené osoby nesmí toto zařízení používat. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti elektrického kosmetického křesla. Z bezpečnostních důvodů odpojte přístroj ze zásuvky a nenechávejte jej bez dozoru. Odpojte také napájecí kabel.

Device dimensions:

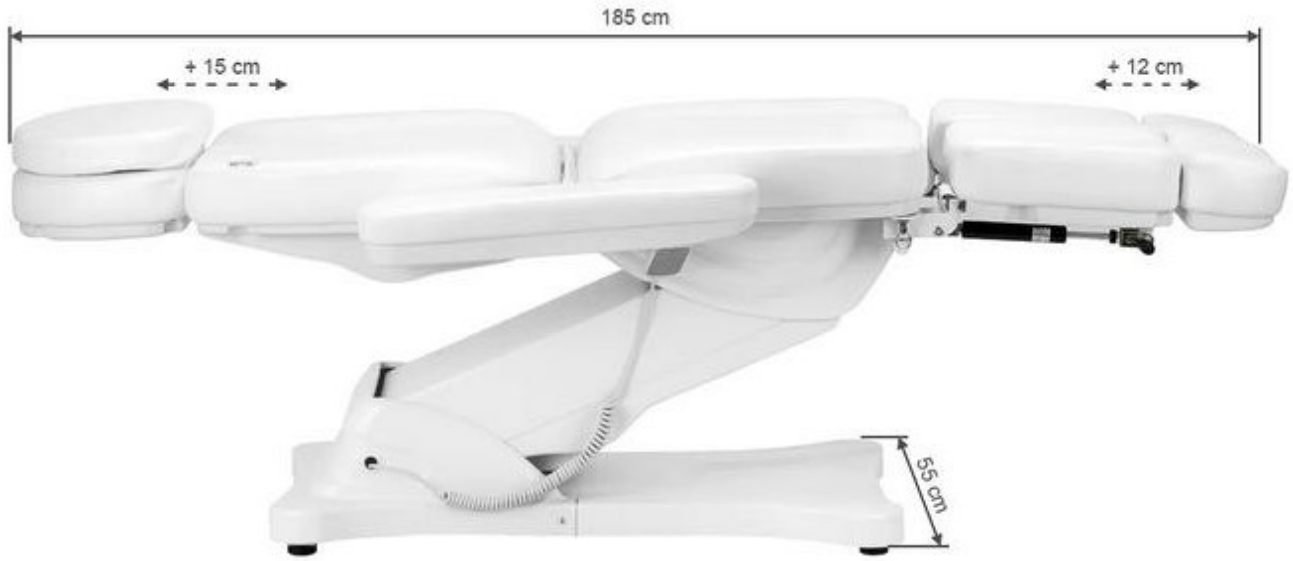



Konstrukce spotřebiče:

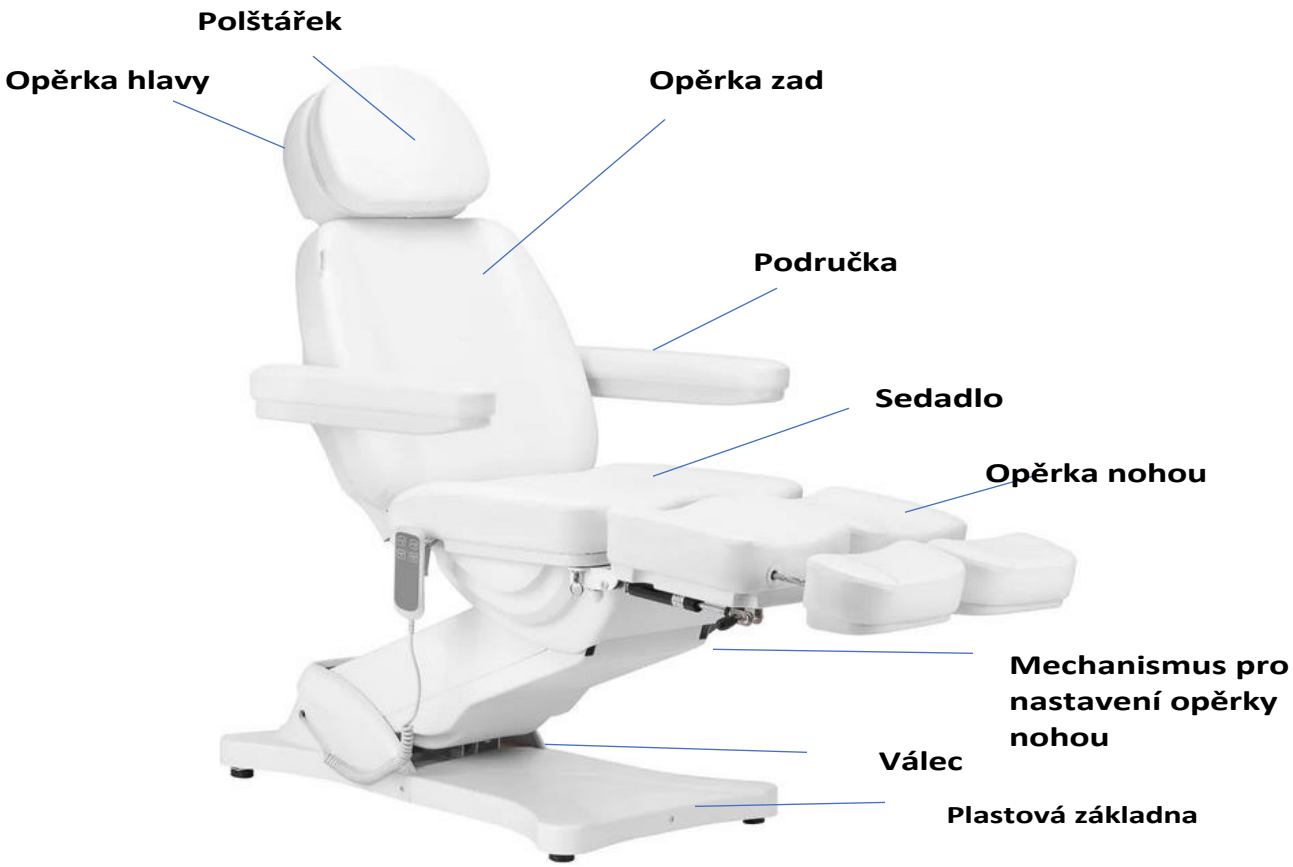

Varování

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.

2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou nebo nohou.

3. Nezvedejte větší váhu, než jakou sedadlo unese.

4. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Upozornění:

1. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel nepřivazujte k přístroji. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v nouzové situaci snadno odpojit.
3. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, židli nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
6. Pod křeslo neumisťujte žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor, aby bylo možné křeslo volně skládat a rozkládat.
8. Ujistěte se, že v okolí křesla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly přístroj poškodit.
9. Zařízení sami neupravujte. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Používání přístroje:

1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110V~240V.

Způsob instalace područky: Křeslo se instaluje na područku:

Křeslo musí být ve vodorovné poloze, aby na něj bylo možné područku nainstalovat. Zasuňte područku do otvoru umístěného na boku opěradla. Područka by měla být pevně připevněna. Otočte ji doprava nebo doleva, aby šla správně nasadit. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou.

Loketní opěrka je kolmá k zemi (bez ohledu na úhel sedadla). Lze ji otočit o 180°.



2. Funkce ručního ovládání (výška zvedání: lůžko je 58~ 82 cm od země).



A B

B

A



3. Funkce ručního ovládání (úhel zdvihu zad 0-80°, úhel zdvihu nohou 0-90°)

C D




C

D




4. Funkce zatahování opěrky nohou (opěrka nohou, délka: 0~ 12 cm)

0~ 12cm

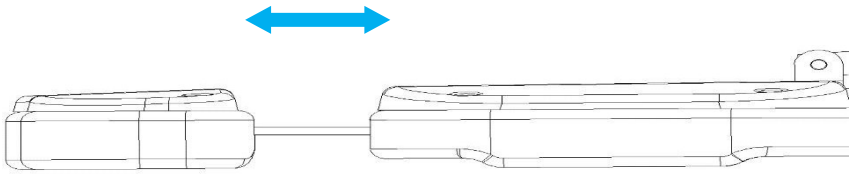

Každá z opěrek nohou je samostatně nastavitelná, což umožňuje nezávislé polohování nohou. Úhel opěrky nohou je nastavitelný ručně. Mechanismus, kterým je opěrka nohou vybavena, umožňuje také naklápění opěrky nohou do stran. Díky tomu je židle ideální pro podiatrická ošetření.

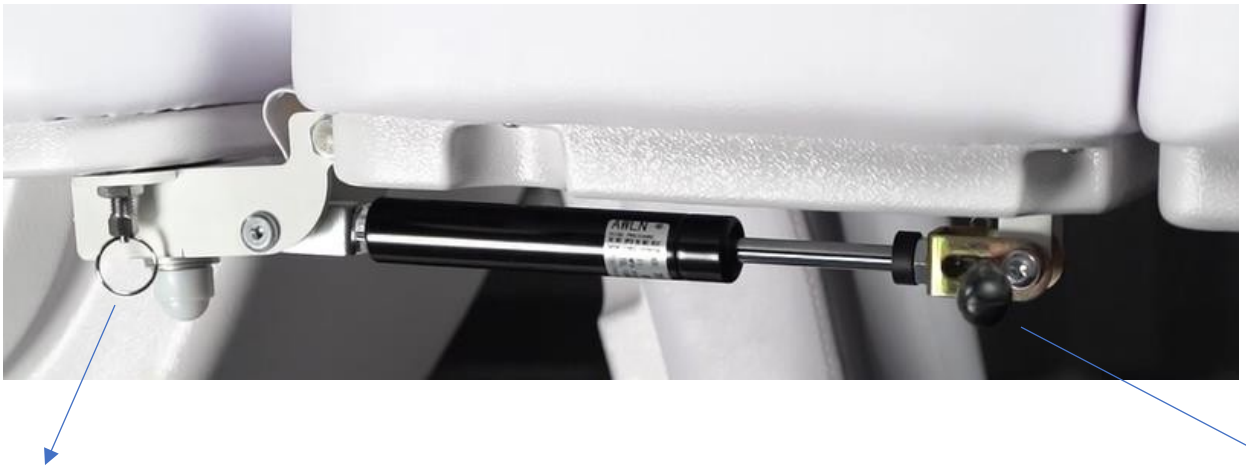

Mechanismus pro naklápění opěrky nohou do stran **Páka pro zvedání/spouštění opěrky nohou**

Pro zvednutí opěrky nohou zatáhněte za rukojeť páky směrem nahoru, čímž se opěrka nohou zvedne nahoru.

Chcete-li opěrku nohou naklonit do strany, zatáhněte za kolečko u mechanismu naklápění dolů, čímž opěrku nohou nakloníte do strany.

Čištění a dezinfekce spotřebiče:

- Před čištěním odpojte přístroj od napájení.
- Aby byl povrch křesla v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).

- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch sedadla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1 Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. 2. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.

3. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
4. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
5. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. Napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Řešení problémů

Problém	**Způsoby řešení**
Ruční ovládání nereaguje	Zkontrolujte, zda rozhraní připojující linku ručního ovládání není uvolněné (Zkontrolujte, zda není problém s deskou plošných spojů), nezapomeňte označit původní polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Přepněte polohu zástrčky motoru

Chcete-li vyměnit řídicí skříň a objednat další náhradní díly, obraťte se na servisní oddělení, před kontaktováním popište problém:

1. Model
2. Datum nákupu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

(a) do zařízení vnikla kapalina, (b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, k d y ž s přístrojem skončíte práci.

7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného provozu spotřebiče jeho poškození nebo dokonce popálení. **UPOZORNĚNÍ:**

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h kontaktujte odborníka na autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.

2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrospotřebiče, příslušenství a obaly je třeba odevzdat do e k o l o g i c k é h o recyklačního centra. Nevyhazujte elektrozařízení do kontejnerů s domovním odpadem . Dodržujte prosím podle pravidel pro likvidaci tohoto typu zařízení.

Likvidace tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí

v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro elektroodpad. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.