ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón de estética eléctrico Sillon Classic 2 motores

Modelo: C501C



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

III CE

***ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES*.**

Este manual contiene información detallada sobre el funcionamiento y el mantenimiento de la unidad. Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones que lo acompañan. Utilice el aparato tal y como se describe. Conserve este manual y asegúrese de que todas las personas que puedan utilizar el aparato estén familiarizadas con él.

El sillón de estética eléctrico Sillon es un equipo profesional perfecto para cualquier salón de belleza. Es ideal para masajes, tratamientos cosméticos y podológicos, así como fisioterapia. El sillón se ha diseñado para proporcionar una comodidad total durante el tratamiento. La silla consta de cuatro partes y un cojín extraíble. Hay asas a ambos lados del asiento donde se puede colgar el mando a distancia para tenerlo siempre a mano.

Capacidad de carga del producto: 150 kg

La capacidad de carga máxima del cuerpo del asiento es de 150 kg. No levante más peso del que puede soportar la silla.


No salte sobre el respaldo ni ejerza mucha presión sobre los reposabrazos para evitar daños en el producto.

Máx. 40 kg	Máx. 150 kg	Máx. 40 kg



Atención

Para el embalaje se utiliza cartón y cajas exteriores, con un total de 10 capas de papel para garantizar la protección de sus productos. Recomendamos conservar el embalaje original para futuros usos, especialmente para devoluciones durante el periodo de garantía. Por razones de seguridad, se necesitan dos personas para levantar la silla de la caja de cartón. Al levantarla, colóquese a ambos lados del reposacabezas y del reposapiés de la silla. Recuerde que la silla sólo puede levantarse desde las posiciones del reposacabezas y el reposapiés, no desde ninguno de los lados de los reposabrazos.

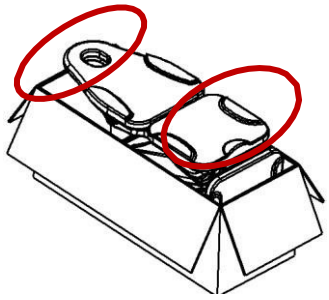

Antes de utilizar la silla, compruebe que el embalaje está intacto y no ha sufrido daños durante el transporte. Si hay algún problema, notifíquelo a la empresa de transporte o al personal de postventa en un plazo de 2 días desde la recepción de la unidad. Asegúrese de que todos los accesorios estén completos en el momento de la entrega. Si encuentra que faltan accesorios en el momento de la entrega, póngase en contacto con el personal de postventa a tiempo.


El sillón estético eléctrico debe utilizarse en una habitación cerrada y seca. La temperatura en la habitación debe estar entre+ 10° y -40 ° y la humedad relativa entre 30% y 75%. Si el sillón estético eléctrico ha estado expuesto a temperaturas inferiores a 0°, espere al menos 5 horas antes de utilizarlo para que la unidad tenga tiempo de alcanzar la temperatura ambiente.

Antes de utilizar el sillón estético eléctrico, lea las instrucciones y lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón en el lugar donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.

Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón estético eléctrico. Por razones de seguridad, desenchufe el aparato y no lo deje sin vigilancia. Desenchufe también el cable de alimentación.

Dimensiones del aparato:

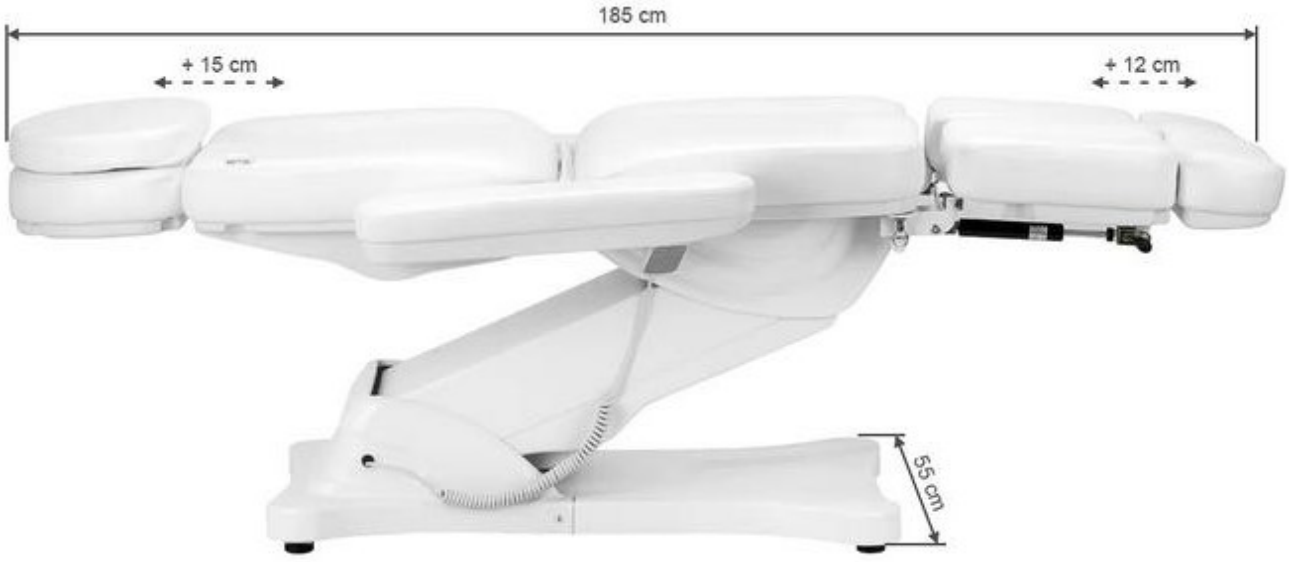



Construcción del aparato:



Advertencia

1. El reposapiés no está diseñado para soportar todo el peso de un adulto.
2. No se siente directamente en el reposabrazos ni en el reposapiés.
3. No levante más peso del que pueda soportar el asiento.
4. Asegúrese de que la distancia entre los enchufes no supere los 2 metros.

Atención

1. Por razones de seguridad, conecte siempre el cable de alimentación a una toma con toma de tierra.
2. No ate el cable de alimentación a la unidad. Levantar o tirar del cable de alimentación puede dañarlo. Asegúrese de que el cable de alimentación pueda retirarse fácilmente en caso de emergencia.
3. Retire el cable de alimentación antes de mover el sillón de belleza eléctrico para que no quede atascado entre algunas partes del sillón.
4. Si el cable de alimentación está dañado, desconéctelo inmediatamente, no utilice la silla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Utilice únicamente el cable de alimentación original.
5. No permita que una persona ajena al tratamiento controle el mando a distancia.
6. No coloque objetos debajo del sillón.
7. Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del sillón para poder plegarlo y desplegarlo libremente.
8. Asegúrese de que no haya objetos punzantes o dañinos alrededor del sillón que puedan dañar la unidad.
9. No modifique el aparato usted mismo. Si la silla no funciona correctamente, deje de utilizarla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Utilización del aparato:

1. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación externa 110V~240V.

Método de instalación del sillón:

El sillón debe estar en posición horizontal para poder instalarle el reposabrazos. Deslice el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar firmemente sujeto. Gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para que encaje correctamente. Haga lo mismo con el otro reposabrazos.

El reposabrazos está perpendicular al suelo (independientemente del ángulo del asiento). Puede girarse 180°.



2. Función de control manual (altura de elevación: la cama está a 58~ 82 cm del suelo)



A B

B



A

3. Función de control manual (ángulo de elevación de la espalda 0-80 °, ángulo de elevación de las piernas 0-90 °)

C D




C

D




4. Función retráctil del reposapiés (reposapiés, longitud: 0~ 12cm)

0~ 12cm

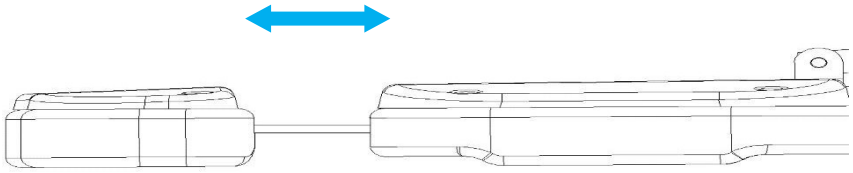

Cada uno de los reposapiés se puede ajustar por separado, lo que permite una colocación independiente de las piernas. El ángulo del reposapiés es ajustable manualmente. El mecanismo con el que está equipado el reposapiés también permite inclinarlo lateralmente. Esto hace que la silla sea ideal para tratamientos podológicos.

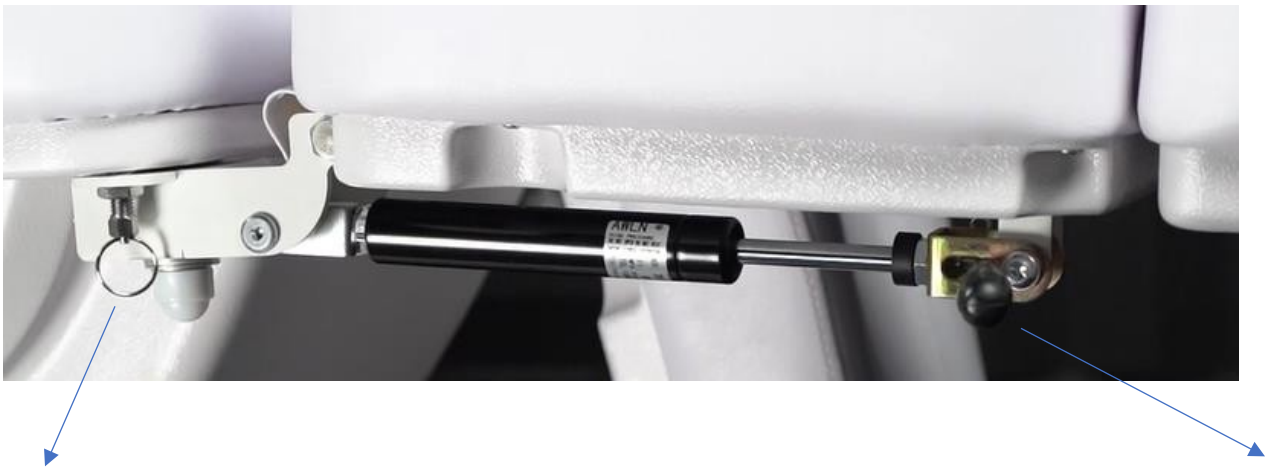

Mecanismo de inclinación lateral del reposapiés Palanca de subida/bajada del reposapiés

Para elevar el reposapiés, tire hacia arriba de la empuñadura de la palanca, elevando así el reposapiés hacia arriba.

Para inclinar el reposapiés hacia un lado, tire hacia abajo de la polea del mecanismo de inclinación, inclinando así el reposapiés hacia un lado.

Limpieza y desinfección del aparato

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse regularmente. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Recomendamos realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para limpiar zonas o rincones de difícil acceso, un cepillo pequeño funcionará bien. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para limpiar.

- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

Desenchufe el aparato antes de proceder a su mantenimiento.

1 Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. 2. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.

3. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
4. No utilice el sillón de belleza eléctrico ni sus accesorios si no funcionan correctamente.
5. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Medidas de mantenimiento

Compruebe los mandos y su cableado una vez a la semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:

1. Cable de alimentación y su fijación
2. Cableado del motor
3. La caja de control y su cableado
4. La fijación de los accesorios
5. El funcionamiento normal del sistema de cierre

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador/unidad de control.

Si alguna pieza del equipo está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

Solución de problemas

Problema	**Métodos de solución**
El control manual no responde	Compruebe que la interfaz que conecta la línea de control manual está suelta (Compruebe que no hay ningún problema con la placa de circuitos) recuerde marcar la posición original del enchufe.
El motor no responde	Cambie la posición del enchufe del motor

Para sustituir la caja de control y pedir otras piezas de recambio, póngase en contacto con el servicio técnico, describa el problema antes de ponerse en contacto:

1. Modelo
2. Fecha de compra

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP L t d .).

3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado facilitado por ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez q u e termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de funcionamiento incorrecto del aparato, daños o incluso quemaduras. **PRECAUCIÓN:**

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras a v e r í a s , póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.

3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Los aparatos eléctricos usados, los accesorios y los embalajes deben llevarse a un centro de reciclaje compatible con el m e d i o a m b i e n t e . No deseche los aparatos eléctricos en los contenedores con residuos domésticos . Por favor siga según normas para la eliminación de este tipo de aparatos.

eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente

de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por tanto, deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.