ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Elektromos kozmetikai szék Sillon Classic 2 motoros

Modell: C501C



Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

***A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT*.**

Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a készülék működésével és karbantartásával kapcsolatban. A készülék használata előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást. Használja a készüléket a leírtak szerint. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy minden személy, aki a készüléket használhatja, megismerje azt.

A Sillon elektromos kozmetikai szék egy professzionális berendezés, amely tökéletes bármely szépségszalonba. Ideális masszázsokhoz, kozmetikai és podológiai kezelésekhez, valamint fizioterápiához. A széket úgy tervezték, hogy teljes kényelmet biztosítson a kezelés során. A szék négy részből és egy kivehető párnából áll. Az ülés két oldalán fogantyúk találhatók, ahová a vezérlő távirányítót fel lehet akasztani, hogy mindig kéznél legyen.

A termék terhelhetősége: 150 kg

Az üléstest maximális terhelhetősége 150kg. Ne emeljen többet a megadott súlynál, mint amit a szék elbír.


Ne ugráljon a háttámlán, és ne gyakoroljon nagy nyomást a karfákra, hogy elkerülje a termék sérülését.

Max. 40kg	Max 150kg	Max 40 kg



Figyelem

A csomagoláshoz kartont és külső kartondobozokat használunk, összesen 10 réteg papírral, hogy biztosítsuk a termékek védelmét. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást őrizze meg a későbbi használatra, különösen a garanciális időszak alatti visszaküldéshez. Biztonsági okokból a szék kartondobozból való kiemeléséhez két emberre van szükség. Emeléskor álljon a szék fejtámlájának és lábtartójának mindkét oldalára. Ne feledje, hogy a széket csak a fejtámla és a lábtartó pozíciójából lehet felemelni, a karfák egyik oldaláról sem.

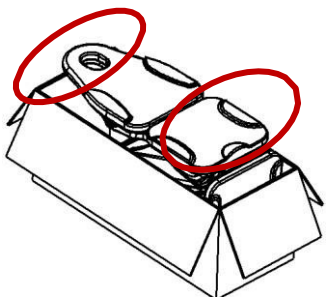

A szék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e és nem sérült-e meg a szállítás során. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, a készülék átvételétől számított 2 napon belül értesítse a szállító céget vagy az értékesítés utáni személyzetet. Győződjön meg arról, hogy a szállításkor minden tartozék teljes. Ha a szállításkor hiányzó tartozékokat talál, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni munkatársakkal.


Az elektromos kozmetikai széket zárt, száraz helyiségben kell használni. A helyiség hőmérsékletének a+ 10° és -40 ° között kell lennie, a relatív páratartalomnak pedig 30% és 75% között. Ha az elektromos kozmetikai szék 0° alatti hőmérsékletnek volt kitéve, várjon legalább 5 órát a használat előtt, hogy a készüléknek legyen ideje elérni a szobahőmérsékletet.

Az elektromos kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a széket arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.


Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad az elektromos kozmetikai szék közelében játszani. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a konnektorból, és ne hagyja felügyelet nélkül. Húzza ki a hálózati kábelt is.

A készülék méretei:

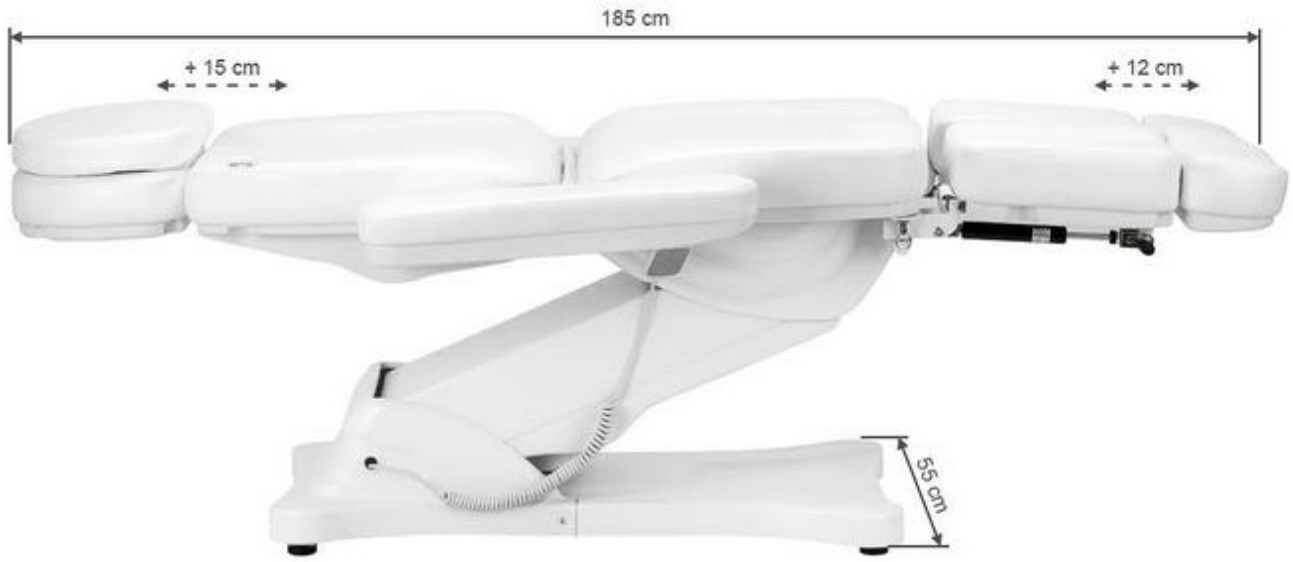



A készülék felépítése:

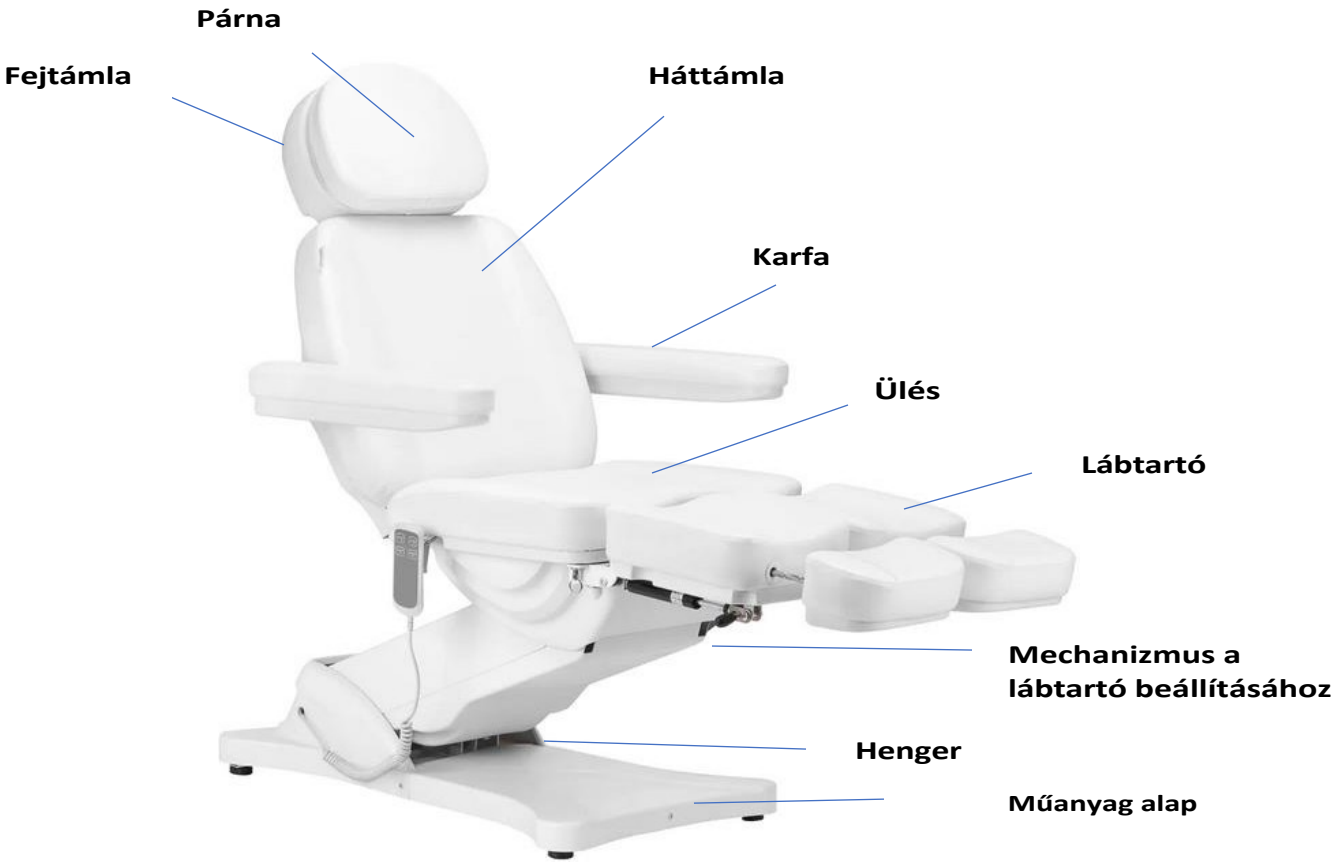

Figyelmeztetés

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.

2. Ne üljön közvetlenül a karfára vagy a lábtartóra.

3. Ne emeljen nagyobb súlyt, mint amennyit az ülés elbír.

4. Ügyeljen arra, hogy az aljzatok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Figyelem

1. Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.

2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.

3. Az elektromos szépségfotel mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.

4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.

5. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a távirányítót.

6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.

7. Győződjön meg arról, hogy a szék körül elegendő szabad tér van ahhoz, hogy a széket szabadon össze- és szét lehessen hajtani.

8. Győződjön meg róla, hogy a szék körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.

9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

A készülék használata:

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a 110V~240V-os külső tápegységhez.

A karfa felszerelésének módja:

A karosszéknek vízszintes helyzetben kell lennie ahhoz, hogy a karfát rá lehessen szerelni. Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található furatba. A karfát szilárdan rögzíteni kell. Csavarja el jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is.

A kartámasz merőlegesen áll a talajra (függetlenül az ülés szögétől). Ez 180°-kal elforgatható.



2. Kézi vezérlés funkció (emelési magasság: az ágy 58~ 82 cm-re van a talajtól).



A B

B

A



3. Kézi vezérlési funkció (hátemelési szög 0-80 °, lábemelési szög 0-90 °)

C D




C

D




4. Lábtartó behúzható funkció (lábtartó, hossza: 0~ 12cm)

0~ 12cm

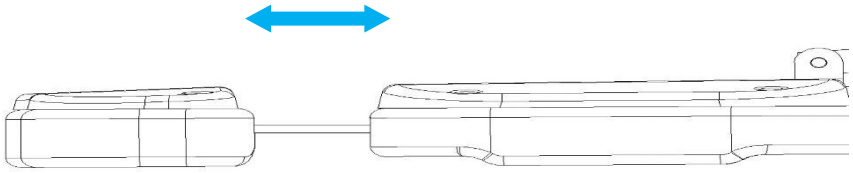

Mindegyik lábtartó külön állítható, lehetővé téve a lábak független pozicionálását. A lábtartó szöge kézzel állítható. A lábtartó mechanikája lehetővé teszi a lábtartó oldalirányú billentését is. Ezáltal a szék ideális a podiátriai kezelésekhez.

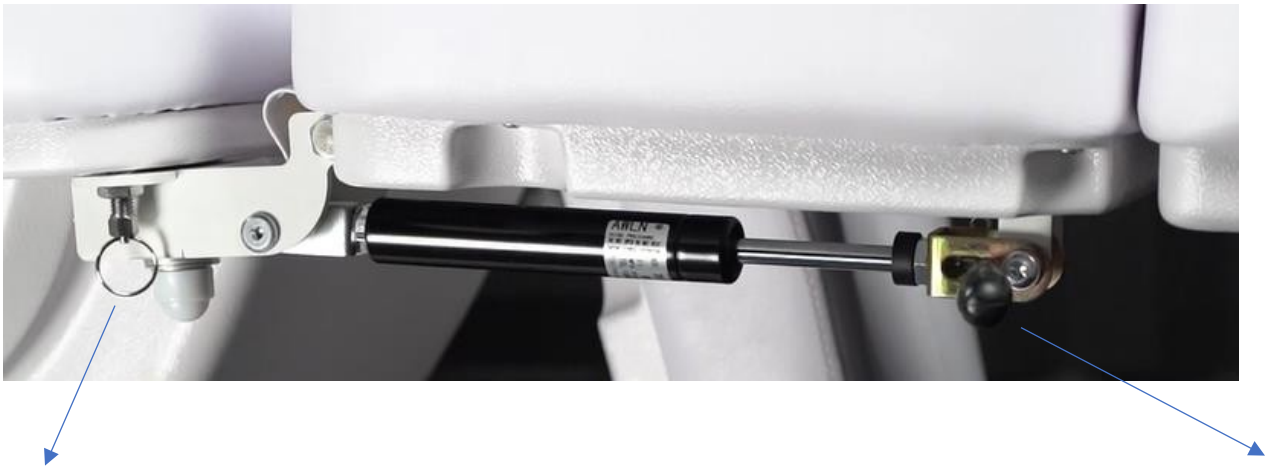

Mechanizmus a lábtartó oldalirányú billentésére Lábtartó emelő/leengedő kar

A lábtartó felemeléséhez húzza felfelé a kar fogantyúját, így a lábtartó felfelé emelkedik.

A lábtartó oldalra billentéséhez húzza lefelé a billentőmechanizmus kerekét, ezáltal a lábtartót oldalra billenti.

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A tisztítás enyhe mosószeres oldattal működik a legjobban. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.

- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyeződéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.

1 A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. 2. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

3. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
4. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
5. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok vezetékeit. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. A vezérlődoboz és annak vezetékezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

Hibaelhárítás

Probléma	**Megoldási módszerek**
A kézi vezérlés nem reagál	Ellenőrizze, hogy a kézi vezérlés vezetékét összekötő interfész laza-e. (Ellenőrizze, hogy nincs-e probléma az áramköri lapon) ne felejtse el megjelölni az eredeti dugó helyét.
A motor nem reagál	Kapcsolja át a motor dugójának pozícióját

A vezérlődoboz cseréjéhez és egyéb pótalkatrészek megrendeléséhez forduljon a szervizhez, a kapcsolatfelvétel előtt írja le a problémát:

1. Modell
2. Vásárlás dátuma

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a hibás a készülék helytelen működése, károsodása vagy akár a leégés veszélye. **FIGYELEM!**

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon egy hivatalos szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat környezetbarát újrahasznosító központba kell vinni. Ne dobja ki az elektromos berendezéseket a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekben . Kérjük, kövesse a a szabályok szerint az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítása. A környezet védelme érdekében

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein kell leadni. Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.