ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Sillon Classic 2 motorja

Model: C501C



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

***PRED UPORABO TEGA IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO*.**
Ta priročnik vsebuje podrobne informacije o delovanju in vzdrževanju enote. Pred uporabo enote preberite priložena navodila. Napravo uporabljajte v skladu z opisom. Shranite ta priročnik in poskrbite, da bodo z njim seznanjene vse osebe, ki lahko uporabljajo napravo.

Električni kozmetični stol Sillon je profesionalen kos opreme, ki je kot nalašč za vsak kozmetični salon. Idealen je za masaže, kozmetične in podiatrične tretmaje ter fizioterapijo. Stol je bil zasnovan tako, da zagotavlja popolno udobje med zdravljenjem. Stol je sestavljen iz štirih delov in odstranljive blazine. Na obeh straneh sedeža so ročaji, na katere lahko obesite daljinski upravljalnik, da ga imate vedno pri roki.

Nosilnost izdelka: 150 kg

Največja nosilnost telesa sedeža je 150 kg. Ne dvigujte večje teže, kot je navedena teža, ki jo stol lahko prenese.


Ne skačite po naslonjalu ali močno pritiskajte na naslonjala za roke, da ne poškodujete izdelka.

Največja teža 40 kg	**Največ 150 kg**
Največ 40 kg	



Pozor,

Za pakiranje uporabljamo karton in zunanje škatle s skupno 10 plastmi papirja, ki zagotavljajo zaščito vaših izdelkov. Priporočamo, da originalno embalažo shranite za nadaljnjo uporabo, zlasti za vračilo v garancijskem roku. Iz varnostnih razlogov sta za dvig stola iz kartonske škatle potrebni dve osebi. Pri dvigovanju stojte na obeh straneh naslona za glavo in naslona za noge stola. Ne pozabite, da lahko stol dvignete le s položajev naslona za glavo in noge, ne pa tudi z obeh strani naslonjal za roke.

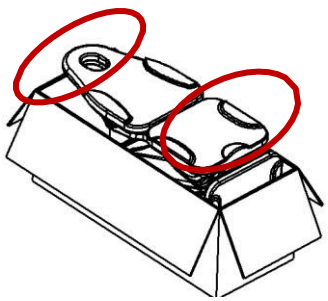


Pred uporabo stola preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali ni bila poškodovana med prevozom. V primeru težav obvestite prevozno podjetje ali poprodajno osebje v 2 dneh po prejemu enote. Prepričajte se, da je ob dostavi vsa dodatna oprema popolna. Če ob dostavi ugotovite, da dodatna oprema manjka, se pravočasno obrnite na poprodajno osebje.
Električni kozmetični stol je treba uporabljati v zaprtem in suhem prostoru. Temperatura v prostoru mora biti med+ 10° in -40 °, relativna vlažnost pa med 30 % in 75 %. Če je bil električni kozmetični stol izpostavljen temperaturi pod 0°, pred uporabo počakajte vsaj 5 ur, da ima naprava čas doseči sobno temperaturo.

Pred uporabo električnega kozmetičnega stola preberite navodila in opravite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da stol deluje brezhibno.
3. Postavite stol na mesto, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtič za električno omrežje vtaknite v ustrezno vtičnico.


Opomba! Otroci in neizkušene osebe te naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini električnega kozmetičnega stola. Iz varnostnih razlogov napravo izključite iz električnega omrežja in je ne puščajte brez nadzora. Izklopite tudi napajalni kabel.

Dimenzije naprave:

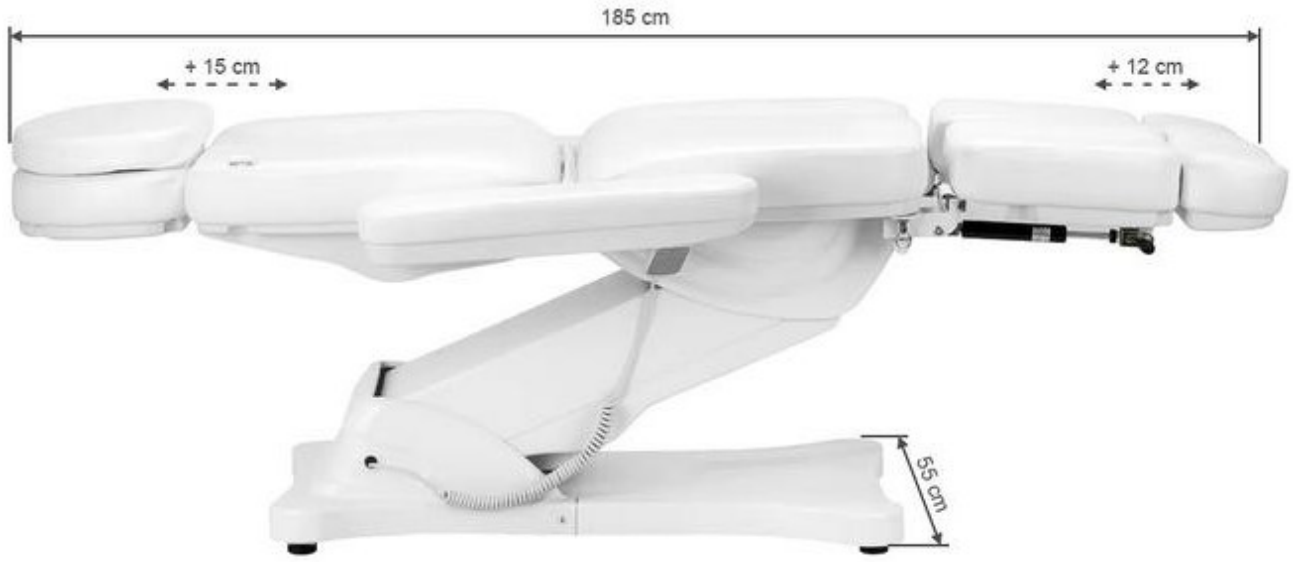



Konstrukcija naprave:

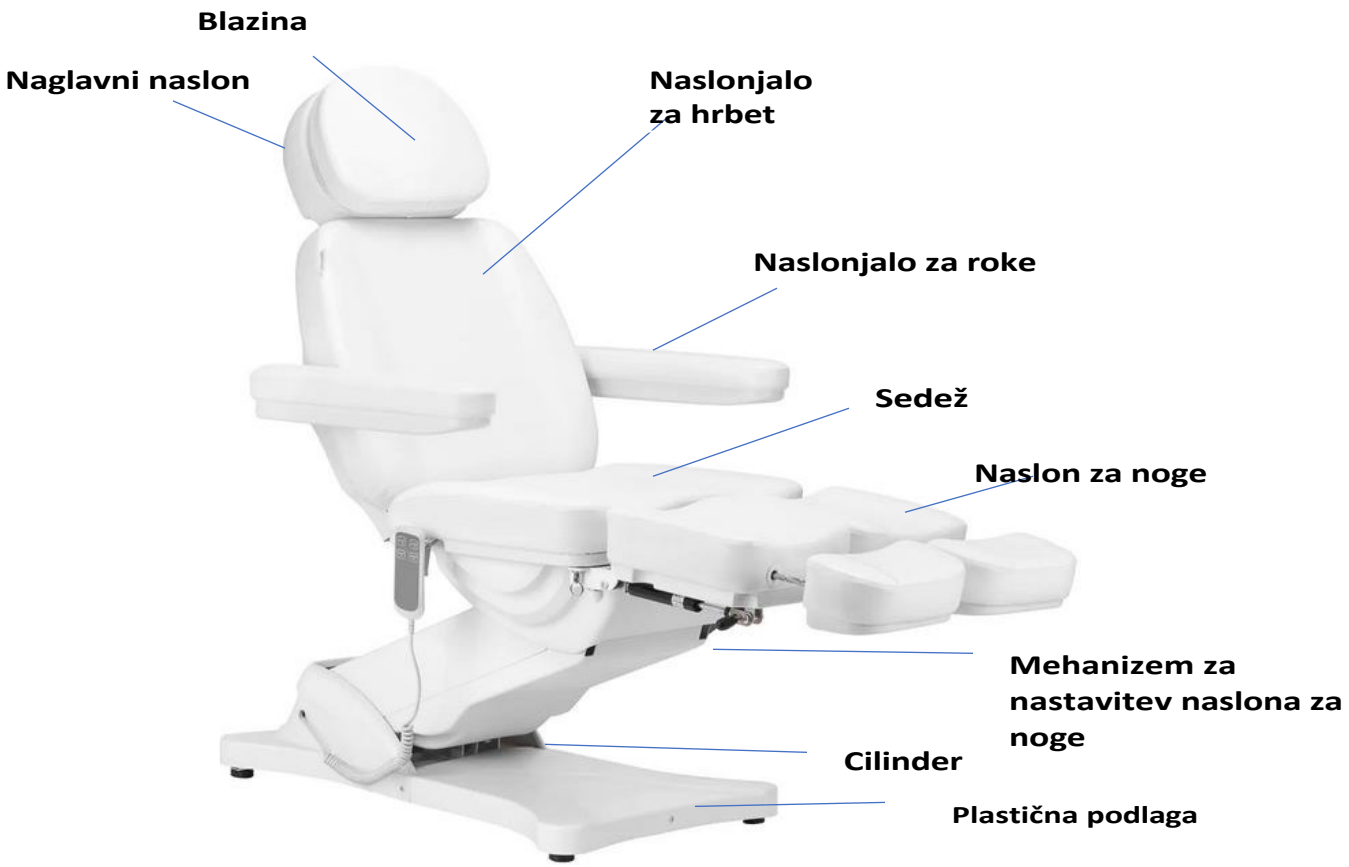

Opozorilo

1. Podstavek za noge ni zasnovan tako, da bi prenesel celotno težo odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslon za roke ali stopala.
3. Ne dvigujte večje teže, kot jo lahko zdrži sedež.
4. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Pozor: .

1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
5. Osebi, ki ne izvaja zdravljenja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
6. Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
7. Prepričajte se, da je okoli stola dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.
8. Prepričajte se, da v okolici stola ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali napravo.
9. Naprave ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Uporaba naprave:

1. Priključite napajalni kabel na zunanji napajalnik 110V~240V.

Način namestitve naslonjala za roke:

Za namestitev naslona za roke mora biti fotelj v vodoravnem položaju. Naslonjalo za roko potisnite v odprtino, ki se nahaja na strani naslonjala za hrbet. Naslonjalo za roko mora biti trdno pritrjeno. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno n a m e s t i . Enako naredite z drugim naslonom za roke.

Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.



2. Funkcija ročnega upravljanja (višina dviga: postelja je 58~ 82 cm od tal)



A B

B

A



3. Funkcija ročnega upravljanja (kot dviga hrbta 0-80 °, kot dviga nog 0-90 °)

C D




C

D




4. Funkcija izvlečnega podnožja (podnožje, dolžina: 0~ 12 cm)

0~ 12cm

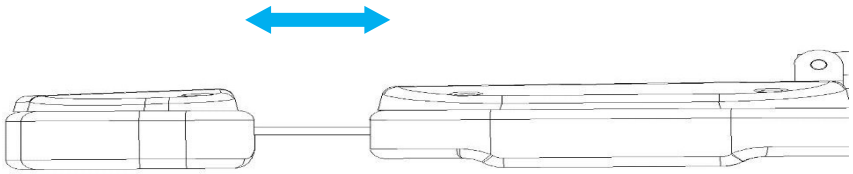

Vsak od podstavkov za noge je ločeno nastavljiv, kar omogoča neodvisno postavitev nog. Kot naslona za noge je ročno nastavljiv. Mehanizem, s katerim je opremljen naslon za noge, omogoča tudi nagibanje naslona za noge vstran. Zaradi tega je stol idealen za podiatrično zdravljenje.

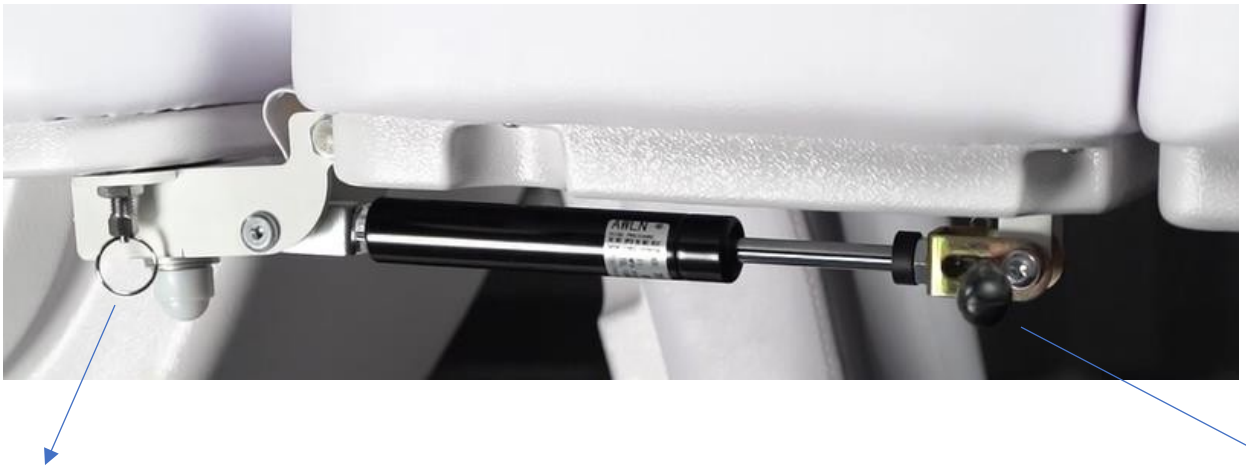

Mehanizem za nagibanje naslona za noge vstran **Ročica za dviganje/spuščanje naslona za noge**

Če želite dvigniti naslon za noge, potegnite ročico vzvoda navzgor in tako dvignite naslon za noge navzgor.

Za nagibanje naslona za noge na stran potegnite navzdol kolesce na mehanizmu za nagibanje, s čimer nagnete naslon za noge na stran.

Čiščenje in razkuževanje naprave:

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtačka. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Lakirane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).

- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite napravo iz električnega omrežja.

1 Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. 2. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.

3. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
4. Ne uporabljajte električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme, če ne delujejo pravilno.
5. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema za zaklepanje

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja samo izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Odpravljanje težav

Težava	**Metode rešitve**
Ročno upravljanje se ne odziva	Preverite, ali je vmesnik, ki povezuje linijo za ročno upravljanje, zrahljan (Preverite, ali ni težav s ploščo tiskanega vezja), ne pozabite označiti prvotnega položaja vtiča.
Motor se ne odziva	Preklopite položaj vtiča motorja

Za zamenjavo krmilne enote in naročilo drugih rezervnih delov se obrnite na servisno službo, preden se obrnete, opišite težavo:

1. Model
2. Datum nakupa

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med nego.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.

4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center družbe ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

(a) je v napravo vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, k o končate delo z napravo.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanje naprave, poškodbe ali celo požar. **POZOR:**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih n a p a k v d e l o v a n j u se obrnite na strokovnjaka

pooblaščenim servisnim centrom, da se izognete kakršni koli nevarnosti.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo je treba odpeljati v o k o l j s k o ustrezen center za recikliranje. Električne opreme ne odlagajte v zabojnike z gospodinjskimi odpadki . Upoštevajte v skladu s pravili za odlaganje tovrstne opreme.

Odstranjevanje te vrste opreme. Da bi zaščitili okolje

v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.