ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Sillon Classic 2 motory

Model: C501C



Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

***PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE*.**

Tento návod obsahuje podrobné informácie o prevádzke a údržbe zariadenia. Pred použitím jednotky si prečítajte priložený návod na obsluhu. Spotrebič používajte tak, ako je popísané. Uschovajte tento návod a zabezpečte, aby sa s ním oboznámili všetky osoby, ktoré môžu spotrebič používať.

Elektrické kozmetické kreslo Sillon je profesionálne zariadenie, ktoré je ideálne pre každý kozmetický salón. Je ideálne na masáže, kozmetické a podologické ošetrenia, ako aj na fyzioterapiu. Kreslo bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo úplné pohodlie počas ošetrenia. Kreslo sa skladá zo štyroch častí a odnímateľného vankúša. Na oboch stranách sedadla sú úchyty, na ktoré možno zavesiť ovládač, aby bol vždy po ruke.

Nosnosť výrobku: 150 kg

Maximálna nosnosť tela kresla je 150 kg. Nezdvíhajte väčšiu hmotnosť, ako je uvedená hmotnosť, ktorú sedačka unesie.


Neskáčte po operadle ani nevyvíjajte veľký tlak na podrúčky, aby ste zabránili poškodeniu výrobku.

Maximálna hmotnosť 40 kg Max. 150 kg
Max. 40 kg



Pozor

Na balenie sa používa kartón a vonkajší kartón s celkovo 10 vrstvami papiera, aby sa zabezpečila ochrana vašich výrobkov. Odporúčame uschovať pôvodný obal na ďalšie použitie, najmä na vrátenie počas záručnej doby. Z bezpečnostných dôvodov sú na zdvihnutie stoličky z kartónovej škatule potrebné dve osoby. Pri zdvíhaní stojte na oboch stranách opierky hlavy a opierky nôh kresla. Nezabudnite, že stoličku možno zdvíhať len z pozícií opierky hlavy a opierky nôh, nie z oboch strán podrúčok.

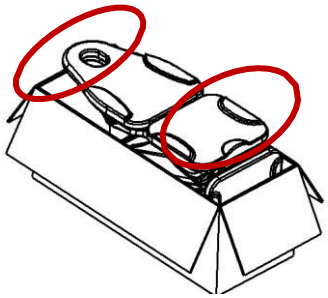


Pred použitím stoličky skontrolujte, či je obal neporušený a či nebol poškodený pri preprave. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, oznámte to prepravnej spoločnosti alebo popredajnému personálu do 2 dní od prevzatia zariadenia. Uistite sa, či je všetko príslušenstvo v čase dodania kompletné. Ak zistíte, že príslušenstvo v čase doručenia chýba, včas kontaktujte popredajný personál.
Elektrické kozmetické kreslo sa musí používať v uzavretej, suchej miestnosti. Teplota v miestnosti by mala byť v rozmedzí od+ 10° do -40° a relatívna vlhkosť vzduchu od 30 % do 75 %. Ak bolo elektrické kozmetické kreslo vystavené teplotám nižším ako 0°, počkajte pred jeho použitím aspoň 5 hodín, aby zariadenie malo čas dosiahnuť izbovú teplotu.

Pred použitím elektrického kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.


Poznámka! Toto zariadenie nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti elektrického kozmetického kresla. Z bezpečnostných dôvodov odpojte spotrebič zo zásuvky a nenechávajte ho bez dozoru. Odpojte aj napájací kábel.

Rozmery zariadenia:

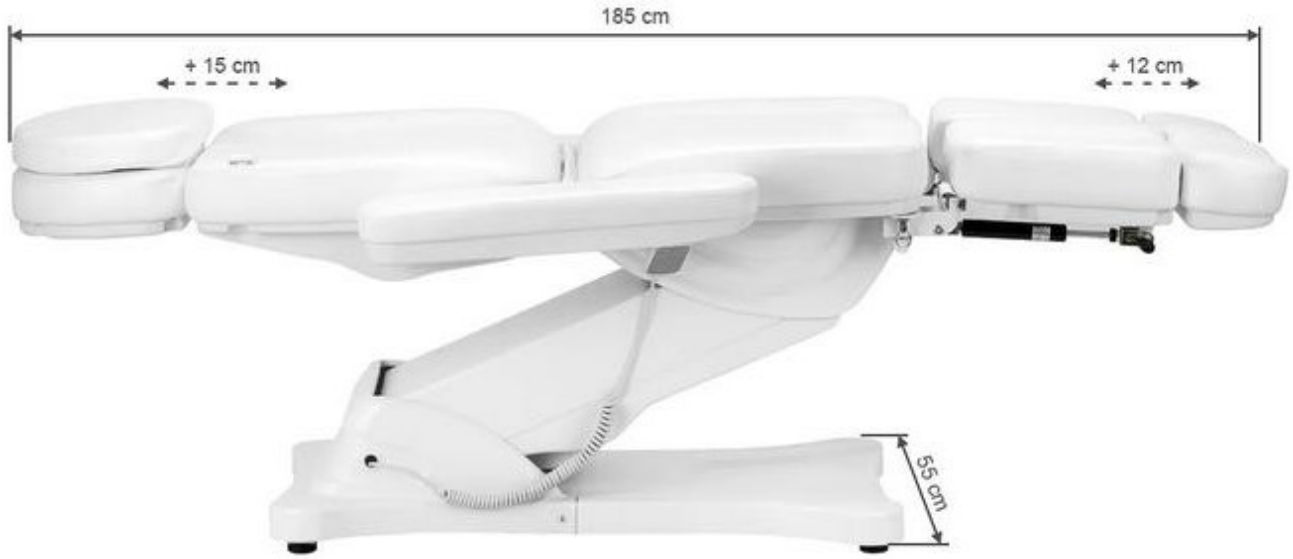



Konštrukcia spotrebiča:

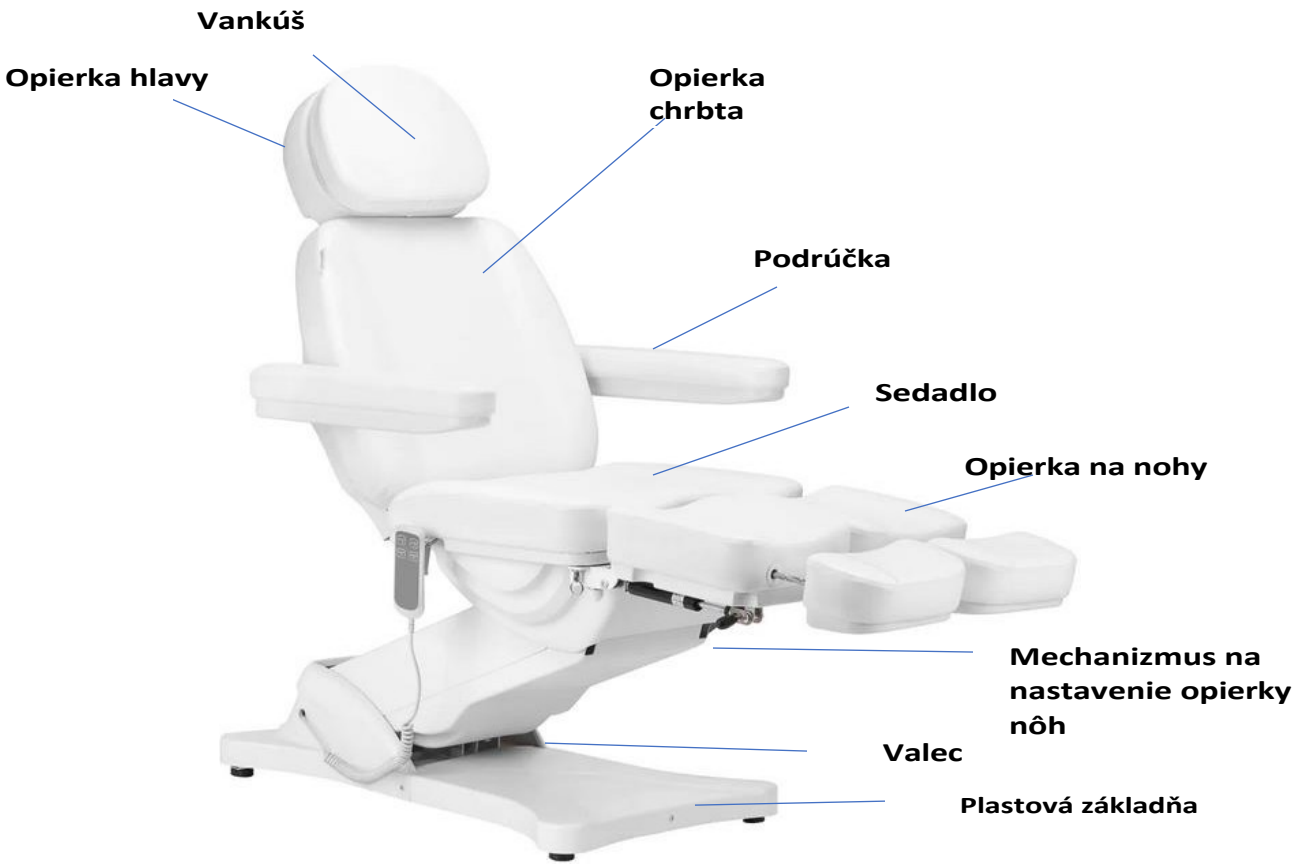

Upozornenie

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby uniesla plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesedajte si priamo na opierku rúk alebo nôh.
3. Nezdvíhajte väčšiu váhu, ako je sedadlo schopné uniesť.
4. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Pozor

1. Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
2. Napájací kábel nepripájajte k zariadeniu. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Uistite sa, že napájací kábel sa dá v núdzovej situácii ľahko odpojiť.
3. Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, stoličku nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
5. Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrenie, ovládala diaľkový ovládač.
6. Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
7. Uistite sa, že okolo kresla je dostatočný voľný priestor, aby sa dalo voľne skladať a rozkladať.
8. Uistite sa, že v okolí kresla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
9. Zariadenie sami neupravujte. Ak stolička nefunguje správne, prestaňte ju používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie zariadenia:

1. Pripojte napájací kábel k externému zdroju napájania 110V~240V.

Spôsob inštalácie podrúčky:

Kreslo musí byť vo vodorovnej polohe, aby ste naň mohli nainštalovať podrúčku. Zasuňte podrúčku do otvoru umiestneného na boku operadla. Podrúčka by mala byť pevne pripevnená. Otočte ju doprava alebo doľava, aby správne zapadla na miesto. To isté urobte aj s druhou lakťovou opierkou.

Opierka na ruku je kolmo k zemi (bez ohľadu na uhol sedadla). Možno ju otočiť o 180°.



2. Funkcia manuálneho ovládania (výška zdvihu: lôžko je 58~ 82 cm od zeme)



A **B**

B



A

3. Funkcia manuálneho ovládania (uhol zdvihu chrbta 0-80°, uhol zdvihu nôh 0-90°)

C **D**




C

D




4. Funkcia zasúvania opierky nôh (opierka nôh, dĺžka: 0~ 12 cm)

0~ 12cm

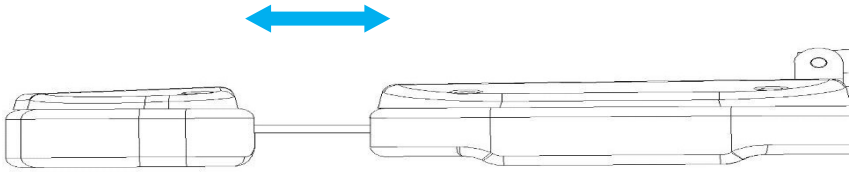

Každá z podnožiek je samostatne nastaviteľná, čo umožňuje nezávislé polohovanie nôh. Uhol opierky nôh je nastaviteľný ručne. Mechanizmus, ktorým je opierka nôh vybavená, umožňuje aj naklápanie opierky nôh do strán. Vďaka tomu je stolička ideálna na podiatrické ošetrenia.

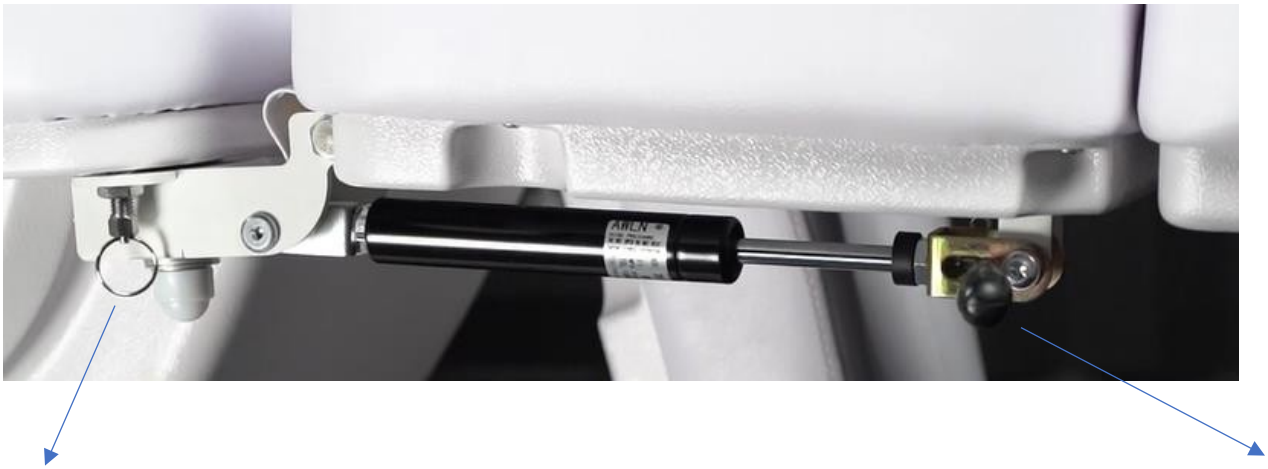

Mechanizmus na naklápanie opierky nôh do strán Páka na zdvíhanie/spúšťanie opierky nôh

Ak chcete zdvihnúť opierku nôh, potiahnite za rukoväť páky smerom nahor, čím sa opierka nôh zdvihne nahor.

Ak chcete opierku nôh nakloniť do strany, zatiahnite za koliesko na mechanizme naklonenia nadol, čím opierku nôh nakloníte do strany.

Čistenie a dezinfekcia spotrebiča:

- Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Aby sa povrch kresla udržiaval v dobrom stave, musí sa pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku vyčistiť a vydezinfikovať po každom použití. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).

- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a nevystavujte prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1 Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. 2. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.

3. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
4. Nepoužívajte elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo, ak nefungujú správne.
5. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Aspoň raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. Napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.
Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

Riešenie problémov

Problém	**Metódy riešenia**
Manuálne ovládanie nereaguje	Skontrolujte, či je rozhranie pripájajúce linku ručného ovládania uvoľnené (Skontrolujte, či nie je problém s doskou plošných spojov), nezabudnite označiť pôvodnú polohu zástrčky.
Motor nereaguje	Prepnite polohu zástrčky motora

Ak chcete vymeniť riadiacu skrinku a objednať ďalšie náhradné diely, obráťte sa na servisné oddelenie, pred kontaktovaním popíšte problém:

1. Model
2. Dátum nákupu

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o:

(a) do zariadenia sa dostala kvapalina, (b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, k e ď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávneho prevádzky spotrebiča jeho poškodenie alebo dokonca popálenie. **UPOZORNENIE:**

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných p o r ú c h kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.

2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať do recyklačného strediska, ktoré je v súlade so zásadami o c h r a n y ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a . Elektrozariadenia nevhadzujte do kontajnerov s domovým odpadom . Dodržiavajte podľa pravidiel pre likvidáciu tohto typu zariadení.

Likvidácia tohto typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia

v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad. Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.