

Stůl HZ-2027 – montážní návod

● Technické údaje：

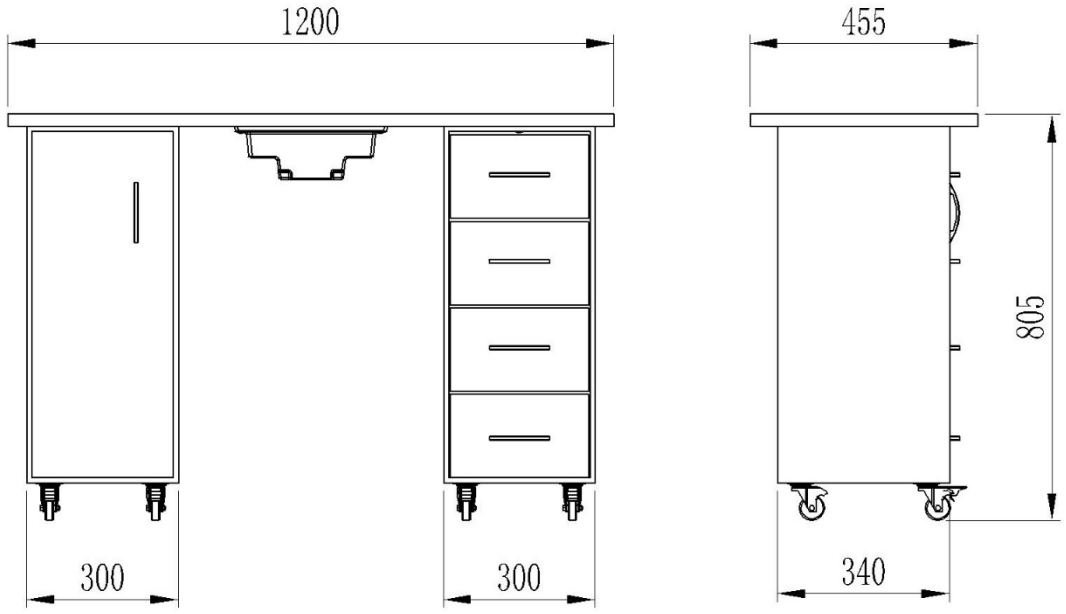

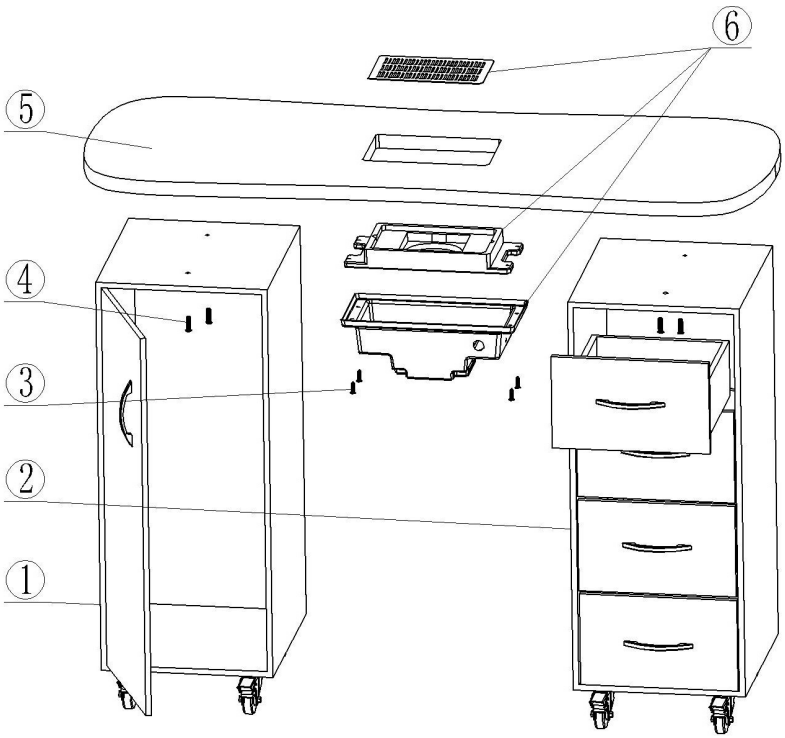


Max. nosnost	100 kg
Hmotnost:	43 kg
Výška	80,5 cm
Hloubka	45,5 cm
Šířka	120 cm

Pozor! Stůl je k dispozici ve verzi s odtahovým systémem i bez něj. Fotografie v tomto návodu jsou pouze ilustrační.

● Návod na montáž:

Krok 1: Vyjměte dvě horní zásuvky tak, že je zcela vysunete. Pomocí úchytu na kolejnici každé zásuvky současně stiskněte malé plastové páčky na pravé kolejnici dolů a na levé kolejnici nahoru. Poté zásuvku přitáhněte k sobě (viz schéma).

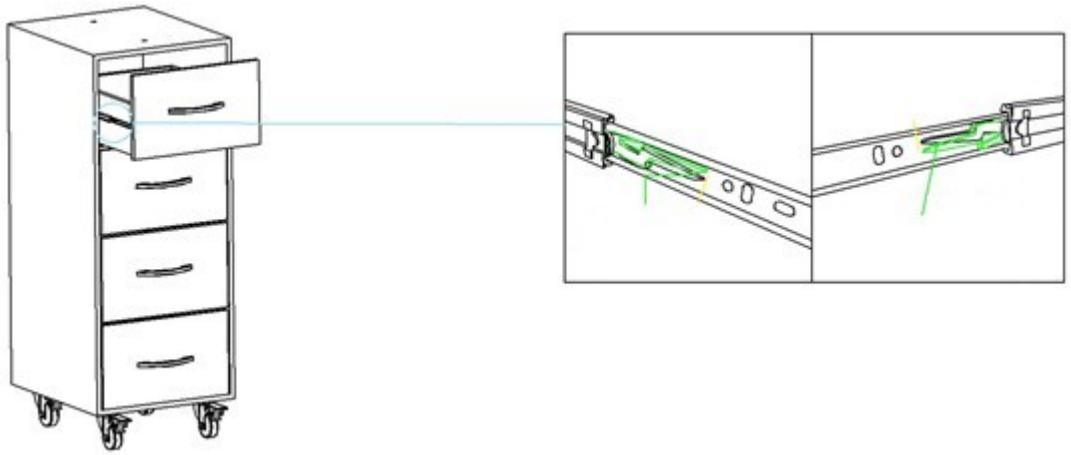

Krok 2: Připevněte desku stolu ke skříňkám pomocí přiložených šroubů. Poté opatrně zasuňte zásuvky do kolejnic.

