ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil de soins 557A avec bacs




Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b, rue Graniczna, bâtiment
DC2A 54-610 Wrocław,
Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/04/2026

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser le fauteuil de soins.

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
2. Assurez-vous que le fauteuil est en bon état de fonctionnement.
3. Placez le fauteuil de beauté à l'endroit où il sera utilisé.


Remarque ! Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil de beauté.

Dimensions :

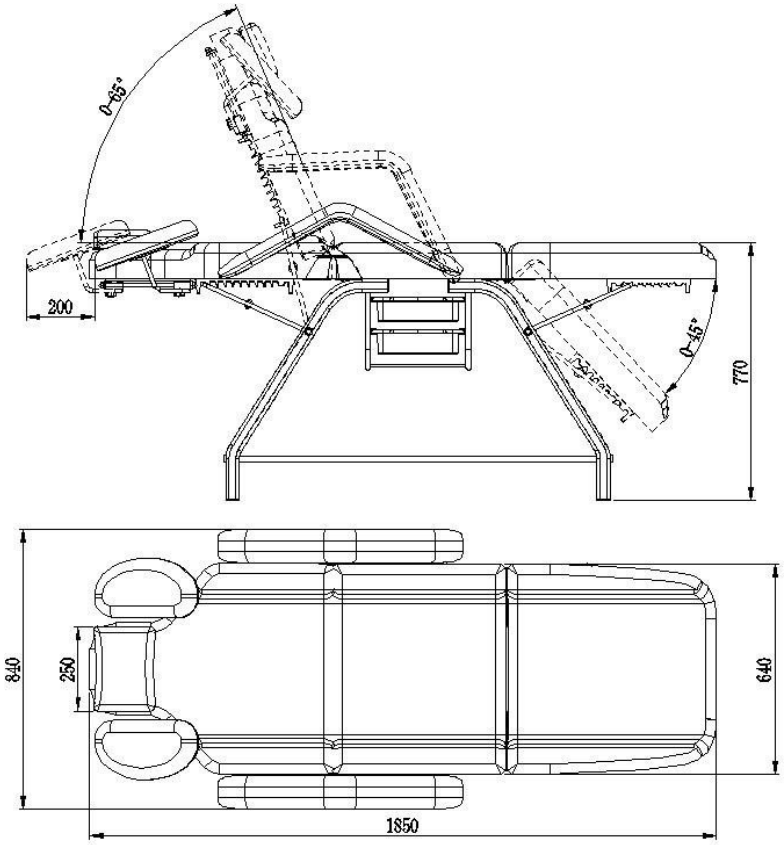


Instructions de montage de l'appareil :


Installez le châssis du fauteuil. Posez le sommier sur une surface plane et stable, puis fixez le châssis du fauteuil au sommier à l'aide de vis. Placez successivement : la patte de fixation plate (1), puis la vis de liaison (2) et la vis (3).

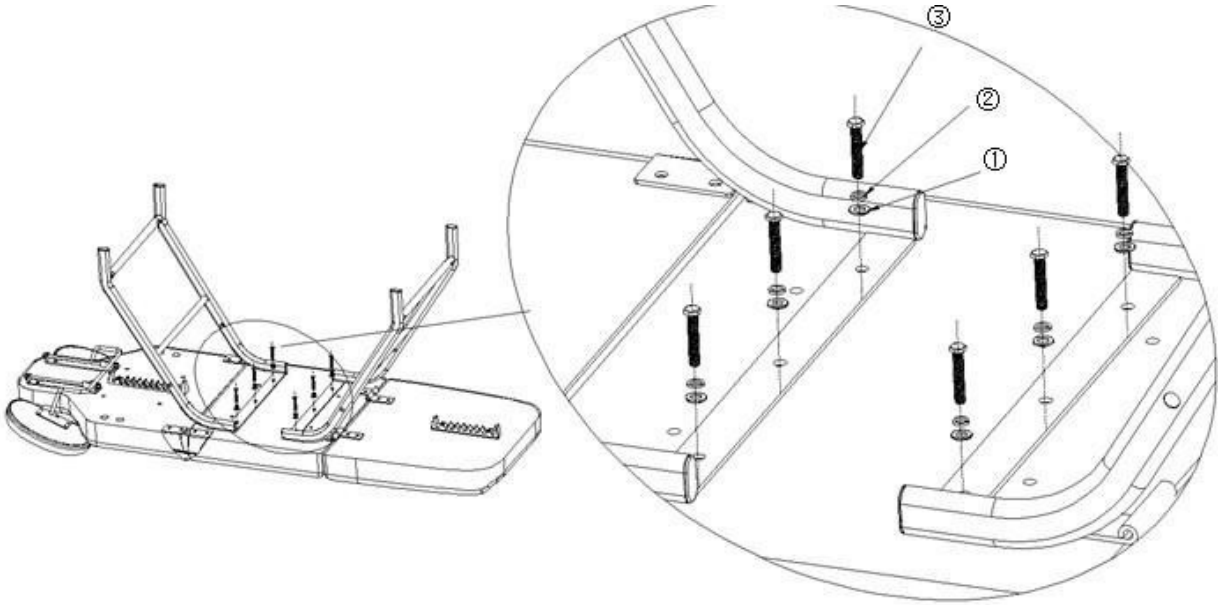


Installez le support du plateau :
Placez le support de plateau sur le châssis et fixez-le à l'aide de vis.

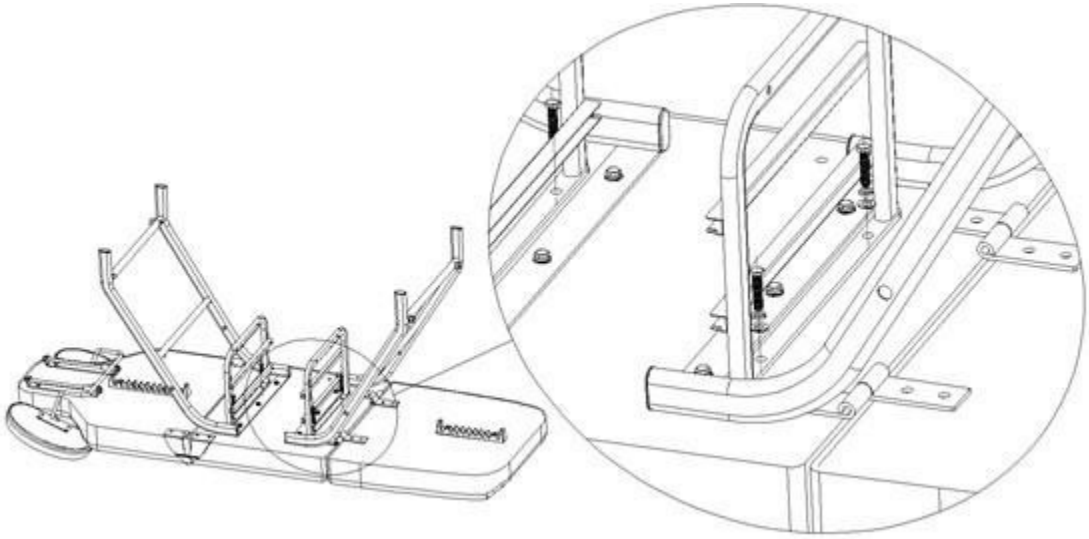


Reliez ensuite le support de plateau au tube de liaison et serrez-le à l'aide de vis, comme sur la photo ci-dessous.

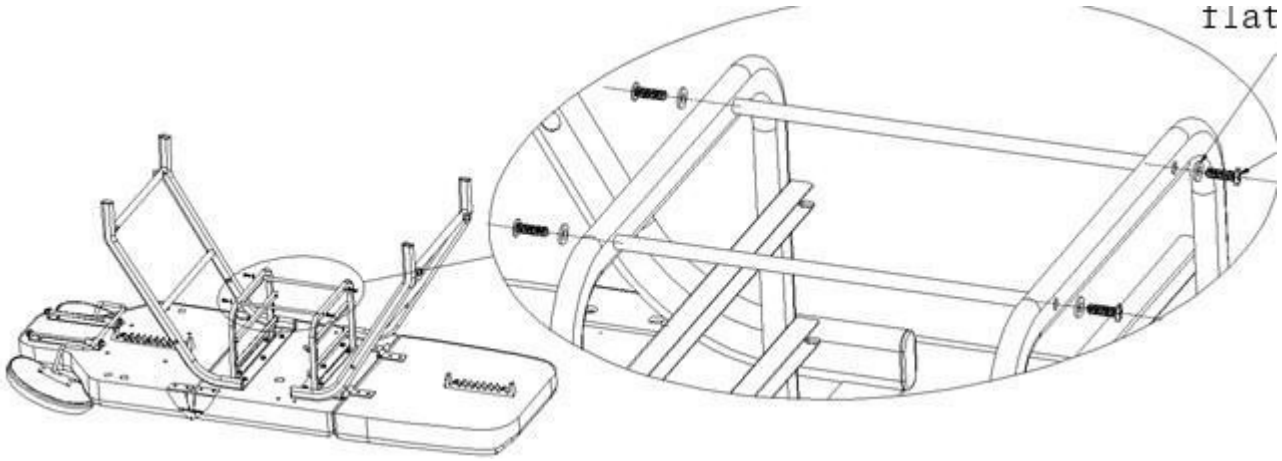

Fixez la barre de liaison du cadre du fauteuil : fixez la barre de liaison aux 4 trous situés dans les pieds du fauteuil à l'aide de vis.

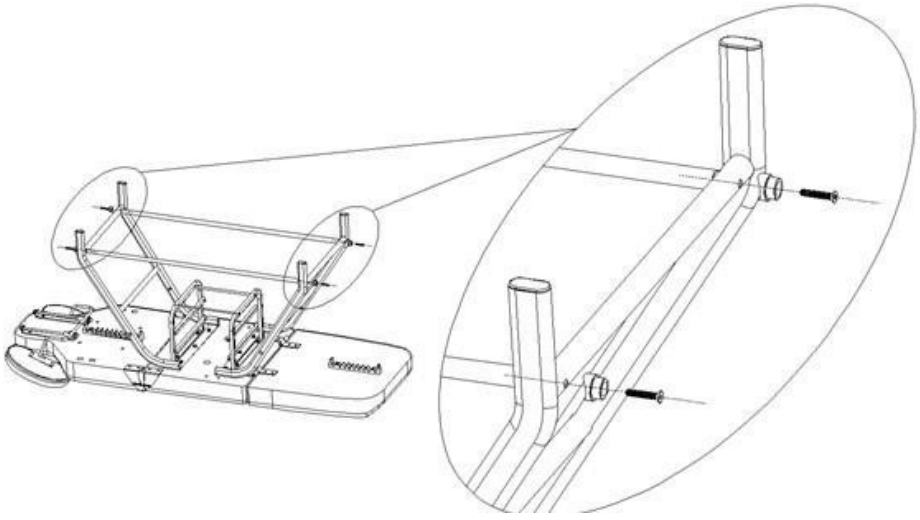


Installez le dispositif de réglage du dossier et du repose-pieds de chaque côté des pieds du fauteuil à l'aide de vis (le ressort le plus court sous le dossier et le plus long sous le repose-pieds)

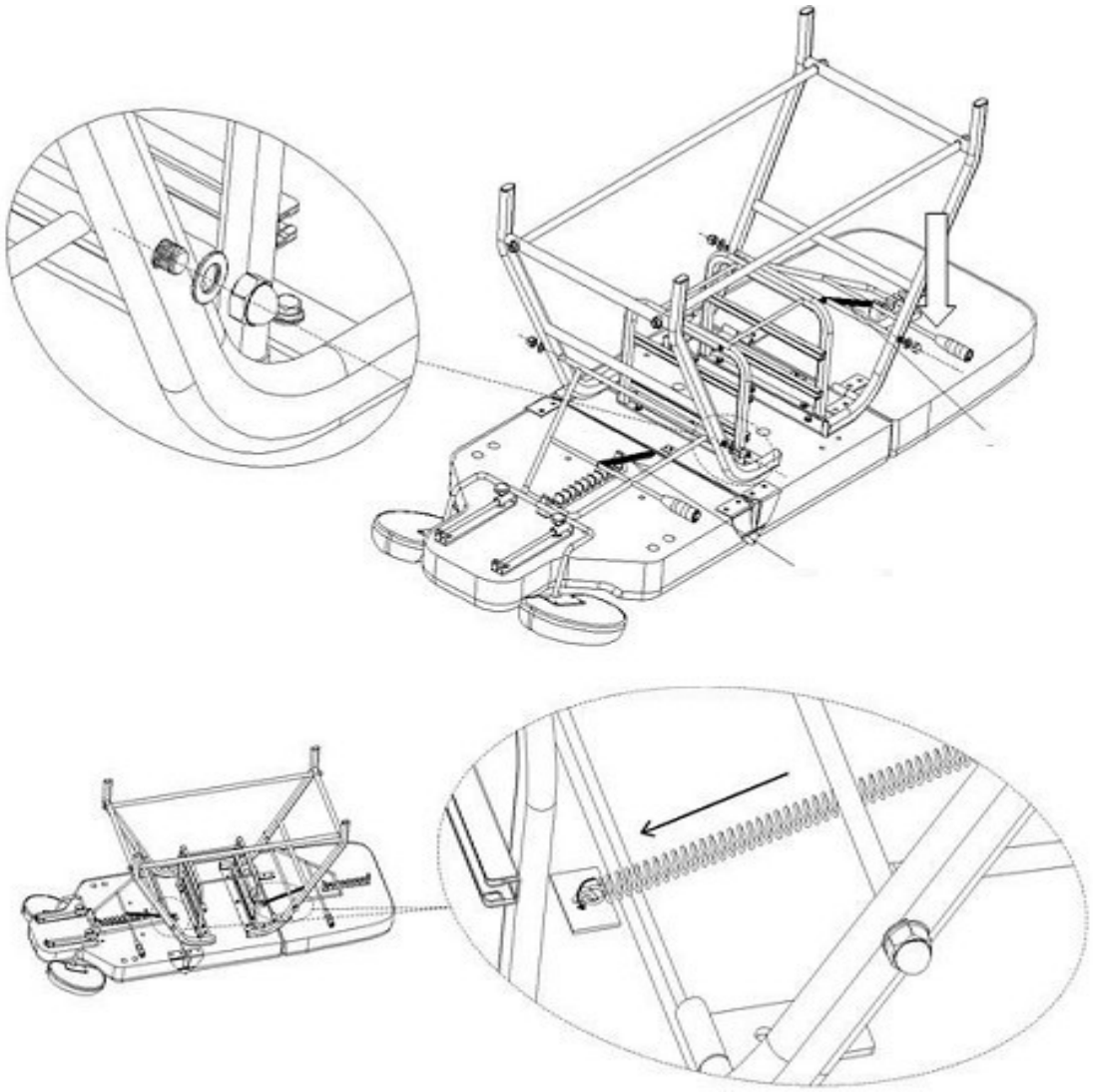

:


Installez le bouton de l'accoudoir :

Alignez la molette sur l'orifice de montage de l'accoudoir, puis serrez dans le sens des aiguilles d'une montre. Desserrez la molette pour déplacer l'accoudoir comme indiqué sur l'image.

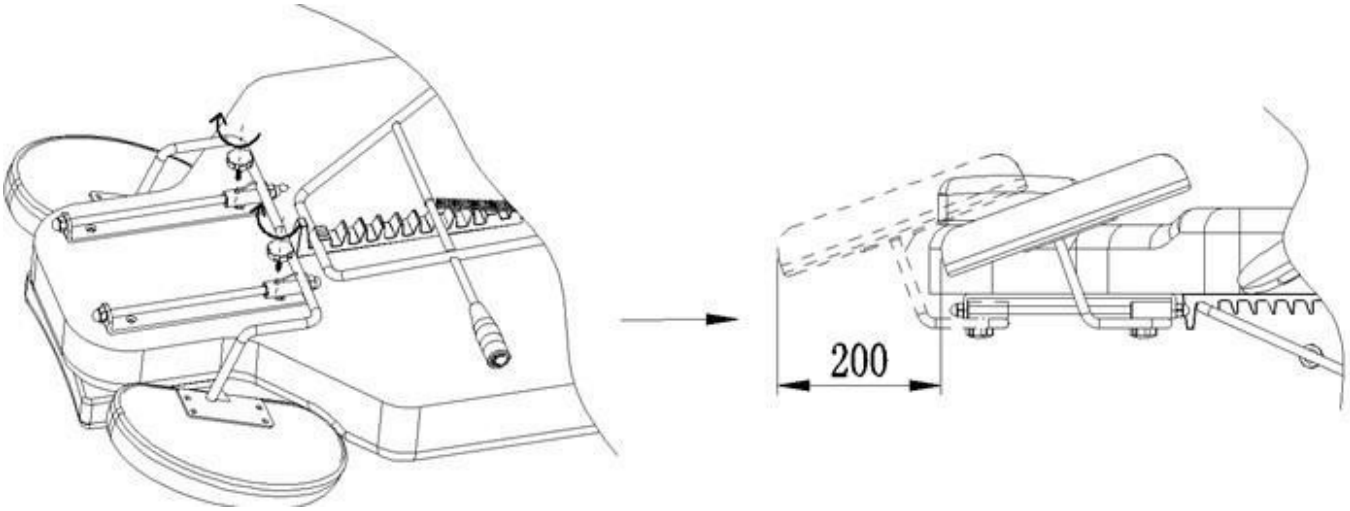


Installation de l'accoudoir :

Insérez l'accoudoir dans l'ouverture située sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être solidement fixé. Tournez-le vers la droite ou vers la gauche pour qu'il s'enclenche correctement.

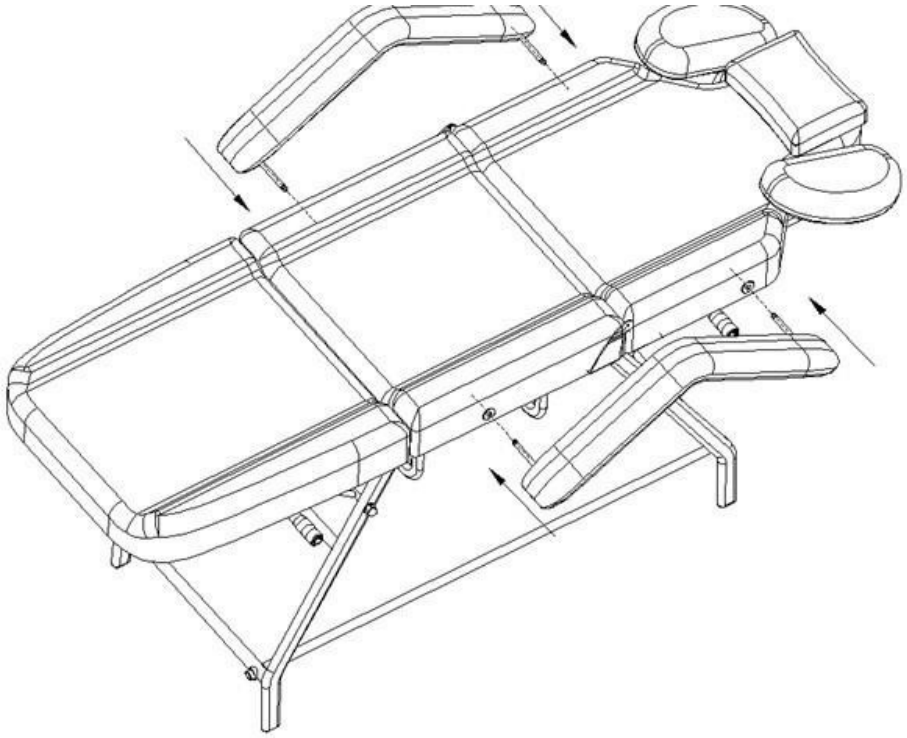

Installez le bac comme indiqué sur la photo ci-dessous. Glissez le bac dans les glissières situées sous le siège.

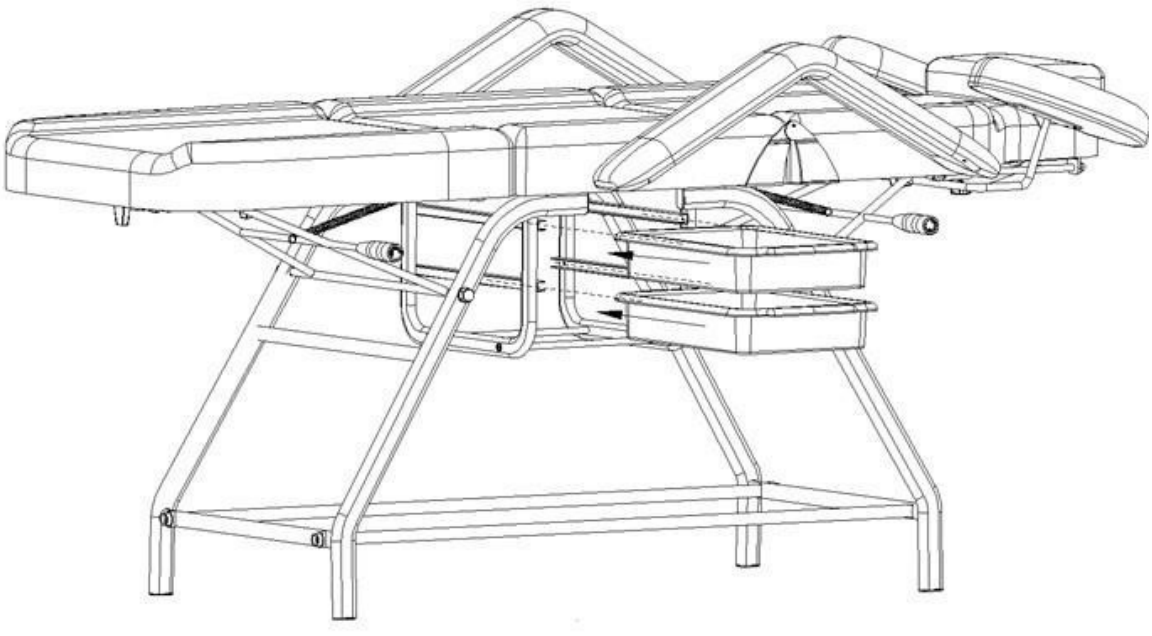

Fonctions du siège :

1. Réglage de l'inclinaison du dossier

Le réglage de l'inclinaison du dossier et du repose-pieds s'effectue à l'aide d'un levier manuel. Le dossier et le repose-pieds sont équipés de leviers distincts, ce qui permet de régler la hauteur de chaque partie séparément. Cela permet d'adapter la position du fauteuil aux besoins individuels du client afin que le soin prodigué soit le plus confortable possible. Le fauteuil peut être incliné jusqu'à la position allongée.

Pour relever le dossier, saisissez la levier, soulevez-le et réglez-le à la hauteur souhaitée.

2. Abaissement du dossier
   Tenez le dossier du siège d'une main et, de l'autre, saisissez la poignée du levier pour l'abaisser jusqu'à la position souhaitée. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, relâchez le levier.



Nettoyage et désinfection de l'appareil :

• Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il convient de la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection approfondie une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

• Pour nettoyer les surfaces métalliques et plastiques ainsi que les commandes, essuyez-les avec un chiffon humide. Une petite brosse est idéale pour nettoyer les endroits difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide de nettoyage sur l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un produit adapté.

II Surfaces en acier inoxydable

• Il est préférable de les nettoyer avec une solution détergente douce. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- N'utilisez pas de jets d'eau (douche, lance à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil dans des conditions de température élevée et d'humidité importante, et ne l'exposez pas à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- N'utilisez pas de solvants ni d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du fauteuil

• Essuyez la surface du fauteuil de manière uniforme avec un produit spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées, afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :

a) un liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits inhabituels, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Ne mettez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de fonctionnement de l'appareil, de l'endommager, voire de le brûler.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout risque.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes à mobilité réduite, des personnes souffrant d'un handicap mental et des personnes inexpérimentées ou ne connaissant pas bien l'appareil, à condition qu'une surveillance ou une formation soit assurée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient bien compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



Les appareils électriques, les accessoires et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans des conteneurs destinés aux déchets ménagers. Il convient respecter les règles relatives à la mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément, puis remis à des points de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques. En fin de vie, les anciens appareils contiennent des composants de grande valeur pouvant être recyclés ; il convient donc de les remettre en vue de leur recyclage. C'est pourquoi ils doivent être remis aux points de collecte appropriés ; ils peuvent également être remis à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre –20 °C et +50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement : de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, il est interdit de jeter ou de faire tomber l'appareil, de l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.