ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

557A kozmetikai szék tálcákkal




Importőr:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, épület
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást.

1. Győződjön meg arról, hogy az összes csomagolóanyagot eltávolította.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai széket a használat helyére.


Figyelem! Gyerekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyerekeket felügyelni kell, és nem játszhatnak a kozmetikai szék közelében.

Méretek:

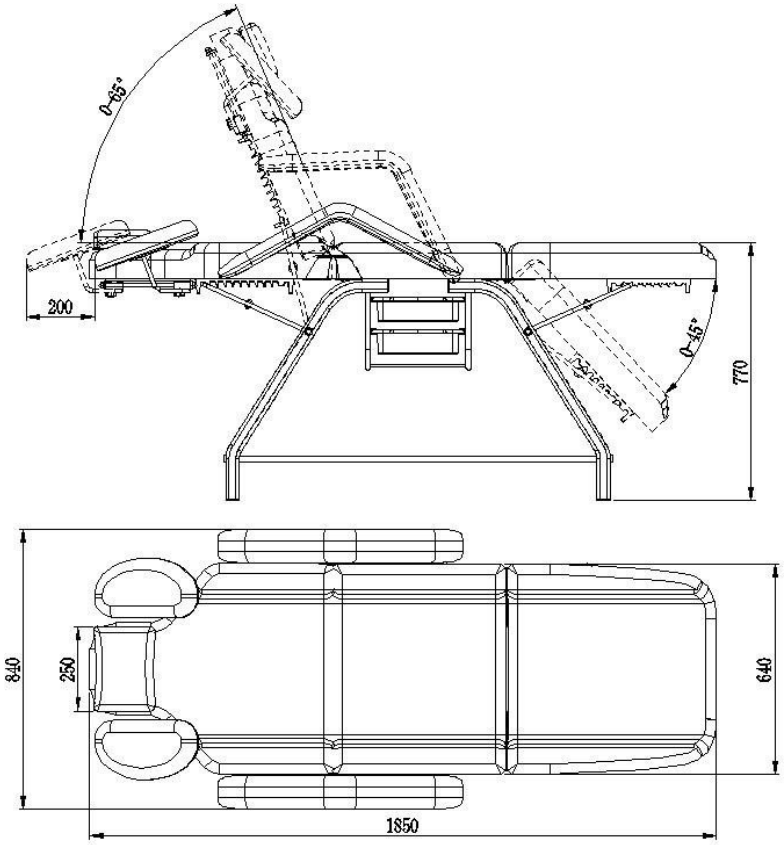


A készülék szerelési útmutatója:


Szerelje fel a fotel vázát. Helyezze a fekvőrészt egy sík, stabil felületre, majd csavarokkal rögzítse a fotel vázát a fekvőrészhez. Helyezze fel egymás után: a lapos alátétet (1), majd a rögzítőelemet (2) és a csavart (3).

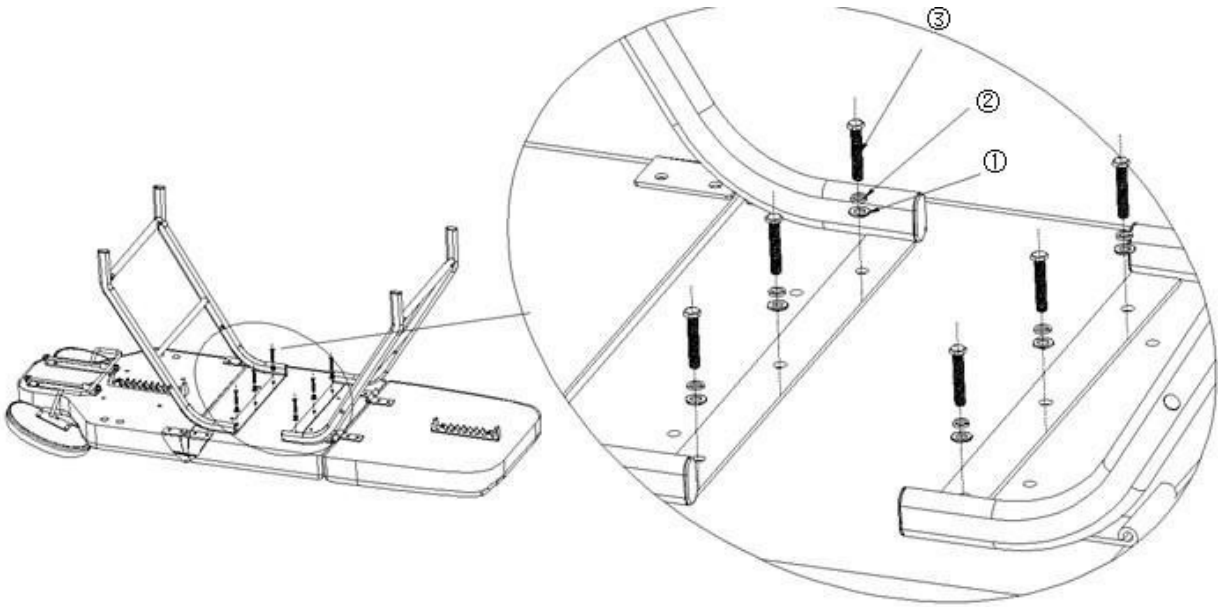


Szerelje fel a tálca tartóját:
Helyezze a tálca tartóját a vázra, és rögzítse csavarokkal.

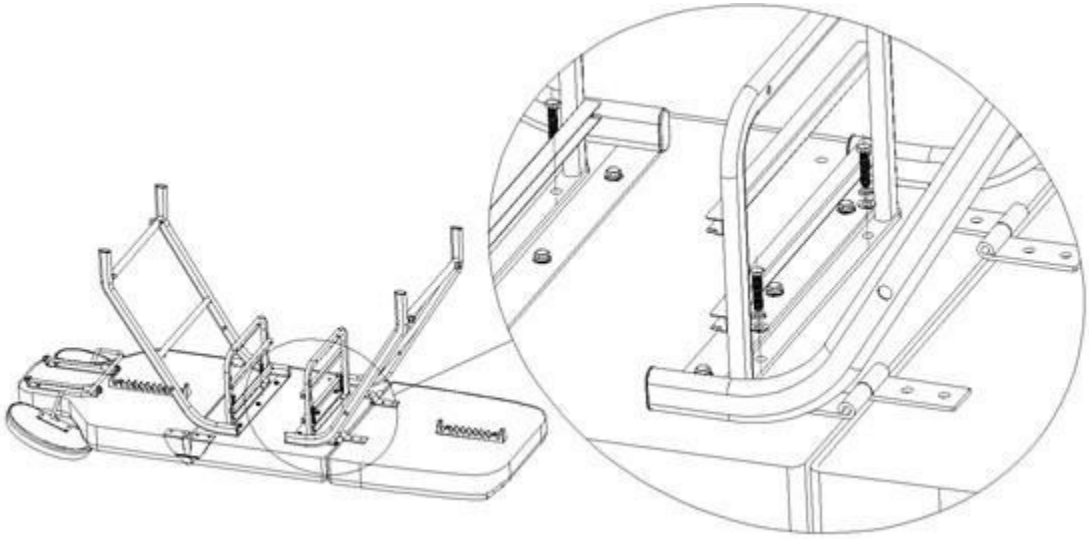


Ezután csatlakoztassa a tálca tartóját az összekötő csőhöz, és csavarokkal rögzítse, az alábbi képen látható módon.

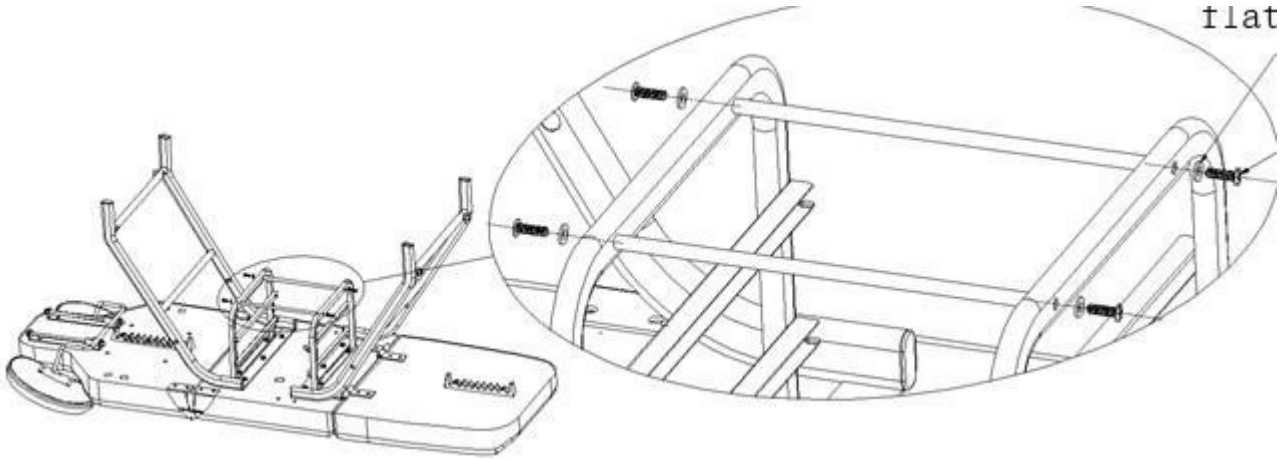

Rögzítse a szék vázát összekötő rudat: rögzítse a összekötő rudat a szék lábain található 4 lyukhoz csavarokkal.

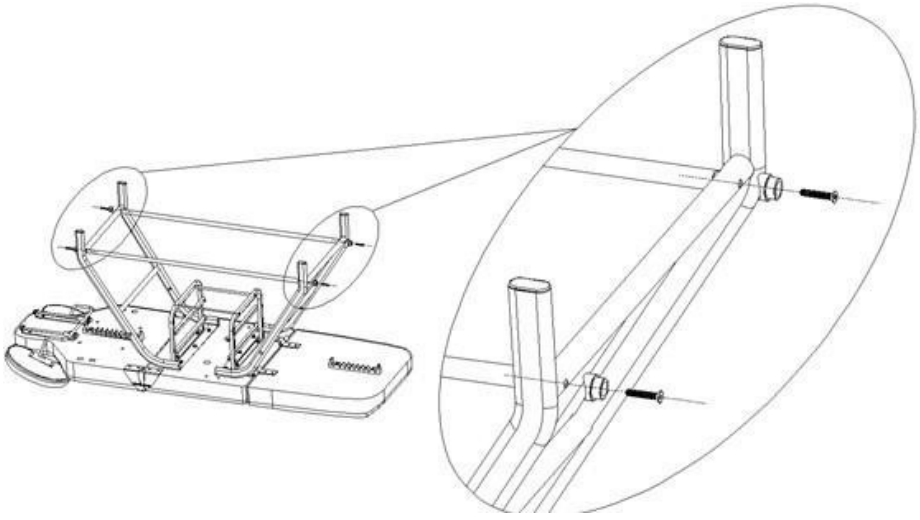


Csavarokkal rögzítse a háttámla- és lábtartó-állítót a szék mindkét lábához (a rövidebb rugót a háttámla alá, a hosszabbat pedig a lábtartó alá):

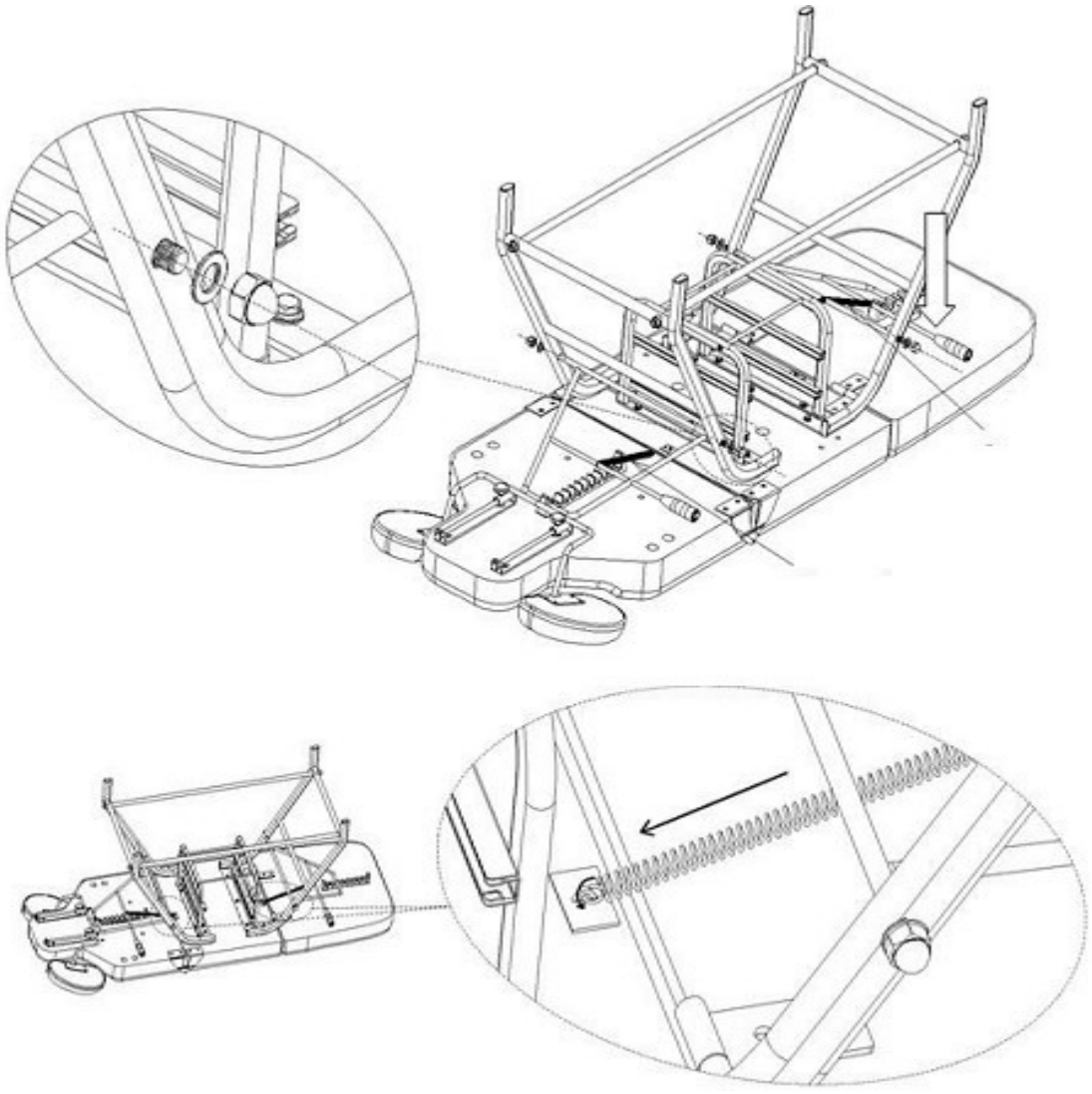


Szerelje fel a kartámasz gombját:

Irányítsa a gombot a kartámasz rögzítőnyílásába, majd csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba. Lazítsa meg a gombot, hogy a kartámasz pozícióját a képen látható módon állítsa be.

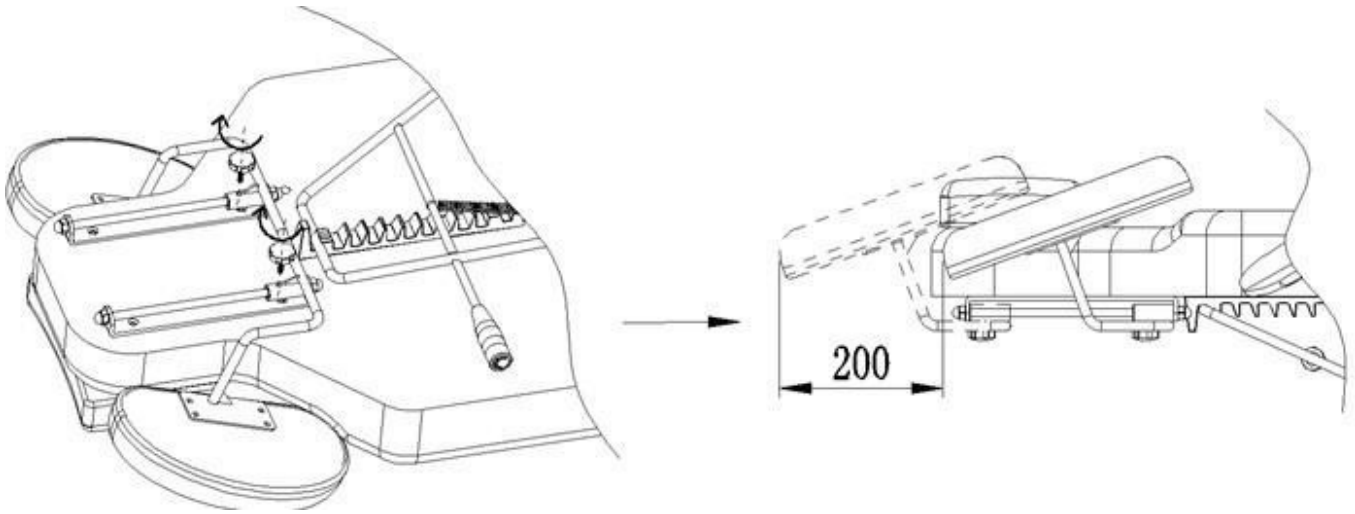


A kartámasz felszerelése:

Csúsztassa be a kartámaszt a háttámla oldalán található nyílásba. A kartámasznak stabilan kell rögzülnie. Forgassa jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére illeszkedjen.

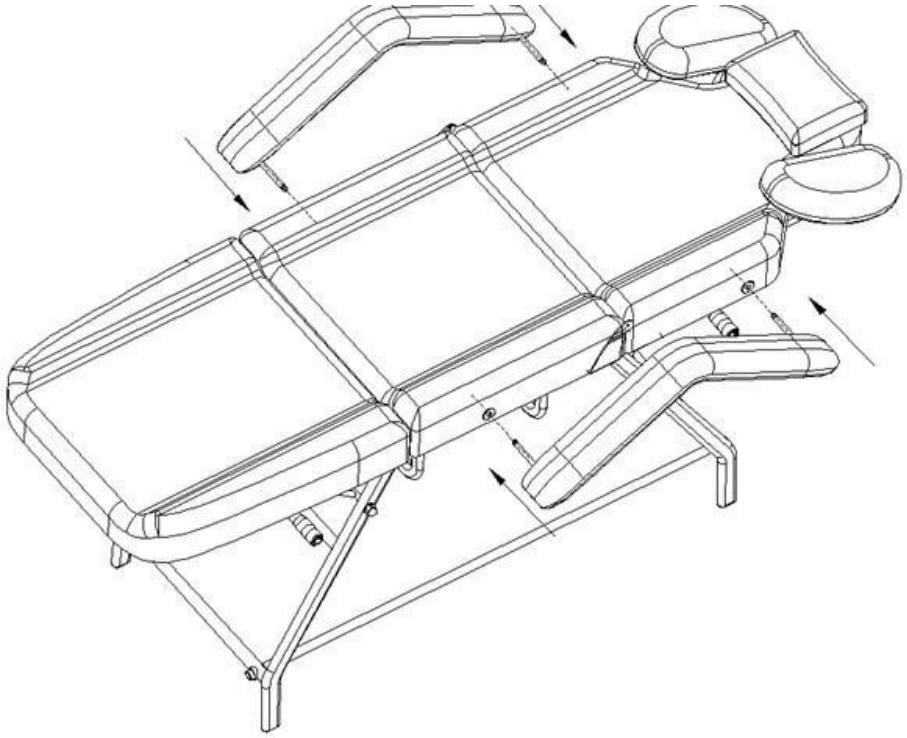

Szerelje be a tartót az alábbi képen látható módon. Csúsztassa be a tartót az ülés alatt található sínekbe.

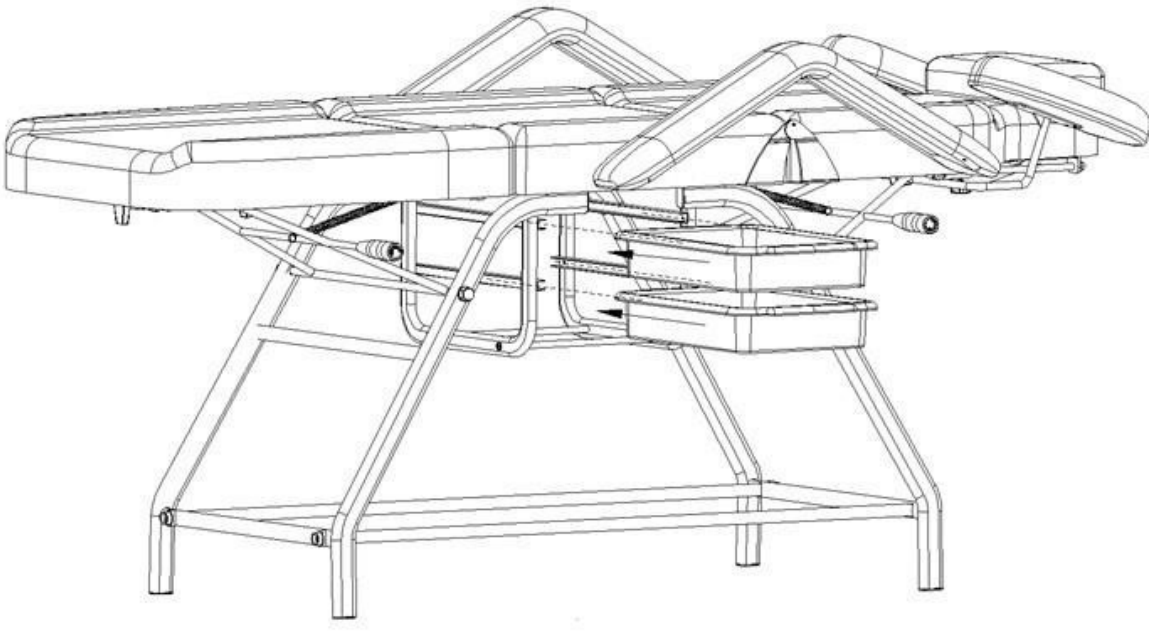

Az ülés funkciói:

1. A háttámla emelése

A háttámla és a lábtartó dőlésszögét kézi karral lehet beállítani. Mind a háttámla, mind a lábtartó külön karral rendelkezik, így mindkét rész magassága külön-külön állítható. Ez lehetővé teszi a szék beállításának az ügyfél igényeihez való egyéni igazítását, hogy a kezelés a lehető legkényelmesebb legyen. A szék teljesen fekvő helyzetbe is állítható.

A háttámla felemeléséhez fogja meg a kart, emelje fel, és állítsa be a kívánt magasságra.

2. A háttámla leengedése
   Tartsa meg a szék háttámláját, majd a másik kezével fogja meg a kar fogantyúját, és engedje lefelé, amíg el nem éri a kívánt pozíciót. Miután elérte a kívánt magasságot, engedje el a kart.



A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

• A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne felejtse el, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasolt havonta egyszer alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

• A fém és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje át őket egy nedves ruhával. A nehezen elérhető helyek vagy sarkok tisztításához jól jön egy kis kefe. Ne használjon túl sok tisztítószert a készüléken. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő fertőtlenítőszerrel.

II Rozsdamentes acél felületek

• A legjobb eredményt enyhe tisztítószer-oldattal érheti el. Az ammónia és a legtöbb oldószer használható a makacs foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarat (zuhany, nagynyomású vízsugár) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékkal való szennyeződéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket és savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

• Törölje át a szék felületét egyenletesen egy speciális bőrtisztító szerrel, majd törölje át egy tiszta, puha ruhával.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amelyet kozmetikai szalonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése segít elkerülni a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megjelölt céloktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag az autorizált szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársa végezhet.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni – ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.
4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel:

a) folyadék jutott a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.

5. Tilos bármilyen tárgyat a kábelekre helyezni. Ne helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Semmit sem szabad a készülék nyílásába dugni. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket tilos instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.
9. A készülék meghatározott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsoló gomb ismételt megnyomása előtt (a bekapcsolás és a kikapcsolás között, illetve fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működés, a készülék megrongálódása, sőt akár kiégése is fennáll.

FIGYELEM:

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel – így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint fizikai vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, illetve a készülék használatában tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben biztosított a felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó oktatás, hogy a kapcsolódó veszélyek érthetőek legyenek.
3. A készülék nem játékra szolgál. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, eszközöket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően az újrahasznosító központokba kell szállítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekbe dobni. Be kell az ilyen típusú berendezések eldobására vonatkozó szabályokat. A természeti környezet védelme érdekében

a környezet védelme érdekében, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd el kell juttatni a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőpontjaira. Élettartamuk végén a régi készülékek is tartalmaznak teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokra kell eljuttatni, de átadhatók az ACTIVESHOP Sp. z o.o. cégnek is.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag az eredeti csomagolásában szabad szállítani, –20 °C és +50 °C közötti hőmérsékleti tartományban

°C közötti hőmérsékleti tartományban, kizárólag az eredeti csomagolásában. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad dobálni vagy leejteni, mechanikai rázkódásnak vagy időjárási hatásoknak kitenni.