ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Fauteuil de podologie hydraulique Azzurro 713A




Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Scan pour différentes langues


CE

Dimensions de la chaise :

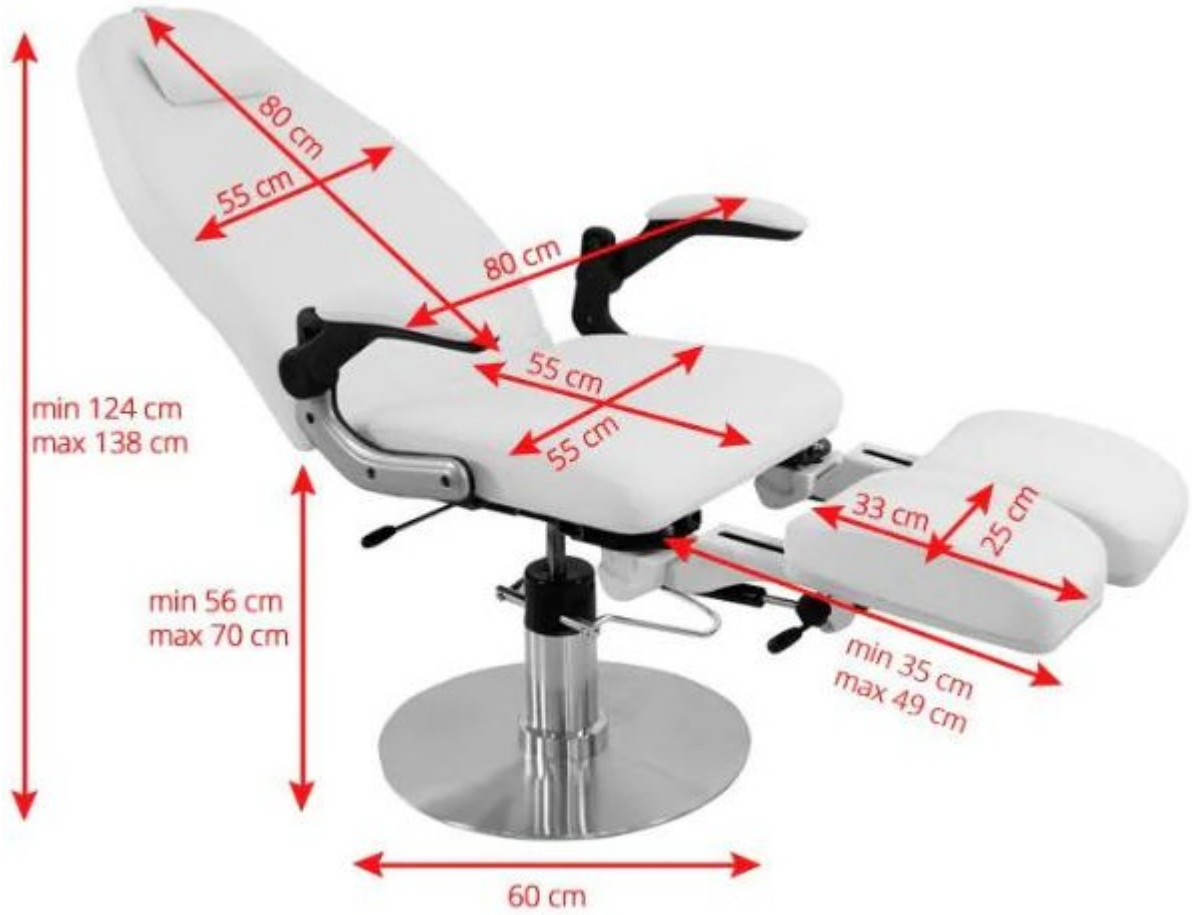


Assemblage :


1. Lever le levier de l'actionneur jusqu'à la position la plus haute, puis l'asseoir sur la tige de l'actionneur comme indiqué.

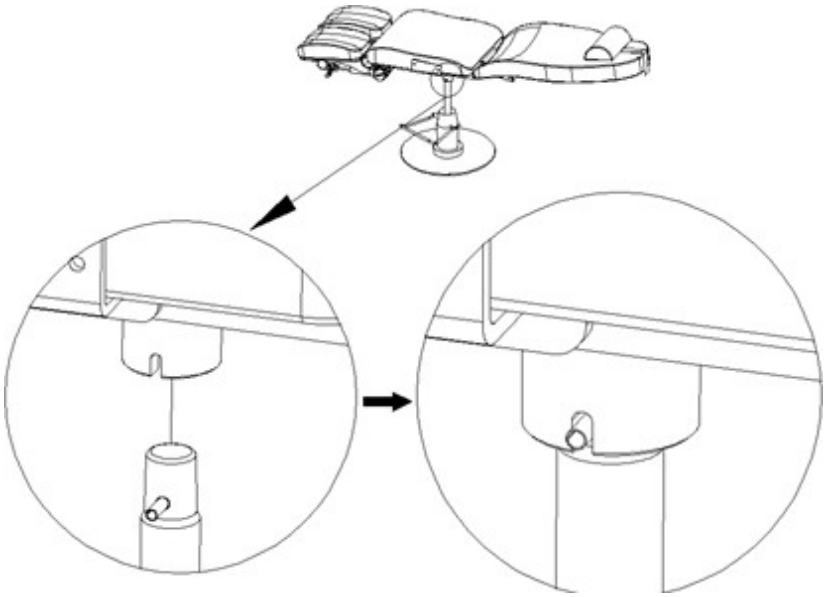

2. Alignez la barre du dossier avec le trou de l'actionneur. Insérez le boulon comme indiqué, puis fixez-le avec le collier.

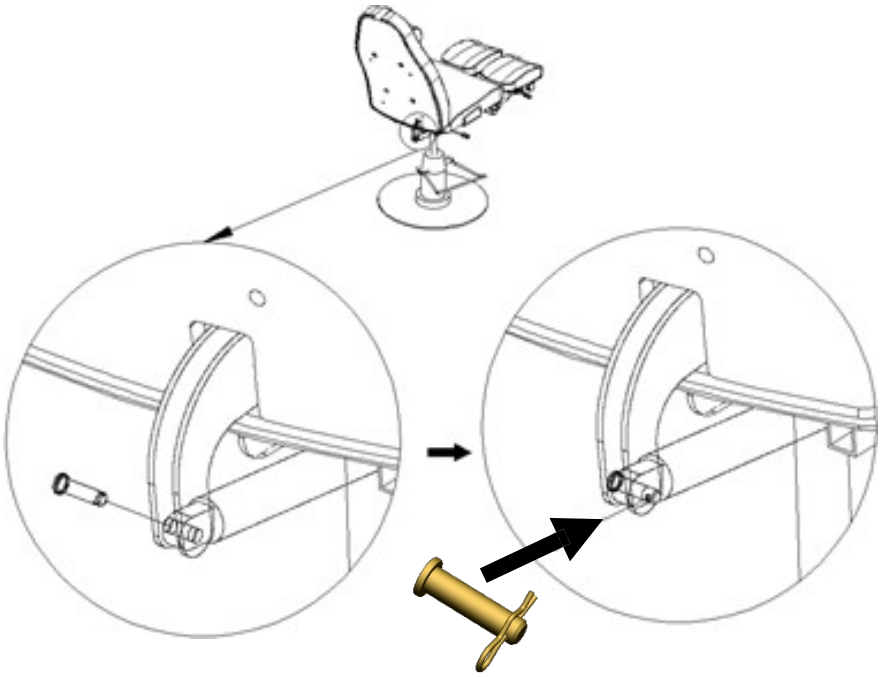


3. Monter les accoudoirs à l'aide des vis comme indiqué sur l'illustration.

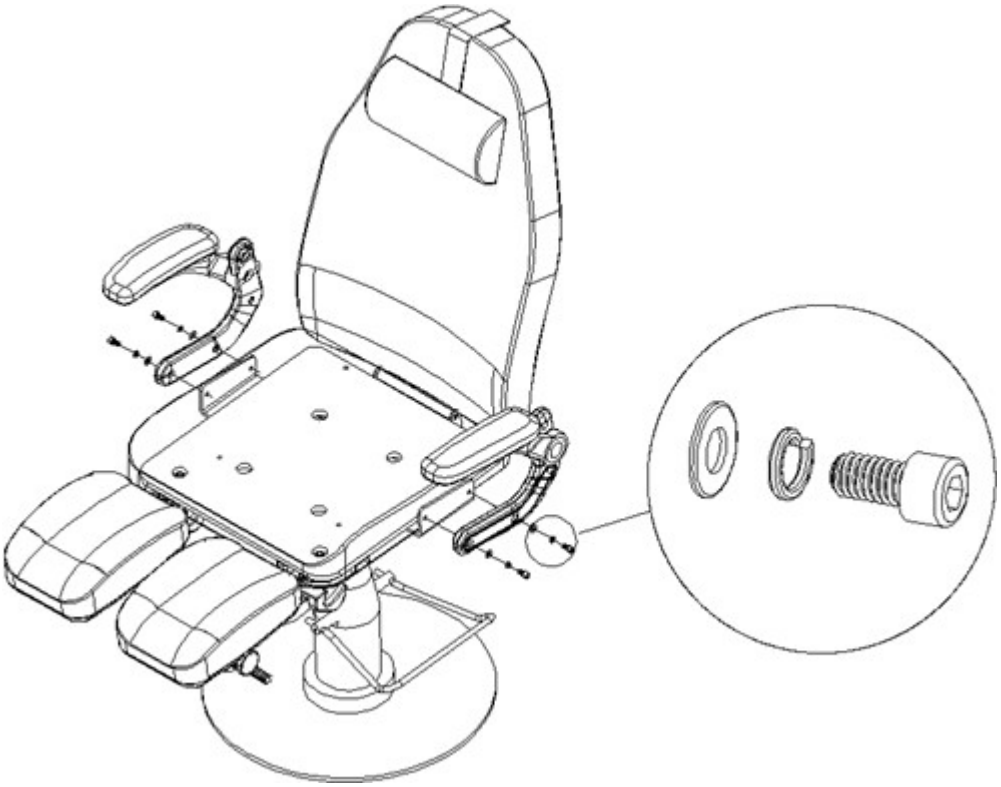


Fonctions :


1. La hauteur du siège peut être réglée à l'aide du levier. Le fait de lever le levier entraîne
   En bloquant la rotation du siège, une pression sur le levier permet d'abaisser le siège.

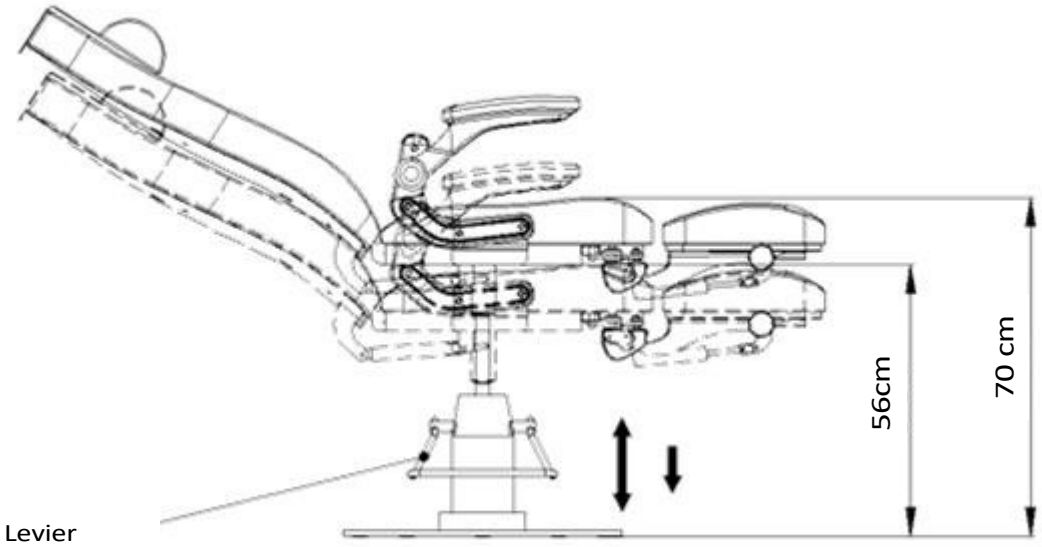

2. Pour incliner le dossier, appuyez sur le levier et penchez-vous en arrière pour que le dossier s'incline à l'angle qui vous convient.
   L'inclinaison maximale du dossier est de 45 degrés.

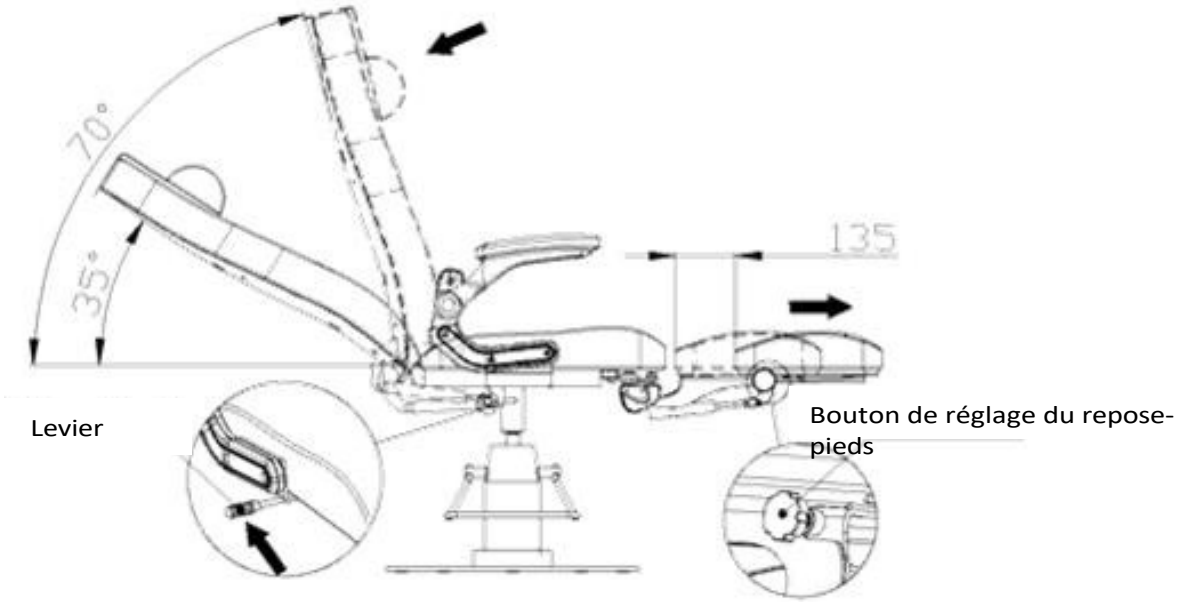


3. Le repose-pieds peut être bloqué en position 30°, 60° ou 90°.

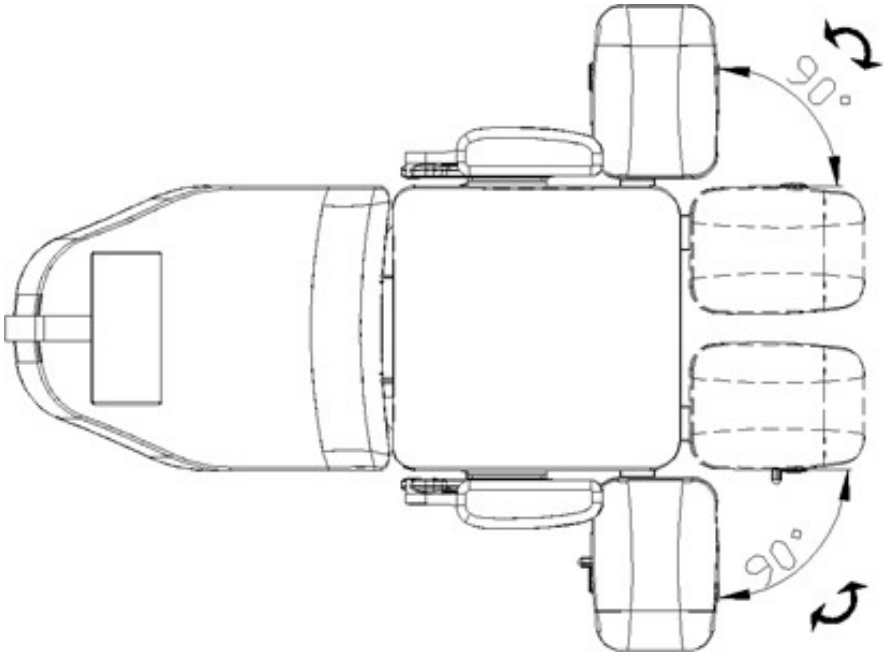

4. a) Utilisez le bouton et appuyez en même temps sur le repose-pieds pour l'incliner à l'angle souhaité. Plage d'inclinaison : jusqu'à 90°.

   b) L'accoudoir peut être réglé de la position horizontale à la position verticale.

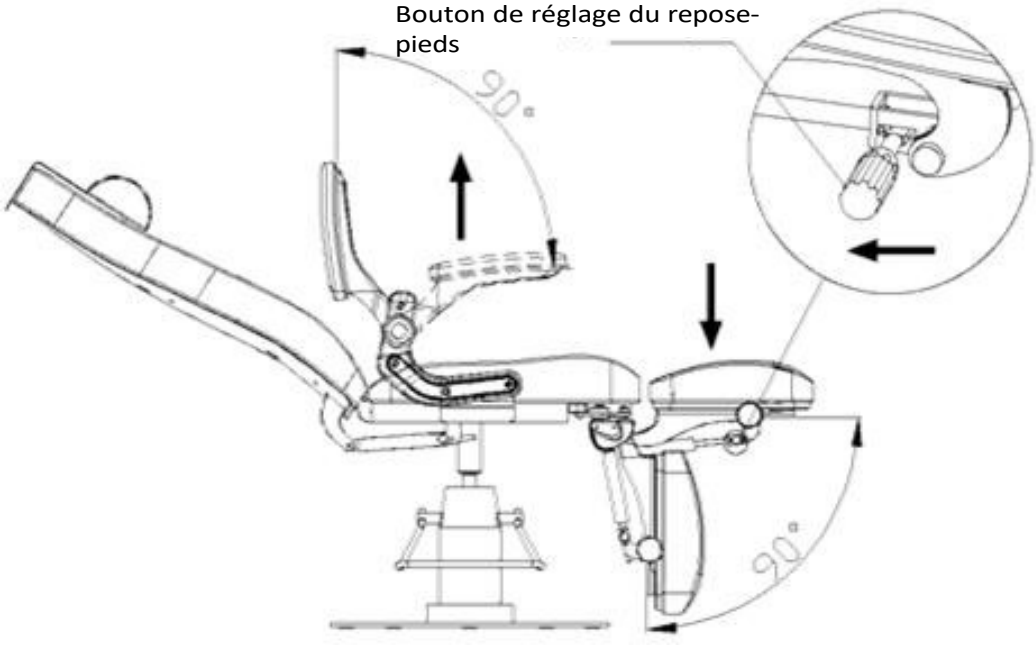

Attention.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas à proximité du siège sans la surveillance d'un adulte.
- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les fentes du siège.
- Ne pas exposer le siège à la lumière directe du soleil.
- Ne pas pousser ou tirer le fauteuil sur des sols irréguliers.
- Ne pas se tenir debout sur le fauteuil.
- Le fauteuil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des limitations physiques, des déficiences sensorielles ou des problèmes mentaux.

Nettoyage et entretien :

- Pour maintenir la surface de la chaise en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. Pensez à nettoyer et à désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces métalliques et plastiques, il suffit de les essuyer avec un chiffon humide. Pour nettoyer

les zones difficiles d'accès ou les coins avec une petite brosse.

- N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Les meilleurs . nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce. L'ammoniaque et la la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer dans des conditions de température et d'humidité élevées. Ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé est habilité à ouvrir ou à remplacer l'actionneur / l'unité de commande.

Données techniques :

- Charge maximale 150kg
- Poids 56,5 kg
- Cuir PU/PVC

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - ainsi, de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez l'entreprise de service agréée ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe des dommages peuvent survenir.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres d y s f o n c t i o n n e m e n t s , contactez un centre de service agréé pour éviter tout danger.

pour éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'e n v i r o n n e m e n t . Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et ensuite

être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.
Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.