ACTIVESHOP®

Használati utasítás

Azzurro 713A hidraulikus podológiai szék




Különböző nyelvek beolvasása

Importőr:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025


CE

A szék méretei:

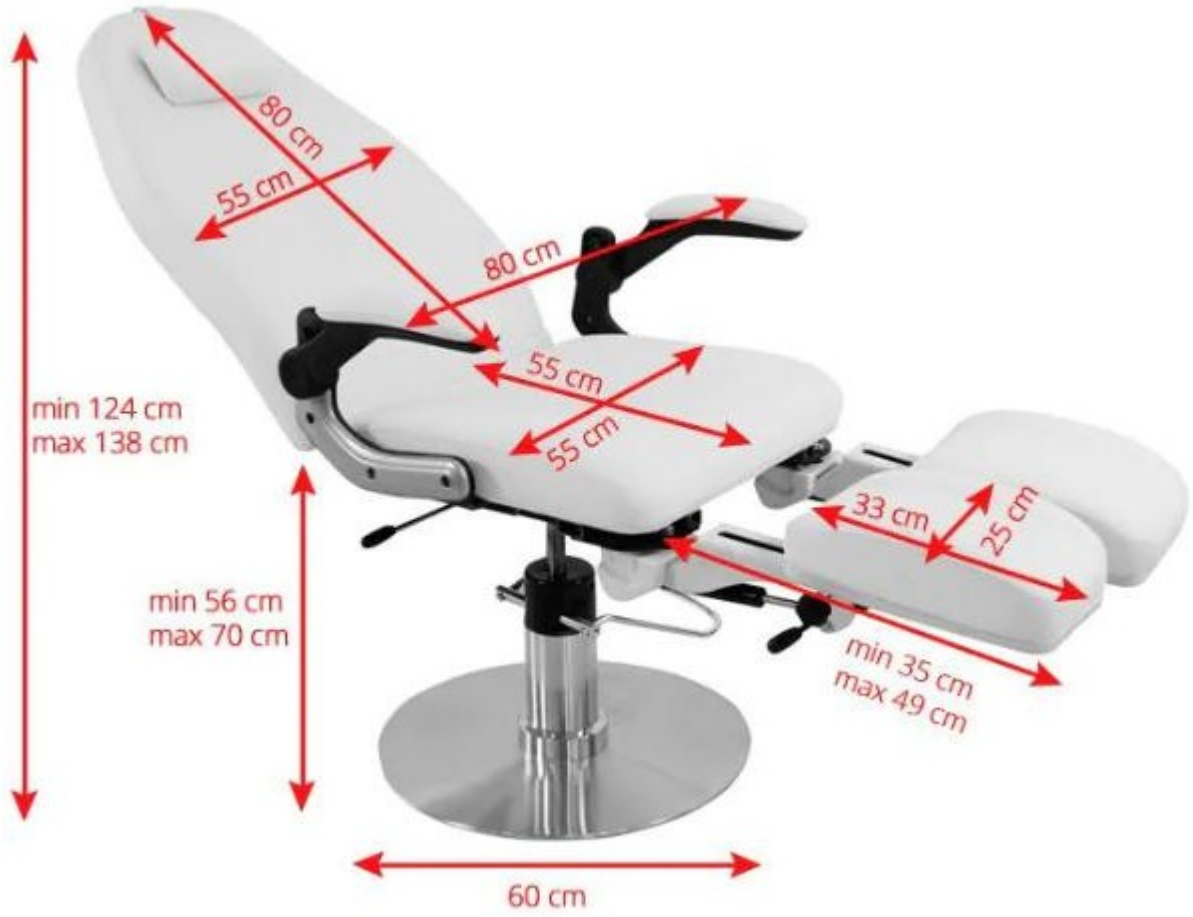


Összeszerelés:


1. Emelje fel a működtető kart a legmagasabb pozícióba, majd üljön rá a működtető szárára a képen látható módon.

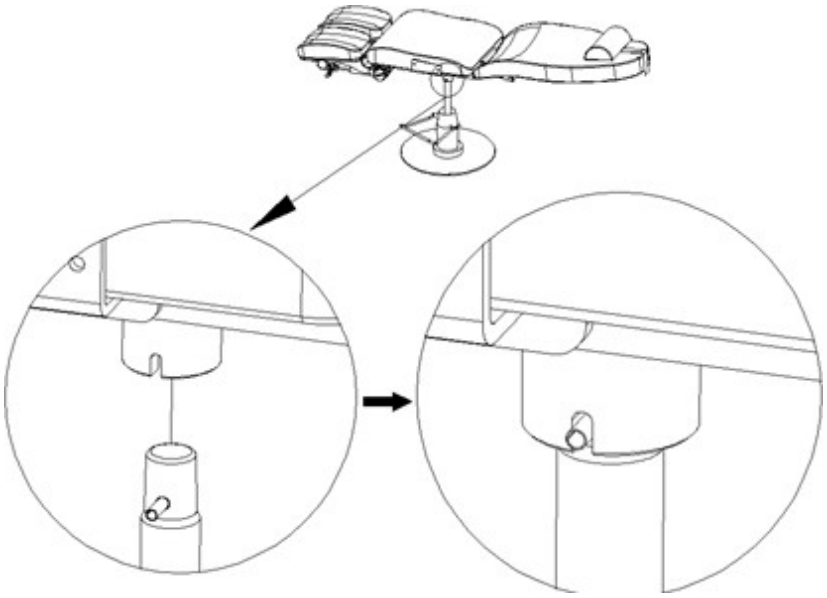

2. Igazítsa a háttámla rúdját a működtetőelemen lévő furathoz. Helyezze be a csavart a képen látható módon, majd rögzítse a bilinccsel.

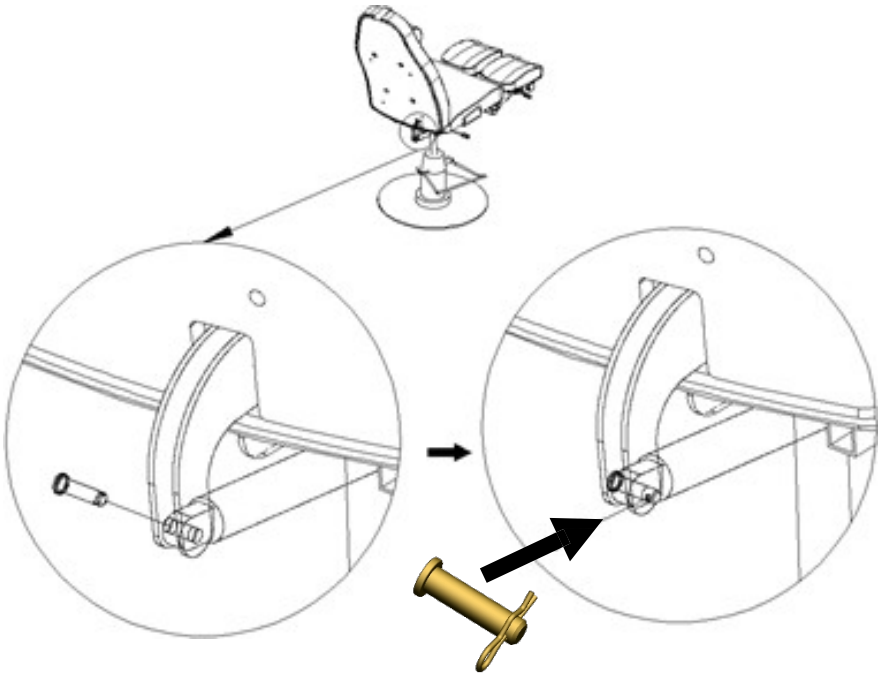


3. Szerelje fel a kartámaszokat az ábrán látható csavarok segítségével.

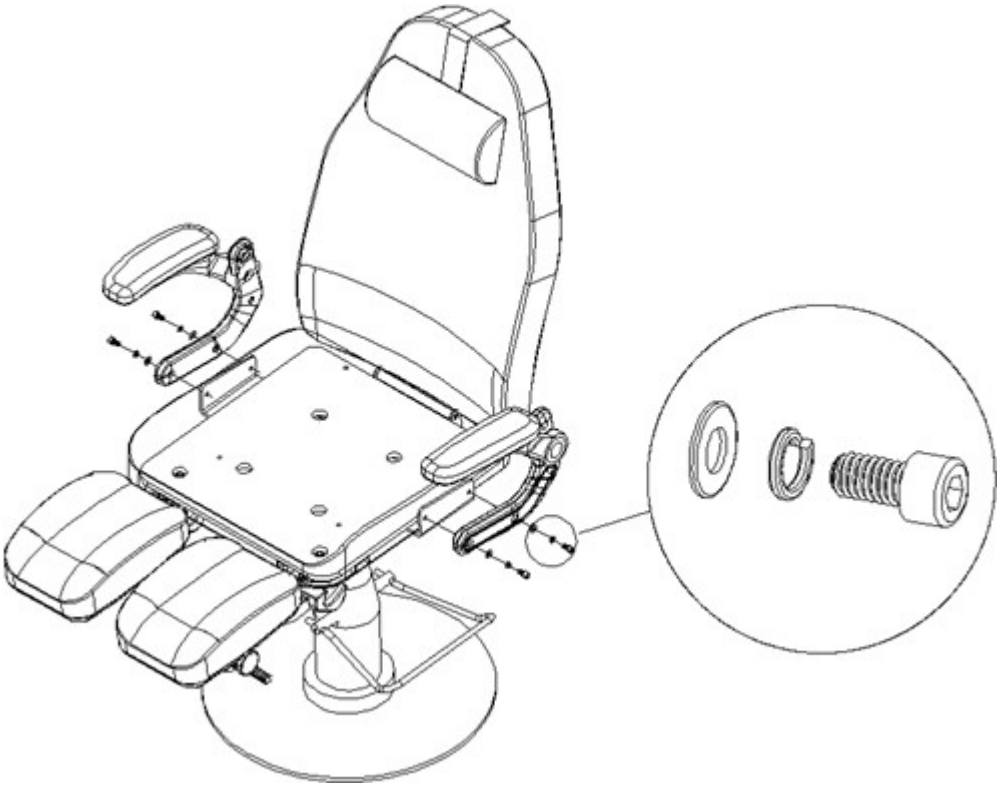


Funkciók:


1. Az ülésmagasság a kar segítségével állítható. A kar megemelése a
   Az ülés elforgatásának rögzítése, a kar megnyomásával az ülés leereszkedik.

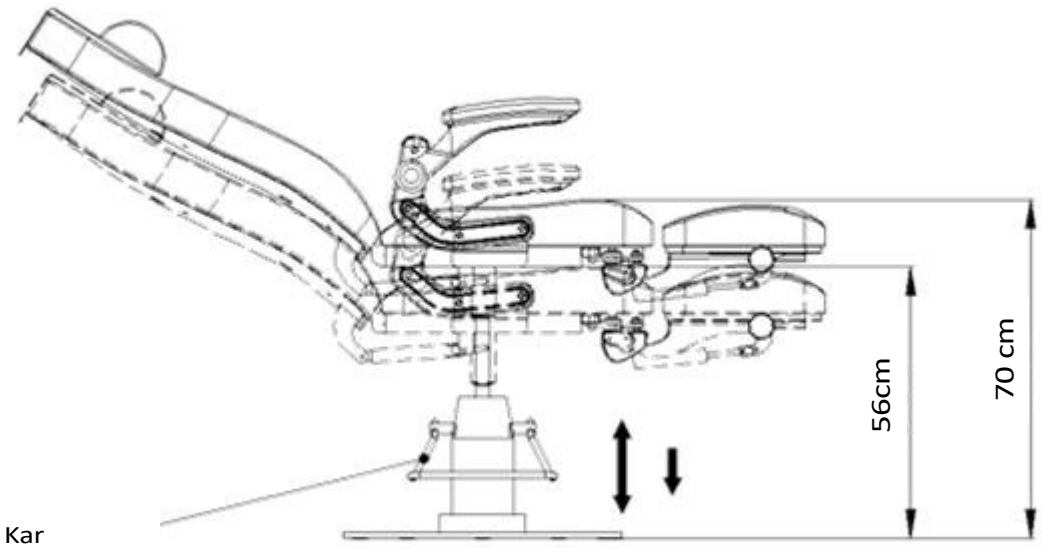

2. A háttámla dönthetőségéhez nyomja meg a kart, majd dőljön hátra, és a háttámla a megfelelő szögbe dönthető.
   A háttámla maximális dőlése 45 fok.

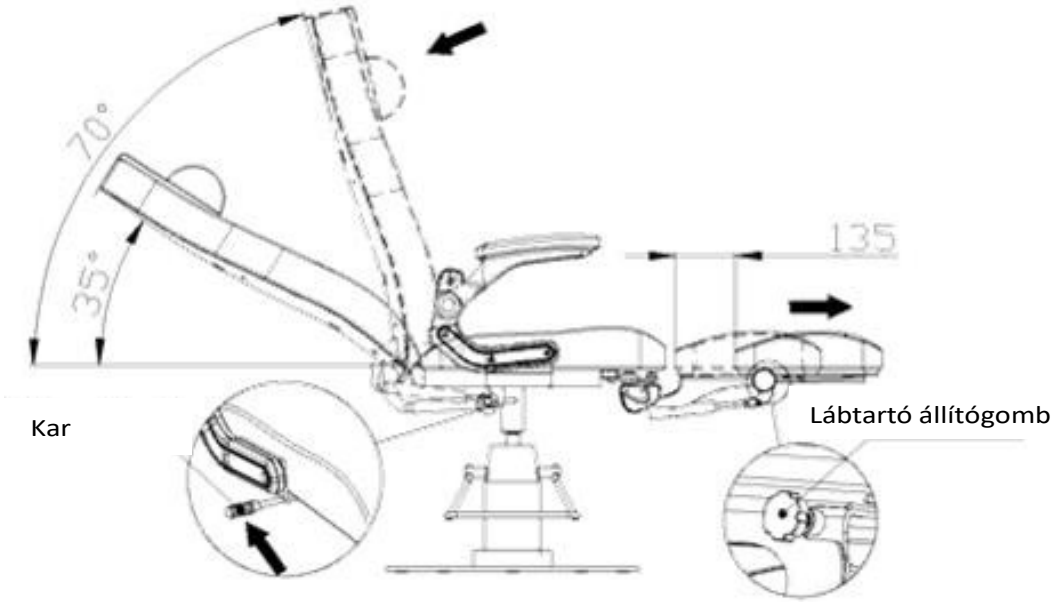


3. A lábtartó 30°-os, 60°-os vagy 90°-os állásban rögzíthető.

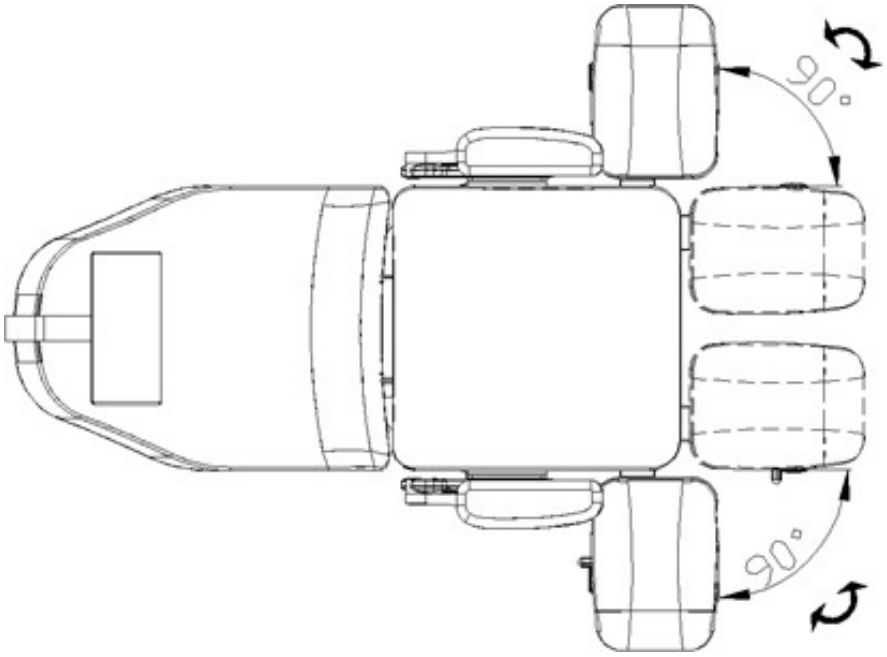

4. a) Használja a gombot, és ezzel egyidejűleg nyomja le a lábtartót, hogy a kívánt szögbe döntse. Döntési tartomány: 90°-ig.

   b) A kartámasz vízszintes és függőleges helyzetből állítható.

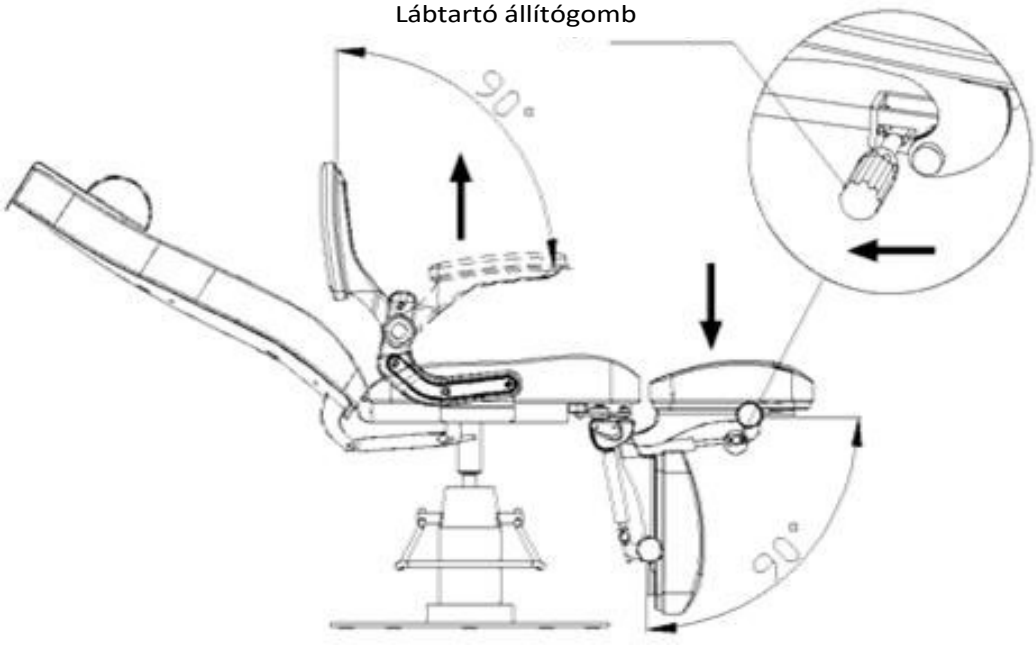

Vigyázat!

- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne játsszanak az ülés közelében.
- Ne tegye a kezét vagy lábát az ülés résébe.
- Ne tegye ki az ülést közvetlen napfénynek.
- Ne tolja vagy húzza a széket egyenetlen padlón.
- Ne álljon a székre.
- A széket nem használhatják fizikai korlátokkal, érzékszervi vagy mentális problémákkal küzdő személyek.

Tisztítás és karbantartás:

- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyagfelületek tisztításához törölje át őket nedves ruhával. A tisztításhoz nehezen hozzáférhető területeket vagy sarkokat egy kis kefével.
- Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acélfelületek

- A legjobb . tisztítás enyhe mosószeres oldattal. Ammónia és a legtöbb oldószer használható a kemény foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett. Ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Az ülés felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérüléseket vagy károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlő egységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Műszaki adatok:

- Maximális terhelés 150 kg
- Súly 56,5 kg
- PU/PVC bőr

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel - így, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik sérülés következhet be.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb m e g h i b á s o d á s esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozottan képzett személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a k ö r n y e z e t v é d e l m i szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.
Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.