ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Hidravlični podiatrični stol Azzurro 713A




Skeniranje za različne jezike

CE


Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Dimenzije stola:

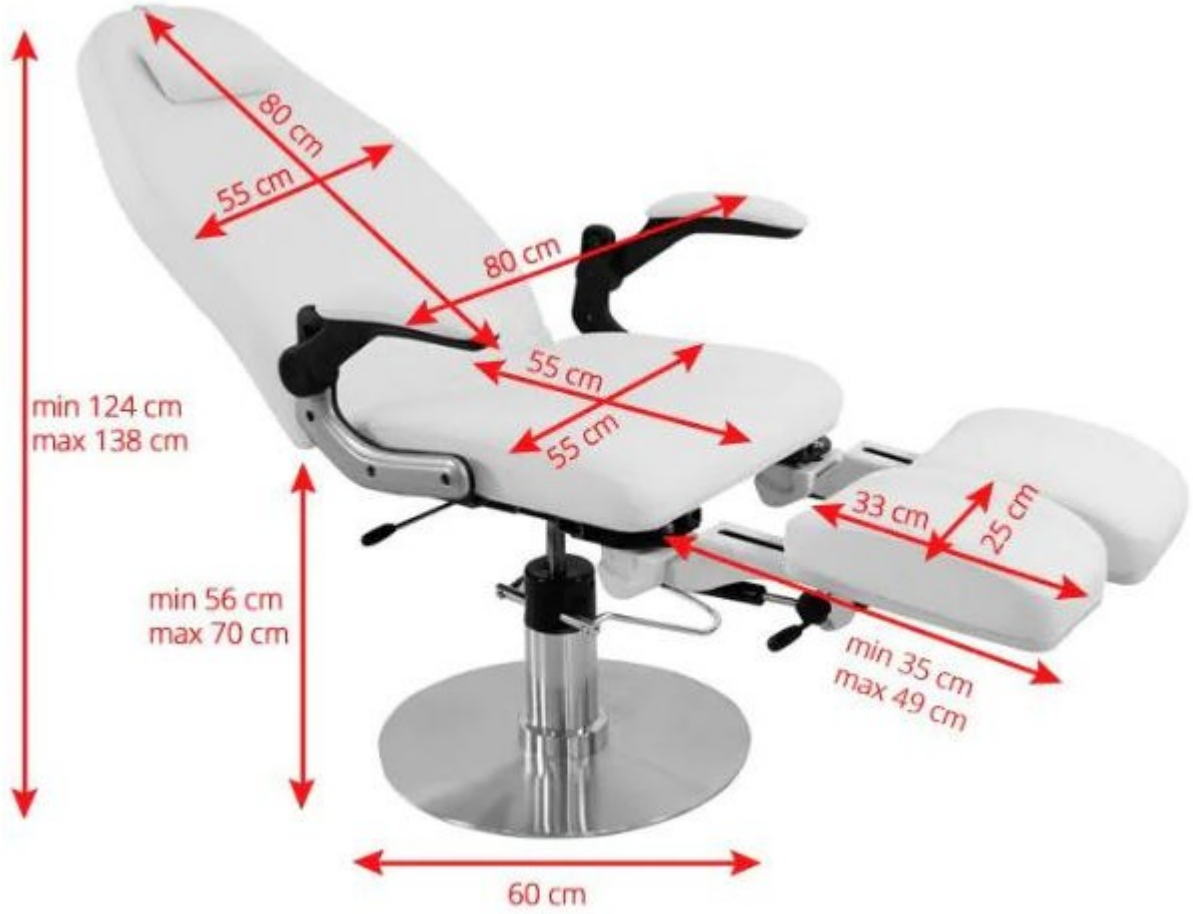


Sestavljanje:


1. Dvignite ročico pogona v najvišji položaj in jo nato namestite na steblo pogona, kot je prikazano na sliki.

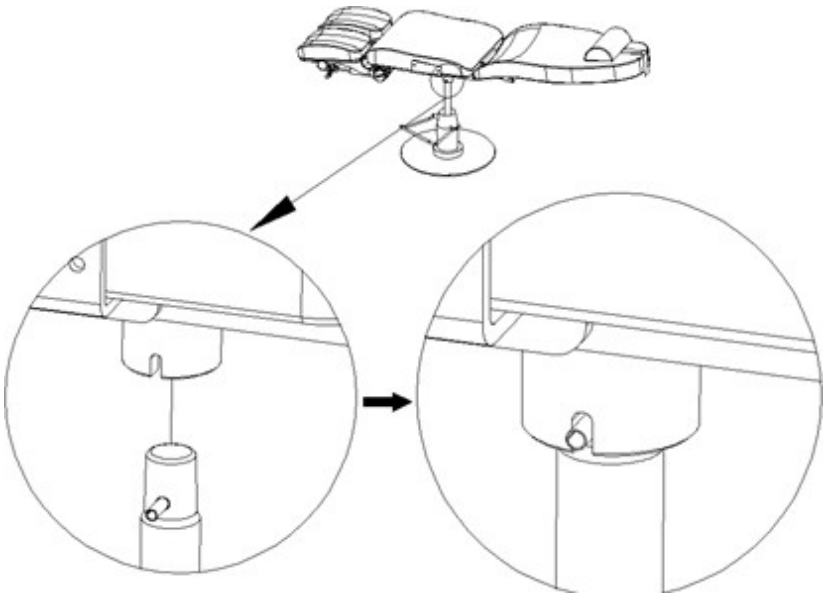

2. Naslonjalo za hrbet poravnajte z odprtino v aktuatorju. Vstavite vijak, kot je prikazano, in ga nato pritrdite z objemko.

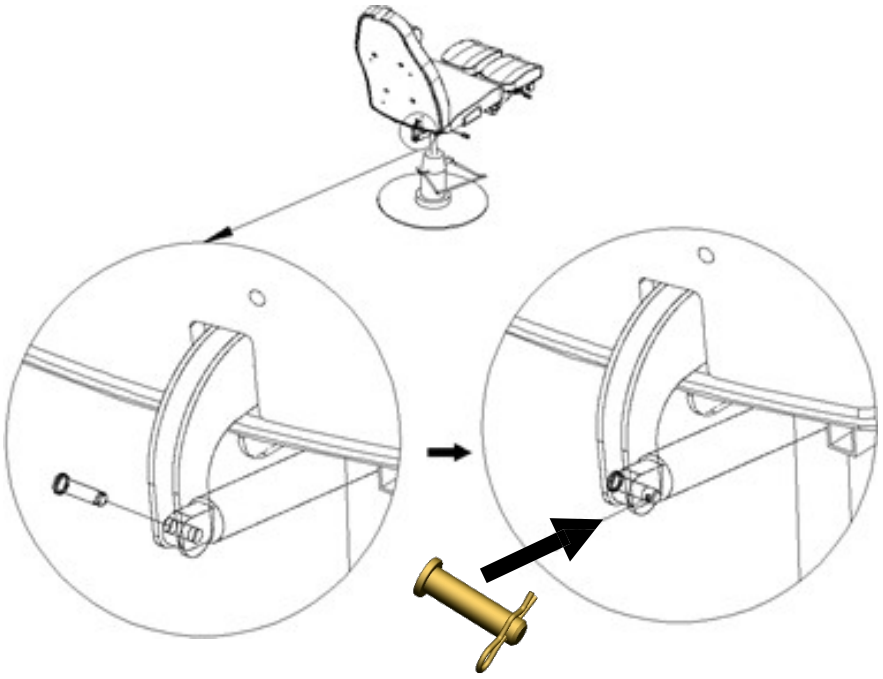


3. Naslonjala za roke pritrdite z vijaki, kot je prikazano na sliki.

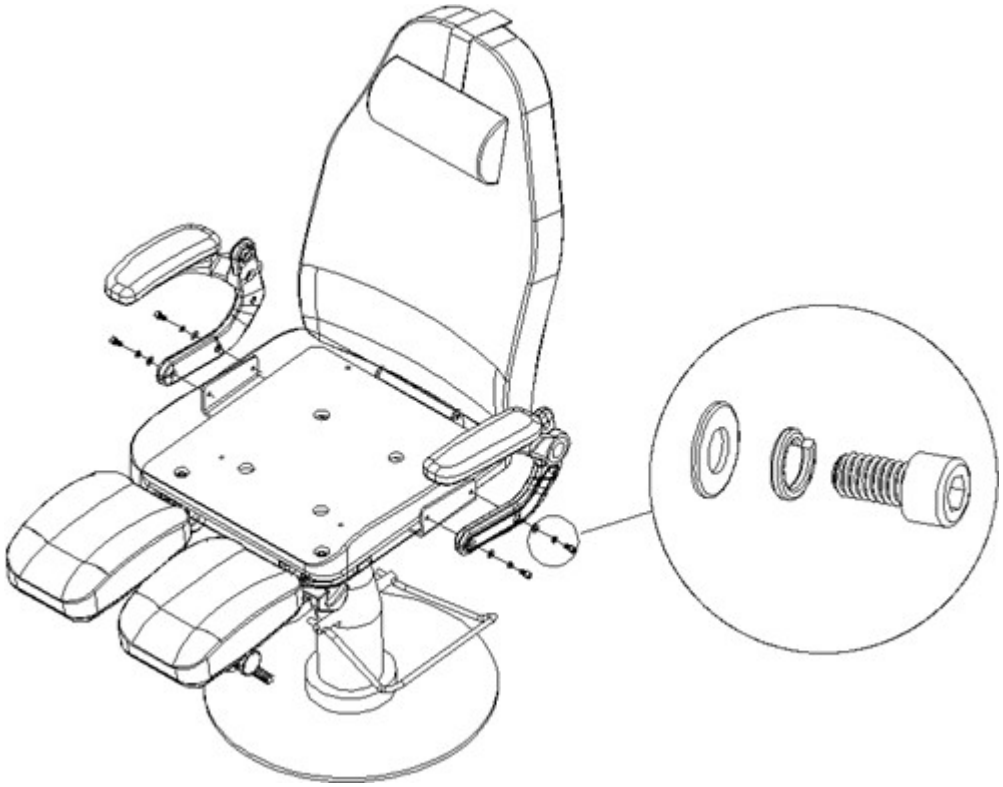


Funkcije:


1. Višino sedeža lahko nastavite z vzvodom. Dvig vzvoda povzroči
   Če blokirate vrtenje sedeža in pritisnete vzvod, spustite sedež.

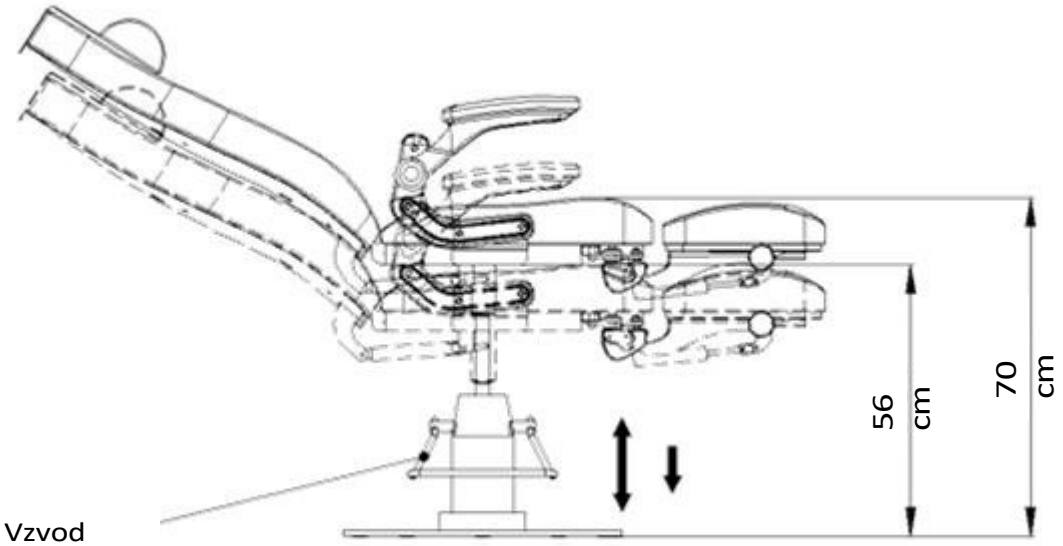

2. Za nagib naslonjala pritisnite vzvod in se nagnite nazaj, naslonjalo se bo nagnilo v primeren kot.
   Največji nagib naslonjala je 45 stopinj.

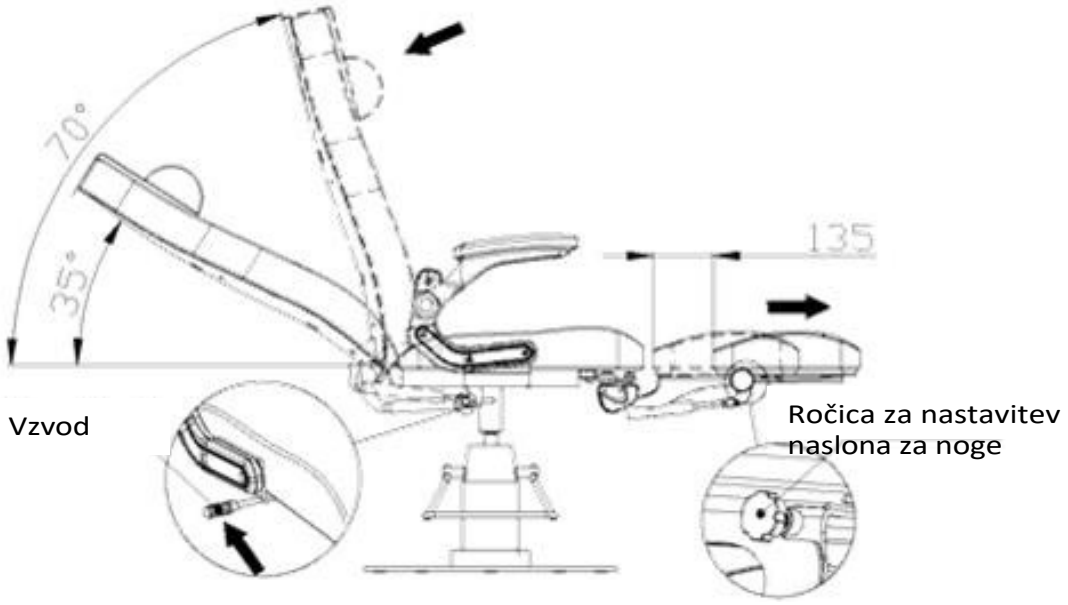


3. Podstavek za noge lahko zaklenete v položaju 30°, 60° ali 90°.

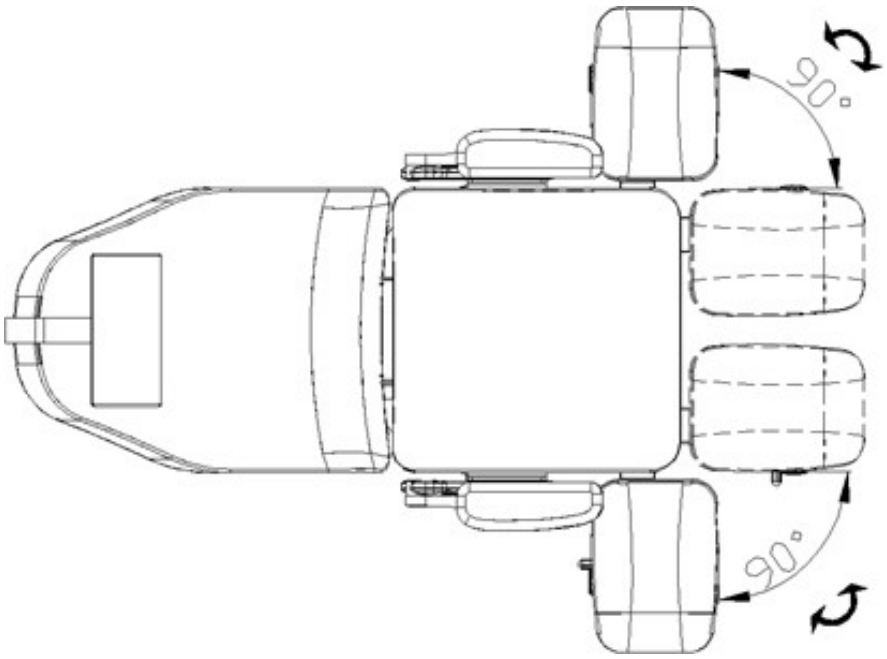

4. a) Z ročico in hkratnim pritiskom na naslon za noge ga nagnite v želeni kot. Razpon nagiba: do 90°.

   b) Naslonjalo za roke lahko nastavite iz vodoravnega v navpični položaj.

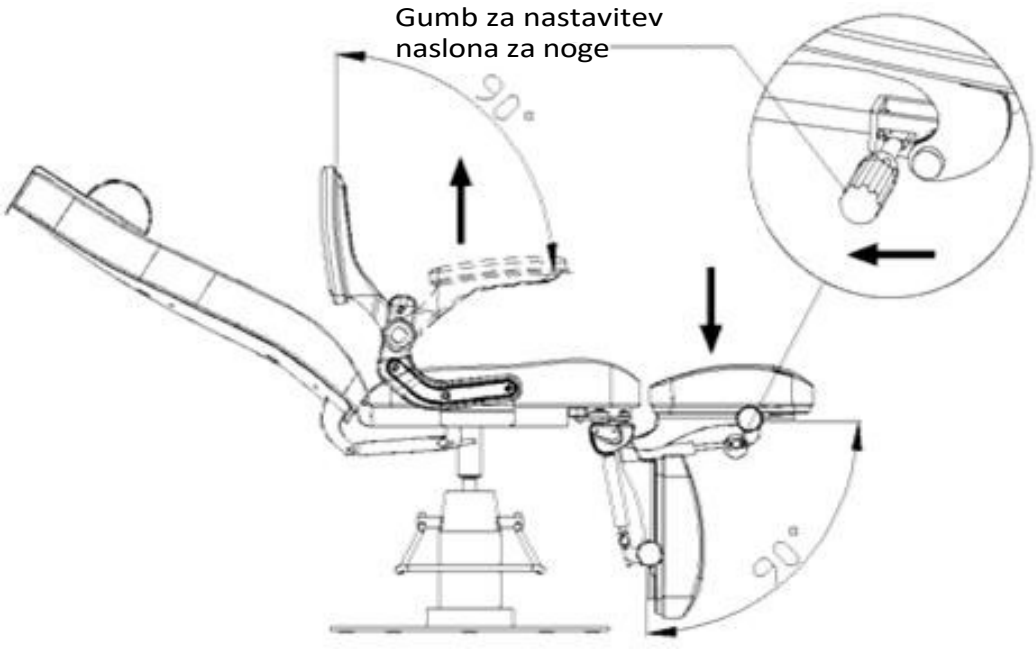

Opozorilo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini sedeža brez nadzora odrasle osebe.
- Ne polagajte rok ali nog v rege sedeža.
- Sedeža ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Stola ne potiskajte ali vlečite po neravnih tleh.
- Ne stojte na stolu.
- Stola ne smejo uporabljati osebe s fizičnimi omejitvami, senzoričnimi motnjami ali duševnimi težavami.

Čiščenje in vzdrževanje:

- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Temeljito razkuževanje je priporočljivo opraviti enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopna mesta ali vogale z majhno krtačko.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najboljši . čiščenje z blago raztopino detergenta. Amoniak in za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amonijak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti. Naprave ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

1. Popravila naj opravlja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogonsko/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščeno osebje.

Tehnični podatki:

- Največja obremenitev 150 kg
- Teža 56,5 kg
- PU/PVC usnje

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v enoto ne morejo priti tekočine.
4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeno servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje. lahko pride do poškodb.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajanje z električno energijo mora biti v skladu s specifikacijami, navedenimi na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na pooblaščenega servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu o k o l j a . Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in nato oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.
Izrabljene in stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.