ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik ACDS-300




Uvoznik:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Tehnični podatki:

Napetost	220-240 V 50 Hz
Moč	60 W
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Dimenzije posode	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Prostornina posode	800 ml
Najmanjši nivo tekočine	200 ml
Najvišji nivo tekočine	650 ml
Teža	1,27 kg
Časovnik	900 - 600 s

- Pred polnjenjem napravo izključite iz električnega omrežja. Ne prekoračite vrstice "MAX", da se izognete prevelikemu polnjenju.
- Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči puščanje in poškodbe.
- Ne uporabljajte pralnika, če je kabel ali vtič poškodovan. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
- Pralni stroj shranjujte na varnem, suhem mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Pralni stroj ne sme nikoli ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte ga med kopanjem.
- Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
- Pralnega stroja ne potapljajte v vodo, da se izognete električnemu udaru.
- Vodo je treba izlivati skozi prostor na pralnem stroju, ki je označen s puščico.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

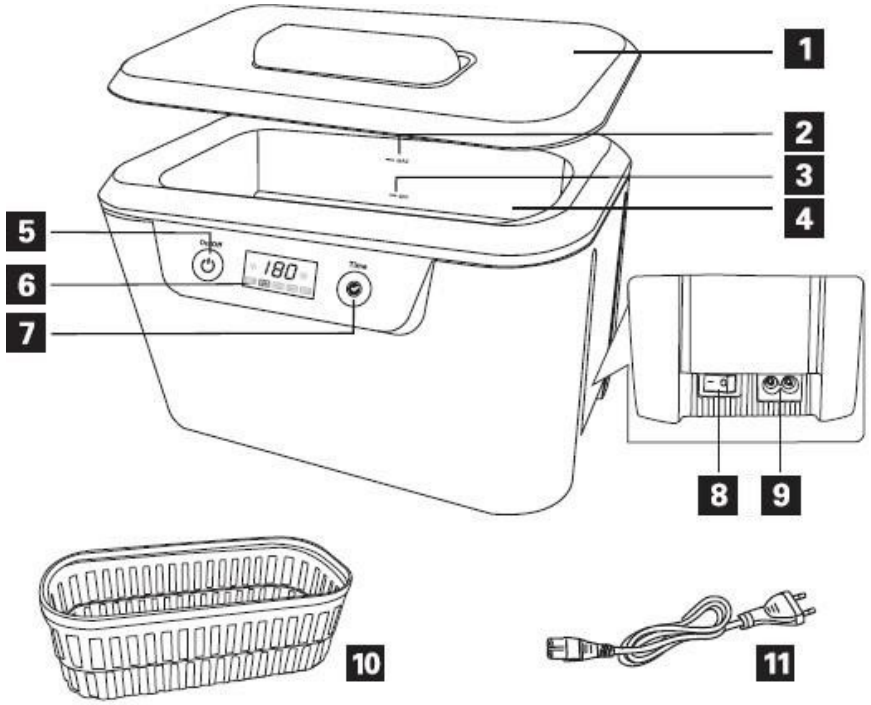

1. Pokrov
2. Linija najvišjega nivoja tekočine
3. Linija za minimalni nivo tekočine
4. Rezervoar
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Prikaz časa
7. Tipka za nastavitev načina
8. Stikalo za napajanje
9. Vtičnica za napajalni kabel
10. Košarica (neobvezno)
11. Napajalni kabel

SHRANJEVANJE IN ROKOVANJE



1. Ne vklapljajte pralnega stroja, če v njem ni vode. Vklop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenjujte pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj v mirovanju še nadaljnjih 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi vodo ali raztopino izlijte iz pralnega stroja. Dolgotrajno puščanje vode ali raztopine v pralnem stroju ga lahko poškoduje.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Vse ostanke vode ali raztopine takoj obrišite. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odstranite pokrov. Izdelke položite v košaro in nato v rezervoar pralnega stroja.
   Za ostre predmete, ki bi lahko poškodovali pralni stroj, obvezno uporabite košaro. Ne pozabite tudi, da košara absorbira 30-40 % energije ultrazvočnega čistilnika.

2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih želite očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.

3. Namestite pokrov in nato pralni stroj priključite na električno omrežje. Na zaslonu se prikaže 180.
   To je privzeti čas pranja za pralni stroj (v sekundah).

4. Izbrani čas nastavite s tipko za nastavitev časa.
   Možne izbire: 180 s, 300 s, 480 s, 90 s, 600 s.


5. Pralnik vklopite s stikalom. Začel se bo postopek pomivanja. Čas se bo odštel do 0.

6. Ko se na zaslonu prikaže nič, se pralni stroj samodejno ustavi.

7. Če želite čiščenje končati predčasno, pritisnite stikalo. Če želite cikel ponoviti ali podaljšati čas čiščenja, pritisnite gumb za nastavitev časa, izberite ustrezen čas in pritisnite stikalo, da ponovno zaženete napravo.

8. Po končanem čiščenju izključite napravo iz električnega omrežja in jo obrišite do suhega. Izlijte preostalo vodo in

9. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

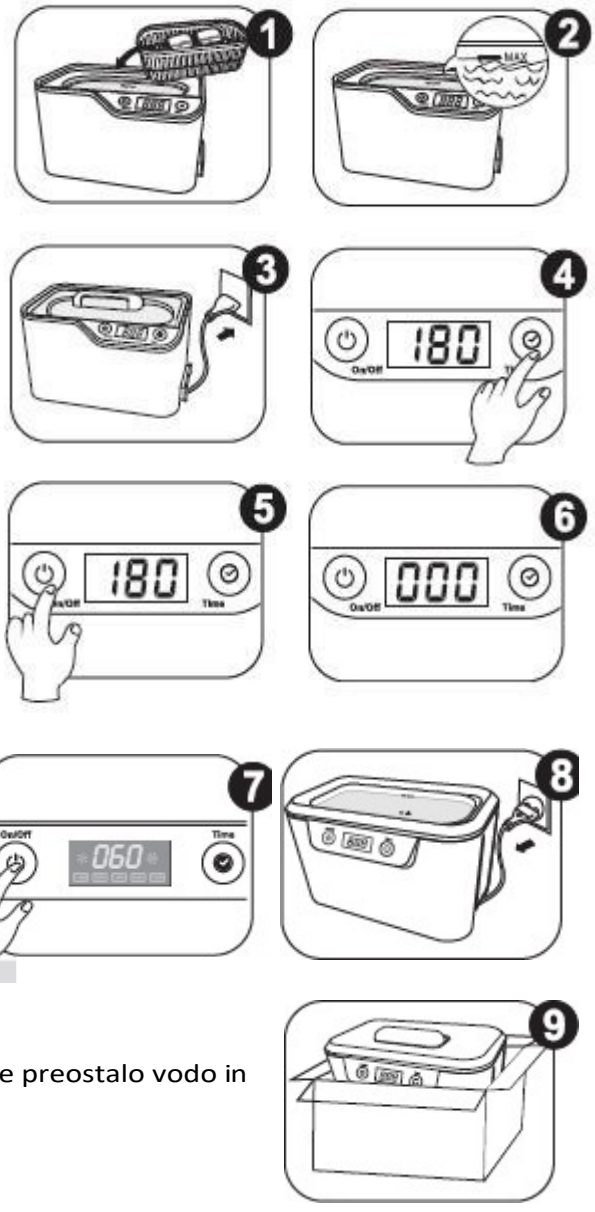

NAČINI ČIŠČENJA



1. Običajno pranje.
Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Po končanem delu vodo izlijte.



2. Pranje v raztopini
Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pri tem bodite previdni, da ne prekoračite dovoljene koncentracije raztopine. S tem lahko poškodujete tesnila v pralnici, kar lahko posledično povzroči poplavljanje elektronskih komponent. Ko končate, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato ostanke izlijte iz pralnega stroja. Tako boste preprečili poškodbe pralnega stroja zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.



3. Vmesno čiščenje

Pri pranju predmetov, ki zahtevajo posebne raztopine, je priporočljivo, da jih najprej položite v posodo in nato v rezervoar pralnega stroja. Nato vlijte vodo in čistilno raztopino, pri čemer ne smete preseči najvišje ravni tekočine. Napravo priključite v električno omrežje, izberite čas delovanja (priporočljivo je 10 minut) in pritisnite stikalo za zagon.

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Košara je najbolj primerna za čiščenje majhnih predmetov. Predmete položite v košaro in jo nato vstavite v rezervoar pralnega stroja. P o s k u s i t e zagotoviti, da predmeti ne pridejo v stik drug z drugim.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo ravna le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center družbe Activeshop Sp. z o.o:
    a) (a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno, nato pa jo je treba oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na

ustrezne zbirne točke, lahko pa jih oddate tudi podjetju Activeshop Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.