ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Kozmetické kreslo 557A s odkvapkávacími miskami




Dovozca:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie.

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že kreslo je funkčné.
3. Umístite kozmetické kreslo na miesto, kde bude používané.


Upozornenie! Deti a nezkušené osoby nesmú toto zariadenie používať. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery:

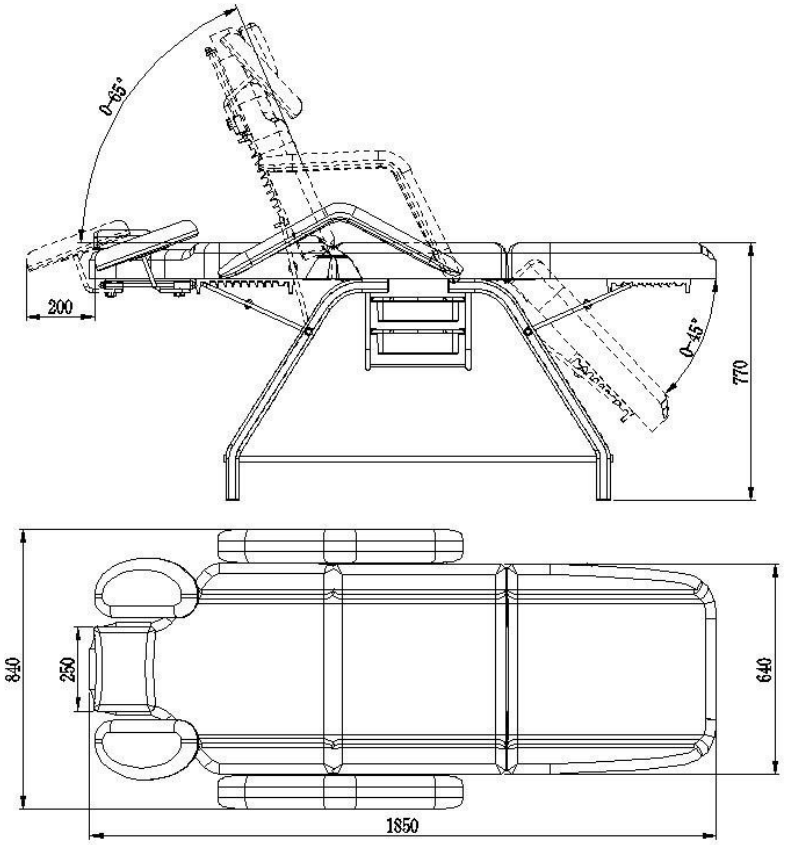


Návod na montáž zariadenia:


Namontujte rám kresla. Položte ležadlo na rovnú a stabilnú plochu a potom pripevnite rám kresla k ležadlu pomocou skrutiek. Postupne vložte: plochú podložku (1), potom spojku (2) a skrutku (3).

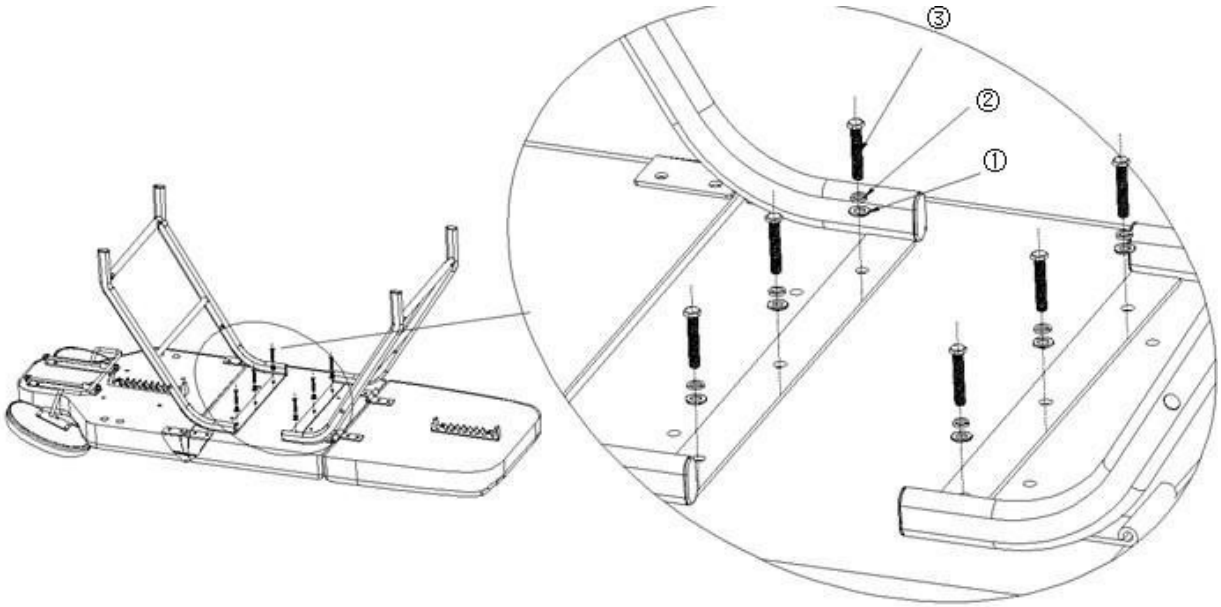


Namontujte držiak podnosu:
Nasaďte držiak podnosu na rám a pripevnite ho skrutkami.

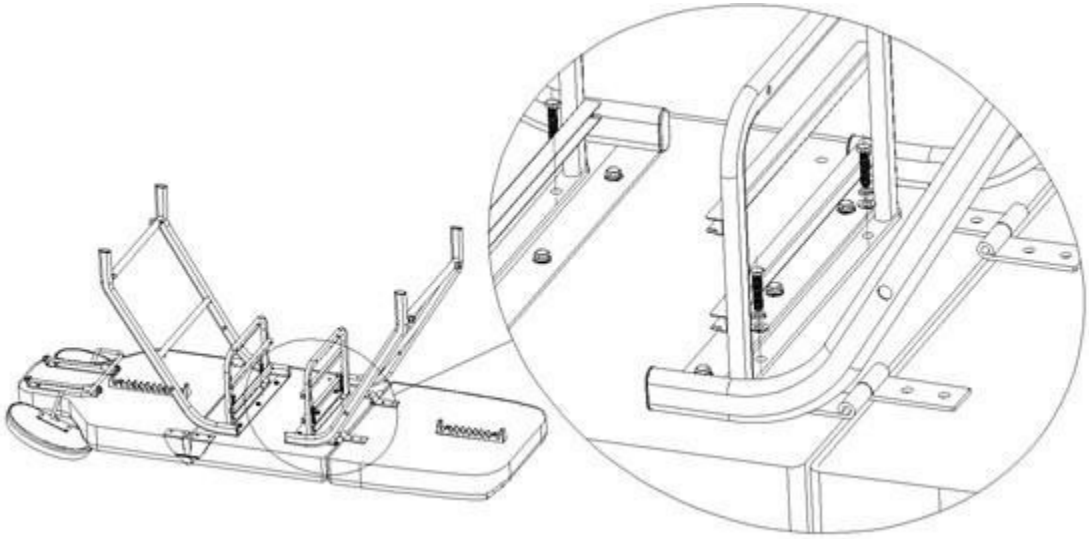


Potom spojte držiak podnosu so spojovacou rúrkou a dotiahnite ho skrutkami, ako je znázornené na obrázku nižšie.

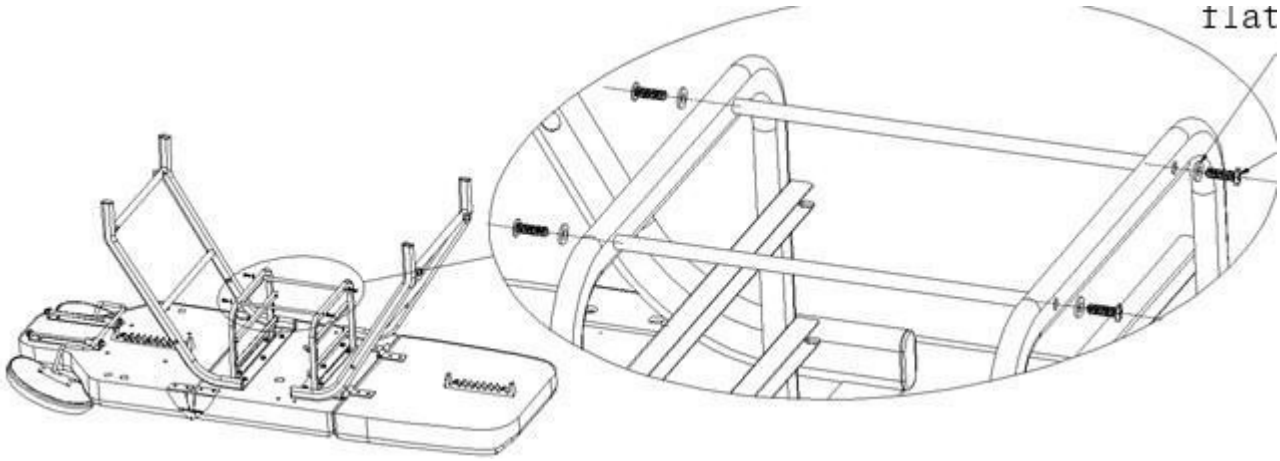

Pripevnite spojovaciu tyč rámu kresla: pripevnite spojovaciu tyč do 4 otvorov v nohách kresla pomocou skrutiek.

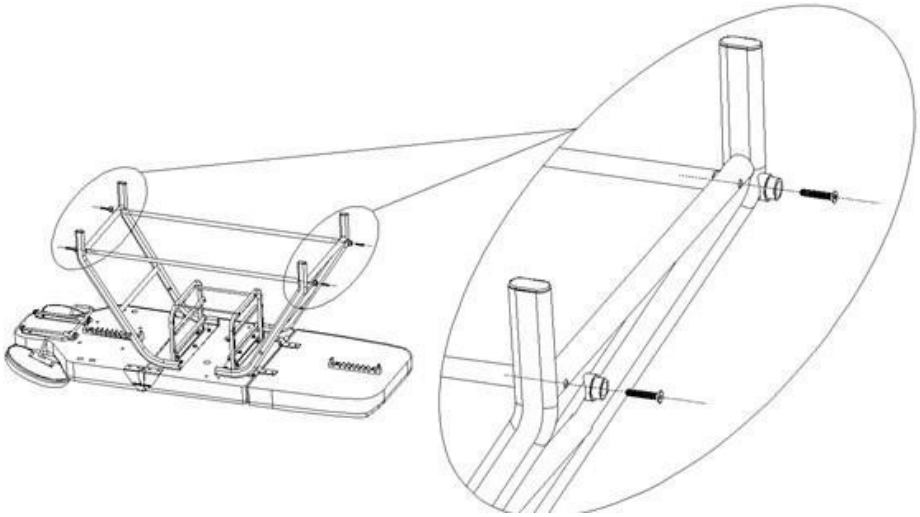


Namontujte ovládač operadla a opierky nôh na oboch stranách nôh kresla pomocou skrutiek (kratšia pružina pod operadlom a dlhšia pod opierkou nôh):

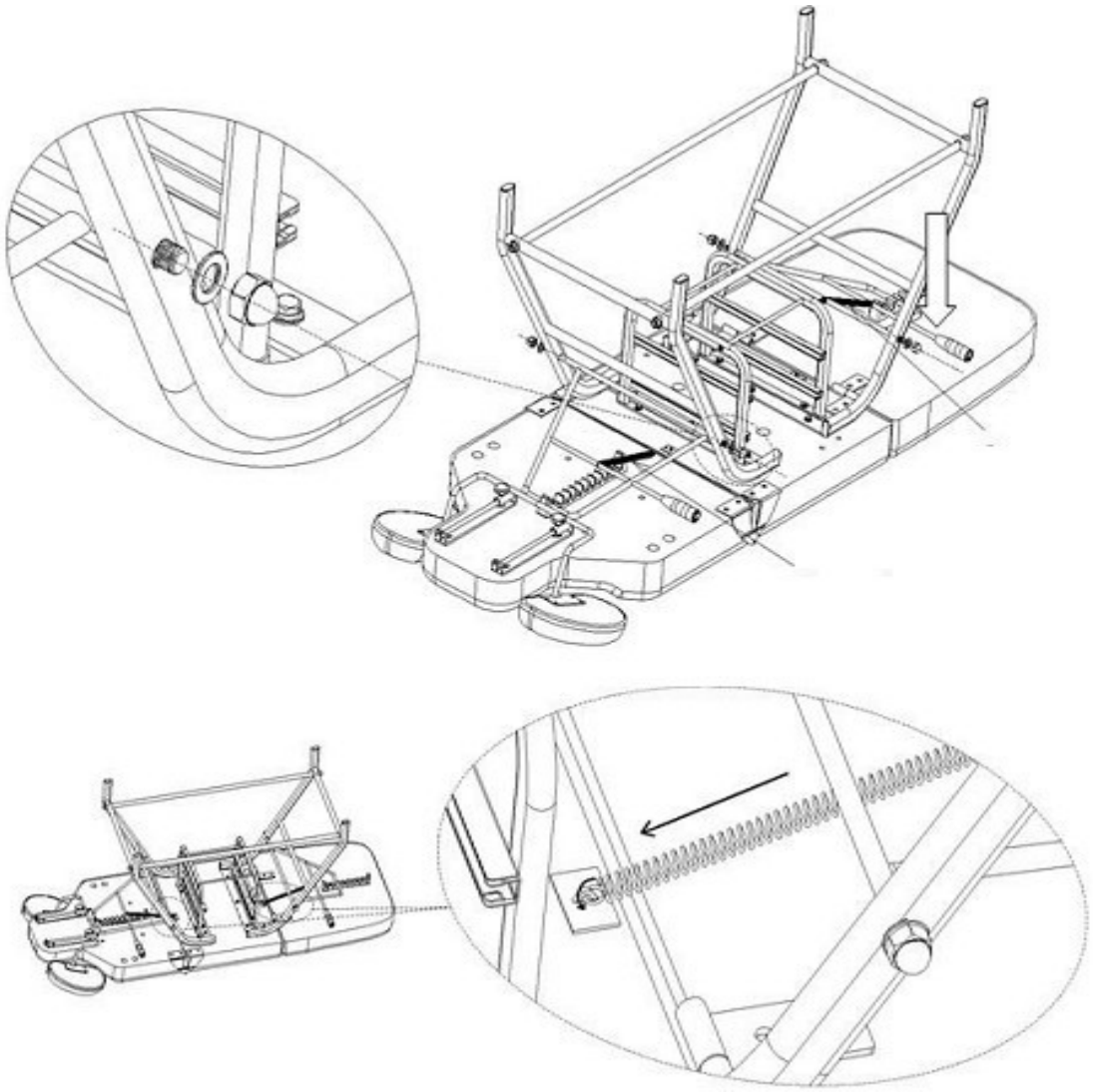

Namontujte otočný gombík na podrúčku:


Nasmerujte gombík do montážneho otvoru opierky ruky a dotiahnite ho v smere hodinových ručičiek.

Povolíte gombík, aby ste posunuli polohu opierky ruky, ako je znázornené na obrázku.

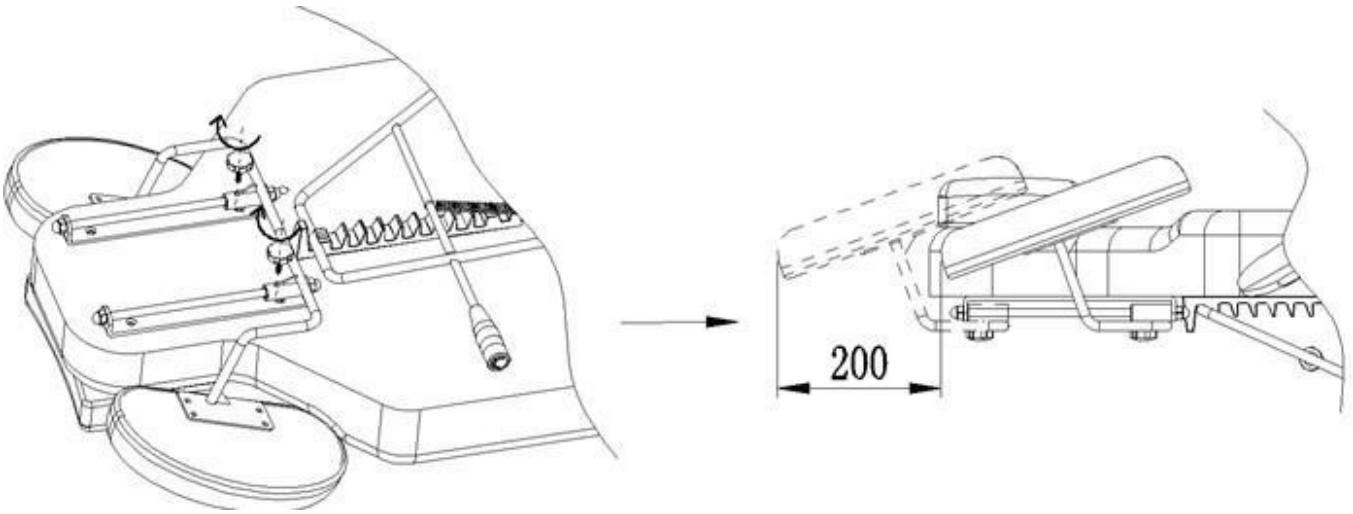


Inštalácia opierky ruky:

Zasuňte opierku ruky do otvoru na boku operadla. Opierka ruky by mala byť pevne upevnená. Otočte ju doprava alebo doľava, aby správne zapadla na miesto.

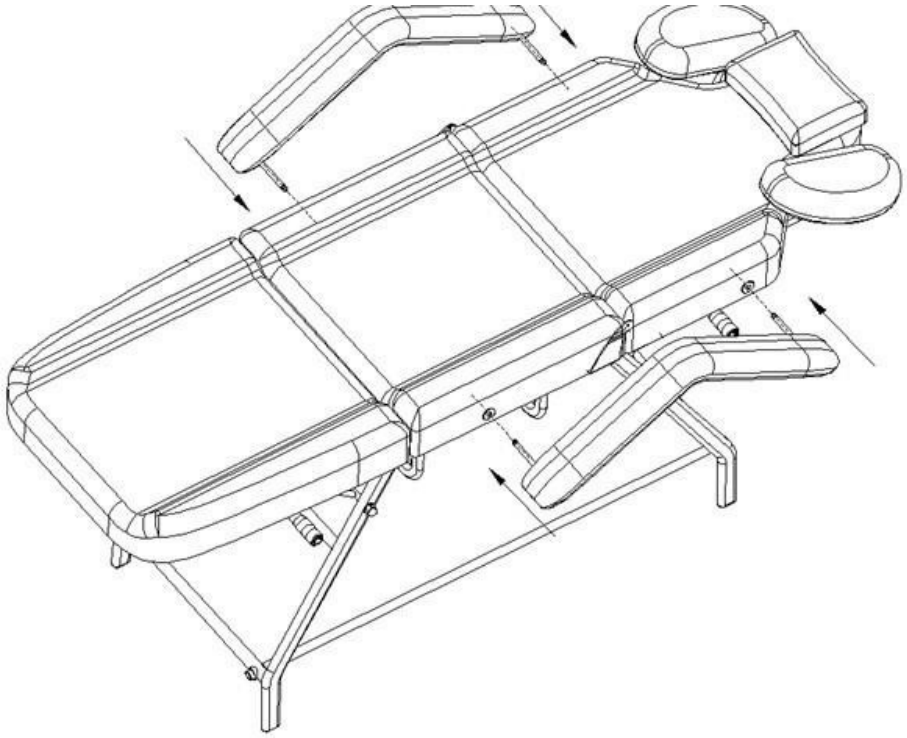

Nainštalujte zásobník podľa nižšie uvedenej fotografie. Zasuňte zásobník do vodiacich líšt nachádzajúcich sa pod sedadlom.

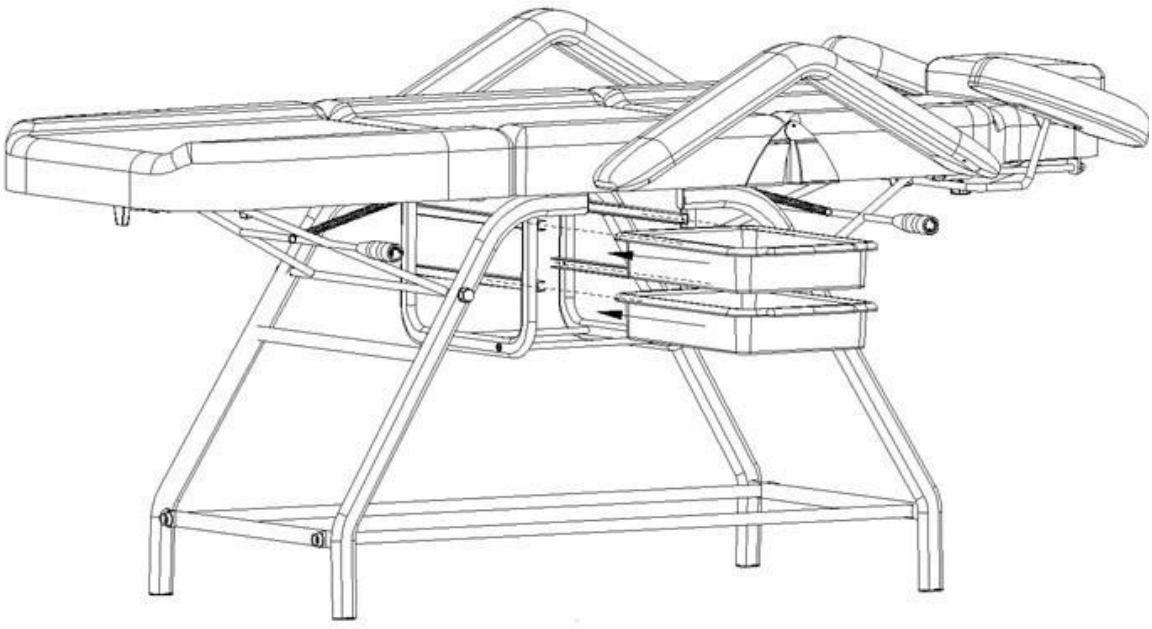

Funkcie sedadla:

1. Nastavenie opierky

Nastavenie uhla operadla a opierky na nohy je možné pomocou ručnej páky. Operadlo aj opierka na nohy majú samostatné páky, vďaka čomu je výška každej časti nastaviteľná samostatne. To umožňuje prispôsobiť nastavenie kresla individuálne potrebám klienta, aby bol vykonávaný zákrok čo najpohodlnejší. Kreslo je možné sklopiť až do polohy ležadla.

Ak chcete zdvihnúť operadlo, uchopte páku, zdvihnite ju nahor a nastavte na požadovanú výšku.

2. Spúšťanie operadla
   Podržte operadlo kresla a druhou rukou uchopte rukoväť páky a posúvajte ju nadol, až kým nedosiahnete požadovanú polohu. Po dosiahnutí požadovanej výšky páku pusťte.



Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

• Aby ste udržali povrch kresla v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť. Nezabudnite kreslo po každom použití vyčistiť a dezinfikovať. Odporúča sa vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

• Na čistenie kovových a plastových povrchov a ovládacích prvkov ich utrite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko dostupných miest alebo rohov sa dobre hodí malá kefka. Nepoužívajte príliš veľké množstvo čistiaceho prostriedku. Následne zariadenie dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

• Najlepšie je čistiť jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Amoniak a väčšina rozpúšťadiel sa môžu použiť na odstránenie odolných škvŕn. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo chrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné trysky (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokej teplote a vysokej vlhkosti vzduchu, nevystavujte zariadenie podmienkam, ktoré môžu viesť k znečisteniu tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch kresla

• Povrch kresla rovnomerne utrite špeciálnym prostriedkom na čistenie kože a následne ho pretrite čistou, mäkkou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálnym vybavením určeným na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným kozmetickým personálom umožňuje predísť nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie nesmie byť inštalované ani obsluhované v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo s mokrými rukami – aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel bol poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bolo poškodené jeho puzdro.

5. Na káble sa nesmú klásť žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie inštalovať na miestach, kde by niekto mohol šliapnuť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvoru v zariadení nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej fungovania zariadenia, jeho poškodenia alebo dokonca spálenia.

POZNÁMKA:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli súvisiace riziká zrozumiteľné.
3. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú so zariadením hrať.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.

5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Použité elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly je potrebné odovzdať do zariadení na recykláciu surovín v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do kontajnerov na domový odpad . Je potrebné postupovať v súlade s pravidlami týkajúcimi sa likvidácie tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné vyraďované elektrické zariadenia zbierať oddelene a následne odovzdať do zberných miest pre vyraďované elektronické a elektrické zariadenia. Na konci životnosti, ako aj staré zariadenia obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na opätovné spracovanie. Preto je potrebné ich odovzdať do príslušných zberných miest, ako aj do spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výlučne v originálnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Prevádzková teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.