ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Azzurro 803D 3 motory




Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.


Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry přístroje:

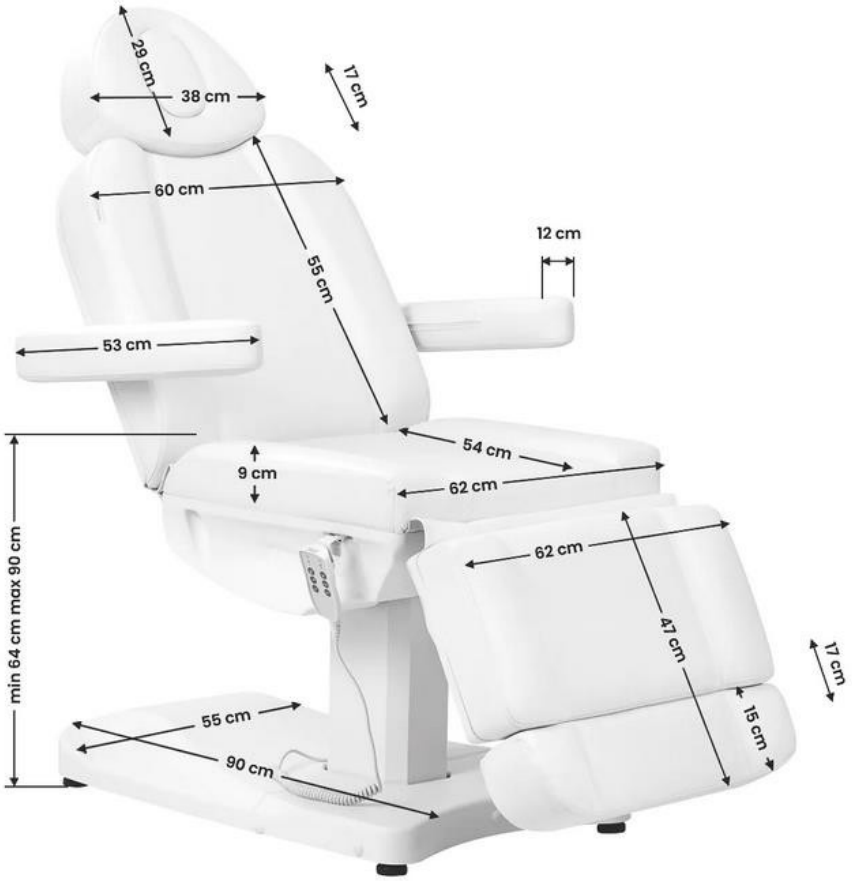



Konstrukce přístroje:

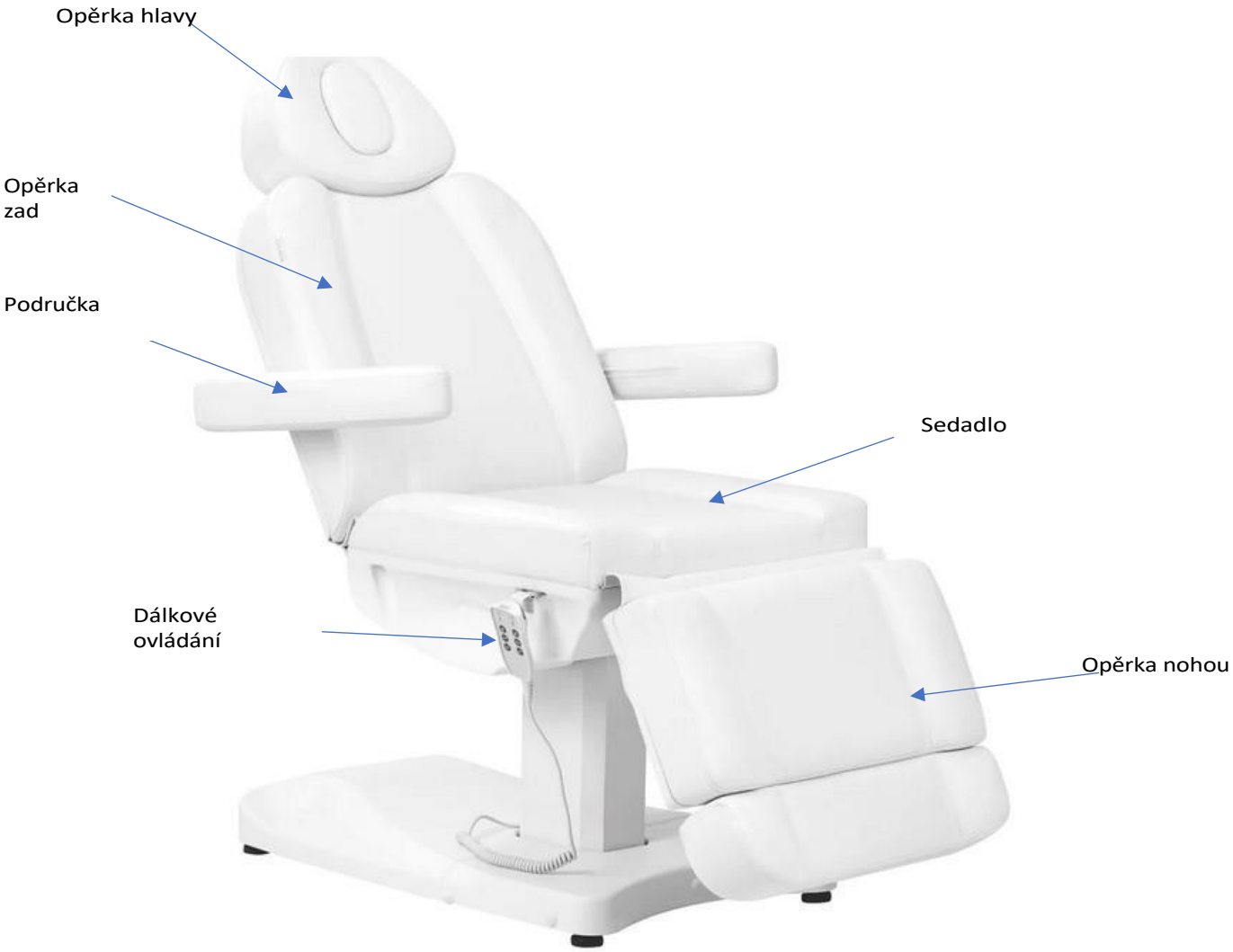

Upozornění:

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou a nohou.
3. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Upozornění:


1. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
2. Napájecí kabel k jednotce nepřivazujte. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v nouzové situaci snadno vyjmout.
3. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
5. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
6. Pod křeslo neumisťujte žádné předměty.
7. Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor, aby bylo možné křeslo volně skládat a rozkládat.

8. Ujistěte se, že v okolí sedadla nejsou žádné ostré nebo nebezpečné předměty, které by mohly přístroj poškodit.
9. Zařízení sami neupravujte. Pokud křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.


Křeslo má možnost ručního ovládání pomocí dálkového ovladače i možnost nožního ovládání. Výšku křesla, polohu opěradla a podnožky lze nastavit podle potřeby.

Funkce dálkového ovládání:

1. Nastavení výšky sedadla (v rozmezí 64-90 cm)
2. Nastavení opěradla
3. Nastavení podnožky

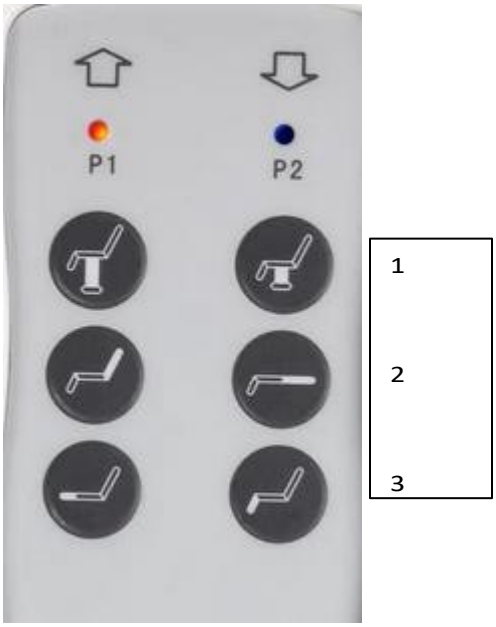


Funkce nožního ovládání:

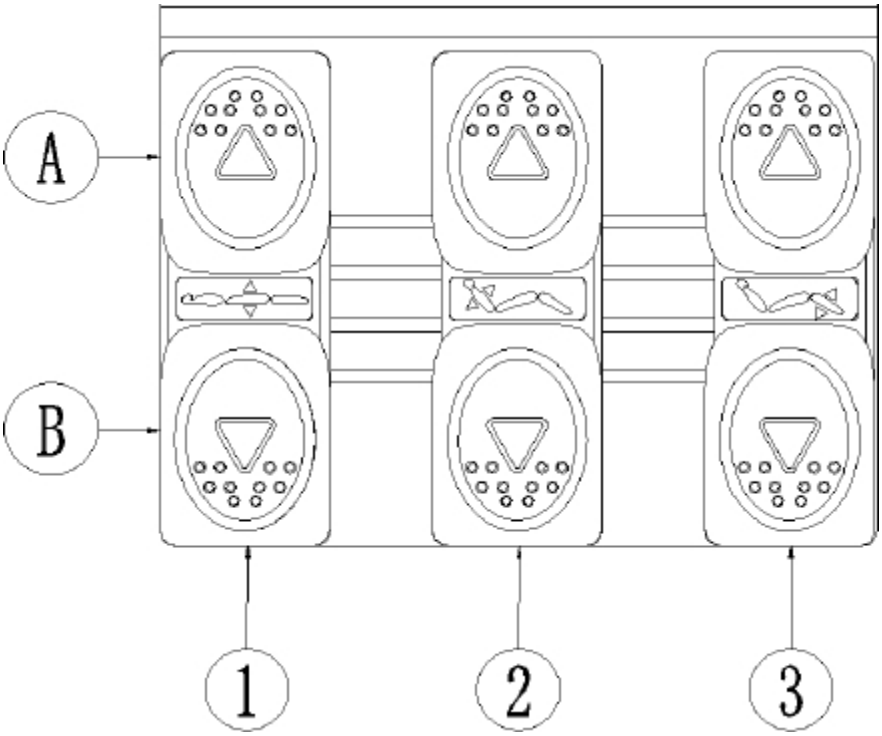

1. Nastavení výšky sedadla. Stisknutím tlačítka A zvýšíte sedadlo nebo stisknutím tlačítka B sedadlo snížíte.
2. Nastavení polohy opěradla. Stisknutím tlačítka A zvýšíte polohu opěradla nebo stisknutím tlačítka B snížíte polohu opěradla.
3. Nastavení opěrky nohou. Stisknutím tlačítka A opěrku nohou zvýšíte nebo stisknutím tlačítka B opěrku nohou snížíte.

Prodloužení opěrky nohou

Křeslo má také možnost prodloužení opěrky nohou, což usnadňuje provádění ošetření u vyšších osob a zvyšuje pohodlí. Maximální délka prodloužení podnožky je přibližně 17 cm. Podnožka se nastavuje pomocí knoflíku na spodní straně podnožky.

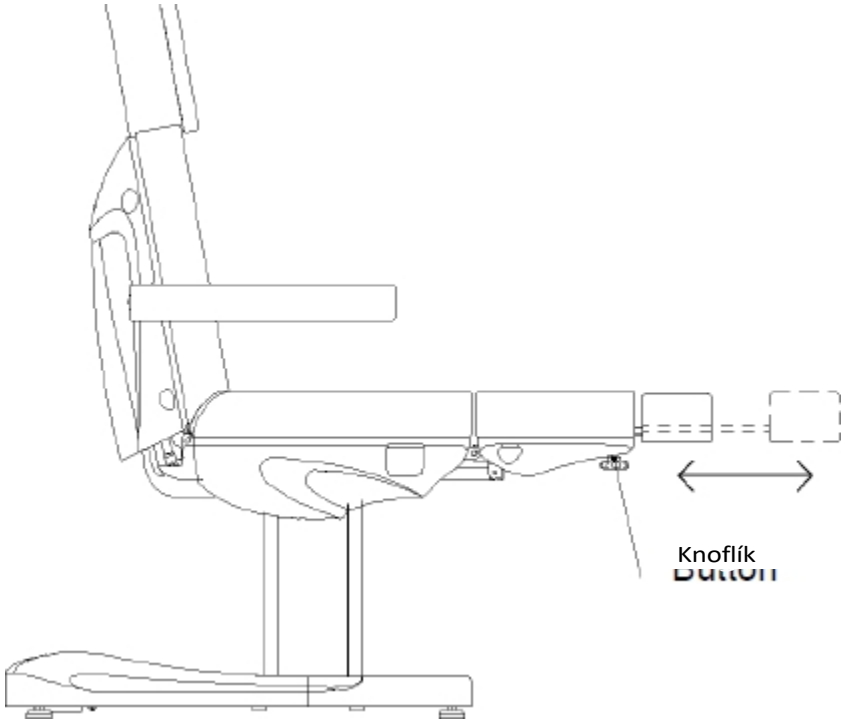


Instalace područky:

Zasuňte područku do otvoru umístěného na boku opěradla. Područka by měla být pevně připevněna. Posuňte ji doprava nebo doleva tak, aby správně zapadla na své místo. Totéž proveďte s druhou loketní opěrkou. Loketní opěrka je kolmá k zemi (bez ohledu na úhel sedadla). Lze ji otočit o 180°.

Instalace opěrky hlavy:

Zasuňte opěrku hlavy do otvoru v horní části opěradla sedadla. Když je opěrka hlavy ve správné výšce, utáhněte kliku umístěnou na opěradle, abyste opěrku hlavy zajistili.
Chcete-li opěrku hlavy snížit nebo prodloužit, vyšroubujte kliku, nastavte opěrku hlavy a kliku utáhněte.

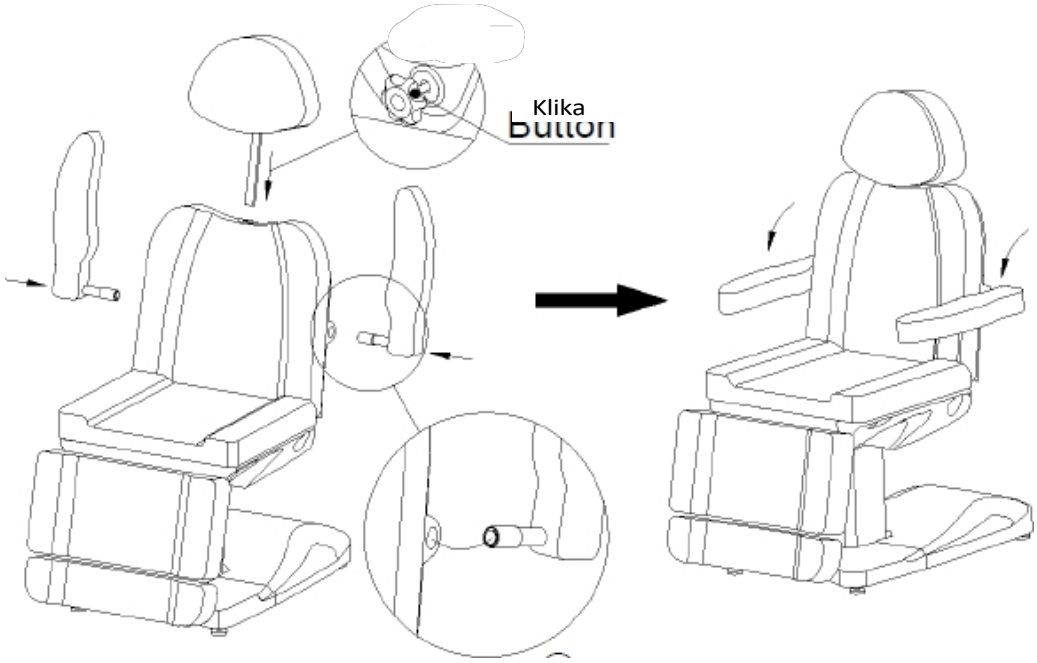

Čištění a dezinfekce jednotky:

Před čištěním odpojte jednotku od sítě.

Aby byl povrch sedačky v dobrém stavu, je třeba ji pravidelně čistit. Nezapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Jednotku nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a n e v y s t a v u j t e ji podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.

4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.
Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Způsob řešení
Žádná odezva při stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači	1. Tlačítko napájení se aktivuje nebo neaktivuje. 2. Zkontrolujte, zda je pedál sešlápnutý na maximum. 3. Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do sítě. 4. Zkontrolujte, zda je vše správně připojeno.	1. Zkuste znovu spustit tlačítko napájení. 2. Zkuste zapnout ostatní tlačítka a zjistěte, zda fungují. 3. Odpojte zařízení od sítě a znovu jej zapojte. 4. Odpojte zástrčky a znovu je zapojte.
Zařízení vydává podivné zvuky	Uvolněný šroub	Utáhněte šrouby

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče vnikla kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.

7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrozařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odvážena na sběrná místa pro sběrných zařízení pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.