ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Azzurro 803D elektrischer Kosmetikstuhl 3 Motoren




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.


Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

Abmessungen des Geräts:

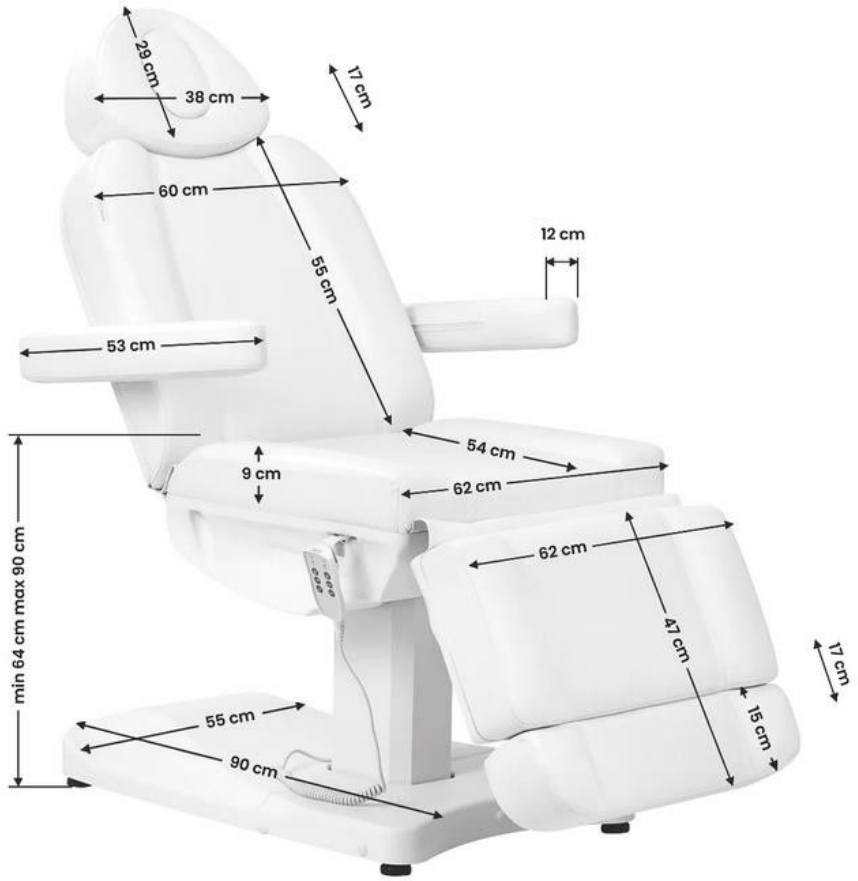



Aufbau des Geräts:

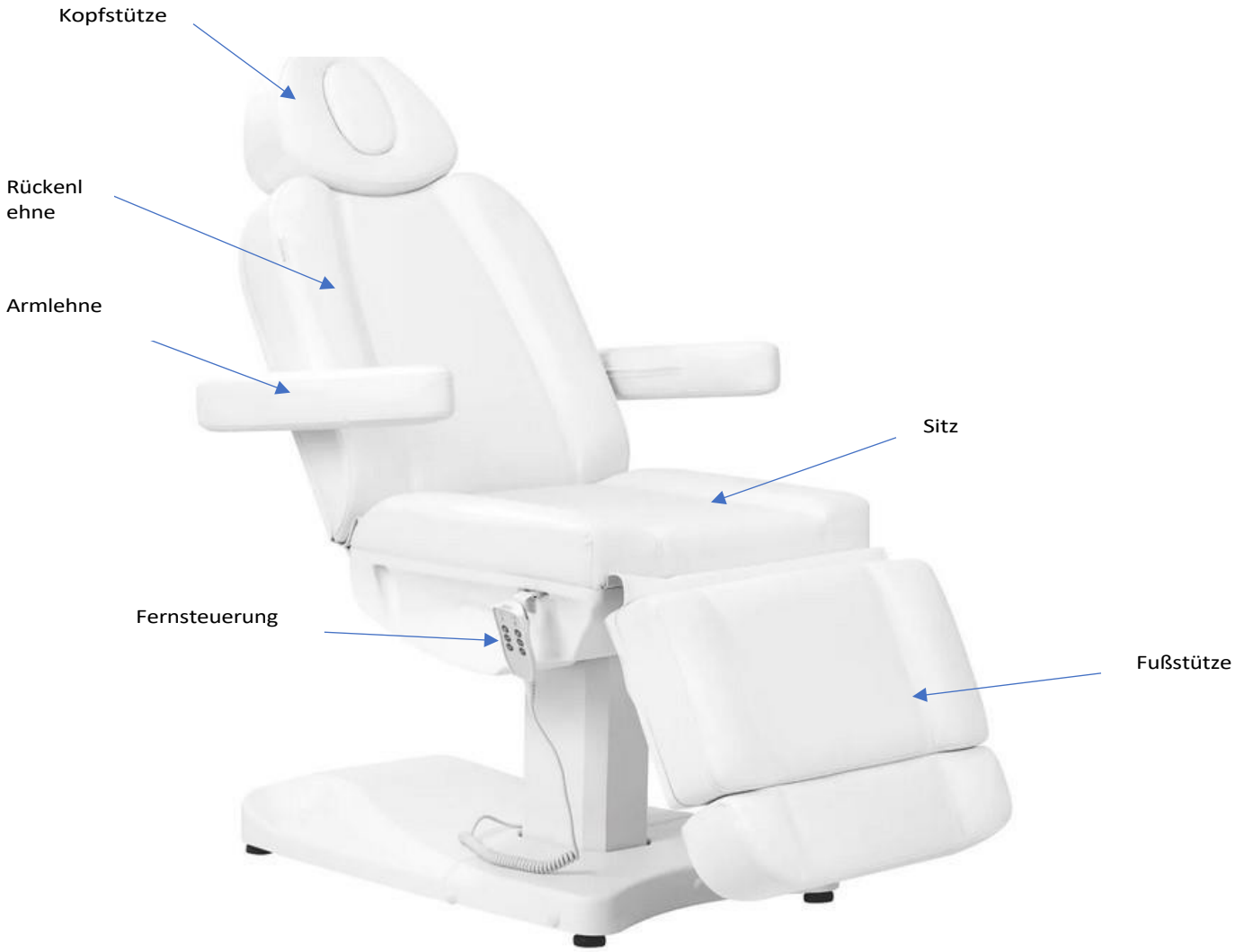

Achtung!

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne und die Fußstütze.
3. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

Vorsicht


1. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
2. Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in einer Notsituation leicht entfernt werden kann.
3. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie den elektrischen Kosmetiksessel bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Sessels eingeklemmt wird.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie sofort das Kabel ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
5. Lassen Sie die Fernbedienung nicht von einer Person bedienen, die nicht an der Behandlung teilnimmt.
6. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
7. Achten Sie darauf, dass um den Sessel herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er frei ein- und ausgeklappt werden kann.

8. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Sitzes keine scharfen oder schädlichen Gegenstände befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
9. Nehmen Sie keine eigenen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Sessel nicht richtig funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.


Der Sessel verfügt über eine manuelle Steuerungsmöglichkeit mit der Fernbedienung sowie über eine Fußsteuerung. Die Höhe des Sessels, die Position der Rückenlehne und der Fußstütze können nach Bedarf eingestellt werden.

Funktionen der Fernbedienung:

1. Sitzhöhenverstellung (zwischen 64-90 cm)
2. Einstellung der Rückenlehne
3. Einstellung der Fußstütze

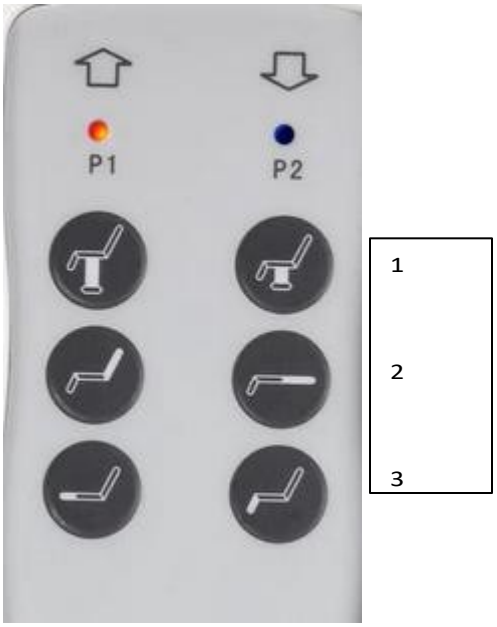


Funktionen der Fußsteuerung:

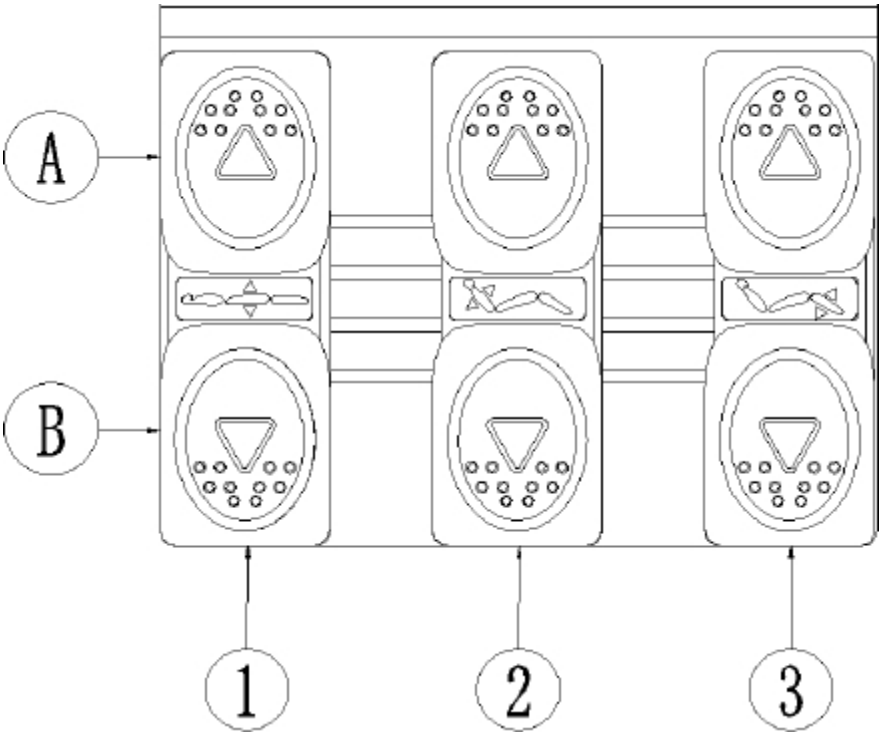

1. Einstellen der Sitzhöhe. Drücken Sie A, um den Sitz anzuheben, oder B, um den Sitz abzusenken.
2. Einstellen der Rückenlehnenposition. Drücken Sie A, um die Rückenlehne anzuheben, oder B, um die Rückenlehne abzusenken.
3. Einstellen der Fußstütze. Drücken Sie A, um die Fußstütze anzuheben, bzw. B, um die Fußstütze abzusenken.

Fußstützenverlängerung

Der Stuhl bietet auch die Möglichkeit, die Fußstütze zu verlängern, was die Behandlung größerer Personen erleichtert und den Komfort erhöht. Die maximale Länge der Fußstützenverlängerung beträgt ca. 17 cm. Die Fußstütze wird mit einem Drehknopf an der Unterseite der Fußstütze eingestellt.

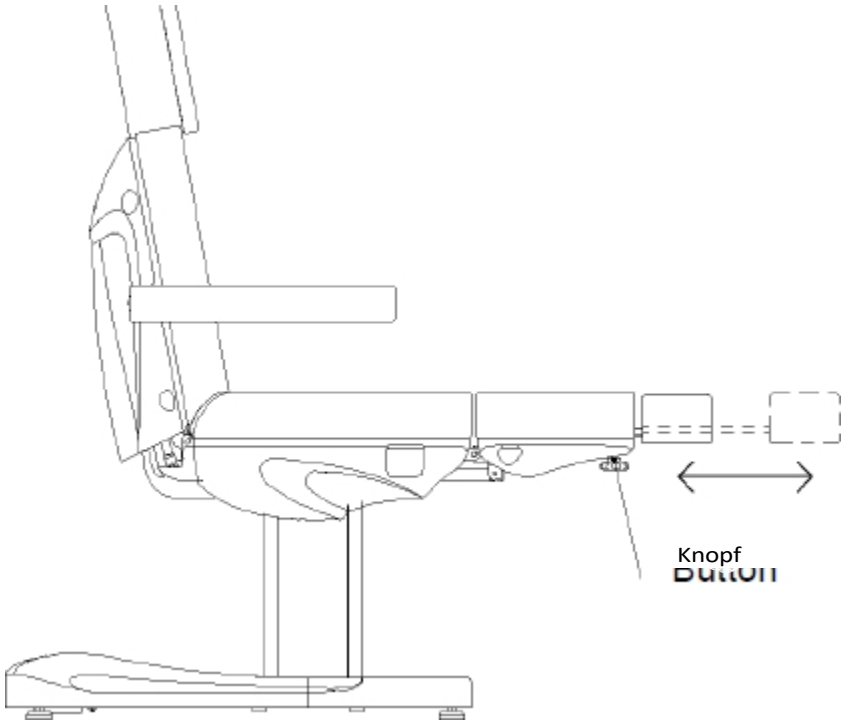


Einbau der Armlehne:

Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte fest angebracht sein. Schieben Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig sitzt. Verfahren Sie mit der anderen Armlehne genauso. Die Armlehne steht senkrecht zum Boden (unabhängig von der Neigung des Sitzes). Sie kann um 180° gedreht werden.

Einbau der Kopfstütze:

Schieben Sie die Kopfstütze in das Loch an der Oberseite der Sitzlehne. Wenn sich die Kopfstütze in der richtigen Höhe befindet, ziehen Sie die Kurbel an der Rückseite fest, um die Kopfstütze zu sichern.
Um die Kopfstütze abzusenken oder zu verlängern, schrauben Sie die Kurbel ab, stellen die Kopfstütze ein und ziehen die Kurbel wieder fest.

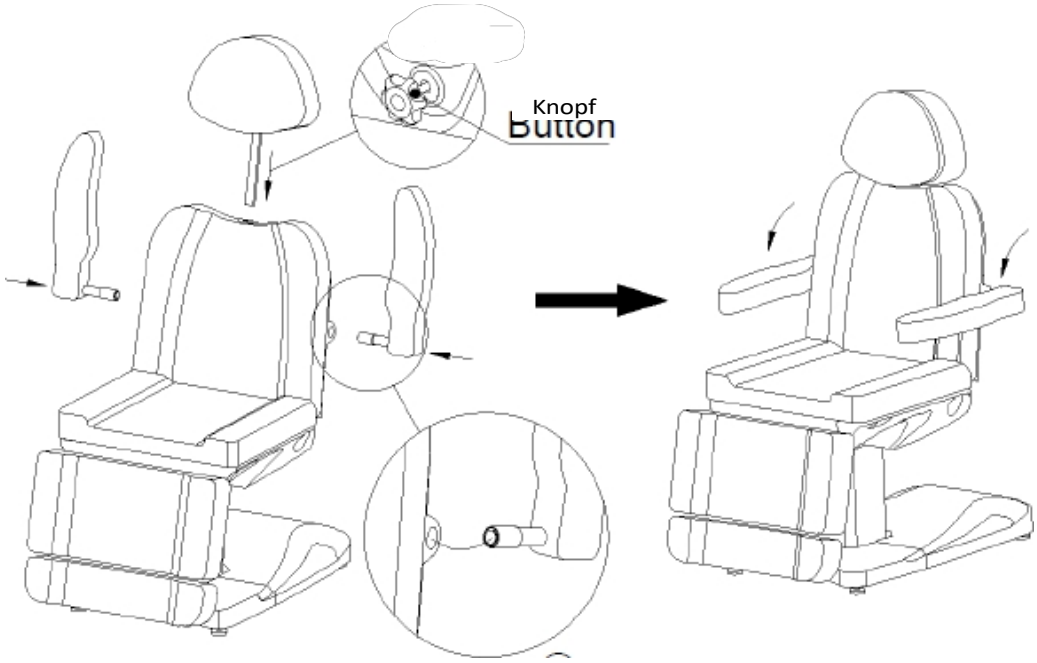

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Um die Oberfläche des Sitzes in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

Zum Reinigen von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

Die Reinigung mit einer milden Spülmittellösung funktioniert am besten. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

IV Sitzoberfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.

4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

Kontrollieren Sie die Bedienelemente und deren Verkabelung einmal pro Woche. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:

1. Stromversorgungskabel und deren Befestigung
2. Motorverdrahtung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. die normale Funktion des Schließsystems

Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.
Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösungsmethode
Keine Reaktion beim Drücken von Tasten auf der Fernbedienung	1. Die Power-Taste wird betätigt oder nicht betätigt. 2. Prüfen Sie, ob das Pedal bis zum Anschlag durchgedrückt ist. 3. Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen ist.	1. Versuchen Sie, die Einschalttaste erneut zu betätigen. 2. Versuchen Sie, die anderen Tasten einzuschalten, um zu sehen, ob sie funktionieren. 3. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie es erneut an. 4. Ziehen Sie die Stecker ab und stecken Sie sie erneut ein.
Das Gerät macht seltsame Geräusche	Lose Schraube	Ziehen Sie die Schrauben fest.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Folgen während der Behandlung zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen können.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder macht seltsame Geräusche,

c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei Recyclinghöfen unter Beachtung der Grundsätze des Umweltschutzes. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte sollten getrennt gesammelt und dann zu Sammelstellen für

Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gebracht werden. Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.