ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Azzurro 803D elektriline kosmeetikatool 3 mootorit




Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.


Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:

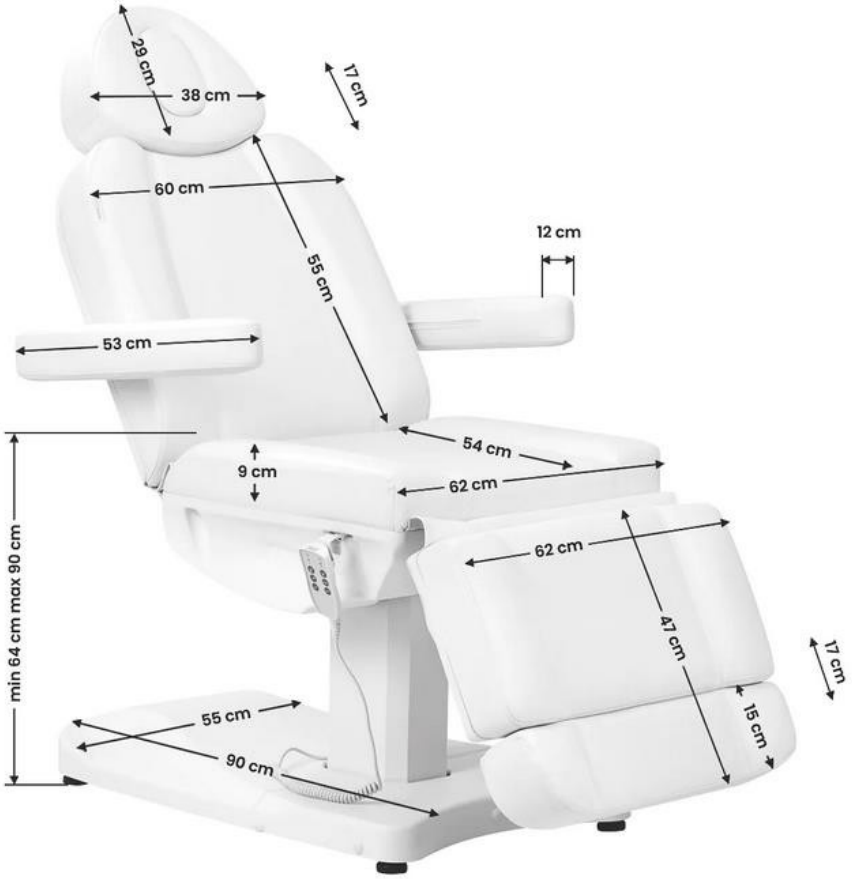



Seadme ehitus:

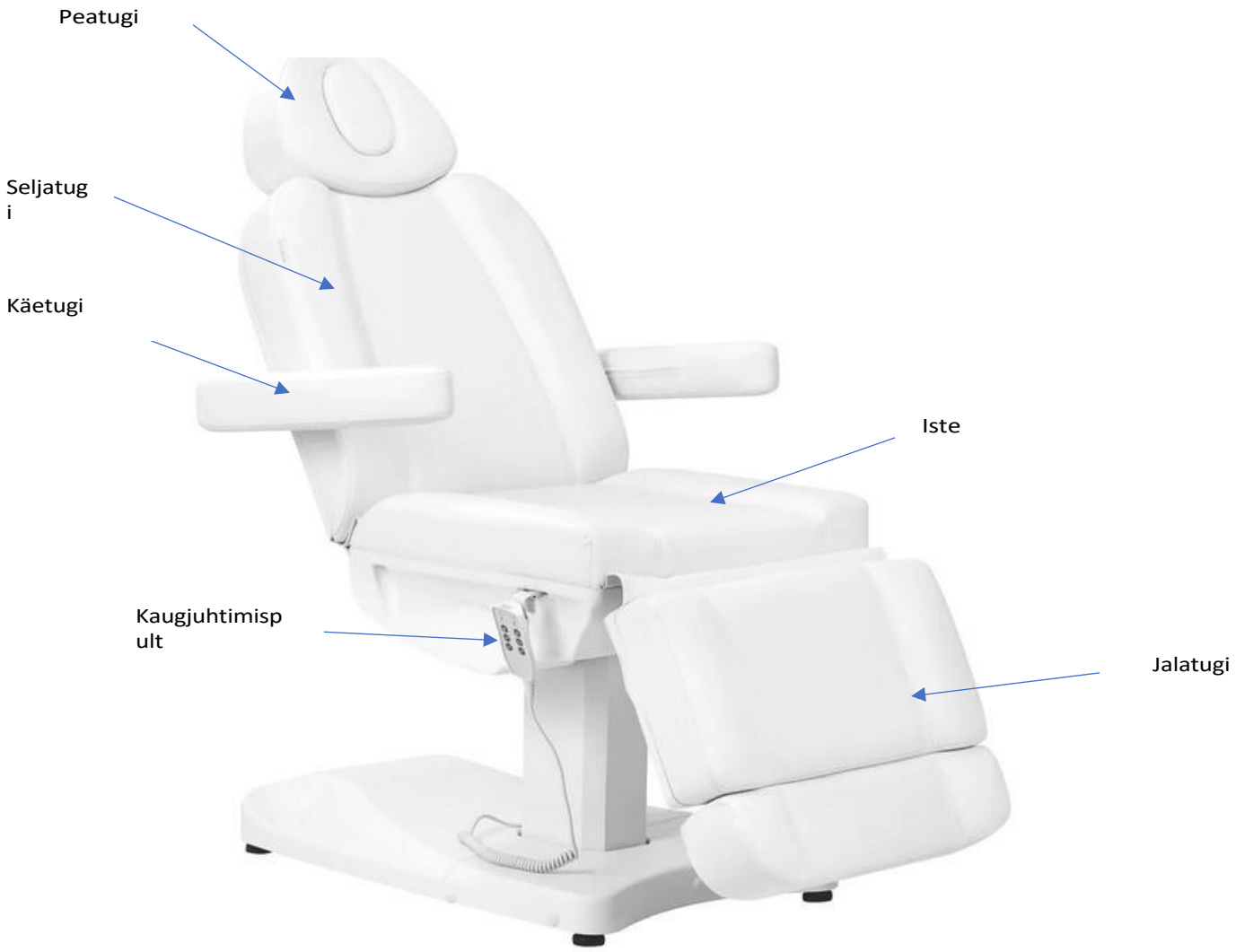

Hoiatus:

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käetoele ja jalatoele.
3. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei ületaks 2 meetrit.

Ettevaatust


1. Ohutuse tagamiseks ühendage toitejuhe alati maandatud pistikupessa.
2. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
3. Eemaldage toitejuhe enne elektrilise ilutooli liigutamist, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, tõmmake juhe kohe välja, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.
5. Ärge lubage hooldust mitte teostaval isikul juhtida juhtpulti.
6. Ärge asetage tooli alla mingeid esemeid.
7. Veenduge, et istme ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.

8. Veenduge, et istme ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
9. Ärge muutke seadet ise. Kui tugitool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.


Toolile on olemas nii manuaalse juhtimise võimalus kaugjuhtimispuldi abil kui ka jalgjuhtimise võimalus. Tooli kõrgust, seljatoe asendit ja jalatuge saab reguleerida vastavalt vajadusele.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:

1. Istme kõrguse reguleerimine (vahemikus 64-90 cm).
2. seljatoe reguleerimine
3. Jalatoe reguleerimine

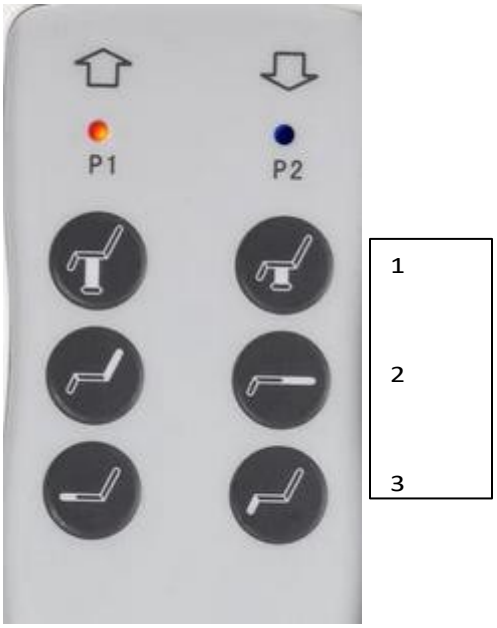


Jalajuhtseadme funktsioonid:

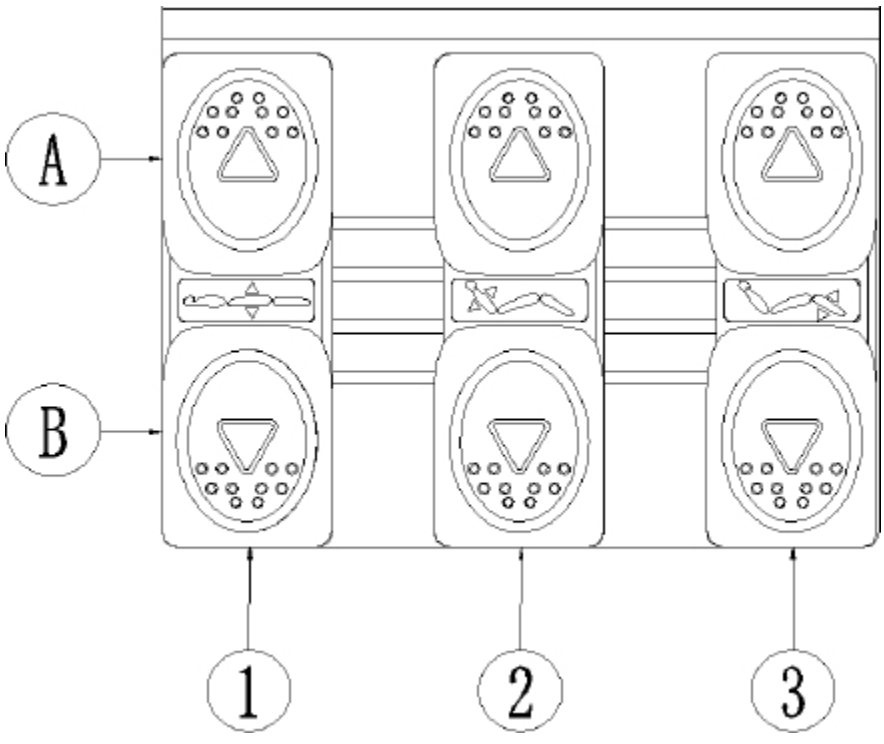

1. Istme kõrguse reguleerimine. Istme tõstmiseks vajutage nuppu A või istme langetamiseks nuppu B.
2. Seljatoe asendi reguleerimine. Vajutage A, et tõsta seljatuge, või B, et langetada seljatuge.
3. Jalatoe reguleerimine. Vajutage A, et tõsta jalatoe asendit või B, et alandada jalatoe asendit.

Jalatoe pikendamine

Toolile on võimalik pikendada ka jalatuge, mis hõlbustab pikemate patsientide kasutamist ja parandab mugavust. Jalatoe pikenduse maksimaalne pikkus on umbes 17 cm. Jalatugi reguleeritakse jalatoe allosas oleva nupu abil.

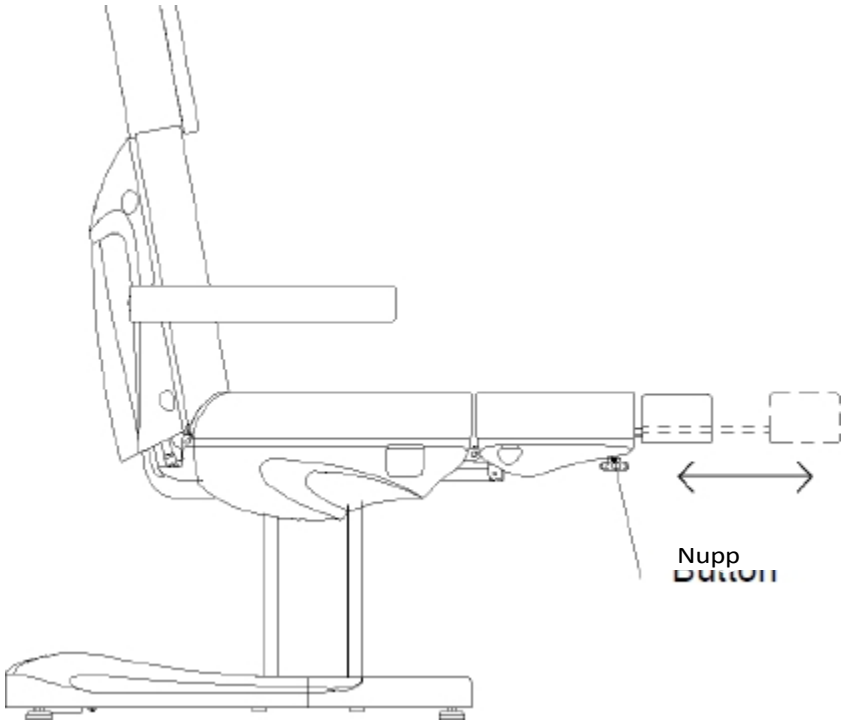


Käetoe paigaldamine:

Lükake käetoed seljatoe küljel asuvasse auku. Käetoed peavad olema kindlalt kinnitatud. Libistage seda paremale või vasakule, et see õigesti paika läheks. Tehke sama ka teise käetoega. Käetugi on maapinnaga risti (sõltumata istme nurgast). Seda saab pöörata 180°.

Peatoe paigaldamine:

Lükake peatugi istme seljatoe ülaosas asuvasse auku. Kui peatugi on õigel kõrgusel, pingutage seljatoe kinnitamiseks vänt.
Peatoe langetamiseks või pikendamiseks keerake väntvõlli lahti, reguleerige peatuge ja pingutage väntvõlli.

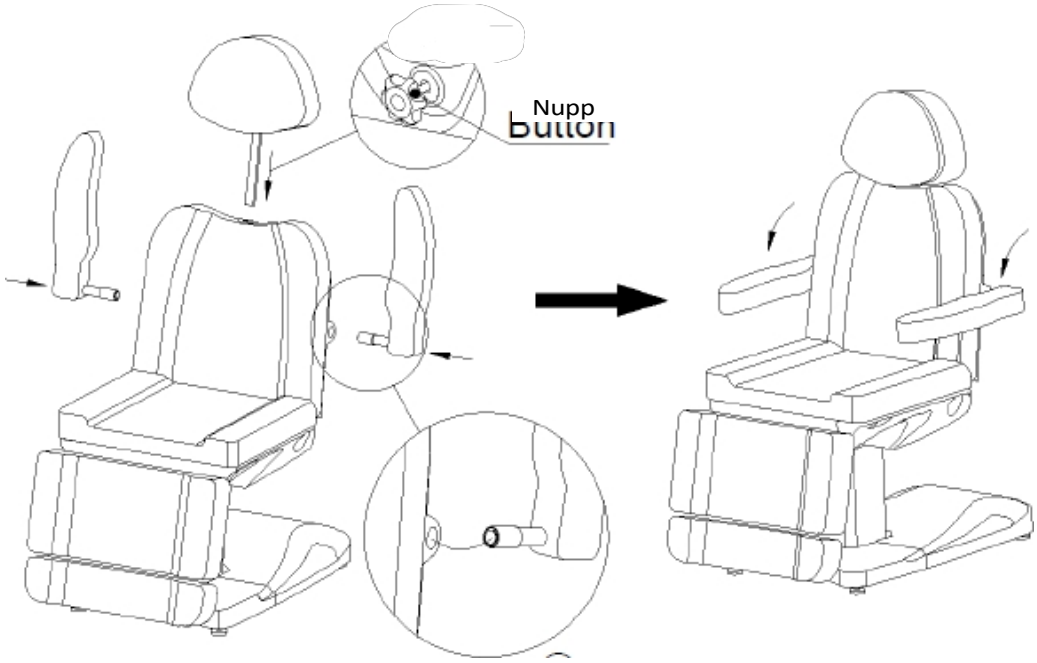

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist ühendage seade lahti.

Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike hari sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee pihustid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata töötajate teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.

4. Kõik hooldus- ja remonditööd peavad olema dokumenteeritud.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord iga kuue kuu tagant järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme.
Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage hooldust.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendusmeetod
Kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisel ei reageerita	1. Toitenupp aktiveerub või ei aktiveeru. 2. Kontrollige, et pedaal oleks maksimaalselt alla vajutatud. 3. Kontrollige, kas seade on ühendatud. 4. Kontrollige, et kõik on õigesti ühendatud.	1. Proovige uuesti käivitada toitenuppu. 2. Proovige teisi nuppe sisse lülitada ja vaadake, kas need toimivad. 3. Tõmmake seade lahti ja ühendage uuesti. 4. Tõmmake pistikud lahti ja ühendage uuesti.
Seade teeb kummalisi hääli	Lahtine kruvi	Pingutage kruvisid

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.

2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.

3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Selleks, et kaitsta keskkonda vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb kasutatud elektrilisi elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, kasutatud
elektriseadmed tuleb koguda eraldi ja anda üle järgmistes kogumispunktides

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.