# ACTIVESHOP®

# NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Azzurro 803D 3 motorji




**Uvoznik:**
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da je stol v brezhibnem stanju.
3. Kozmetični stol postavite v prostor, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtaknite omrežni vtič v ustrezno vtičnico.


**Opomba!** Otroci in neizkušene osebe tega aparata ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

**Dimenzije naprave:**

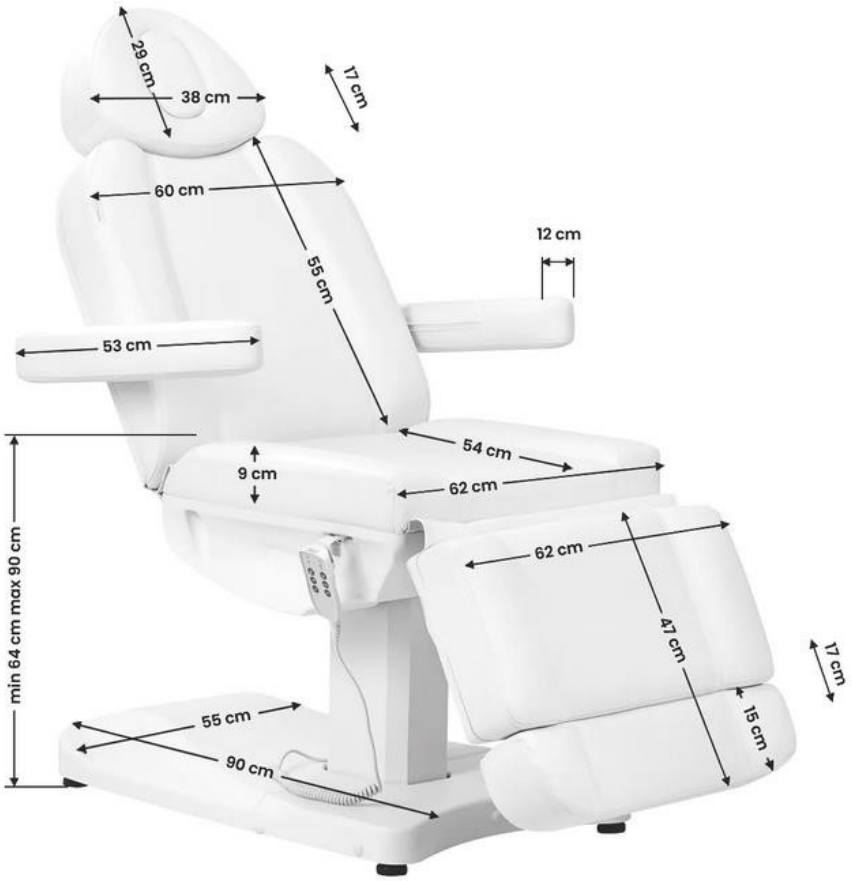




**Konstrukcija naprave:**

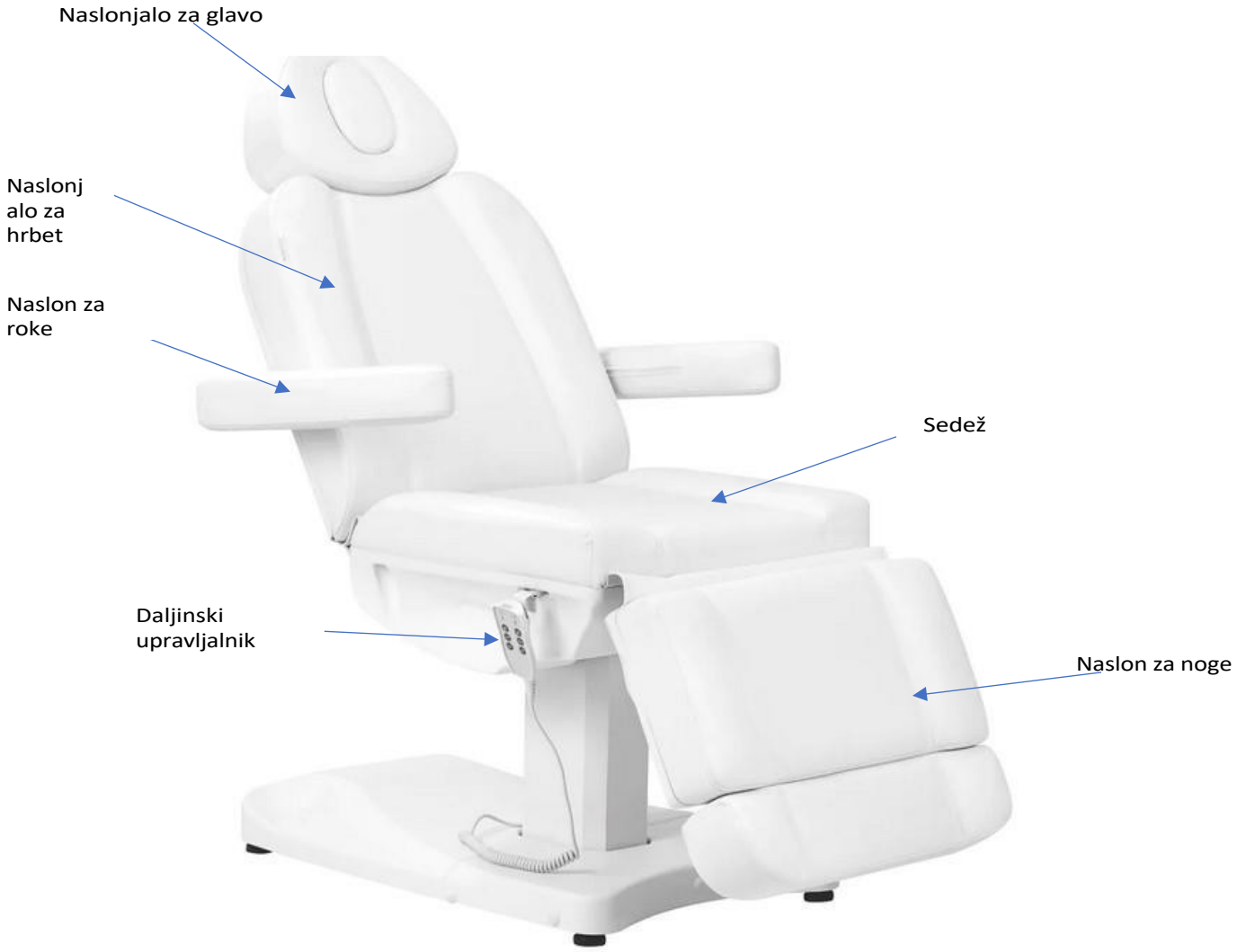


**Opozorilo:**

1. Podstavek za noge ni namenjen prenašanju celotne teže odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslon za roke in naslon za noge.
3. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

**Opozorilo:**


1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
5. Osebi, ki ne izvaja tretmaja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
6. Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
7. Prepričajte se, da je okoli sedeža dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.

8. Prepričajte se, da okoli sedeža ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali enoto.
9. Enote ne spreminjajte sami. Če fotelj ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.


Fotelj ima možnost ročnega upravljanja z daljinskim upravljalnikom in možnost upravljanja z nogami. Višino fotelja, položaj naslonjala za hrbet in podnožja lahko nastavite po potrebi.

**Funkcije daljinskega upravljalnika:**

1. Nastavitev višine sedeža (med 64 in 90 cm)
2. Nastavitev naslona za hrbet
3. Nastavitev podnožja

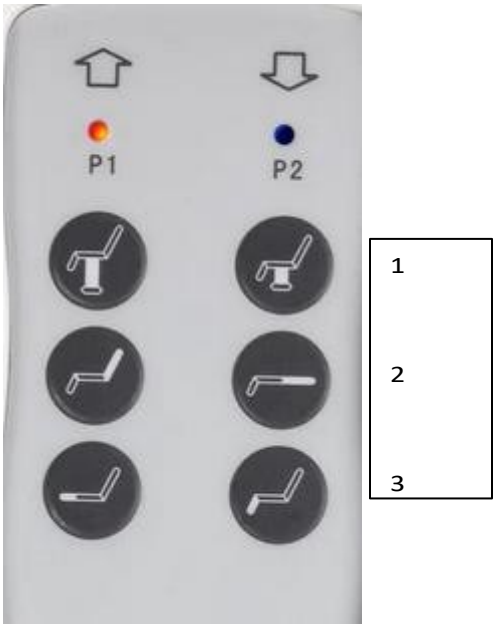



**Funkcije nožnega upravljalnika:**

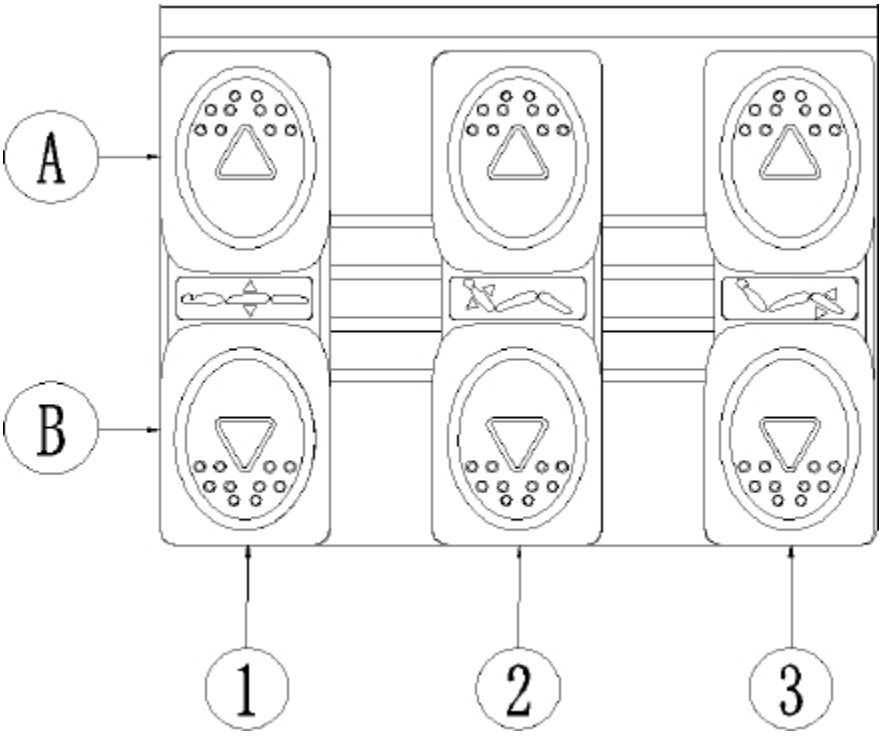

1. Nastavitev višine sedeža. Pritisnite A, da dvignete sedež, ali B, da ga spustite.
2. Nastavitev položaja naslonjala za hrbet. Pritisnite A, da dvignete naslonjalo, ali B, da ga spustite.
3. Nastavitev naslona za noge. Pritisnite A za dvig naslona za noge ali B za znižanje naslona za noge.

## Podaljšanje naslona za noge

Stol ima tudi možnost podaljšanja naslona za noge, kar olajša uporabo za višje paciente in izboljša udobje. Največja dolžina podaljška podnožja je približno 17 cm. Podnožje se nastavlja z gumbom na spodnji strani podnožja.

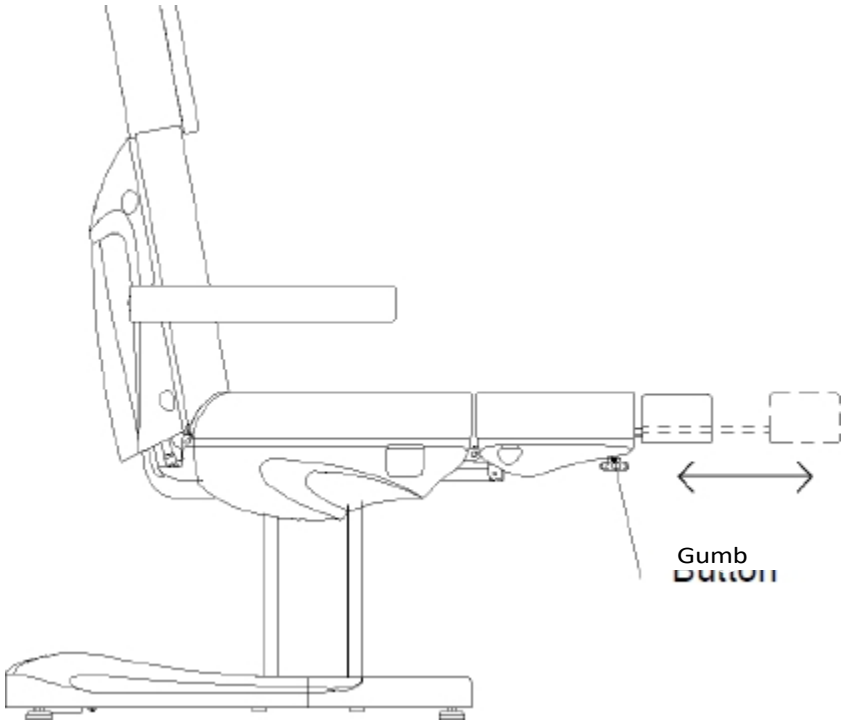



## Namestitev naslona za roke:

Naslonjala za roke potisnite v odprtino na strani naslonjala. Naslonjalo za roke mora biti trdno pritrjeno. Potisnite ga v desno ali levo, da bo pravilno nameščen. Enako storite z drugim naslonom za roke. Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.

## Namestitev naslona za glavo:

Naslonjalo za glavo potisnite v odprtino na vrhu naslona sedeža. Ko je naslon za glavo v pravilni višini, zategnite ročico, ki se nahaja na naslonu, da pritrdite naslon za glavo.
Če želite naslon za glavo spustiti ali podaljšati, odvijte ročico, nastavite naslon za glavo in zategnite ročico.

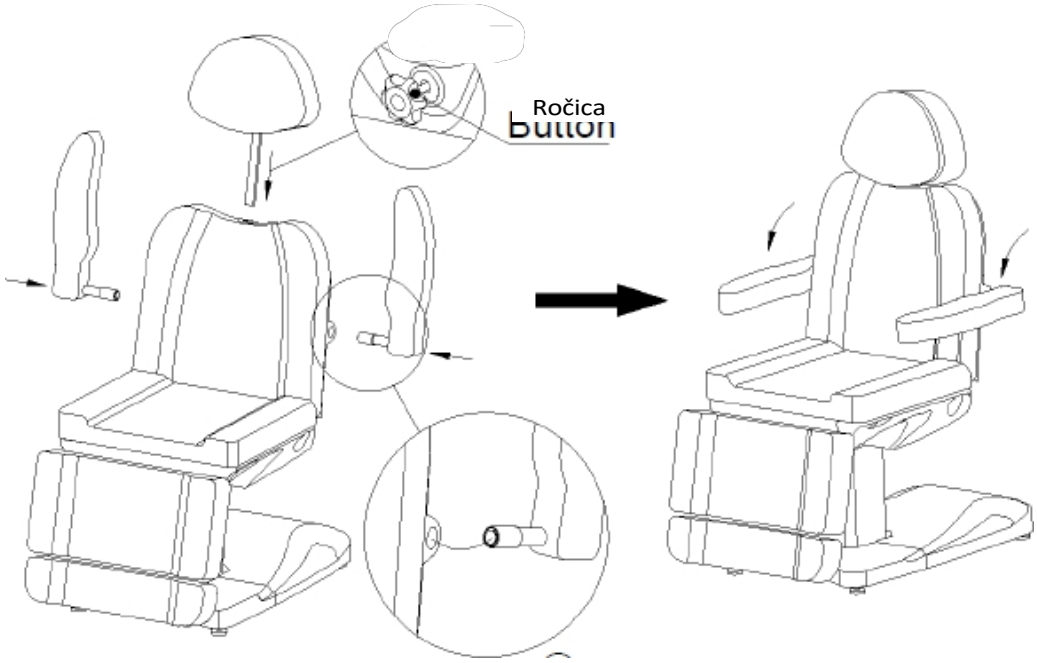


**Čiščenje in razkuževanje enote:**

Pred čiščenjem odklopite enoto iz električnega omrežja.

Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Temeljito razkuževanje je priporočljivo opraviti enkrat na mesec.

**I Kovinske in plastične površine**

Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

**II Površine iz nerjavečega jekla**

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

**III Barvane ali kromirane kovinske površine**

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

**IV Površina stola**

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

**Vzdrževanje**

**Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.**

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Ne uporabljajte električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme, če ne delujejo pravilno.

4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

**Ukrepi za vzdrževanje**

Enkrat tedensko preverite upravljalne elemente in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del enote poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Odpravljanje težav

| Težava | Vzrok | Način rešitve |
|---|---|---|
| Ni odziva, ko pritisnete gumbe na daljinskem upravljalniku | 1. Gumb za vklop se sproži ali pa se ne sproži.<br>2. Preverite, ali je pedal pritisnjen do maksimuma.<br>3. Preverite, ali je enota priključena na električno omrežje. 4. Preverite, ali je bilo vse pravilno priključeno. | 1. Poskusite ponovno sprožiti gumb za vklop.<br>2. Poskusite vklopiti druge gumbe in preverite, ali delujejo.<br>3. Odklopite napravo iz električnega omrežja in jo ponovno priključite na električno omrežje.<br>4. Odklopite vtiče in jih ponovno priključite. |
| Naprava povzroča čudne zvoke | Ohlapen vijak | Privijte vijake |

**VARNOSTNI UKREPI**

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser ( podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.

4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,

c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

**POZOR:**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozita zdravje ali povzročita smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

## ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o izrabljeni električni električni in elektronski opremi, izrabljeno električno opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

## SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.