ACTIVESHOP®

# Istruzioni per l'uso

Poltrona cosmetica Azzurro Lux 3m



**Importatore:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025

Cerca altre lingue

**Attenzione!**

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere il peso completo di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo o sul poggiapiedi.
3. Non sollevare un peso superiore a quello che la poltrona è in grado di sostenere.
4. Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
5. Non legare il cavo di alimentazione al dispositivo. Sollevare o tirare il cavo di alimentazione può causarne il danneggiamento. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente scollegato in caso di emergenza.
6. Prima di spostare la poltrona elettrica, scollegare il cavo di alimentazione per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e contattare un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo il cavo di alimentazione originale.
8. Non consentire a persone che non eseguono il trattamento di utilizzare il telecomando.
9. Non collocare alcun oggetto sotto la poltrona.
10. Assicurati che ci sia spazio sufficiente intorno alla poltrona per poterla aprire e chiudere liberamente.
11. Assicurarsi che intorno alla poltrona non vi siano oggetti appuntiti o dannosi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
12. Non modificare il dispositivo da solo. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e contattare un centro di assistenza autorizzato.
13. Non gettare oggetti pesanti sulla poltrona né saltarci sopra.

**Montaggio**

1. Inserire il poggiatesta nell'apertura situata nella parte superiore dello schienale (fig. 1).
2. Posizionare e collegare il bracciolo sinistro e destro al perno della poltrona, quindi ruotare di 90° in senso antiorario (fig. 2).


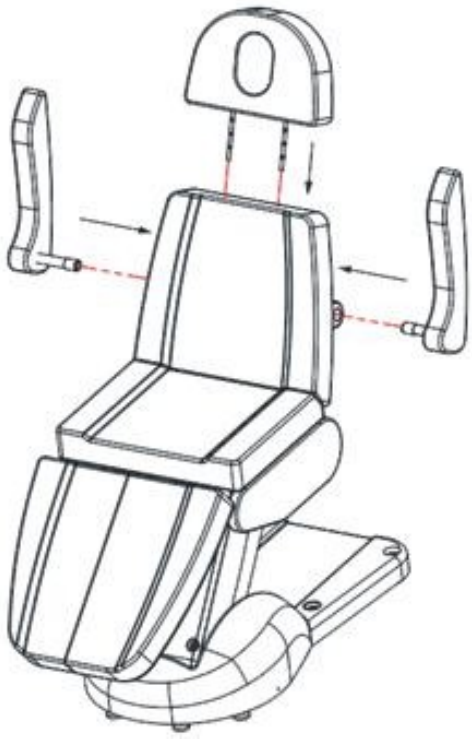


Fig. 1



Fig. 2


**Telecomando**

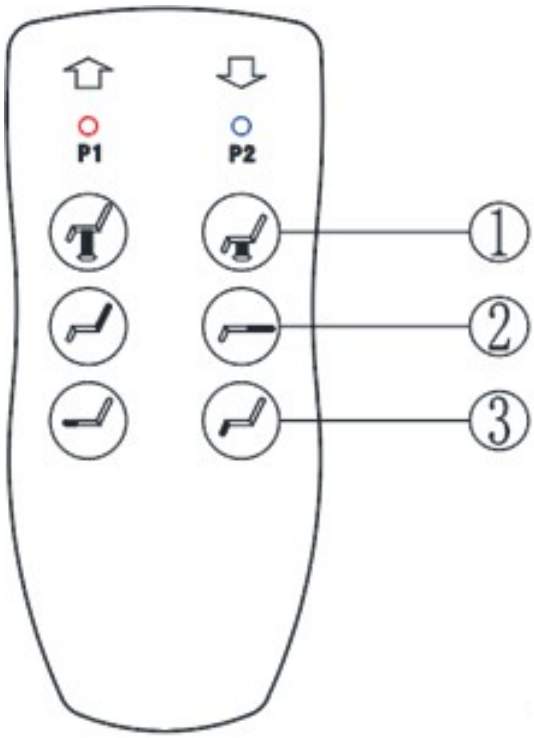



1. Premere il pulsante per sollevare il sedile.
1. Premere il pulsante per abbassare il sedile.
2. Premere il pulsante per aumentare l'inclinazione dello schienale.
2. Premere il pulsante per ridurre l'inclinazione dello schienale.
3. Premere il pulsante per aumentare l'inclinazione del poggiapiedi.
3. Premere il pulsante per ridurre l'inclinazione del poggiapiedi.

**Funzioni aggiuntive**

- Tirare indietro la maniglia e tenerla premuta per regolare l'inclinazione del poggiapiedi.

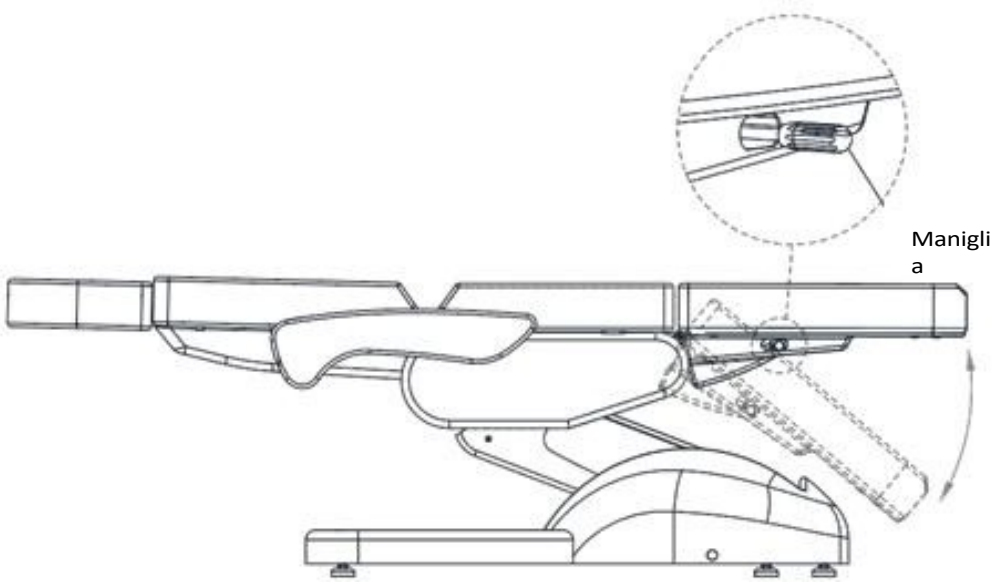

- L'altezza del poggiatesta può essere regolata sollevandolo o premendolo verso il basso.

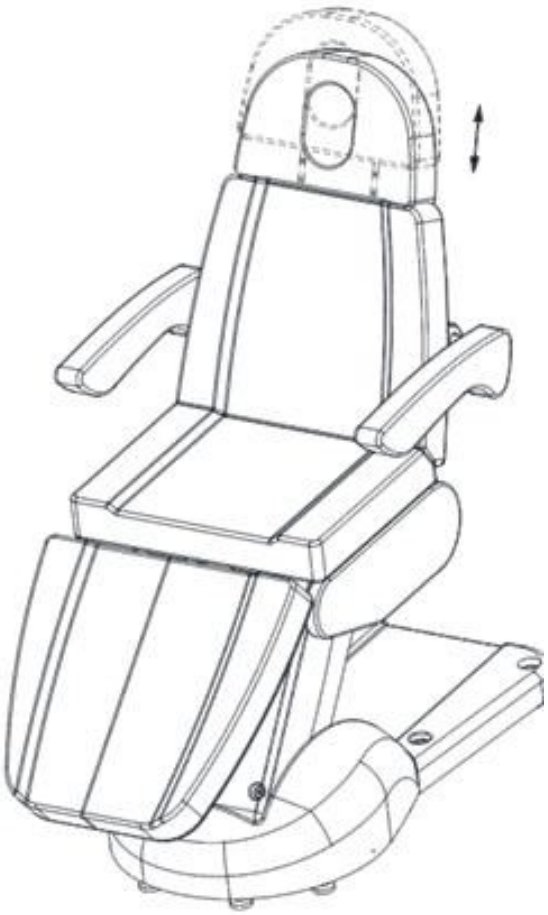

**Mezzi di mantenimento:**

**Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:**

- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di iniziare la pulizia.
- Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

**I Superfici metalliche e plastiche**

- Per pulire le superfici metalliche e plastiche e i comandi, strofinarli con un panno umido.
con un panno. Per pulire i punti difficili da raggiungere o gli angoli è utile utilizzare una piccola spazzola. Non utilizzare una quantità eccessiva di liquido per pulire l'apparecchio. Successivamente disinfettare l'apparecchio con un liquido adeguato.

**II Superfici in acciaio inossidabile**

- Il modo migliore per pulirle è utilizzare una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie difficili. Evitare soluzioni a base di cloro.

### III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (doccia, idropulitrici ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in condizioni di alta temperatura e alta umidità dell'aria, non esporre l'apparecchio a condizioni che potrebbero causare il versamento di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

### IV Superficie della poltrona

- Pulire uniformemente la superficie della poltrona con un detergente specifico per la pelle, quindi strofinarla con un panno morbido e pulito.

### Prima di effettuare la manutenzione dell'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

- Le riparazioni devono essere eseguite da personale esperto e autorizzato dal produttore.
- La riparazione da parte di personale non autorizzato può causare lesioni personali o danni all'apparecchio, per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali approvati dal produttore.
- Non utilizzare la poltrona elettrica per trattamenti estetici o gli accessori se non funzionano correttamente.
- Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere documentate.

### Attenzione!

- Se riscontri dei difetti, smetti di utilizzare l'apparecchiatura e contatta un centro di assistenza autorizzato
  . Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore
  / unità di controllo.
- Se una qualsiasi parte dell'apparecchio è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e smettere di utilizzarlo. Quindi avvisare il servizio di assistenza.

### Risoluzione dei problemi:

| Problema | Diagnosi | Soluzione |
|---|---|---|
| I pulsanti non rispondono | - Verificare che la spina di alimentazione sia collegata<br>- Verificare che tutte le spine che collegano il trasformatore siano collegati correttamente | - Scollegare la spina di alimentazione e ricollegarla<br>- Scollegare tutte le spine di collegamento e ricollegarle |
| Durante il sollevamento della poltrona si verificano rumori e vibrazioni | - Viti allentate | - Stringere le viti |
| La spia non si accende | - Il cavo del telecomando non è collegato correttamente o il telecomando è difettoso | - Ricollegare il cavo; se continua a non funzionare, sostituire il telecomando |

### Dati tecnici:

Dimensioni: 2000 x 810 x 610-910 mm
Carico massimo: 140 kg Peso netto: 76
kg
Intervallo di regolazione dell'altezza: 610–910 mm
Tensione di ingresso: CA 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Tensione di
uscita: CC 24 V

#### MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo del dispositivo esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.

2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato (azienda ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno dell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) se l'apparecchio emana uno strano odore, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.

5. Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi dove qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.

7. Non inserire alcun oggetto nell'apertura del dispositivo. Se un oggetto estraneo dovesse finire nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare il dispositivo su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. In caso di caduta, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

9. Per garantire la durata prevista del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danneggiamento o addirittura di incendio.

**ATTENZIONE:**

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio, in modo da comprendere i pericoli connessi.

3. L'apparecchio non è destinato al gioco dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone che non hanno una conoscenza sufficiente del suo funzionamento si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



**SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO**

Gli apparecchi elettrici, le attrezzature e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio delle materie prime in conformità con le norme di tutela dell'ambiente naturale. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente naturale in conformità con la direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e successivamente consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Alla fine del loro ciclo di vita, anche i vecchi dispositivi contengono componenti riciclabili di pieno valore, pertanto devono essere consegnati per essere riciclati. È necessario quindi consegnarli agli appositi punti di raccolta, oppure alla ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk.

**CONSERVAZIONE E TRASPORTO**

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (–) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare il dispositivo in un luogo ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere il dispositivo, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.