ACTIVESHOP®

Návod k použití

Kosmetické křeslo Azzurro Lux 3m



Dovozce:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025

Vyhledejte jiné jazyky


III CE

Upozornění!

1. Podnožka není určena k podepření celé hmotnosti dospělé osoby.
2. Nesedejte si přímo na područku ani na podnožku.
3. Nezvedejte větší váhu, než jakou židle unese.
4. Z bezpečnostních důvodů vždy připojujte napájecí kabel do zásuvky s uzemněním.
5. Nepřipevňujte napájecí kabel k zařízení. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel může způsobit jeho poškození. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v případě nouze snadno odpojit.
6. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezachytil mezi částmi křesla.
7. Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis. Používejte pouze originální napájecí kabel.
8. Nedovolte osobě, která neprovádí zákrok, ovládat dálkové ovládání.
9. Nepokládejte žádné předměty pod křeslo.
10. Ujistěte se, že kolem křesla je dostatek volného prostoru, aby bylo možné jej snadno skládat a rozkládat.
11. Ujistěte se, že v okolí křesla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly zařízení poškodit.
12. Zařízení neupravujte sami. Pokud křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte autorizovaný servis.
13. Na křeslo neházejte žádné těžké předměty a neskákejte na něj.

Montáž

1. Vložte opěrku hlavy do otvoru v horní části opěradla (obr. 1).
2. Nastavte a spojte levý a pravý područák s čepem v křesle a poté otočte o 90° proti směru hodinových ručiček (obr. 2).

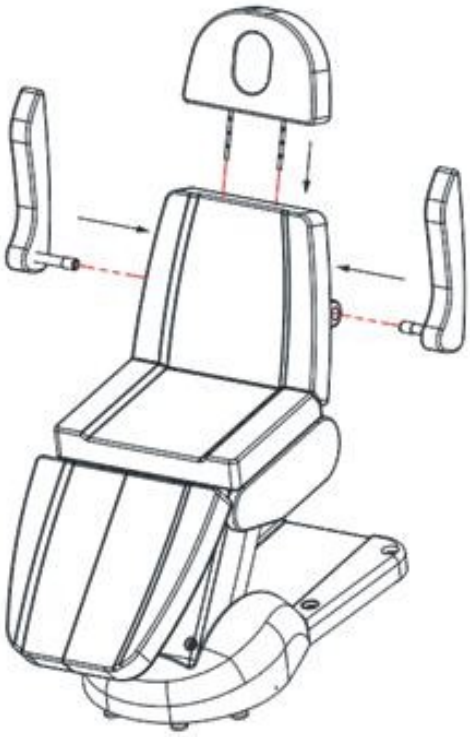


Obr. 1



Obr. 2

Ovladač

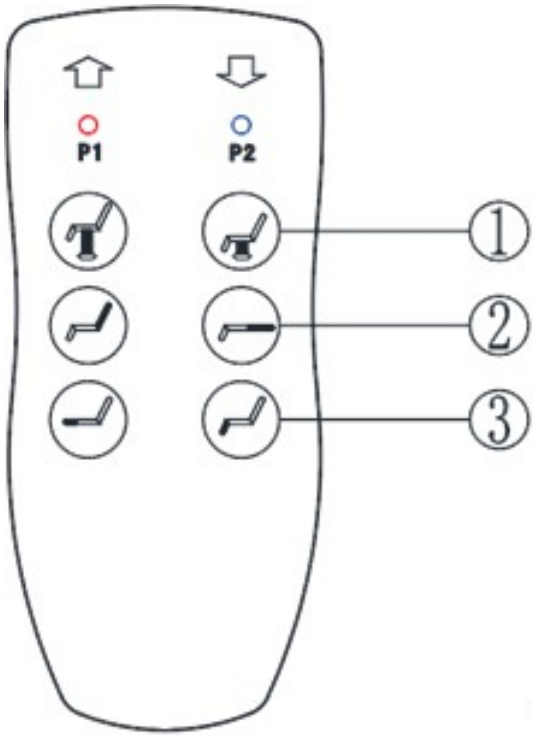

1. Stiskněte tlačítko , aby zvednout sedadlo.

1. Stiskněte tlačítko , aby opuścić fotel.

2. Stiskněte tlačítko , aby se zvýšil úhel sklonu opěradla.


2. Stiskněte tlačítko , aby se snížil úhel sklonu opěradla.

3. Stiskněte tlačítko „ “ (Nastavení sklonu opěrky nohou) , abyste zvýšili sklon opěrky nohou.


3. Stiskněte tlačítko , abyste zmenšili úhel sklonu podnožky.

Další funkce

- Zatáhněte za rukojeť dozadu a podržte ji, abyste nastavili sklon opěrky nohou.

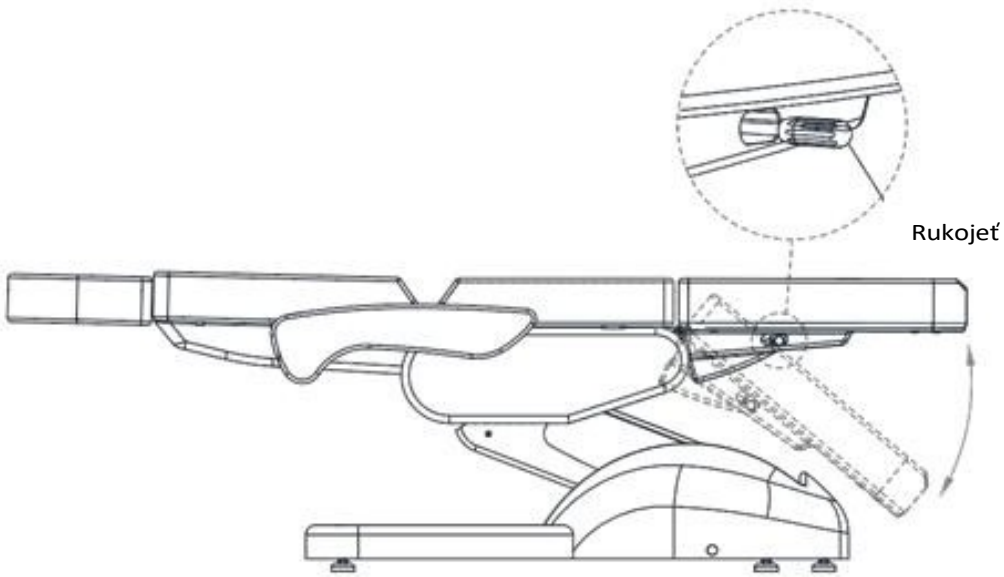

- Výšku opěrky hlavy lze nastavit jejím zvednutím nahoru nebo stlačením dolů.

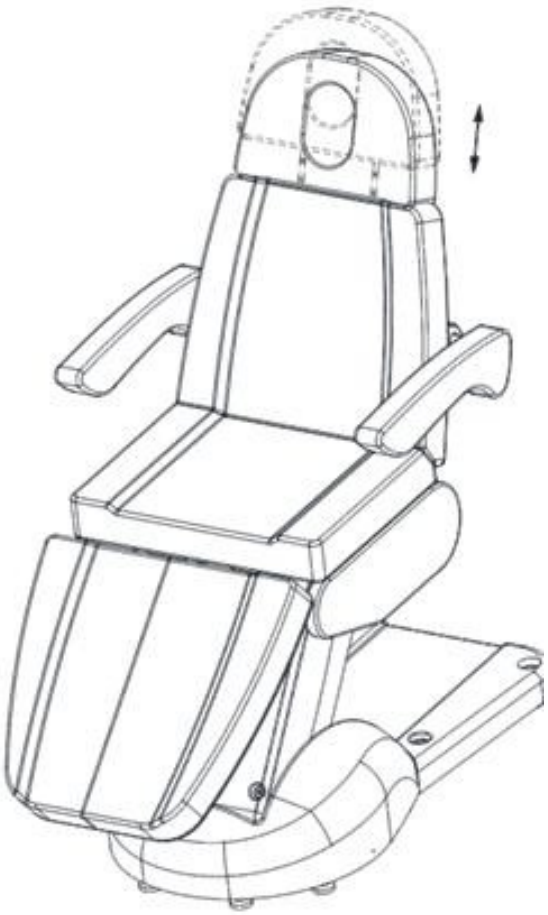

Údržba:

Čištění a dezinfekce zařízení:

- Před zahájením čištění odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Aby povrch křesla zůstal v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. N e zapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a dezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou za měsíc.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky očistěte vlhkým hadříkem.
hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů se hodí malý kartáček. Nepoužívejte příliš velké množství čisticího prostředku. Poté zařízení dezinfikujte vhodným prostředkem.

II Nerezové povrchy

- Nejlepší výsledky dosáhnete při čištění jemným roztokem detergentu. Amoniak a většina rozpouštědel mohou být použity k odstranění odolných skvrn. Vyhněte se roztokům na bázi chloru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaké vodní děla).
- Nečistěte při vysoké teplotě a vysoké vlhkosti vzduchu, nevystavujte zařízení podmínkám, které mohou vést k zalití kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch křesla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Před údržbou zařízení jej odpojte od elektrické sítě.

- Opravy by měly provádět zkušení pracovníci autorizovaní výrobcem.
- Oprava neautorizovaným personálem může způsobit zranění nebo poškození zařízení, za které výrobce nenese odpovědnost.
- Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
- Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefungují správně.
- Všechny údržbové a opravné práce musí být zdokumentovány.

Pozor!

- Pokud zjistíte jakékoli vady, přestaňte zařízení používat a kontaktujte autorizovaný servisním střediskem. Pouze zkušený nebo autorizovaný personál může otevřít nebo vyměnit pohon / řídicí jednotku.
- Pokud je jakákoli část zařízení poškozená, odpojte napájecí kabel a přestaňte jej používat. Poté informujte servis.

Řešení problémů:

Problém	Diagnostika	Řešení
Tlačítka nereagují	- Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka zapojená - Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory transformátoru jsou správně zapojeny	- Odpojte napájecí zástrčku a znovu ji připojte - Odpojte všechny propojovací zástrčky a znovu je připojte
Při zvedání křesla dochází k hlukům a vibracím	- Uvolněné šrouby	- Utáhněte šrouby
Kontrolka se nerozsvítí	- Kabel dálkového ovladače není správně připojen nebo je ovladač je poškozený	- Znovu připojte kabel, pokud stále nefunguje, vyměňte dálkový ovladač

Technické údaje:

Rozměry: 2000 x 810 x 610–910 mm
Maximální zatížení: 140 kg Čistá
hmotnost: 76 kg
Nastavitelný rozsah výšky: 610–910 mm
Vstupní napětí: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz Výstupní
napětí: DC 24 V

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený pro použití v kosmetických salonech. Pouze kvalifikovaný kosmetický personál smí zařízení obsluhovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům během procedury.

2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, mokrých míst nebo mokrýma rukama, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.

4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) do zařízení se dostala kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.

5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky po každém použití zařízení.

7. Do otvoru v zařízení nesmíte vkládat žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájení musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.

2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související rizika.

3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Dětem nesmí být umožněno si se zařízením hrát.

4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.

5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko pro zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a skladujte mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické zařízení, přístroje a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do kontejnerů na domácí odpad. Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí přírodního v souladu s směrnicí 2012/19/ES o použitých elektrických a elektronických zařízení elektrických a elektronických zařízení Použité elektrické zařízení je třeba sbírat odděleně a poté předat do sběrných míst pro použitý elektronický a elektrický materiál.

Na konci životnosti obsahují i staré přístroje plnohodnotné recyklovatelné součásti, proto je třeba je předat k recyklaci. Je třeba je proto odevzdat na příslušných sběrných místech, případně je lze odevzdat také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení by mělo být skladováno v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení házeno ani upuštěno, vystaveno mechanickým otřesům nebo povětrnostním vlivům.