ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Sillón cosmético Azzurro Lux 3m



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025

Buscar en otros idiomas

¡Atención!

1. El reposapiés no está diseñado para soportar todo el peso de un adulto.
2. No se debe sentar directamente sobre el reposabrazos ni el reposapiés.
3. No levante más peso del que puede soportar el sillón.
4. Por motivos de seguridad, conecte siempre el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra.
5. No ate el cable de alimentación al dispositivo. Levantar o tirar del cable de alimentación puede dañarlo. Asegúrese de que el cable de alimentación se pueda desconectar fácilmente en caso de emergencia.
6. Antes de mover el sillón eléctrico de belleza, desconecte el cable de alimentación para que no quede atrapado entre las piezas del sillón.
7. Si el cable de alimentación está dañado, desconéctelo inmediatamente, no utilice el sillón y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Utilice únicamente el cable de alimentación original.
8. No permita que una persona que no esté realizando el tratamiento maneje el mando a distancia.
9. No coloque ningún objeto debajo del sillón.
10. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del sillón para poder plegarlo y desplegarlo con facilidad.
11. Asegúrese de que no haya objetos afilados o peligrosos alrededor del sillón que puedan dañar el dispositivo.
12. No modifique el dispositivo por su cuenta. Si el sillón no funciona correctamente, deje de utilizarlo y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
13. No coloque objetos pesados sobre el sillón ni salte sobre él.

Montaje

1. Inserte el reposacabezas en el orificio situado en la parte superior del respaldo (fig. 1).
2. Ajuste y conecte los reposabrazos izquierdo y derecho con el perno del asiento y, a continuación, gírelos 90° en sentido antihorario (fig. 2).


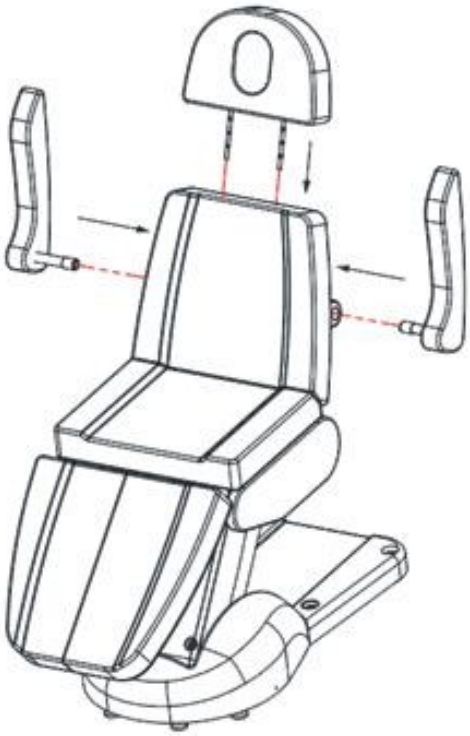


Fig. 1



Fig. 2


Mando a distancia

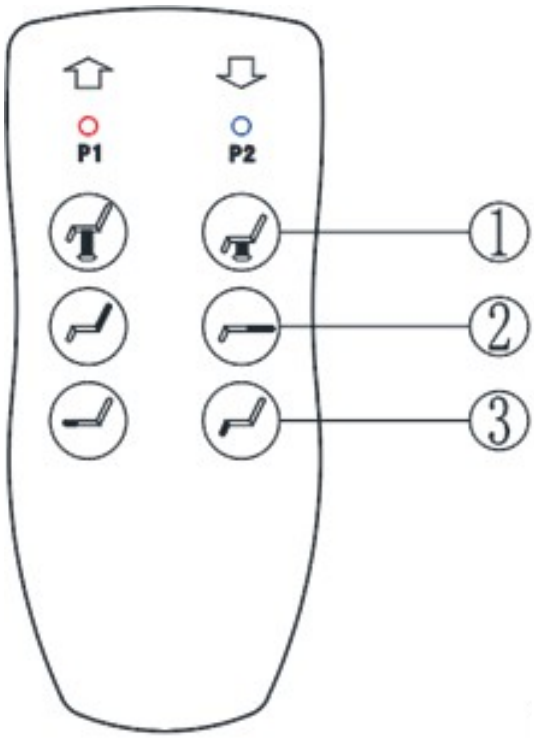


1. Pulse el botón para elevar el asiento.
1. Pulse el botón para bajar el asiento.
2. Pulse el botón para aumentar el ángulo de inclinación del respaldo.
2. Pulse el botón para reducir el ángulo de inclinación del respaldo.
3. Pulse el botón « » para aumentar el ángulo de inclinación del reposapiés.
3. Pulse el botón para reducir el ángulo de inclinación del reposapiés.

Funciones adicionales

- Tire del asa hacia atrás y manténgala presionada para ajustar el ángulo de inclinación del reposapiés.

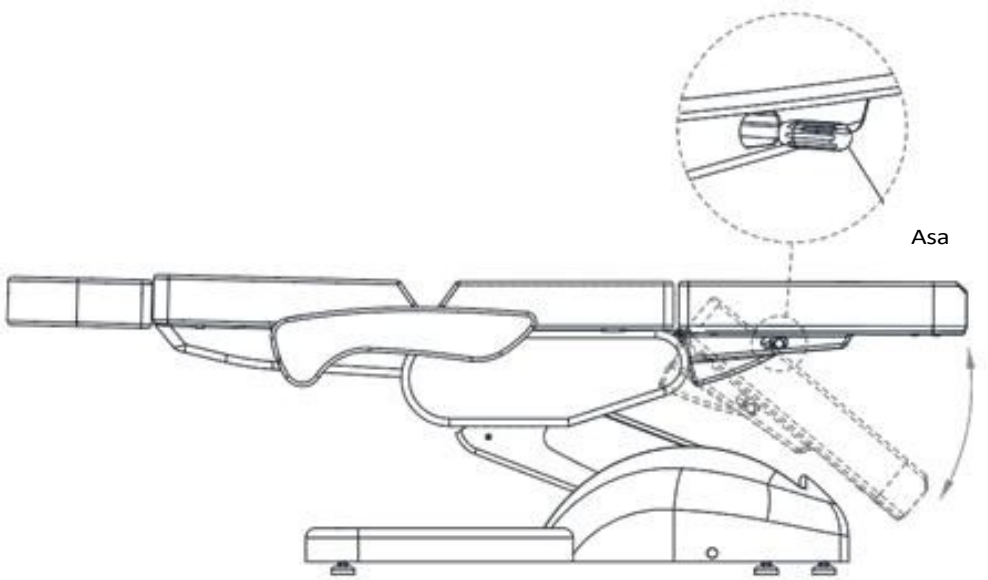

- La altura del reposacabezas se puede ajustar tirando de él hacia arriba o presionándolo hacia abajo.

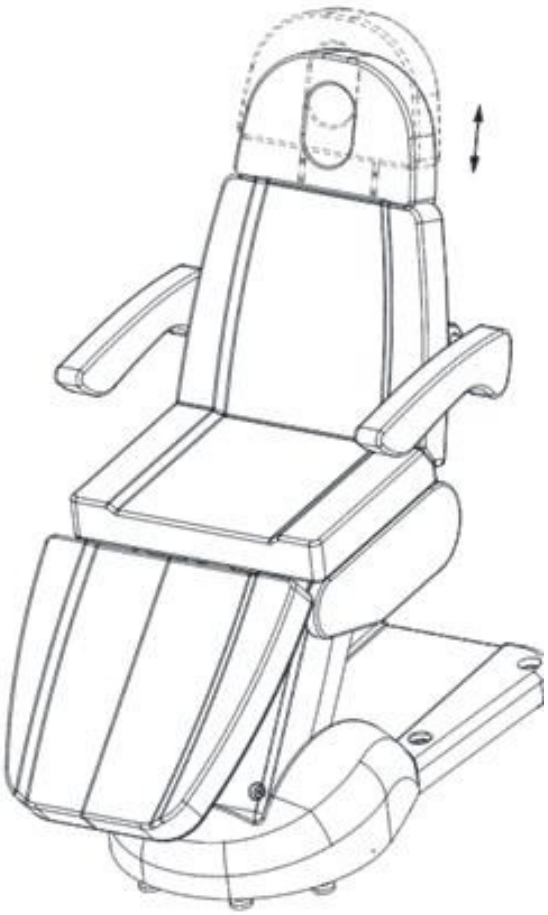

Medidas de mantenimiento:

Limpieza y desinfección del dispositivo:

- Desenchufe el dispositivo antes de comenzar la limpieza.
- P a r a mantener la superficie del sillón en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar el sillón después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección exhaustiva una vez al mes.

I Superficies metálicas y plásticas

- Para limpiar las superficies metálicas y plásticas, así como los elementos de control, frótelos con un paño húmedo.

con un paño. Para limpiar los lugares o rincones de difícil acceso, es recomendable utilizar un cepillo pequeño. No utilice una cantidad excesiva de líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor es limpiarlas con una solución detergente suave. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con alta humedad ambiental, no exponga el aparato a condiciones que puedan provocar el derrame de líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para limpiarlo.

IV Superficie del asiento

- Limpie la superficie del sillón de manera uniforme con un producto especial para limpiar piel y, a continuación, frótela con un paño limpio y suave.

Antes de realizar el mantenimiento del aparato, desconéctelo de la corriente eléctrica.

- Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante.
- Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden provocar lesiones personales o daños al aparato, por lo que el fabricante no se hace responsable.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales aprobadas por el fabricante.
- No utilice el sillón eléctrico ni los accesorios si no funcionan correctamente.
- Todas las tareas de mantenimiento y reparación deben documentarse.

¡Atención!

- Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado
  . Solo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador / unidad de control.
- Si alguna parte del dispositivo está dañada, desconecte el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, notifíquelo al servicio técnico.

Solución de problemas:

Problema	Diagnóstico	Solución
Los botones no responden	- Comprueba que el enchufe de alimentación esté conectado - Compruebe que todos los enchufes que conectan el transformador están correctamente conectados	- Desenchufe el enchufe de alimentación y vuelva a enchufarlo - Desenchufe todos los enchufes de conexión y vuelva a enchufarlos
Al levantar el sillón se producen ruidos y vibraciones	- Tornillos sueltos	- Apriete los tornillos
La luz indicadora no se enciende	: el cable del mando a distancia no está bien conectado o el mando está defectuoso	- Vuelva a conectar el cable; si sigue sin funcionar, sustituya el mando a distancia

Datos técnicos:

Dimensiones: 2000 x 810 x 610-910
mm Carga máxima: 140 kg Peso neto:
76 kg
Rango de altura ajustable: 610-910 mm
Tensión de entrada: CA 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Tensión de salida: CC 24 V

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El dispositivo es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del dispositivo solo por personal de belleza cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.

2. No se permite desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un empleado del servicio técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. No instale ni utilice el dispositivo cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que entre líquido en el dispositivo.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) si ha entrado líquido en el aparato, b) si el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el dispositivo se ha volcado o su carcasa está dañada.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el dispositivo en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del dispositivo. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el dispositivo sobre un carro, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.

9. Para garantizar la vida útil establecida del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La alimentación eléctrica debe ser conforme a las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para evitar cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el aparato, siempre que se les supervise o se les instruya sobre el uso seguro del mismo, de modo que comprendan los riesgos que conlleva.

3. El aparato no está diseñado para que jueguen los niños. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin supervisión cuando haya niños o personas sin los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Los aparatos eléctricos, instrumentos y embalajes usados deben entregarse a centros de reciclaje de materias primas, de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse a los contenedores de residuos domésticos. Deben seguirse las normas relativas al desecho de este tipo de equipos. Con el fin de proteger el medio ambiente natural de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos
Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben recogerse por separado y, a continuación, entregarse en puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes reciclables de gran valor, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, aunque también pueden entregarse a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado y con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento entre (+) 10 °C y (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, no se debe golpear ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a sacudidas mecánicas o a agentes atmosféricos.