ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

Kosmeetiline tool Azzurro Lux 3m



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025


Skannige erinevate keelte jaoks

Tähelepanu!

1. Jalatoe ei ole mõeldud täiskasvanu täieliku kehakaalu kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käetoel ega jalatoel.
3. Ärge tõstke suuremat raskust, kui tool talub.
4. Ohutuse tagamiseks ühendage toitekaabel alati maandatud pistikupesaga.
5. Ärge kinnitage toitekaablit seadme külge. Toitekaabli tõstmine või tõmbamine võib selle kahjustada. Veenduge, et toitekaabel oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
6. Enne elektrilise kosmeetikatooli teisaldamist tuleb toitejuhtme eemaldada, et see ei jääks tooli osade vahele kinni.
7. Kui toitekaabel on kahjustatud, ühendage see kohe lahti, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teenindusega. Kasutage ainult originaalvoolujuhet.
8. Ärge lubage isikul, kes ei tee protseduuri, juhtida puldiga.
9. Ärge asetage tooli alla mingeid esemeid.
10. Veenduge, et tooli ümber on piisavalt vaba ruumi, et seda saaks vabalt kokku ja lahti klappida.
11. Veenduge, et tooli ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
12. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja võtke ühendust volitatud teenindusega.
13. Ärge visake toolile raskeid esemeid ega hüppake sellel.

Paigaldamine

1. Asetage peatoe auk ülemisse seljatoe avasse (joonis 1).
2. Seadke ja ühendage vasak ja parem käetugi istme tihendiga ning pöörake seejärel 90° vastupäeva (joonis 2).

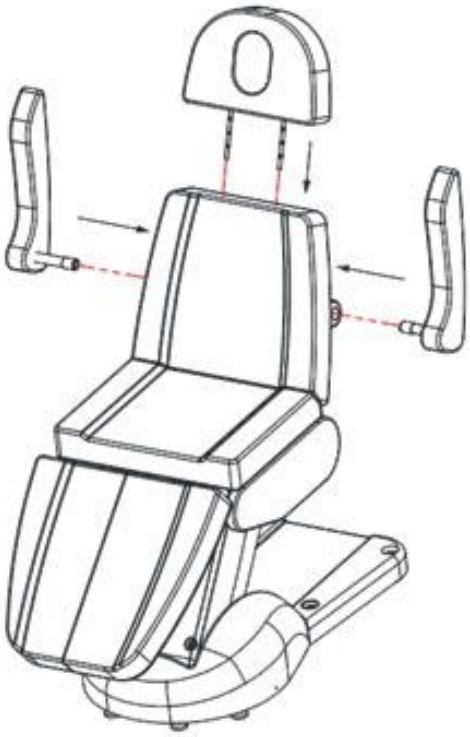


Joonis 1



Joonis 2


Juhtpult

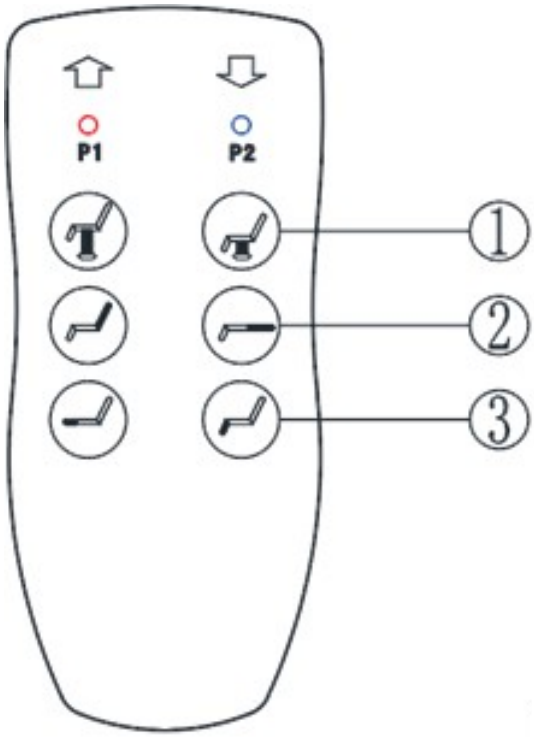


1. Vajutage nuppu , et tõsta istet.
1. Vajutage nuppu , et istet langetada.
2. Vajutage nuppu , et suurendada seljatoe kaldenurka.
2. Vajutage nuppu , et vähendada seljatoe kaldenurka.
3. Vajutage nuppu „ ” , et suurendada jalatoe kaldenurka.
3. Vajutage nuppu „ ” , et vähendada jalatoe kaldenurka.

Lisafunktsioonid

- Tõmmake käepide tahapoole ja hoidke seda all, et reguleerida jalatoe kaldenurka.

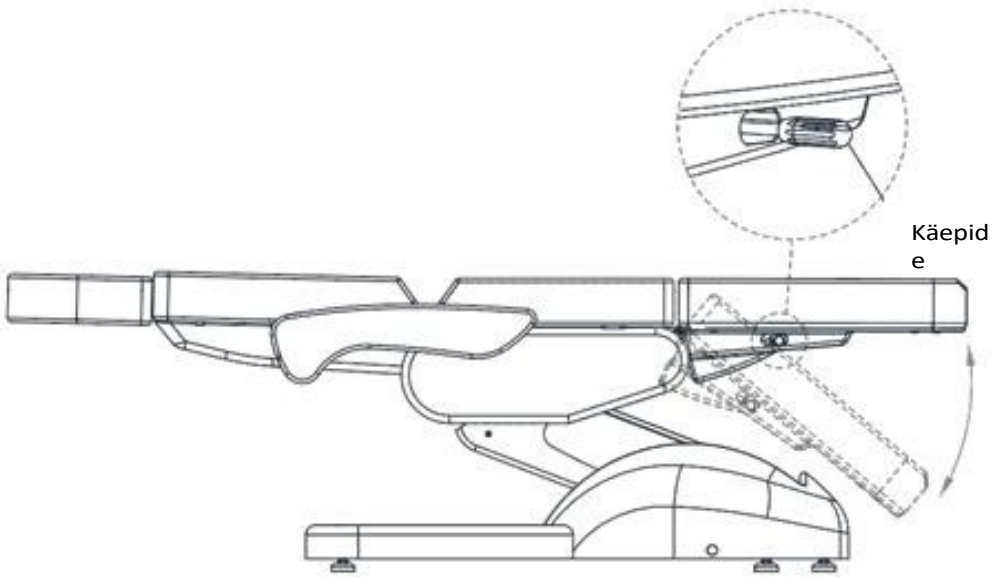

- Peatuki kõrgust saab reguleerida, tõstes seda ülespoole või alla surudes.

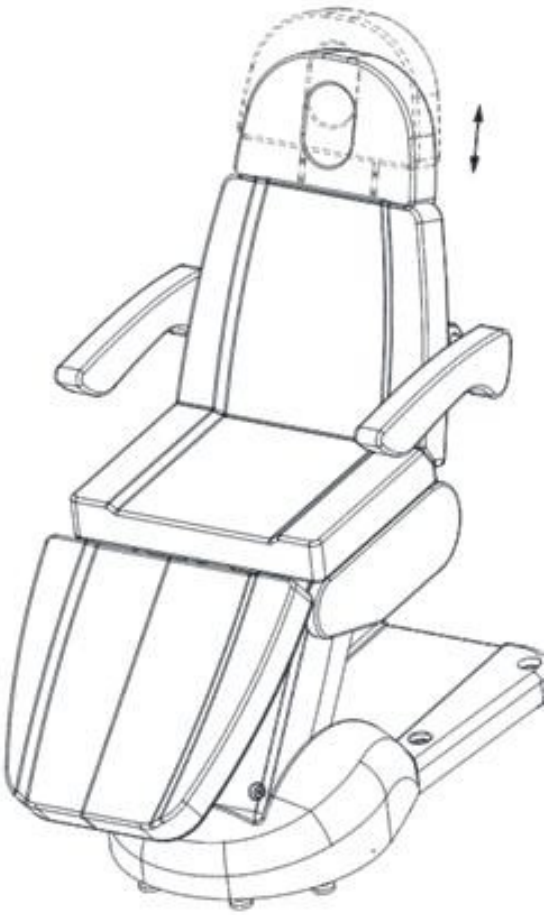

Hooldusvahendid:

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Et hoida tooli pind heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Puhastage ja desinfitseerige tool pärast iga kasutamist. Soovitav on teha põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metalli- ja plastpinnad

- Metall- ja plastpindade ning juhtnuppude puhastamiseks pühkige need niiske lapiga.
lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju puhastusvedelikku. Desinfitseerige seade seejärel sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Parim tulemus saavutatakse pehme detergendilahusega. Ammoniaak ja enamik lahusteid sobivad raskesti eemaldatavate plekkide eemaldamiseks. Vältige kloori sisaldavaid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (dušš, kõrgsurve veepihusti).
- Ärge puhastage kõrgel temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge asetage seadet tingimustesse, mis võivad põhjustada vedeliku sattumist seadmele.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Puhasta istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel puhasta see puhtaks pehme lapiga.

Enne seadme hooldamist tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada.

- Remonttöid tohida teha ainult kogenud ja tootja volitatud personal.
- Mitte volitatud personali poolt tehtud remont võib põhjustada kehavigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud originaalvaruosi.
- Ärge kasutage elektrilist kosmeetikatooli ega lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
- Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Tähelepanu!

- Kui leiate mingeid vigu, lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust volitatud teenindusega. Ainult kogenud või volitatud personal võib avada või vahetada / juhtimisseadet.
- Kui mõni seadme osa on kahjustatud, ühendage toitejuhtme pistik pistikupesast lahti ja lõpetage seadme kasutamine. Teavitage sellest teeninduspunkti.

Probleemide lahendamine:

Probleem	Diagnoos	Lahendus
Nupud ei reageeri	- Kontrollige, kas toitepistik on ühendatud - Kontrollige, kas kõik trafo ühenduspistikud on õigesti ühendatud	- Ühendage toitepistik lahti ja ühendage see uuesti - Ühendage kõik ühendusplugid lahti ja ühendage need uuesti
Tugitooli tõstmisel tekivad müra ja vibratsioon	- Lahtised kruvid	- Pingutage kruvid
Kontrolllamp ei põle	- Puldiga juhtimiskaabel ei ole korralikult ühendatud või pult on rikkis	- Ühendage kaabel uuesti, kui see ikka ei tööta, vahetage pult välja

Tehnilised andmed:

Mõõtmed: 2000 x 810 x 610–910
mm Maksimaalne koormus: 140 kg
Netokaal: 76 kg
Reguleeritav kõrgusvahemik: 610–910 mm
Sissetulev pinge: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz
Väljundpinge: DC 24 V

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.

2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte töötaja (ettevõte ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.

4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIV Tomasz Pacholczyk poolt pakutava volitatud teenindusega: a) seade on sattunud vedelikuga kokku, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.

6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pistikupesast välja tõmmata pärast iga seadme kasutamist.

7. Ärge asetage midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.

9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).

10. Toiteallikas peab vastama nimikilbil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib kahjustuda või isegi põleda.

TÄHELEPANU:

1. Toitejuhtme rikke või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.

2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise või vaimse puudega inimesed ning inimesed, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui tagatakse järelevalve või juhendamine seadme o h u t u kasutamise osas, nii et sellega seotud ohud oleksid arusaadavad.

3. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta, viibivad selle läheduses.

5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutamine või sellega kokkupuutumine võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.



SEADME KÄITLEMINE

Kasutatud elektriseadmed, instrumendid ja pakendid tuleb viia ringlussevõtu keskustesse vastavalt keskkonnakaitse nõuetele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Tuleb järgida selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel viia kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidesse.

Kasutusaja lõpus sisaldavad ka vanad seadmed täisväärtuslikke ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need anda ringlussevõtuks. Seetõttu tuleb need viia vastavatesse kogumispunktidesse, samuti võib need anda ACTIV Tomasz Pacholczykile.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avaldada.