ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Fauteuil cosmétique Azzurro Lux 3m



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/07/2025

Scan pour différentes langues

Attention !

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter tout le poids d'un adulte.
2. Il est interdit de s'asseoir directement sur l'accoudoir et le repose-pieds.
3. Ne soulevez pas un poids supérieur à celui que le fauteuil peut supporter.
4. Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation à une prise avec mise à la terre.
5. Ne fixez pas le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Assurez-vous que le cordon d'alimentation peut être facilement retiré en cas d'urgence.
6. Avant de déplacer un fauteuil de beauté électrique, débranchez le cordon d'alimentation afin qu'il ne se coince pas entre les parties du fauteuil.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et
contactez un service après-vente agréé. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation d'origine.
8. Ne laissez pas une personne qui n'effectue pas le traitement utiliser la télécommande.
9. Ne placez aucun objet sous le fauteuil.
10. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour du fauteuil pour pouvoir le plier et le déplier librement.
11. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou dangereux autour du fauteuil qui pourraient l'endommager.
12. Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un service après-vente agréé.
13. Ne jetez pas d'objets lourds sur le fauteuil et ne sautez pas dessus.

Montage

1. Insérez l'appui-tête dans l'ouverture située en haut du dossier (fig. 1).
2. Positionnez et connectez les accoudoirs gauche et droit à la goupille du siège, puis tournez-les de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 2).


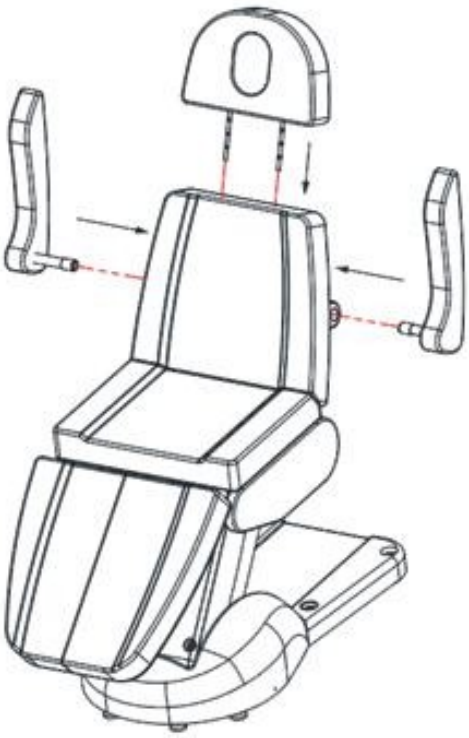


Fig. 1



Fig. 2

Télécommande

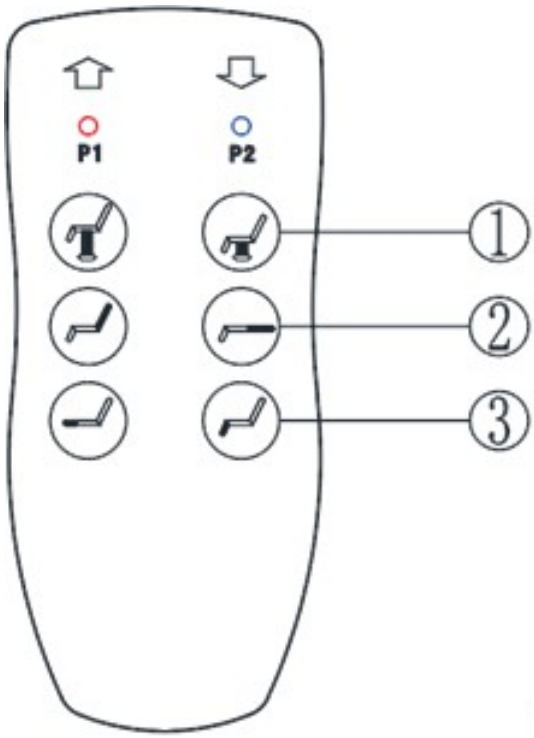

1. Appuyez sur le bouton pour relever le siège.

1. Appuyez sur le bouton pour abaisser le siège.

2. Appuyez sur le bouton pour augmenter l'angle d'inclinaison du dossier.


2. Appuyez sur le bouton pour réduire l'angle d'inclinaison du dossier.

3. Appuyez sur le bouton pour augmenter l'angle d'inclinaison du repose-pieds.


3. Appuyez sur le bouton pour réduire l'angle d'inclinaison du repose-pieds.

Fonctions supplémentaires

- Tirez la poignée vers l'arrière et maintenez-la enfoncée pour régler l'angle d'inclinaison du repose-pieds.

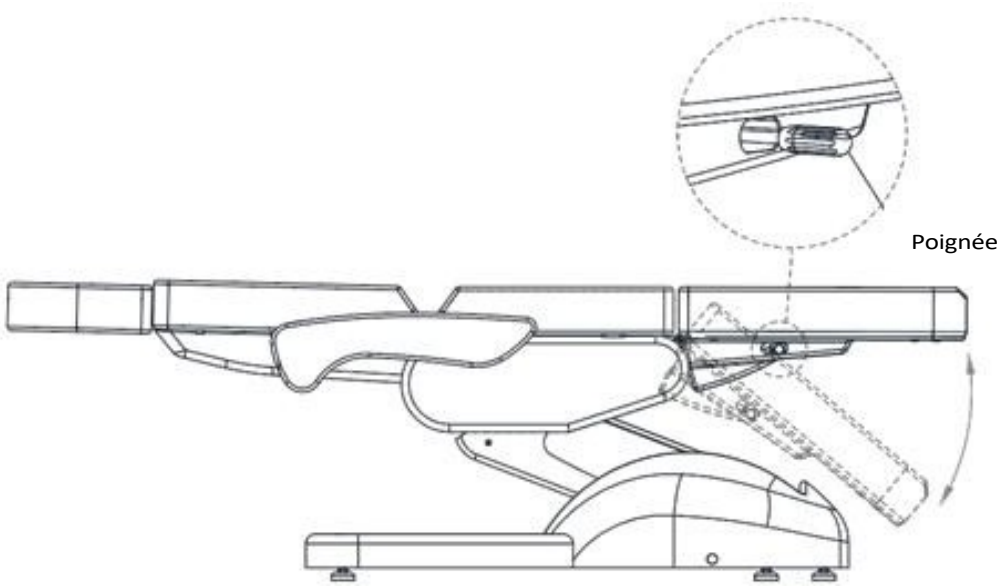

- La hauteur de l'appuie-tête peut être réglée en le tirant vers le haut ou en appuyant vers le bas.

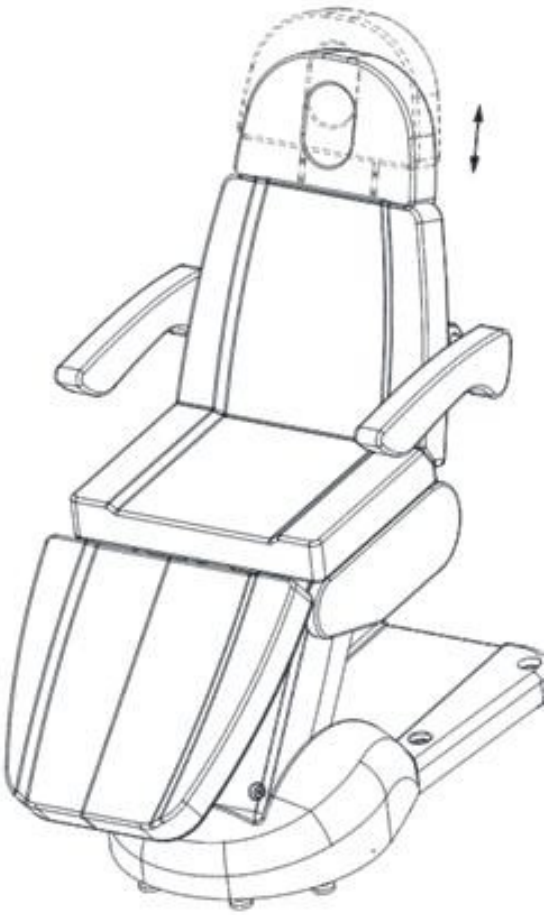

Entretien :

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

- Débranchez l'appareil avant de commencer le nettoyage.
- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il convient de la nettoyer régulièrement. Veillez à nettoyer et désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection approfondie une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces métalliques et plastiques ainsi que les éléments de commande, essuyez-les avec un chiffon humide.

avec un chiffon. Une petite brosse est idéale pour nettoyer les endroits difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Il est préférable de les nettoyer avec une solution détergente douce. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- N'utilisez pas de jets d'eau (douche, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne nettoyez pas à haute température et dans des conditions d'humidité élevée, n'exposez pas l'appareil à des conditions pouvant entraîner un déversement de liquide.
- N'utilisez pas de solvants ni d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Nettoyez uniformément la surface du fauteuil à l'aide d'un produit spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Avant d'entretenir l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.

- Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et agréé par le fabricant.
- Toute réparation effectuée par du personnel non autorisé peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'appareil, pour lesquelles le fabricant décline toute responsabilité.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
- N'utilisez pas le fauteuil de beauté électrique ou ses accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
- Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être documentées.

Attention !

- Si vous constatez un défaut, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un service après-vente agréé . Seul du personnel expérimenté ou agréé peut ouvrir ou remplacer le vérin / l'unité de commande.
- Si une pièce de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

Dépannage :

Problème	Diagnostic	Solution
Les boutons ne répondent pas	- Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien branchée - Vérifiez que toutes les fiches reliant le transformateur sont correctement branchées	- Débranchez la fiche d'alimentation et rebranchez-la - Débranchez toutes les fiches de connexion et rebranchez-les
Des bruits et des vibrations se produisent lors du levage du siège	- Vis desserrées	- Serrez les vis
Le voyant ne s'allume pas	- Le câble de la télécommande n'est pas correctement branché ou la télécommande est défectueuse	- Rebranchez le câble. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacez la télécommande

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 2000 x 810 x 610-910 mm
Charge maximale : 140 kg Poids net :
76 kg
Plage de hauteur réglable : 610-910 mm
Tension d'entrée : CA 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Tension de sortie : CC 24 V

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. L'utilisation de cet appareil par du personnel cosmétique qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le traitement.

2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un employé d'un service après-vente agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec les mains mouillées, afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.

7. Ne rien insérer dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.

9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et inversement).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement, d'être endommagé, voire de brûler.

ATTENTION :

1. En cas de dommage du cordon d'alimentation ou d'autres pannes, contactez un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation de l'appareil, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, afin qu'elles comprennent les risques encourus.

3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. C'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques, les instruments et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage des matières premières, conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ménagères. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement naturel conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément, puis transférés vers des points de collecte de déchets électroniques et électriques.

À la fin de leur durée de vie, les anciens appareils contiennent des composants recyclables de grande valeur, c'est pourquoi ils doivent être remis à des centres de recyclage. Ils doivent donc être remis à des points de collecte appropriés, mais peuvent également être remis à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–) 20 °C et (+) 50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou laissé tomber, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des intempéries.