ACTIVESHOP®

Használati utasítás

Azzurro Lux 3 m szépségszék



Importőr:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025


Különböző nyelvek keresése

Figyelem!

1. A lábtartó nem alkalmas felnőtt személy teljes testsúlyának megtartására.
2. Ne üljön közvetlenül a kartámaszra vagy a lábtartóra.
3. Ne emeljen fel több súlyt, mint amennyit a szék elbír.
4. Biztonsági okokból mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa a tápkábelt.
5. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel felemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben a tápkábel könnyen eltávolítható legyen.
6. Az elektromos szépségápolási szék mozgatása előtt távolítsa el a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék alkatrészei közé.
7. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a csatlakozót, ne használja a széket, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
8. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személyek használják a távirányítót.
9. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
10. Győződjön meg arról, hogy a szék körül elegendő hely van ahhoz, hogy szabadon össze lehessen hajtani és kinyithatni.
11. Győződjön meg arról, hogy a szék körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
12. Ne módosítsa saját kezűleg a készüléket. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
13. Ne dobjon nehéz tárgyakat a székre, és ne ugorjon rá.

Összeszerelés

1. Helyezze a fejtámlát a háttámla tetején található lyukba (1. ábra).
2. Helyezze és rögzítse a bal és jobb kartámaszt a szék csapjához, majd forgassa el őket 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba (2. ábra).

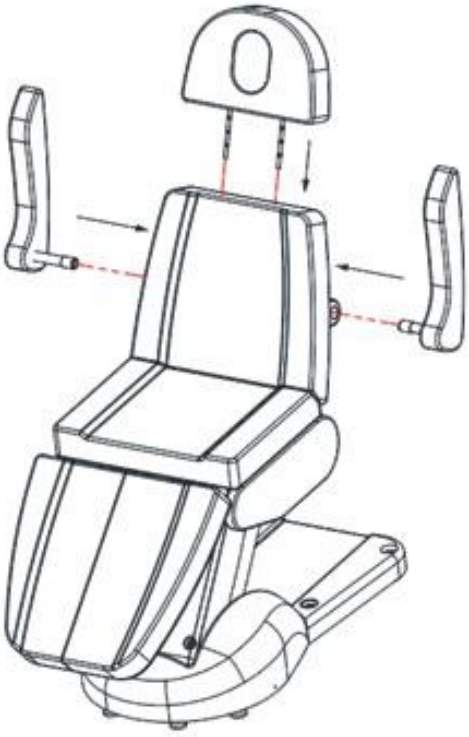


1. ábra



2. ábra

Távirányító

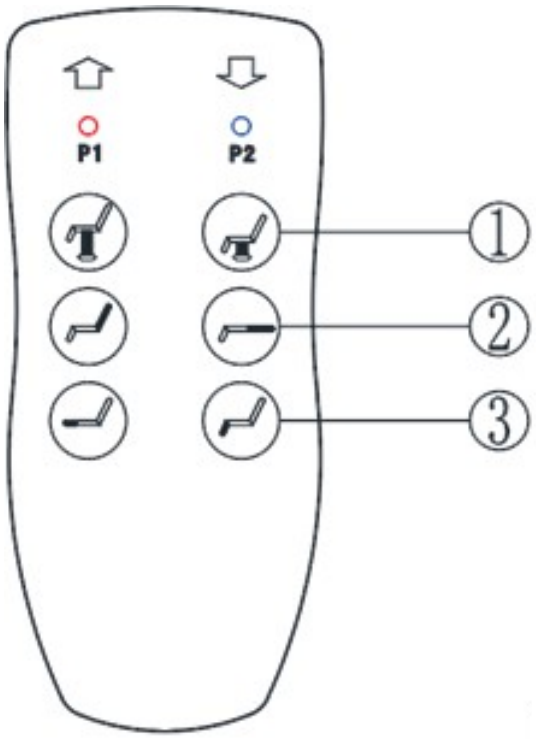

1. Nyomja meg a gombot gombot az ülés emeléséhez.

1. Nyomja meg a gombot az ülés leengedéséhez.

2. Nyomja meg a gombot a háttámla dőlésszögének növeléséhez.


2. Nyomja meg a gombot a háttámla dőlésszögének csökkentéséhez.

3. Nyomja meg a lábtartó szög gombot a lábtartó szögének növeléséhez.


3. Nyomja meg a gombot a lábtartó szögének csökkentéséhez.

További funkciók

- Húzza hátra a kart, és tartsa lenyomva a lábtartó szögének beállításához.

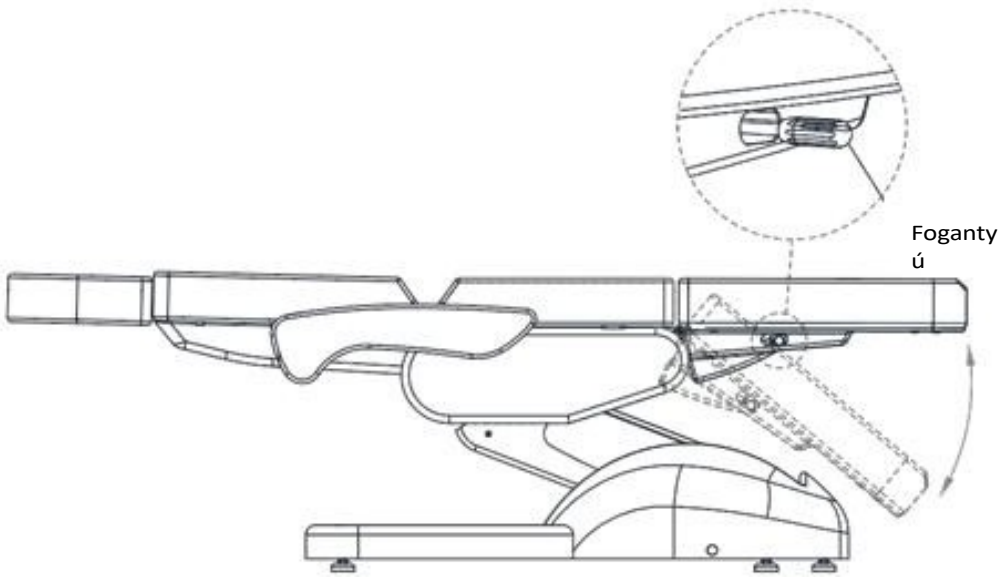

- A fejtámla magassága felfelé húzással vagy lefelé nyomással állítható.

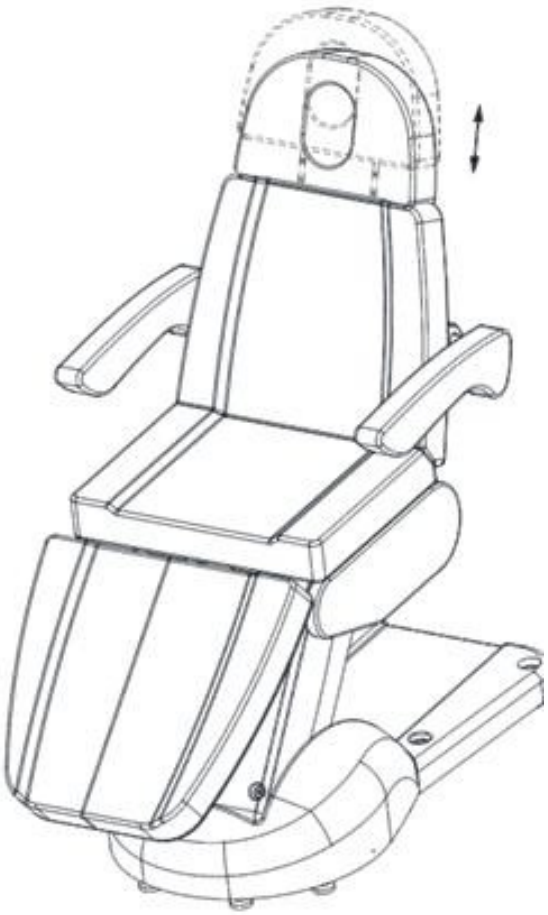

Karbantartás:

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- A tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.
- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne felejtse el minden használat után megtisztítani és fertőtleníteni a széket. Ajánlatos havonta egyszer alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

- A fém és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával.
egy ruhával. A nehezen elérhető helyek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe hasznos lehet. Ne használjon túl sok tisztítófolyadékot a készüléken. Ezután fertőtlenítse a készüléket egy megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A legalkalmasabb egy enyhe tisztítószer oldat. Az ammónia és a legtöbb oldószer használható a makacs foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítson magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadék kiömléséhez vezethetnek.
- Tisztításhoz ne használjon oldószereket vagy savakat.

IV Ülésfelület

- Törölje le a szék felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd törölje le egy tiszta, puha ruhával.

A készülék szervizelése előtt válassza le a hálózatról.

- A javításokat csak a gyártó által felhatalmazott, tapasztalt szakemberek végezhetik.
- A nem felhatalmazott személyzet által végzett javítások személyi sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatják, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Kizárólag a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Ne használja az elektromos szépségszéket vagy kiegészítőket, ha azok nem működnek megfelelően.
- Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Figyelem!

- Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
  szervizközponttal. A működtető
  / vezérlőegységet.
- Ha a készülék bármely része megsérült, húzza ki a tápkábelt és ne használja tovább. Ezután értesítse a szervizközpontot.

Hibae l h árítás:

Probléma	Diagnózis	Megoldás
A gombok nem reagálnak	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva - Ellenőrizze, hogy az összes transzformátor csatlakozó dugó megfelelően vannak-e csatlakoztatva	- Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd csatlakoztassa újra - Húzza ki az összes csatlakozót, majd csatlakoztassa újra őket
Zaj és rezgés jelentkezik a szék felemelésekor	- Lazult csavarok	- Húzza meg a csavarokat
A jelzőfény nem világít	- A távirányító kábele nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy a távirányító hibás	- Csatlakoztassa újra a kábelt; ha ez sem segít, cserélje ki a távirányítót

Műszaki adatok:

Méretek: 2000 x 810 x 610–910 mm
Maximális terhelés: 140 kg Nettó súly:
76 kg
Állítható magasságtartomány: 610–910 mm
Bemeneti feszültség: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz Kimeneti
feszültség: DC 24 V

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A kezelés során nemkívánatos hatások elkerülése érdekében a készüléket csak képzett szépségápolási szakemberek használhatják.

2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a felhasználói kézikönyvben meghatároztak. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk) végezhet.

3. Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készülék dugaszát, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIV Tomasz Pacholczyk által kijelölt szervizközponttal: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen tárgyakat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsiba, polcra vagy járműbe. A készülék leesés esetén megsérülhet.

9. A készülék megadott élettartamának garantálása érdekében ajánlott egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (a bekapcsolás és kikapcsolás között, és fordítva).

10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, megrongálódásának vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉS:

1. A tápkábel meghibásodása vagy egyéb meghibásodások esetén a veszély elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy oktatást kapnak a készülék b i z t o n s á g o s h a s z n á l a t áról, hogy megértsék a veszélyeket.

3. A készülék nem gyermekek számára készült. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatát nem ismerő személyek tartózkodnak a közelében.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE

A használt elektromos berendezéseket, műszereket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell leadni. Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő konténerekbe dobni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. A környezet védelme érdekében natural összhangban a irányelvvel 2012/19/EK a hulladékokról elektromos és elektronikus berendezésekről
A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a hulladék elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeire kell szállítani.

Élettartamuk végén a régi készülékek értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell elküldeni. Ezért azokat megfelelő gyűjtőhelyekre kell vinni, vagy elküldeni az ACTIV Tomasz Pacholczyk cégnek.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, 75% relatív páratartalom feletti hőmérsékleten kell tárolni. Üzemi hőmérséklet-tartomány: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben ne dobja el és ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak.