ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

Kosmetische stoel Azzurro Lux 3m



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025

Scan voor andere talen


CE

Let op!

1. De voetensteun is niet bedoeld om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Het is niet toegestaan om rechtstreeks op de armleuning en de voetensteun te gaan zitten.
3. Til geen zwaarder gewicht op dan het stoel kan dragen.
4. Sluit het netsnoer om veiligheidsredenen altijd aan op een geaard stopcontact.
5. Bevestig het netsnoer niet aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer in geval van nood gemakkelijk kan worden verwijderd.
6. Voordat u de elektrische schoonheidsstoel verplaatst, moet u het netsnoer verwijderen, zodat het niet tussen de onderdelen van de stoel vast komt te zitten.
7. Als het netsnoer beschadigd is, koppel het dan onmiddellijk los, gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkende serviceafdeling. Gebruik alleen het originele netsnoer.
8. Laat de afstandsbediening niet bedienen door iemand die de behandeling niet uitvoert.
9. Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
10. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte rondom de stoel is, zodat deze gemakkelijk kan worden ingeklapt en uitgeklapt.
11. Zorg ervoor dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen in de buurt van de stoel staan die het apparaat kunnen beschadigen.
12. Breng zelf geen wijzigingen aan het apparaat aan. Als de stoel niet goed werkt, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met een erkende servicepartner.
13. Gooi geen zware voorwerpen op de stoel en spring er niet op.

Montage

1. Plaats de hoofdsteun in de opening aan de bovenkant van de rugleuning (afb. 1).
2. Plaats en verbind de linker- en rechterarmsteun met de pen in de stoel en draai vervolgens 90° tegen de klok in (afb. 2).

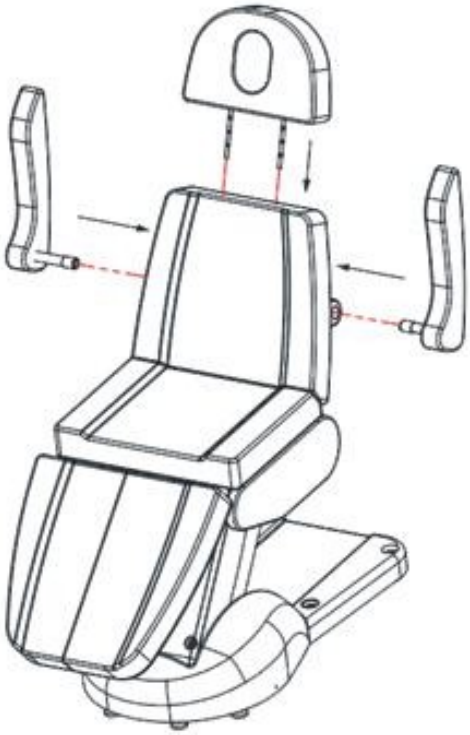


Afb. 1



Afb. 2


Afstandsbediening

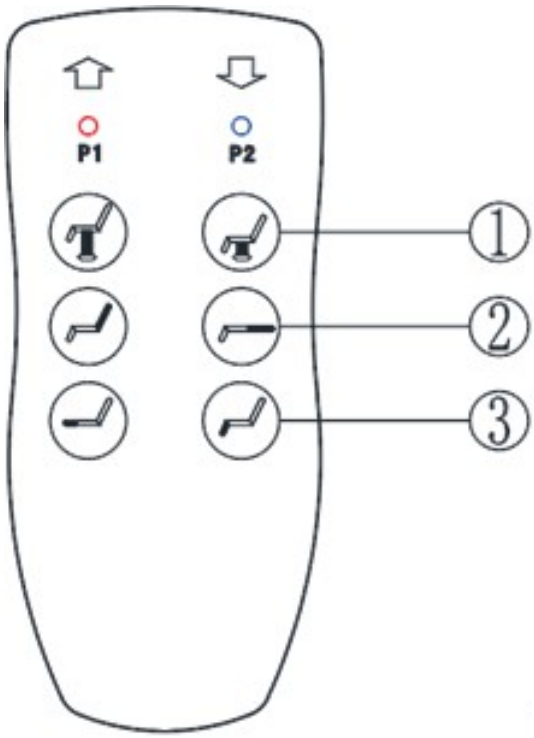


1. Druk op de knop om de stoel omhoog te brengen.
1. Druk op de knop om de stoel te verlagen.
2. Druk op de knop om de hoek van de rugleuning te vergroten.
2. Druk op de knop om de hellingshoek van de rugleuning te verkleinen.
3. Druk op de knop om de hellingshoek van de voetsteun te vergroten.
3. Druk op de knop om de hellingshoek van de voetsteun te verkleinen.

Extra functies

- Trek de hendel naar achteren en houd deze vast om de hellingshoek van de voetsteun aan te passen.

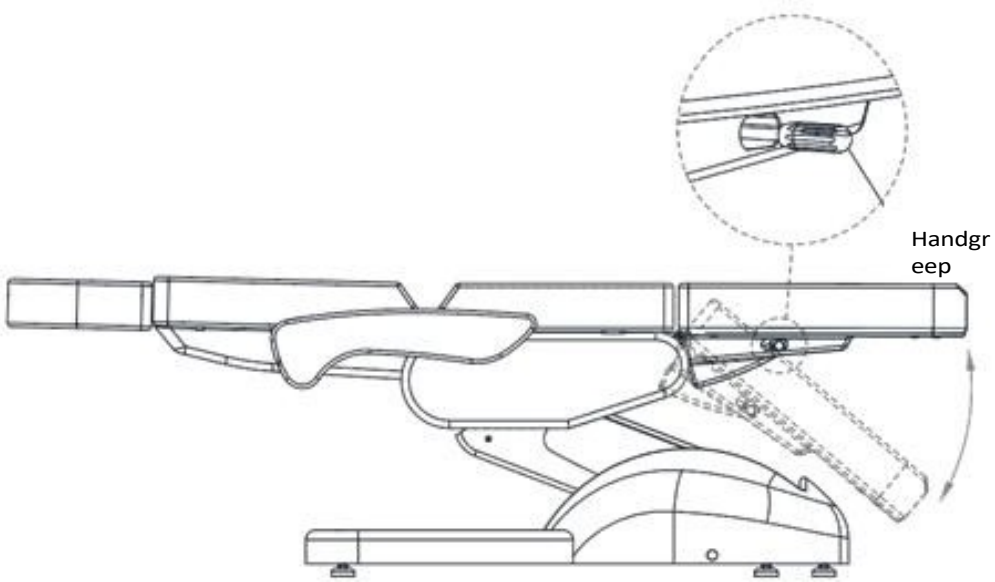

- De hoogte van het hoofdsteun kan worden aangepast door het omhoog te trekken of naar beneden te drukken.

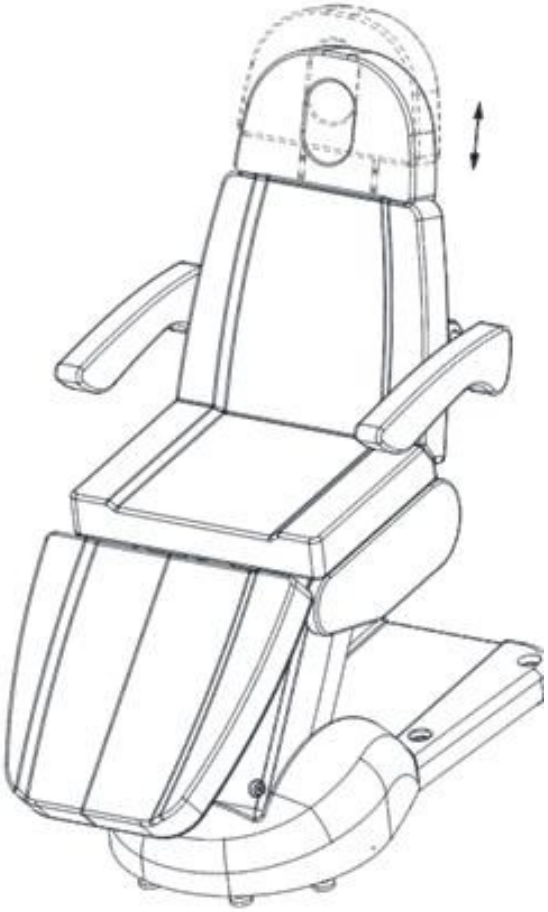

Onderhoud:

Reiniging en desinfectie van het apparaat:

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u begint met reinigen.
- Om het oppervlak van de stoel in goede staat te houden, moet u deze regelmatig reinigen. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om eenmaal per maand een grondige desinfectie uit te voeren.

I Metalen en plastic oppervlakken

- Om metalen en plastic oppervlakken en bedieningselementen te reinigen, veegt u ze af met een vochtige met een doek. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken is een kleine borstel zeer geschikt. Gebruik niet te veel reinigingsvloeistof voor het apparaat. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

- Het beste kunt u een milde detergentoplossing gebruiken. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op basis van chloor.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douche, hogedrukreinigers) om te reinigen.
- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot het morsen van vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Oppervlak van de stoel

- Veeg het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciaal reinigingsmiddel voor leer en wrijf het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Koppel het apparaat los van het stroomnet voordat u het onderhoudt.

- Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel.
- Reparaties door niet-geautoriseerd personeel kunnen leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Gebruik de elektrische cosmetische stoel of accessoires niet als ze niet correct werken.
- Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Let op!

- Als u defecten constateert, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkende
  service. Alleen ervaren of geautoriseerd personeel mag de actuator
  / de besturingseenheid.
- Als een onderdeel van het apparaat beschadigd is, koppel dan de stekker los en stop met het gebruik ervan. Neem vervolgens contact op met de serviceafdeling.

Problemen oplossen:

Probleem	Diagnose	Oplossing
De knoppen reageren niet	- Controleer of de stekker in het stopcontact zit - Controleer of alle stekkers van de transformator goed zijn aangesloten	- Koppel de stekker los en sluit hem opnieuw aan - Koppel alle verbindingsstekkers los en sluit ze opnieuw aan
Er treden geluiden en trillingen op bij het omhoog brengen van de stoel	- Losse schroeven	- Draai de schroeven vast
Het controlelampje brandt niet	- De kabel van de afstandsbediening is niet goed aangesloten of de afstandsbediening is defect	- Sluit de kabel opnieuw aan. Als deze nog steeds niet werkt, vervang dan de afstandsbediening

Technische gegevens:

Afmetingen: 2000 x 810 x 610–910 mm
Maximale belasting: 140 kg
Nettogewicht: 76 kg
Instelbaar hoogtebereik: 610–910 mm
Ingangsspanning: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 24 V

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel worden bediend om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner (ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende service van ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat geeft een vreemde geur af, rookt of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.

5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Voor de veiligheid moet u de stekker uit het stopcontact halen nadat u het apparaat hebt gebruikt.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.

9. Om de vastgestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet correct functioneert, beschadigd raakt of zelfs in brand vliegt.

OPMERKING:

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende serviceafdeling om gevaar te voorkomen.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, mits er toezicht of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat, zodat de risico's begrijpelijk zijn.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid of zelfs de dood tot gevolg hebben. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.



AFVOER VAN HET APPARAAT

Afgedankte elektrische apparaten, instrumenten en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra voor grondstoffen, in overeenstemming met de regels voor milieubescherming. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Ter bescherming van het milieu natural overeenkomstig de richtlijn 2012/19/EG betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparaten
elektrische en elektronische apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld en vervolgens worden afgevoerd naar inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparaten.

Aan het einde van hun levensduur bevatten ook oude apparaten waardevolle recyclebare onderdelen, daarom moeten ze worden ingeleverd voor recycling. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten, maar ze kunnen ook worden ingeleverd bij ACTIV Tomasz Pacholczyk.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–) 20 °C en (+) 50 °C, uitsluitend in de originele verpakking. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. De bedrijfstemperatuur ligt tussen (+) 10 °C en (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.