ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Scaun de înfrumusețare Azzurro Lux 3m



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025

Căutați diferite limbi

Atenție!

1. Suportul pentru picioare nu este conceput pentru a susține greutatea totală a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră sau pe suportul pentru picioare.
3. Nu ridicați o greutate mai mare decât cea pe care o poate suporta scaunul.
4. Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
5. Nu legați cablul de alimentare de dispozitiv. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare poate duce la deteriorarea acestuia. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință în caz de urgență.
6. Înainte de a muta scaunul electric de înfrumusețare, scoateți cablul de alimentare pentru a nu rămâne blocat între părțile scaunului.
7. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați-l imediat, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
8. Nu permiteți nimănui care nu efectuează tratamentul să utilizeze telecomanda.
9. Nu așezați obiecte sub scaun.
10. Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul scaunului pentru a-l putea plia și déplia liber.
11. Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau periculoase care ar putea deteriora dispozitivul.
12. Nu modificați dispozitivul singur. Dacă scaunul nu funcționează corect, încetați să îl utilizați și contactați un centru de service autorizat.
13. Nu aruncați obiecte grele pe scaun și nu săriți pe el.

Asamblare

1. Introduceți tetiera în orificiul din partea superioară a spătarului (Fig. 1).
2. Poziționați și conectați cotierele stânga și dreapta la știftul din scaun, apoi rotiți-le cu 90° în sens antiorar (Fig. 2).


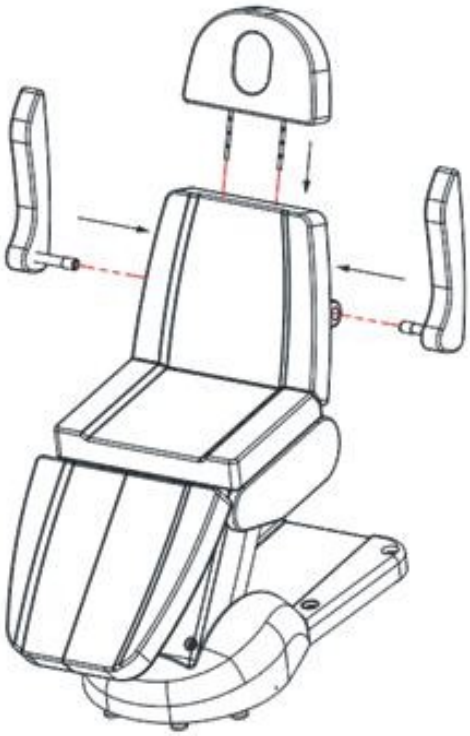


Fig. 1



Fig. 2

Telecomandă

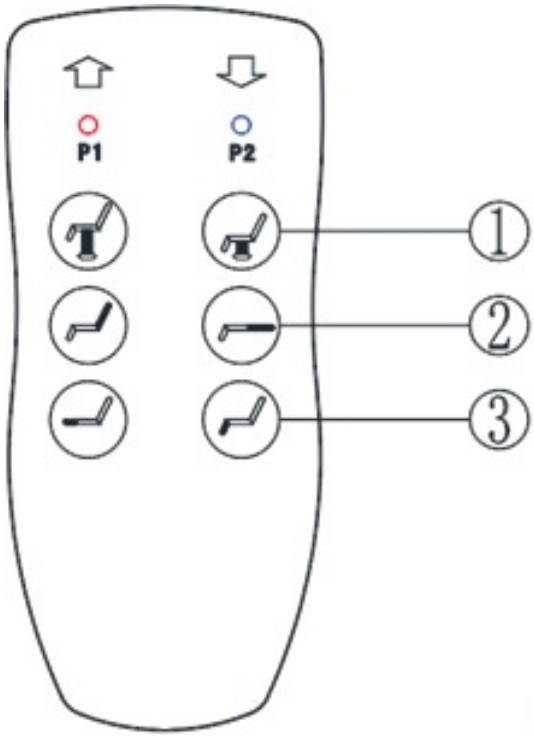


1. Apăsați butonul pentru a ridica scaunul.
1. Apăsați butonul pentru a coborî scaunul.
2. Apăsați butonul pentru a mări unghiul spătarului.
2. Apăsați butonul pentru a reduce unghiul spătarului.
3. Apăsați butonul pentru unghiul suportului pentru picioare pentru a mări unghiul suportului pentru picioare.


3. Apăsați butonul pentru a reduce unghiul suportului pentru picioare.

Funcții suplimentare

- Trageți mânerul înapoi și țineți-l apăsat pentru a regla unghiul suportului pentru picioare.

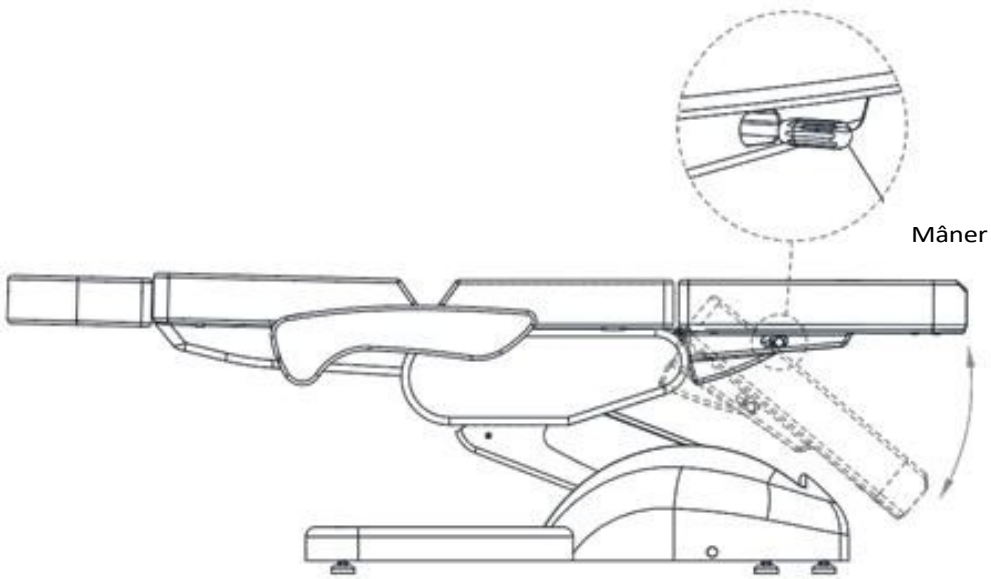

- Înălțimea tetierii poate fi reglată trăgând-o în sus sau împingând-o în jos.

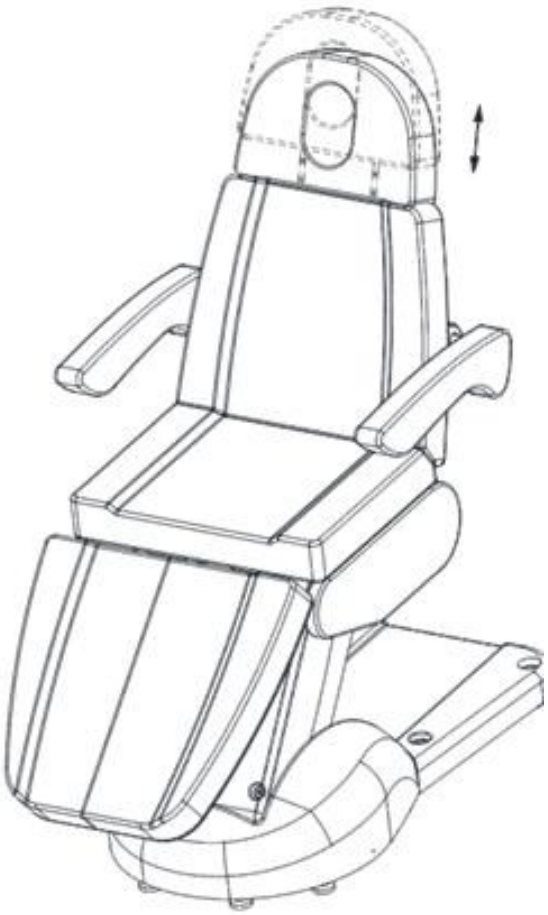

Întreținere:

Curățarea și dezinfectarea dispozitivului:

- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-l regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfectări temeinice o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă.
cu o cârpă. O perie mică este utilă pentru curățarea zonelor sau colțurilor greu accesibile. Nu folosiți prea mult lichid de curățare pe dispozitiv. Apoi dezinfectați dispozitivul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- O soluție detergentă ușoară funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi folosiți pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (duș, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, nu expuneți dispozitivul la condiții care pot duce la vărsarea de lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un produs special pentru curățarea pielii, apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Înainte de a efectua operațiuni de întreținere asupra aparatului, deconectați-l de la rețeaua electrică.

- Reparațiile trebuie efectuate de personal experimentat, autorizat de producător.
- Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot duce la vătămări corporale sau la deteriorarea dispozitivului, pentru care producătorul nu este responsabil.
- Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
- Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corect.
- Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie documentate.

Atenție!

- Dacă constatați defecte, încetați utilizarea echipamentului și contactați un serviciu autorizat . Numai personalul cu experiență sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare / unitatea de control.
- Dacă vreo parte a dispozitivului este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și încetați utilizarea acestuia. Apoi, anunțați centrul de service.

Depanare:

Problemă	Diagnostic	Soluție
Butoanele nu răspund	- Verificați dacă priza de alimentare este conectată - Verificați dacă toate mufele de conectare ale transformatorului sunt conectate corespunzător	- Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l - Deconectați toate mufele de conectare și reconectați-le
Se produc zgomote și vibrații la ridicarea scaunului	- Șuruburi slăbite	- Strângeți șuruburile
Indicatorul luminos nu este aprins	- Cablul telecomenzii nu este conectat corect sau telecomanda este defectă	- Reconectați cablul; dacă tot nu funcționează, înlocuiți telecomanda

Date tehnice:

Dimensiuni: 2000 x 810 x 610–910
mm Sarcină maximă: 140 kg
Greutate netă: 76 kg
Interval de reglare a înălțimii: 610–910 mm
Tensiune de intrare: CA 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: CC 24 V

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Aparatul trebuie utilizat

numai de personal calificat în domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, astfel încât lichidele să nu poată pătrunde în dispozitiv.

4. Deconectați imediat dispozitivul și contactați centrul de service autorizat furnizat de ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) lichid a pătruns în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.

7. Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dispozitivul se poate deteriora dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).

10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul să funcționeze defectuos, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță, astfel încât să înțeleagă pericolele.

3. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când în apropierea lui se află copii sau persoane care nu cunosc suficient modul de utilizare al aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, astfel încât aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.



ELIMINAREA DISPOZITIVULUI

Echipamentele electrice, instrumentele și ambalajele uzate trebuie predate centrelor de reciclare în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Echipamentele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Vă rugăm să respectați reglementările privind eliminarea acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul natural în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat și apoi transferate la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice.

La sfârșitul duratei lor de viață utile, dispozitivele vechi conțin componente reciclabile valoroase, motiv pentru care trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi trimise la ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, nu aruncați și nu scăpați dispozitivul, nu îl expuneți la șocuri mecanice sau factori atmosferici.