ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Kozmetické kreslo Azzurro Lux 3m



Dovozca:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025

Vyhľadajte rôzne jazyky


CE

Upozornenie!

1. Opierka na nohy nie je navrhnutá tak, aby uniesla celú váhu dospelého človeka.
2. Nesadajte si priamo na podrúčku alebo opierku nôh.
3. Nezdvíhajte väčšiu váhu, ako je nosnosť stoličky.
4. Z bezpečnostných dôvodov vždy pripojte napájací kábel do uzemneného zásuvky.
5. Nepripájajte napájací kábel k zariadeniu. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel môže spôsobiť jeho poškodenie. Uistite sa, že napájací kábel je možné v prípade núdze ľahko odpojiť.
6. Pred presunutím elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezachytil medzi časťami kresla.
7. Ak je napájací kábel poškodený, ihneď ho odpojte, stoličku nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
8. Neumožnite nikomu, kto nevykonáva ošetrenie, ovládať diaľkové ovládanie.
9. Pod stoličku neukladajte žiadne predmety.
10. Zabezpečte, aby bolo okolo stoličky dostatok priestoru, aby sa dala voľne skladať a rozkladať.
11. Uistite sa, že v okolí stoličky nie sú žiadne ostré alebo nebezpečné predmety, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
12. Zariadenie neupravujte sami. Ak stolička nefunguje správne, prestaňte ju používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
13. Na stoličku nehádžte ťažké predmety a neskáčte na ňu.

Montáž

1. Vložte opierku hlavy do otvoru v hornej časti operadla (obr. 1).
2. Umiestnite a pripojte ľavé a pravé podrúčky k čapu v stoličke, potom ich otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek (obr. 2).

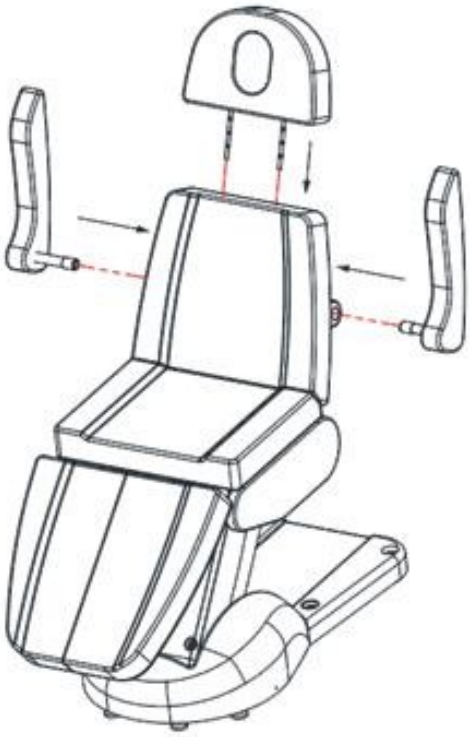


Obr. 1



Obr. 2

Diaľkové ovládanie

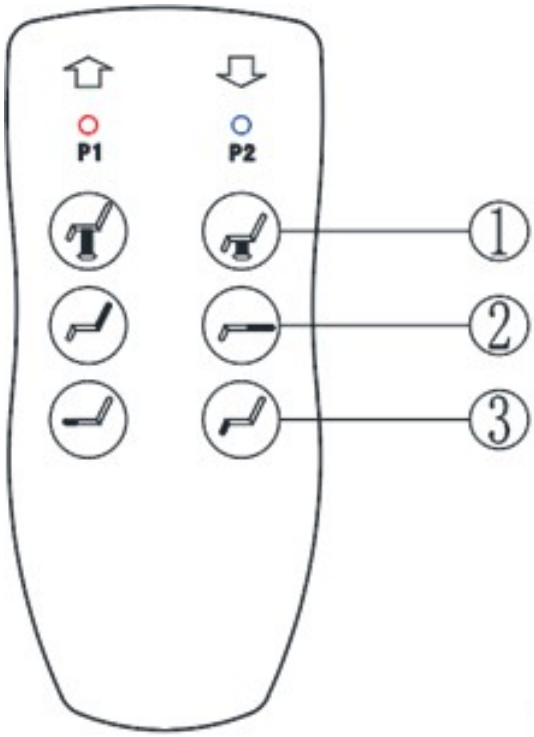


1. Stlačte tlačidlo , aby ste zdvihli sedadlo.
1. Stlačte tlačidlo , aby ste sedadlo spustili.
2. Stlačte tlačidlo , aby ste zvýšili uhol operadla.
2. Stlačte tlačidlo , aby ste zmenšili uhol operadla.
3. Stlačte tlačidlo uhla opierky nôh, aby ste zvýšili uhol opierky nôh.


3. Stlačte tlačidlo pre zníženie uhla opierky nôh.

Ďalšie funkcie

- Potiahnite rukoväť dozadu a podržte ju, aby ste nastavili uhol opierky nôh.

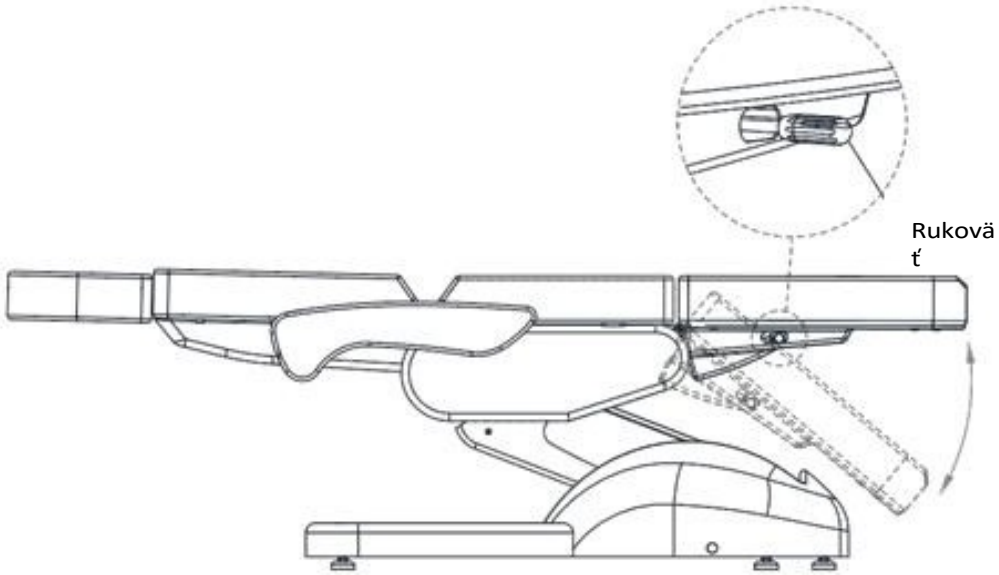

- Výšku opierky hlavy je možné nastaviť jej zdvihnutím alebo stlačením.

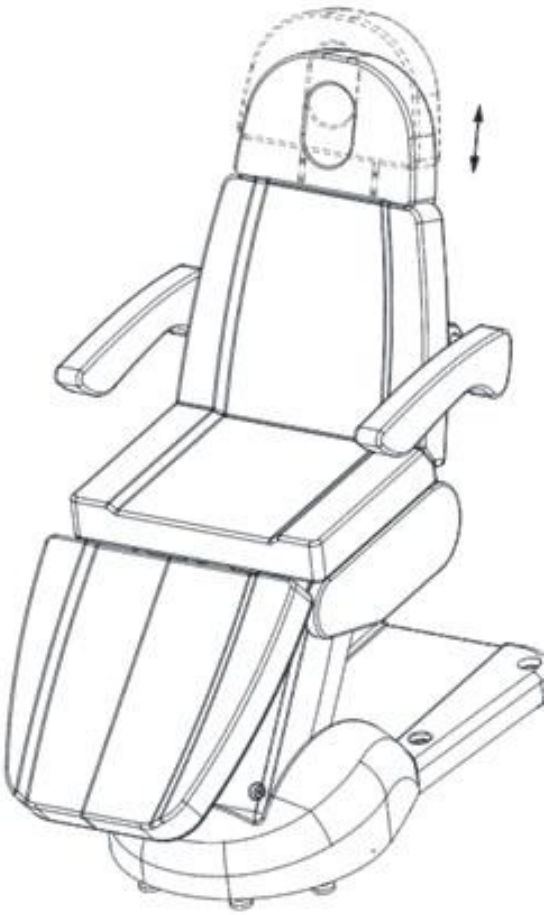

Údržba:

Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

- Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.
- Aby ste udržali povrch stoličky v dobrom stave, pravidelne ju čistite. N e zabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a dezinfikovať. Odporúča sa raz mesačne vykonať dôkladnú dezinfekciu.

I Kovové a plastové povrchy

- Na čistenie kovových a plastových povrchov a ovládacích prvkov ich utrite vlhkou handričkou. handričkou. Na čistenie ťažko dostupných miest alebo rohov je užitočná malá kefka. Na zariadenie nenanášajte príliš veľa čistiaceho prostriedku. Potom zariadenie dezinfikujte vhodným prostriedkom.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie funguje jemný čistiaci prostriedok. Na odstránenie odolných škvŕn môžete použiť amoniak a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné trysky (sprcha, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, nevystavujte zariadenie podmienkam, ktoré môžu viesť k rozliatiu tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch stoličky rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom utrite čistou, mäkkou handričkou.

Pred servisom spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.

- Oprava by mala byť vykonaná skúseným personálom autorizovaným výrobcom.
- Opravy vykonané neoprávneným personálom môžu mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia, za čo výrobca nezodpovedá.
- Používajte iba originálne náhradné diely schválené výrobcom.
- Nepoužívajte elektrickú kozmetickú stoličku ani príslušenstvo, ak nefungujú správne.
- Všetky údržbárske a opravárske práce musia byť zdokumentované.

Pozor!

- Ak zistíte akékoľvek poruchy, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte autorizovaný servisné stredisko. Otvárať alebo vymieňať pohonnú jednotku / riadiacu jednotku.
- Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom informujte servisné stredisko.

Odstraňovanie porúch:

Problém	Diagnóza	Riešenie
Tlačidlá nereagujú	- Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený - Skontrolujte, či sú všetky konektory transformátora sú správne pripojené	- Odpojte napájací kábel a znovu ho pripojte - Odpojte všetky pripojovacie zástrčky a znovu ich pripojte
Pri zdvíhaní stoličky dochádza k hluku a vibráciám	- Voľné skrutky	- Utiahnite skrutky
Kontrolka nesvieti	- Kábel diaľkového ovládania nie je správne pripojený alebo je diaľkové ovládanie je vadný	- Znovu pripojte kábel; ak stále nefunguje, vymeňte diaľkové ovládanie

Technické údaje:

Rozmery: 2000 x 810 x 610–910 mm
Maximálne zaťaženie: 140 kg Čistá
hmotnosť: 76 kg
Rozsah nastaviteľnej výšky: 610–910 mm
Vstupné napätie: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz Výstupné
napätie: DC 24 V

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas ošetrenia.

2. Nerozoberajte zariadenie a nepoužívajte ho na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik (ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Neinštalujte ani neprevádzkujte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo s mokrými rukami, aby sa do zariadenia nemohli dostať žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte autorizované servisné stredisko ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo zvláštne zvuky, c) napájací kábel bol poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo jeho kryt bol poškodený.

5. Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliapnuť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov po každom použití zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.

7. Do otvoru v zariadení nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Zariadenie sa môže poškodiť, ak spadne.

9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájanie musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej funkcie, poškodenia alebo dokonca spálenia zariadenia.

POZNÁMKA:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča, aby pochopili nebezpečenstvá.

3. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti nesmú hrať sa so zariadením.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto musí byť spotrebič používaný a skladovaný mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Použité elektrické zariadenia, prístroje a obaly by mali byť odovzdané do recyklačných centier v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Elektrické zariadenia by nemali byť likvidované v kontajneroch na domový odpad. Dodržiavajte predpisy na likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia natural v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať oddelene a potom odovzdať do zberných miest pre elektrické a elektronické zariadenia.

Na konci svojej životnosti obsahujú staré zariadenia cenné recyklovateľné komponenty, preto by mali byť odoslané na recykláciu. Mali by byť odovzdané na príslušných zberných miestach alebo môžu byť zaslané spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie by sa malo skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Rozsah prevádzkovej teploty: (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy zariadenie nehádžte, neupúšťajte, nevystavujte mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.