ACTIVESHOP®

Návod k použití

Hydraulické podiatrické křeslo Azzurro 713A




Skenování pro různé jazyky

Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025


CE

Rozměry židle:

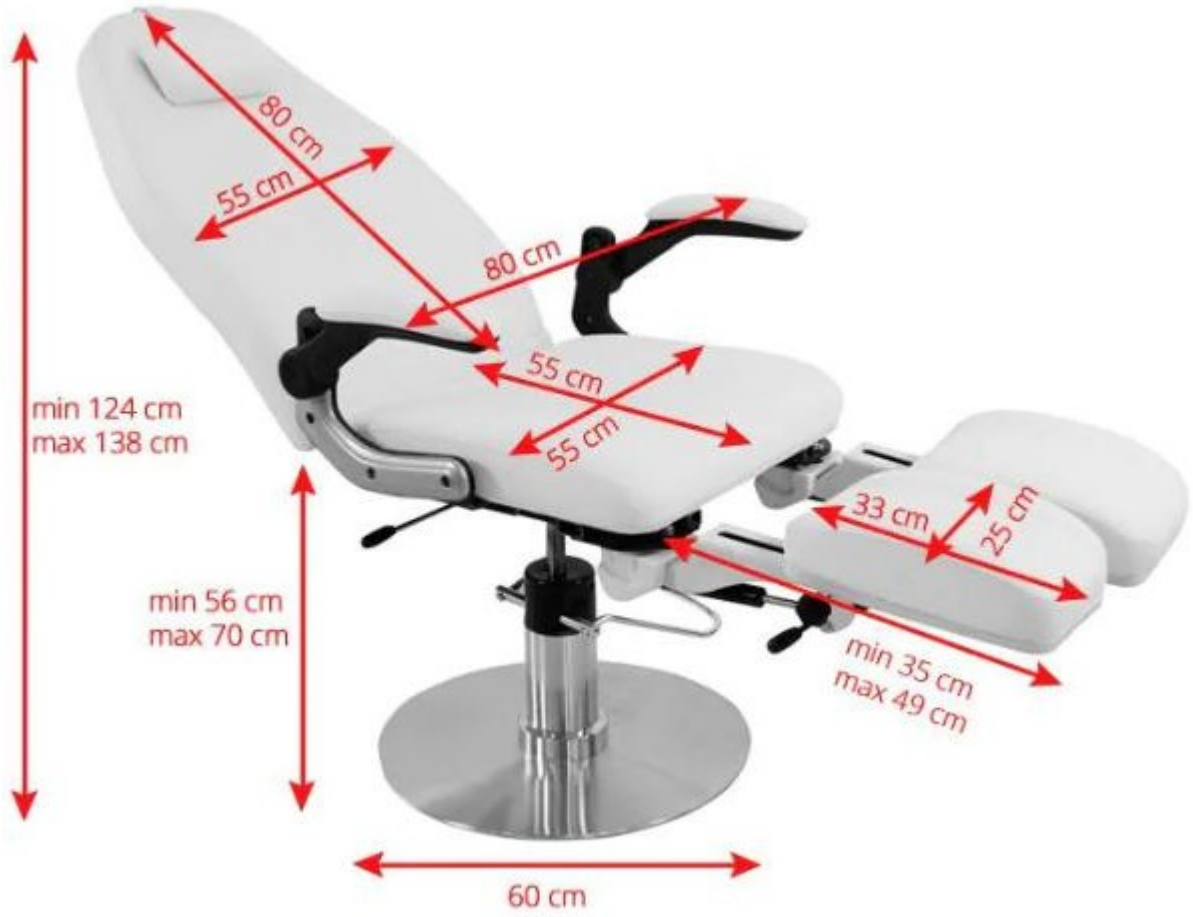


Montáž:


1. Zvedněte páku pohonu do nejvyšší polohy a poté ji usaděte na dřík pohonu podle obrázku.

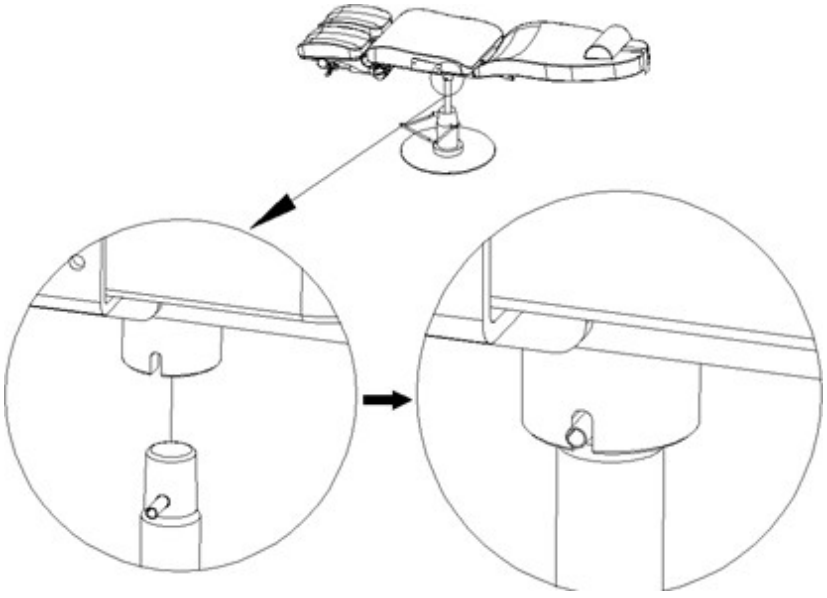

2. Vyrovnejte tyč opěradla s otvorem v aktuátoru. Vložte šroub podle obrázku a poté jej zajistěte svorkou.

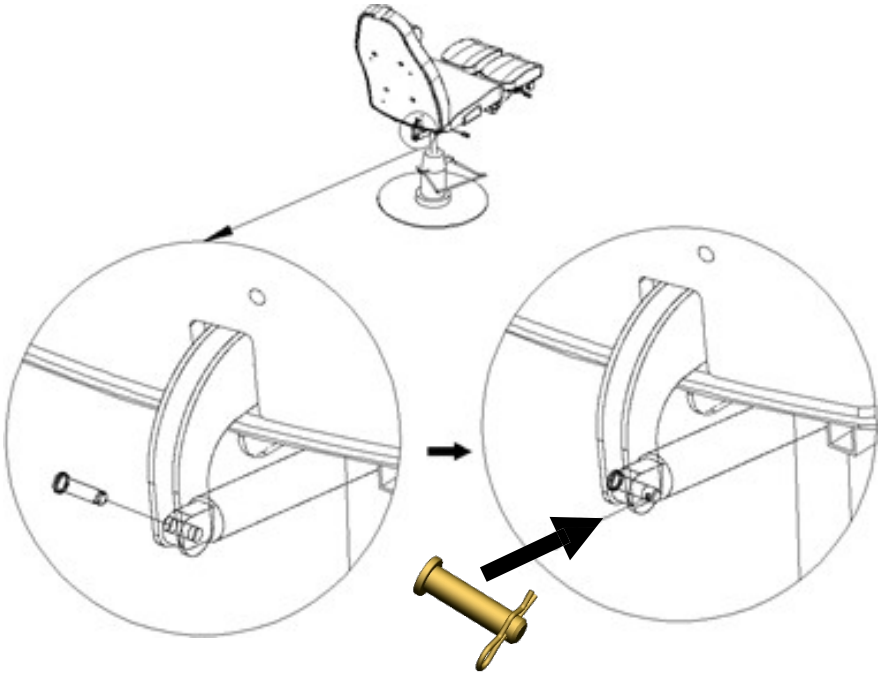


3. Namontujte opěrky pomocí šroubů, jak je znázorněno na obrázku.

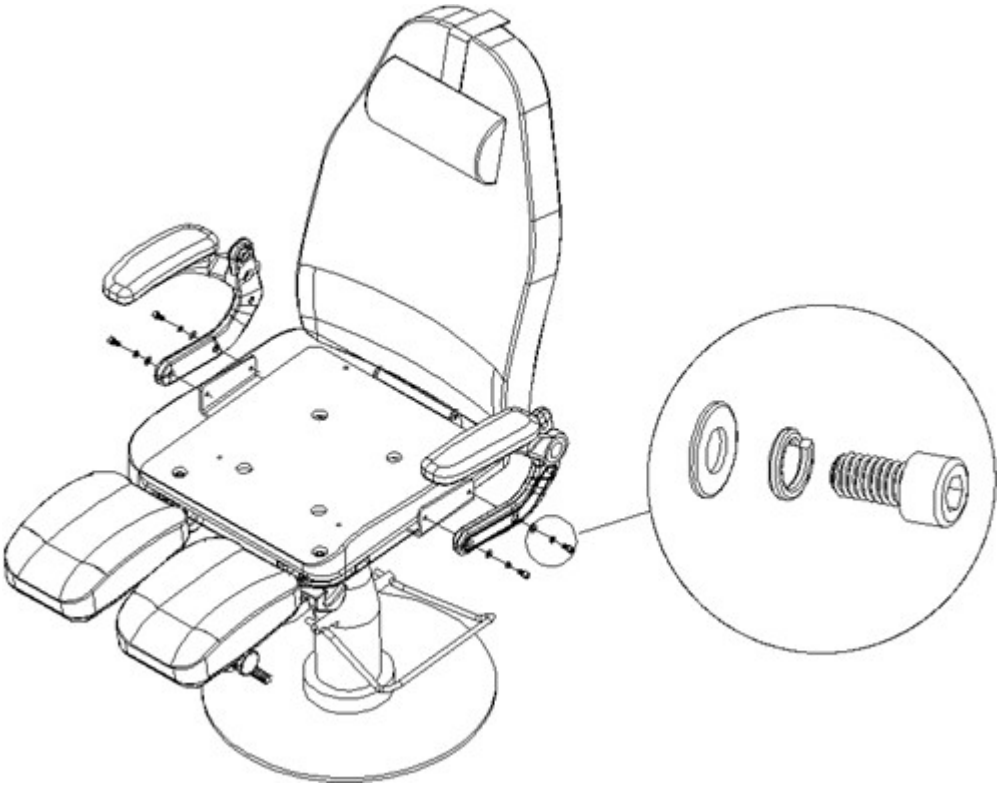


Funkce: V případě, že je opěradlo nainstalováno v prostoru, kde je umístěno, je nutné jej vyjmout:

1. Výšku sedadla lze nastavit pomocí páčky. Zvednutí páky způsobí
   Stisknutím páčky, která blokuje otáčení sedadla, se sedadlo spustí.

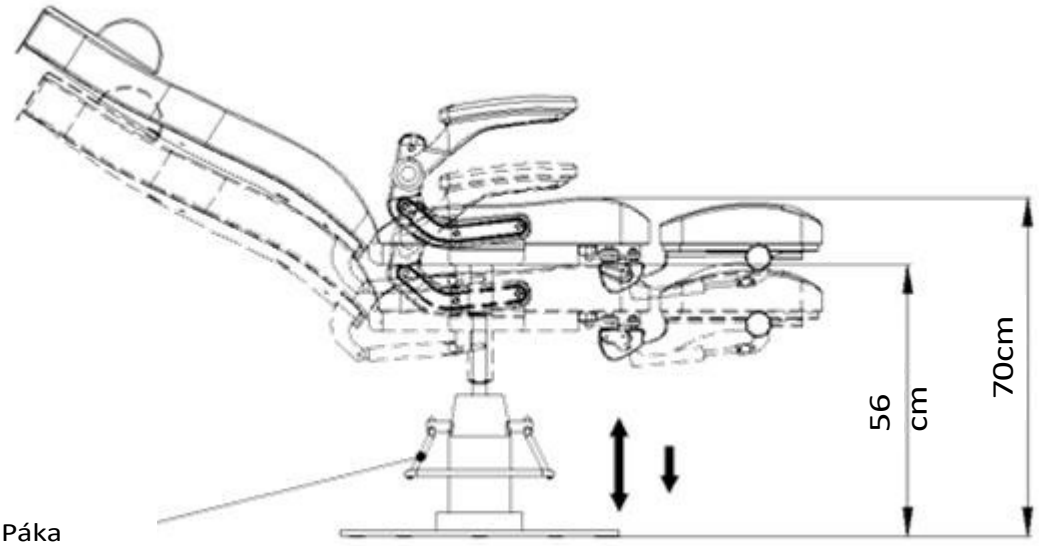

Páka


2. Chcete-li opěradlo sklopit, stiskněte páčku a opřete se, opěradlo se sklopí do vhodného úhlu.
   Maximální sklon opěradla je 45 stupňů.

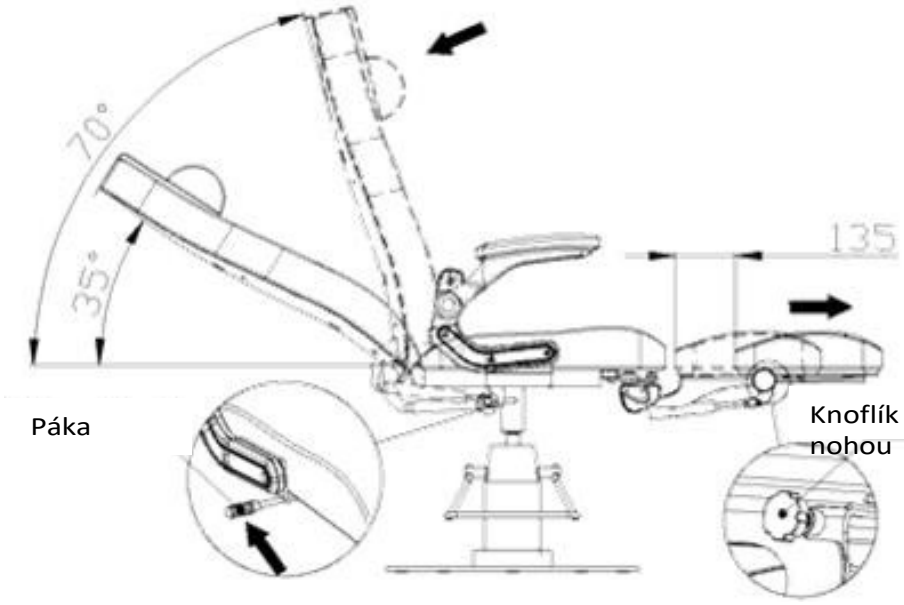

Páka


Knoflík pro nastavení opěrky nohou

3. Opěrku nohou lze zablokovat v poloze 30°, 60° nebo 90°.

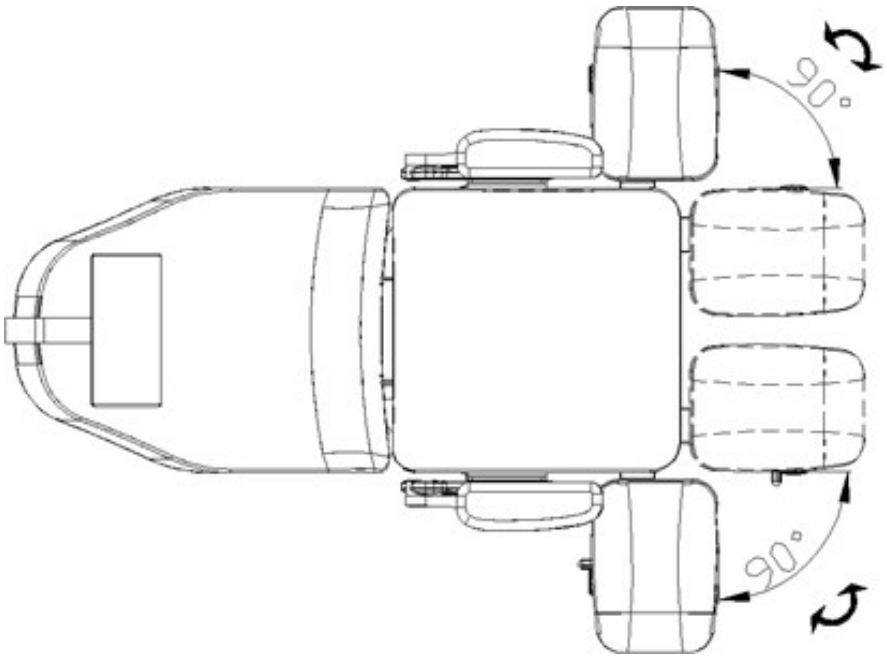

4. a) Pomocí knoflíku a současného stlačení opěrky nohou ji naklopte do požadovaného úhlu. Rozsah náklonu: až 90°.

   b) Područku lze nastavit z vodorovné do svislé polohy.

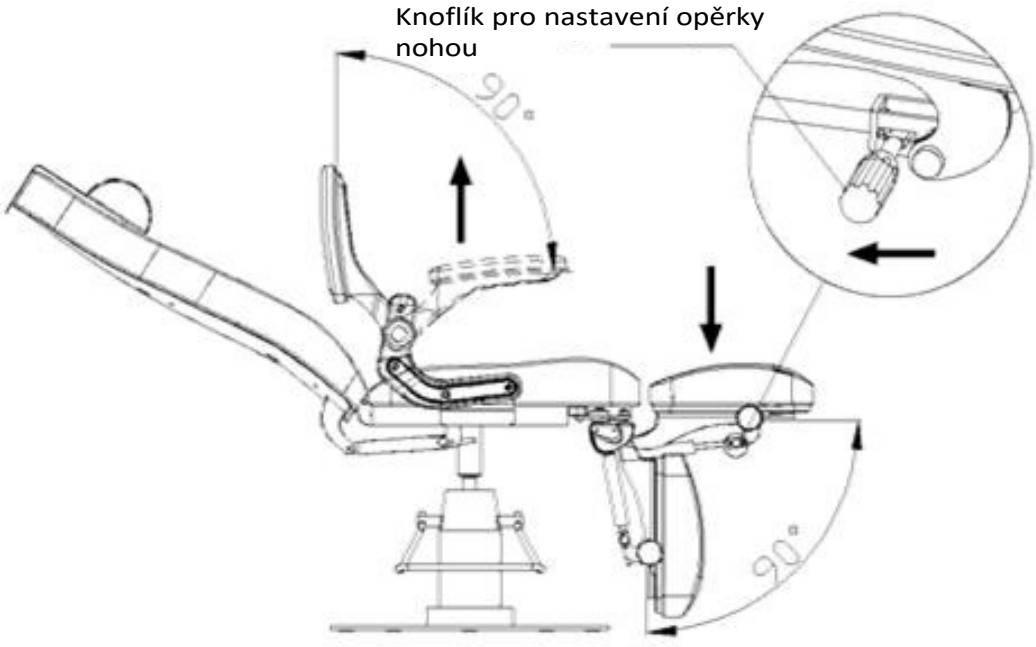

Upozornění.

- Zajistěte, aby si děti nehrály v blízkosti sedačky bez dozoru dospělé osoby.
- Nevkládejte ruce ani nohy do štěrbin sedadla.
- Nevystavujte sedadlo přímému slunečnímu záření.
- Netlačte ani netahejte židli po nerovných podlahách.
- Nestůjte na židli.
- Židličku by neměly používat osoby s fyzickým omezením, smyslovým postižením nebo mentálními problémy.

Čištění a údržba:

- Aby byl povrch židle v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou m ě s í č n ě .

I Kovové a plastové povrchy

- Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupná místa nebo rohy malým kartáčkem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlepší . čištění jemným roztokem čisticího prostředku. Čpavek a většinu rozpouštědel lze použít k odstranění odolných skvrn. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti. N e v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon / řídicí jednotku smí pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Technické údaje: V případě, že se jedná o pohon nebo ovládací prvek, je nutné jej uvést do provozu:

- Maximální zatížení 150 kg
- Hmotnost 56,5 kg
- PU/PVC kůže

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - tzv, aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do zařízení se dostala tekutina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj neumisťujte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje může dojít k poškození.
9. Aby byla zaručena pevná životnost přístroje, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h se obraťte na autorizovaného servisního pracovníka. servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í . Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použitá elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.
Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.