ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Scaun podiatric hidraulic Azzurro 713A




Scanare pentru diferite limbi

Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025


CE

Dimensiunile scaunului:

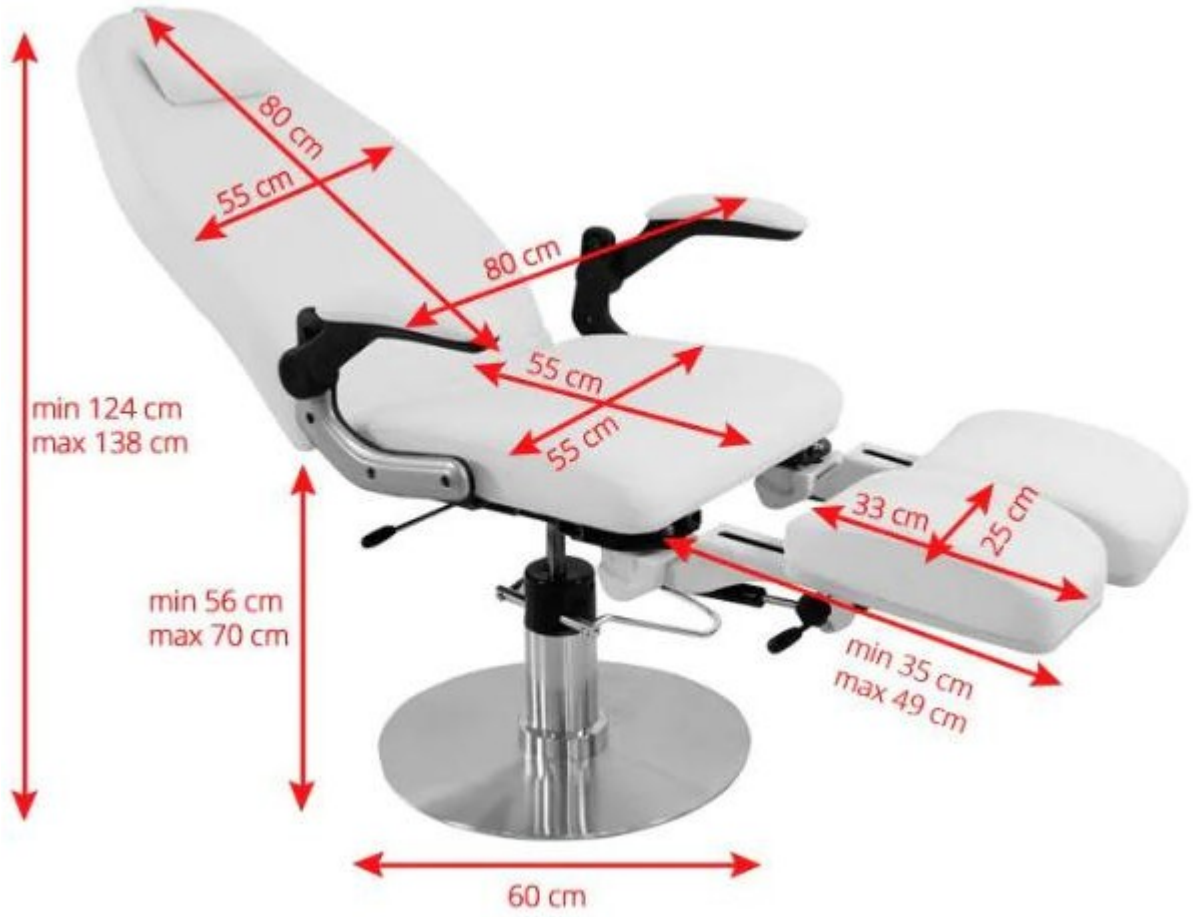


Asamblare:


1. Ridicați maneta de acționare în poziția cea mai înaltă și apoi așezați-o pe tija de acționare, așa cum se arată.

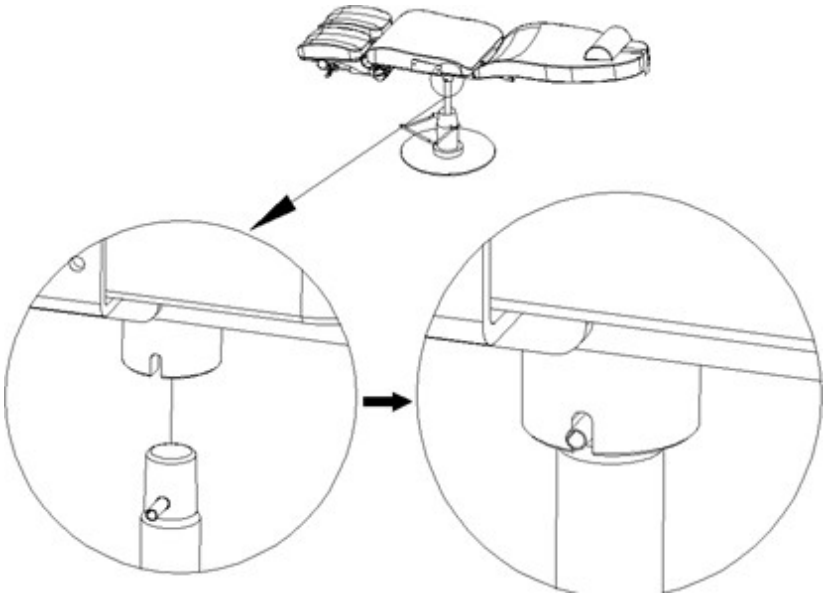

2. Aliniați bara spătarului cu orificiul din actuator. Introduceți șurubul după cum se arată, apoi fixați-l cu clema.

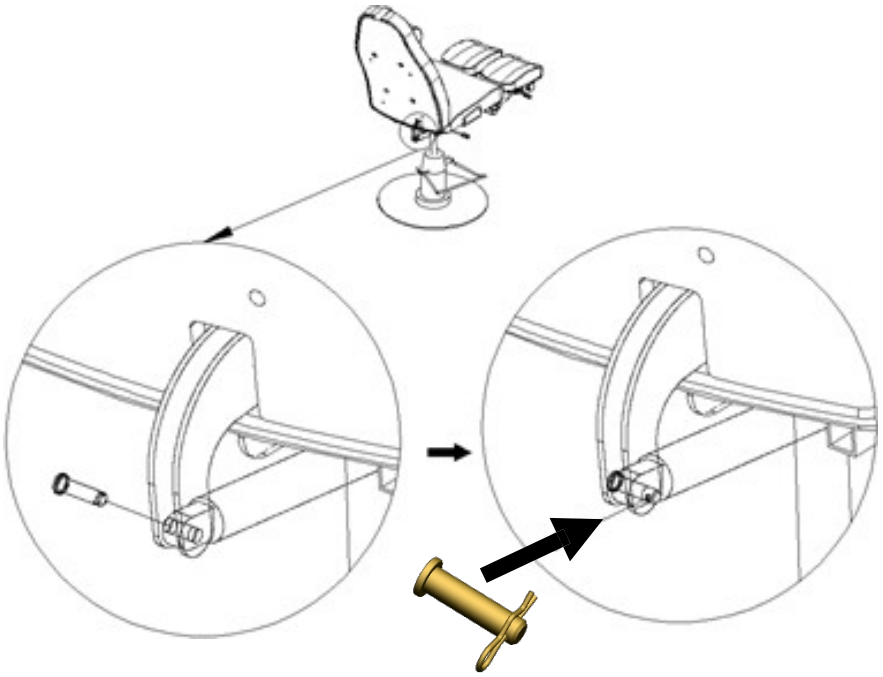


3. Montați cotierele cu ajutorul șuruburilor, așa cum se arată în ilustrație.

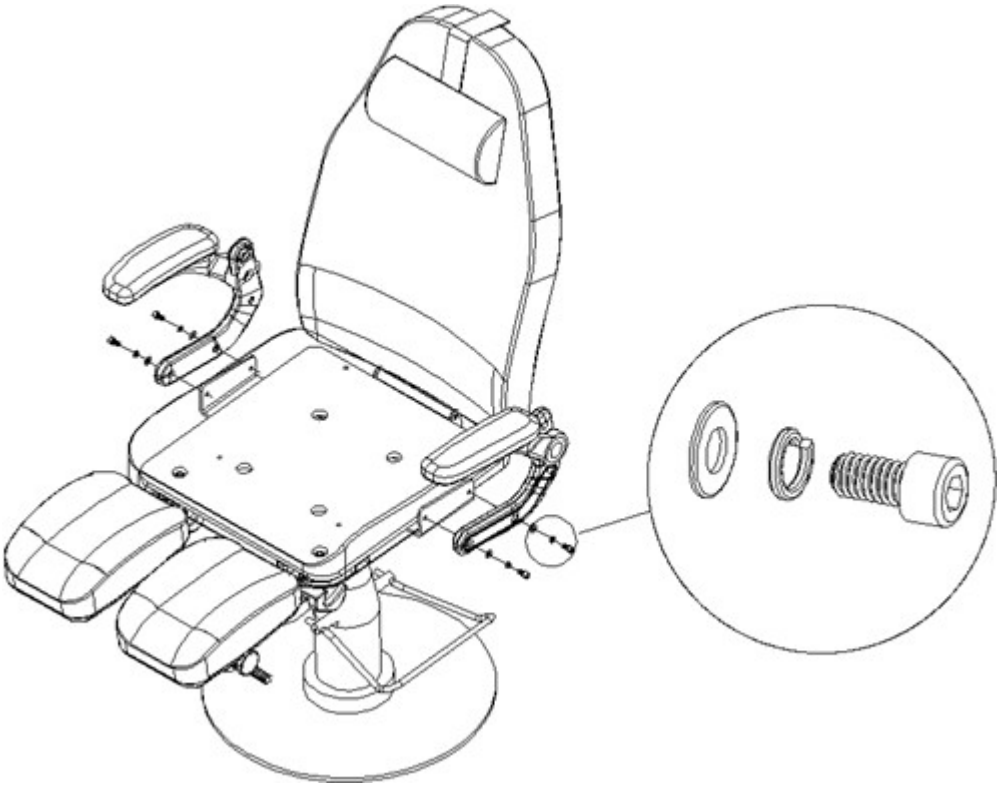


Funcții:


1. Înălțimea scaunului poate fi reglată cu ajutorul manetei. Ridicarea manetei determină Blocarea rotației scaunului, apăsarea manetei coboară scaunul.

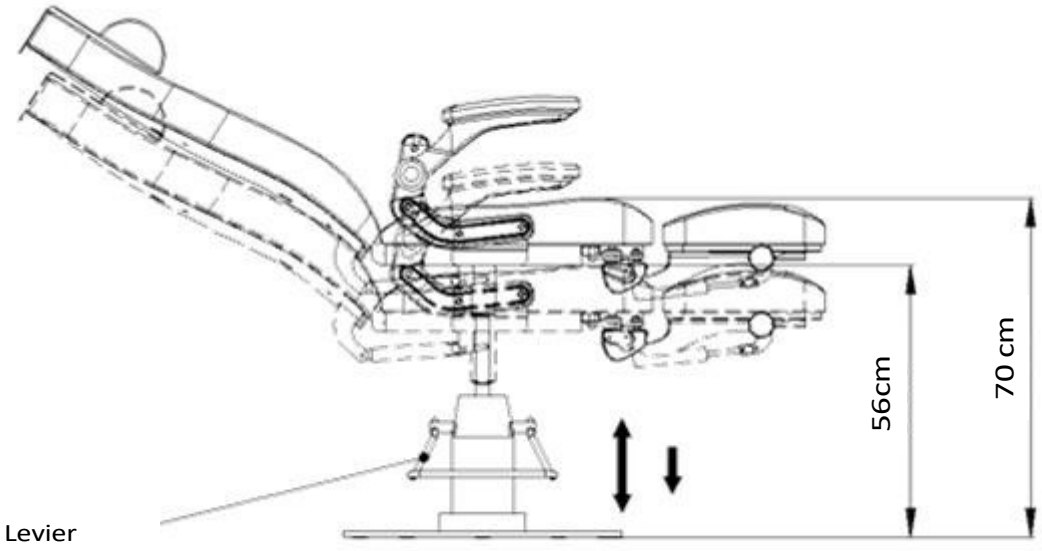

2. Pentru a înclina spătarul, apăsați maneta și înclinați-vă pe spate, iar spătarul se va înclina la un unghi convenabil.
   Înclinarea maximă a spătarului este de 45 de grade.

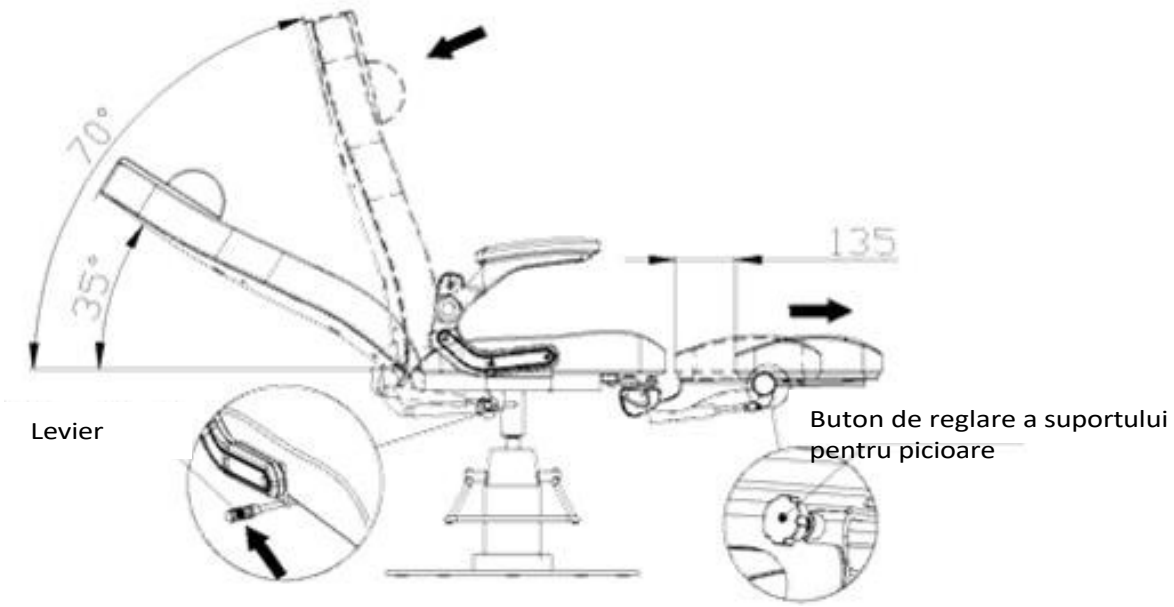


3. Suportul pentru picioare poate fi blocat în poziția de 30°, 60° sau 90°.

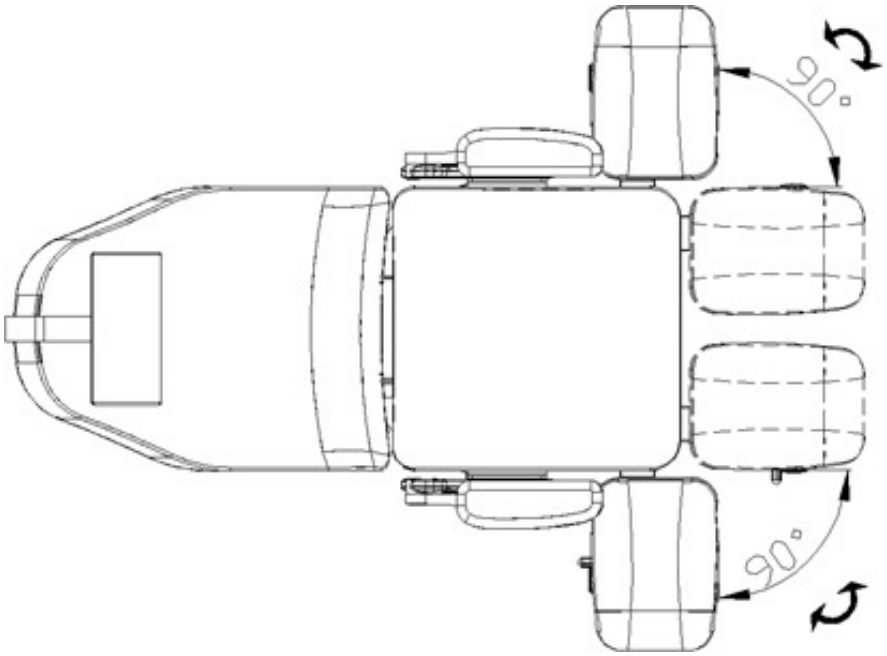

4. a) Utilizați butonul și, în același timp, apăsați în jos pe suportul pentru picioare pentru a-l înclina la unghiul dorit. Intervalul de înclinare: până la 90°.

b) Cotiera poate fi reglată de la poziția orizontală la cea verticală.

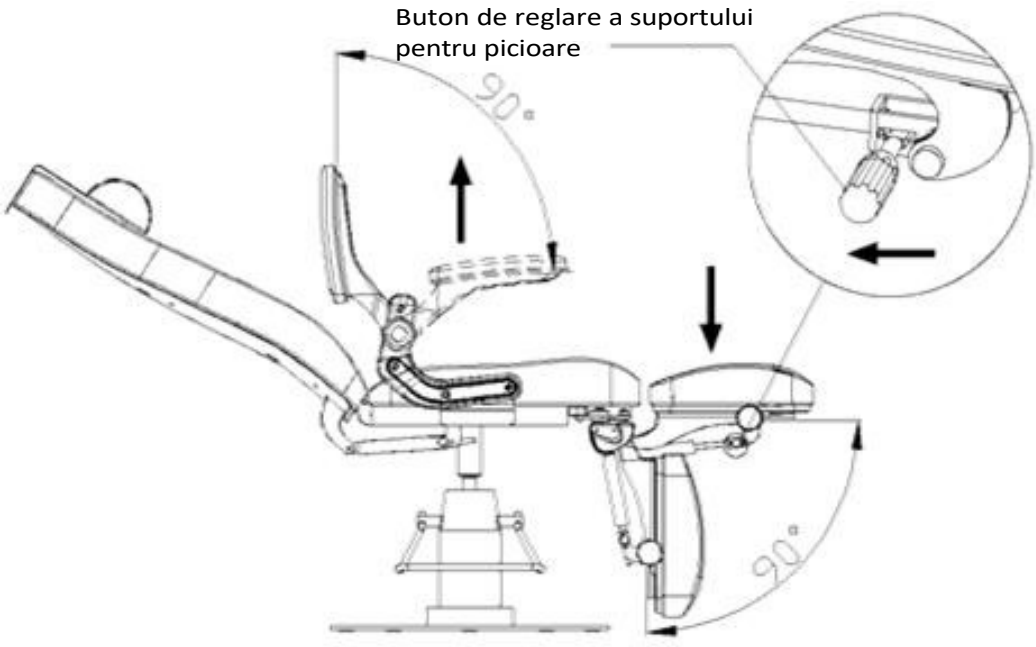

Atenție.

- Asigurați-vă că copiii nu se joacă în apropierea scaunului fără supravegherea unui adult.
- Nu introduceți mâna sau piciorul în crăpăturile scaunului.
- Nu expuneți scaunul la lumina directă a soarelui.
- Nu împingeți sau nu trageți scaunul pe podele denivelate.
- Nu stați pe scaun.
- Scaunul nu trebuie utilizat de persoane cu limitări fizice, deficiențe senzoriale sau probleme mentale.

Curățarea și întreținerea:

- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe din metal și plastic

- Pentru a curăța suprafețele din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele greu accesibile sau colțurile cu o perie mică.
- Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Cele mai bune . curățare cu o soluție ușoară de detergent. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată. Nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale unității pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Dacă descoperiți defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui actuatorul / unitatea de comandă.

Date tehnice:

- Sarcina maximă 150kg
- Greutate 56,5kg
- Piele PU/PVC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel, astfel încât să nu poată pătrunde lichide în unitate.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade pot apărea daune.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța indicatoare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor d i s f u n c ț i o n a l i t ă ț i , contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a m e d i u l u i . Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.
Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.