ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Elektriline ilusalongitool Sillon Lux 273b, 3 mootorit

CH-273E/ 147259



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, hoone DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026

Skannige erinev keeled

Täname, et valisite meie toote.
Palun lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit läbi ja hoidke see alles.

Elektriline ilutool Lux 273B on varustatud 3 ajamiga, mida juhitakse juhtme abil.
Kasutamise lihtsus ja kohandamine individuaalsetele vajadustele hõlbustavad oluliselt erinevate hoolduste tegemist. Iseloomulik, elegantne viimistlus ja samas säilitatud lihtsus teevad sellest toolist atraktiivse elemendi igas spetsialiseeritud salongis.

Tehnilised andmed	
Sisendpinge	~230 V
Võimsus	150 W
Nimissagedus	50 Hz
Polstermaterjal	Sünteetiline nahk
Juhtimine	Juhtmega pult
Maksimaalne koormus	140 kg

Tooli konstruktsioon

1. Peatoe
2. Auk peatoes
3. Seljatugi
4. Käetugi
5. Istumispind
6. Jalatoe
7. Juhtmega pult
8. Plastikkattega



Paigaldamine

1. Paigaldage peatoe vastavalt allolevale pildile.




2. Paigaldage käetoed – klappige istme seljatugi lamavasse (horisontaalsesse) asendisse, seejärel kruvige käetugi määratud kohale, järgides piltidel olevaid juhiseid.

Samm 1



Samm 2

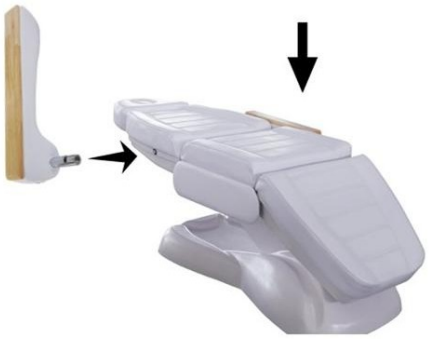

Samm 3



Samm 4



3. Ühendage toitejuhe vooluvõrku.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid

Istme soovitud asendisse seadmiseks hoidke puldil vastavat nuppu all:



Seljatoe kaldenurga reguleerimine

Jalatoe kaldenurga reguleerimine

Istme kõrguse reguleerimine (vahemikus 65–82 cm)


Mugavuse huvides saab puldi riputada istme parem küljel asuvale metallhoidjale, et see oleks alati käepärast.



Tugitooli reguleerimisfunktsioonid:

- Konstruktsioon võimaldab istme lahti klappida lamamisasendisse.
- Praktiline ava peatoes, mis on diskreetseks peidetud padja alla.
- Liikuvad käetoed 180° ulatuses.
- Väljatõmmatav peatoe

Seadme mõõtmed

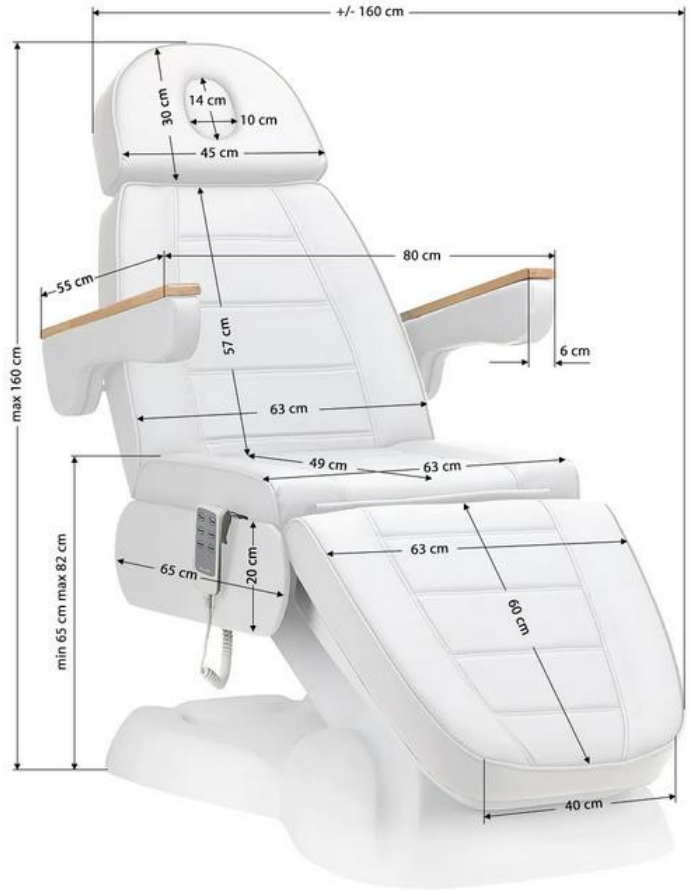

Tugitool saavutab täielikult lamamisasendis pikkuse 207 cm.

Märkus
Tugitooli maksimaalne kandevõime: 140 kg.
Ärge ületage tooli maksimaalset koormust ega istuge käetugedele.

Puhastamine ja hooldus

Tugitooli heas tehnilises seisukorras hoidmiseks, selle pika eluea tagamiseks ja seadme nõuetekohaseks toimimiseks soovitame regulaarset hooldust ja järgida allpool toodud puhastusjuhiseid.

Tähelepanu: Enne mis tahes tööde alustamist lülitage seade alati pealülitist välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja

- Sünteetilise naha puhastamine:
  Pühkige nahka pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid, nagu

lahustid, bensiin ja alkoholipõhised preparaadid. Võite kasutada turul saadaolevaid kunstnahahooldusvahendeid ja järgida pakendil olevaid juhiseid.

Laske toolipolsteril loomulikult kuivada. Ärge kasutage pindade kuivatamiseks puhurit. Ärge kasutage seadme puhastamiseks teksaseid ega värvilisi riideid, et nende värv ei imbuks toolipinda.

- Metall- ja plastpindade puhastamine
  Pühkige pinnad pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju puhastusvedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.
- Roostevabast terasest pinnad
  Parim tulemus saavutatakse puhastamisel kerge pesuvahendi lahusega. Ammoniaaki ja enamikku lahusteid võib kasutada raskesti eemaldatavate plekkide eemaldamiseks. Vältige klooripõhiseid lahuseid**.**
- Värvitud või kroomitud metallpinnad
  - Ärge kasutage puhastamiseks veepihustid.
  - Ärge puhastage kõrgel temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures. Ärge jätke seadet tingimustesse, mis võivad põhjustada vedelikuga saastumist.
  - Ära kasuta puhastamiseks lahusteid ega happeid.

Kui mõni tooli osa on kahjustatud, lülitage seade välja, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja teavitage rikkest volitatud teenindusest.

Soovitused

1. Veenduge, et olete seadme paigaldanud tasasele ja stabiilsele pinnale, et vähendada kukkumise ja kahjustuste ohtu.
2. Ärge jätke ühendatud seadet kunagi järelevalveta.
3. Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbele.
4. Ärge kunagi kasutage seda seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
5. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on kukkunud, kahjustunud või vette kukkunud.
6. Ärge tõmmake pistikupesa väljavõtmiseks otse juhtmest.
7. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke seda otseselt ilmastikutingimuste mõjule.
8. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse kogunemist. Seadet on kõige parem puhastada niiske lapiga.
9. Ärge mähkige toitekaablit seadme ümber.

Ohutusnõuded

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega proovida seda kasutada muudel eesmärkidel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb viivitamatult pistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seadmesse on sattunud vedelik,
   b) seadmest tuleb imelikku lõhna, suitsu või imelikke hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse,

kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pistikupesast välja tõmmata pärast iga seadme kasutamist.
7. Seadme sisse ei tohi panna võõrkehi. Kui seadme sisse satub võõrkeha, tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

TÄHELEPANU

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb pöörduda volitatud teenindusse – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, isikud füüsiliste ja vaimsete võimetega isikud ning isikud, kes ei ole seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme õige ja ohutu kasutamise kohta ning kui seotud ohud on neile arusaadavad.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatusest väljas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonnakaitse eesmärgil tuleb vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Järgige selle seadmete kõrvaldamist ja ärge visake neid olmejäätmete konteineritesse.

Seadmete kasutusaja lõpus sisaldavad need endiselt täisväärtuslikke komponente, mis sobivad ringlussevõtuks, seetõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks vastavatesse kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Hooldus ja transport

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C.
ei tohi seadet visata ega kukutada, samuti ei tohi seda allutada mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele