ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Elektrische schoonheidsstoel Sillon Lux 273b met 3 motoren

CH-273E/ 147259



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, gebouw DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026

Scan voor verschillend talen

Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.
Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar deze voor later.

De elektrische schoonheidsstoel Lux 273B is uitgerust met 3 servomotoren die worden bediend met een afstandsbediening aan een snoer.
Het gebruiksgemak en de aanpassingsmogelijkheden aan individuele behoeften vergemakkelijken het uitvoeren van diverse
behandelingen. De karakteristieke, elegante afwerking in combinatie met de eenvoud maakt deze stoel tot een aantrekkelijk element in elke gespecialiseerde praktijk.

Technische gegevens	
Ingangsspanning	~230 V
Elektrisch vermogen	150 W
Nominale frequentie	50 Hz
Bekledingsmateriaal	Kunstleer
Bediening	Bediening met kabel
Maximale belasting	140 kg

Constructie van de stoel

1. Hoofdsteun
2. Opening in de hoofdsteun
3. Rugleuning
4. Armsteun
5. Zitting
6. Voetensteun
7. Bedieningspaneel met kabel
8. Plastic afdekking



Montage

1. Monteer de hoofdsteun zoals op de onderstaande foto.




2. Monteer de armleuningen – klap de rugleuning van de stoel uit tot de liggende (horizontale) stand en schroef vervolgens de armleuning vast op de aangegeven plaats, volgens de afbeeldingen op de foto's.

Stap 1



Stap 2

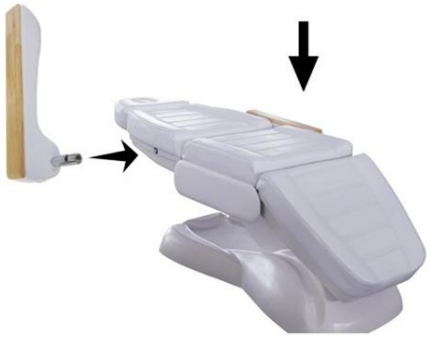

Stap 3



Stap 4



3. Sluit de voedingskabel aan op het stroomnet.

Functies van de afstandsbediening

Om de stoel in de gewenste stand te zetten, houdt u de betreffende knop op de afstandsbediening ingedrukt:



De hellingshoek van de rugleuning aanpassen

Hoek van de voetensteun instellen

Hoogteverstelling van de stoel (binnen een bereik van 65-82 cm)


Voor extra gemak kunt u de afstandsbediening aan de metalen houder aan de rechterkant van de stoel hangen, zodat u deze altijd bij de hand hebt.



Verstelfuncties van de stoel:

- Dankzij het ontwerp kan de stoel worden uitgeklapt tot een ligstoel.
- Praktische opening in de hoofdsteun, discreet verborgen onder het kussen.
- Bewegbare armleuningen binnen een bereik van 180°.
- Uitschuifbare hoofdsteun

Afmetingen van het apparaat

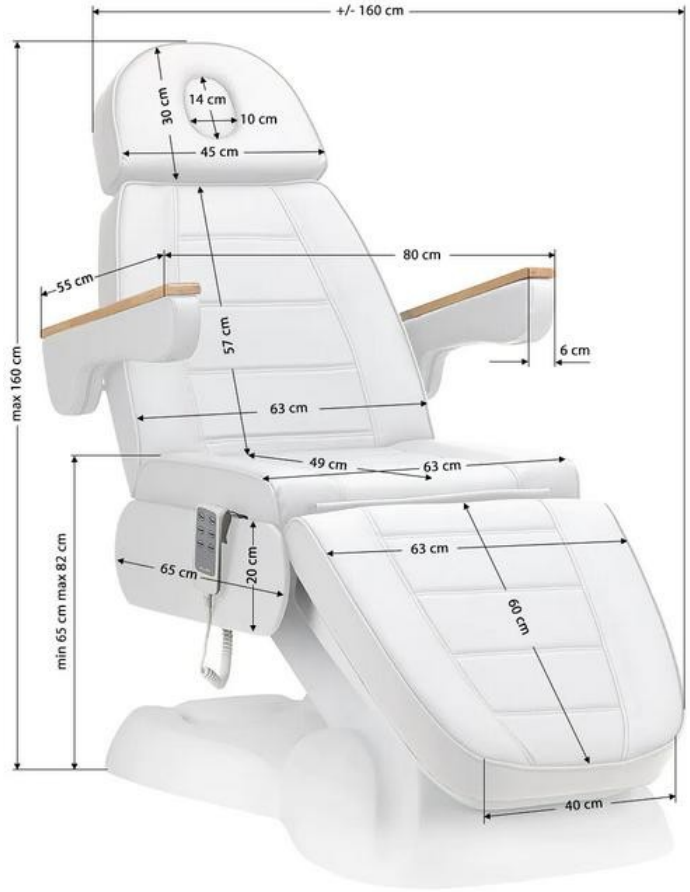

De stoel heeft in volledig uitgeschoven ligpositie een lengte van 207 cm.

Let op
Maximale belasting van de stoel: 140 kg.
Overschrijd de maximale belasting van de stoel niet en ga niet op de armleuningen zitten.

Reiniging en onderhoud

Om de stoel in goede staat te houden, een lange levensduur te garanderen en de juiste werking van het apparaat te waarborgen, raden wij regelmatig onderhoud aan en het naleven van de onderstaande reinigingsvoorschriften.

Let op: Schakel het apparaat altijd uit met de hoofdschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert

- Reiniging van synthetisch leer:
  Veeg het leer af met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals

oplosmiddelen, benzine en producten op alcoholbasis. U kunt in de handel verkrijgbare onderhoudsproducten voor kunstleer gebruiken en de instructies op de verpakking volgen.

Laat de bekleding van de stoel op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen föhn of andere apparaten om het oppervlak te drogen. Gebruik geen spijkerbroek of gekleurde stoffen om het apparaat af te vegen, zodat de kleurstof niet in het oppervlak van de stoel trekt.

- Reiniging van metalen en kunststof oppervlakken
  Veeg de oppervlakken af met een zachte, droge of licht vochtige doek. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken is een klein borsteltje zeer geschikt. Gebruik niet te veel reinigingsvloeistof voor het apparaat. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.
- Roestvrijstalen oppervlakken
  Reiniging met een milde reinigingsoplossing werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op basis van chloor**.**
- Gelakte of verchroomde metalen oppervlakken
  - Gebruik geen waterstralen om te reinigen.
  - Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot vervuiling door vloeistoffen.
  - Gebruik geen oplosmiddelen of zuren om het apparaat schoon te maken.

Als een onderdeel van de stoel beschadigd is, schakel het apparaat dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en meld de storing aan een erkende service.

Aanbevelingen

1. Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond installeert om het risico op vallen en beschadiging te beperken.
2. Laat het aangesloten apparaat nooit onbeheerd achter.
3. Gebruik het apparaat overeenkomstig het in de handleiding beschreven gebruiksdoel.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is.
5. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of als het is gevallen, beschadigd is of in het water is gevallen.
6. Trek niet rechtstreeks aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
7. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan directe weersinvloeden.
8. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen. Reinig het apparaat bij voorkeur met een vochtige doek.
9. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Gebruik het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een geautoriseerde service (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de snoeren. Installeer het apparaat niet op plaatsen

waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat. Mocht er toch een vreemd voorwerp in terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparateur – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud, door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten, en door personen die niet bekend zijn met de werking van dit apparaat, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het juiste en veilige gebruik en de daarmee samenhangende risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
4. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvalverwerking



Ter bescherming van het milieu, in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Volg de voorschriften voor het weggooien van dit
type apparatuur en gooi het niet weg bij het huishoudelijk afval.

Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle onderdelen die geschikt zijn voor recycling. Breng ze daarom voor herverwerking naar de juiste inzamelpunten of naar ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Opslag en transport

Het apparaat mag uitsluitend bij een temperatuur tussen (–)20 °C en (+)40 °C worden vervoerd in de originele verpakking. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10 °C tot (+)40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch blootgesteld worden aan mechanische schokken of weersinvloeden.