ACTIVESHOP®

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Azzurro 803D elektrisk kosmetisk stol 3 motorer




Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Kontrollera att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen på den plats där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.


Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Apparatens mått:

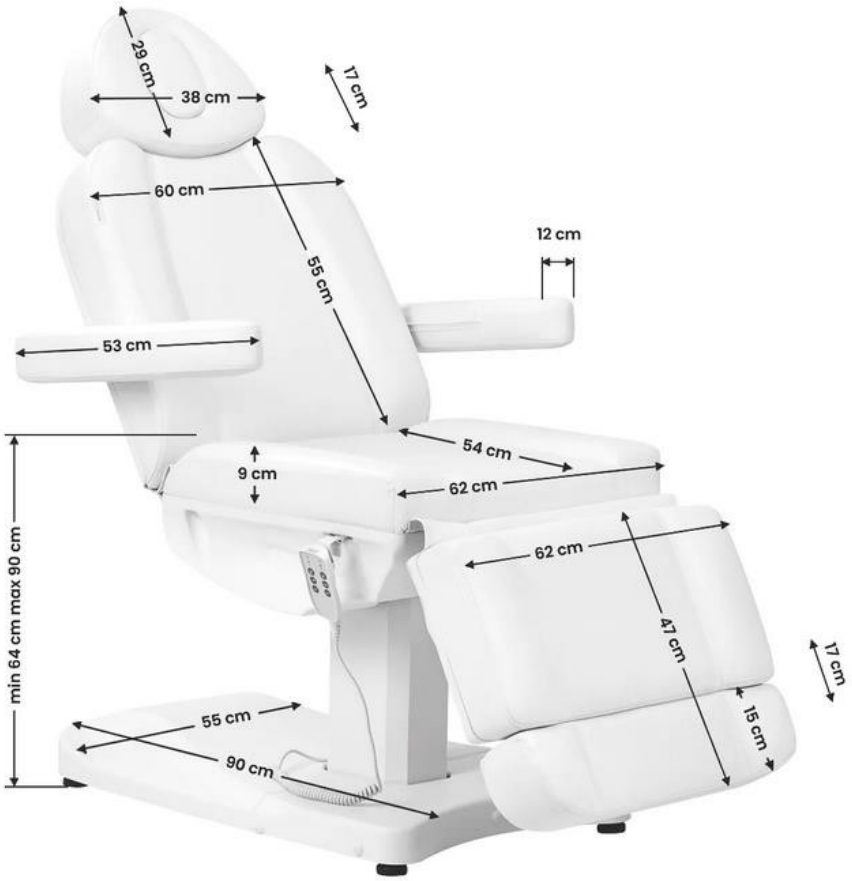



Apparatens konstruktion:

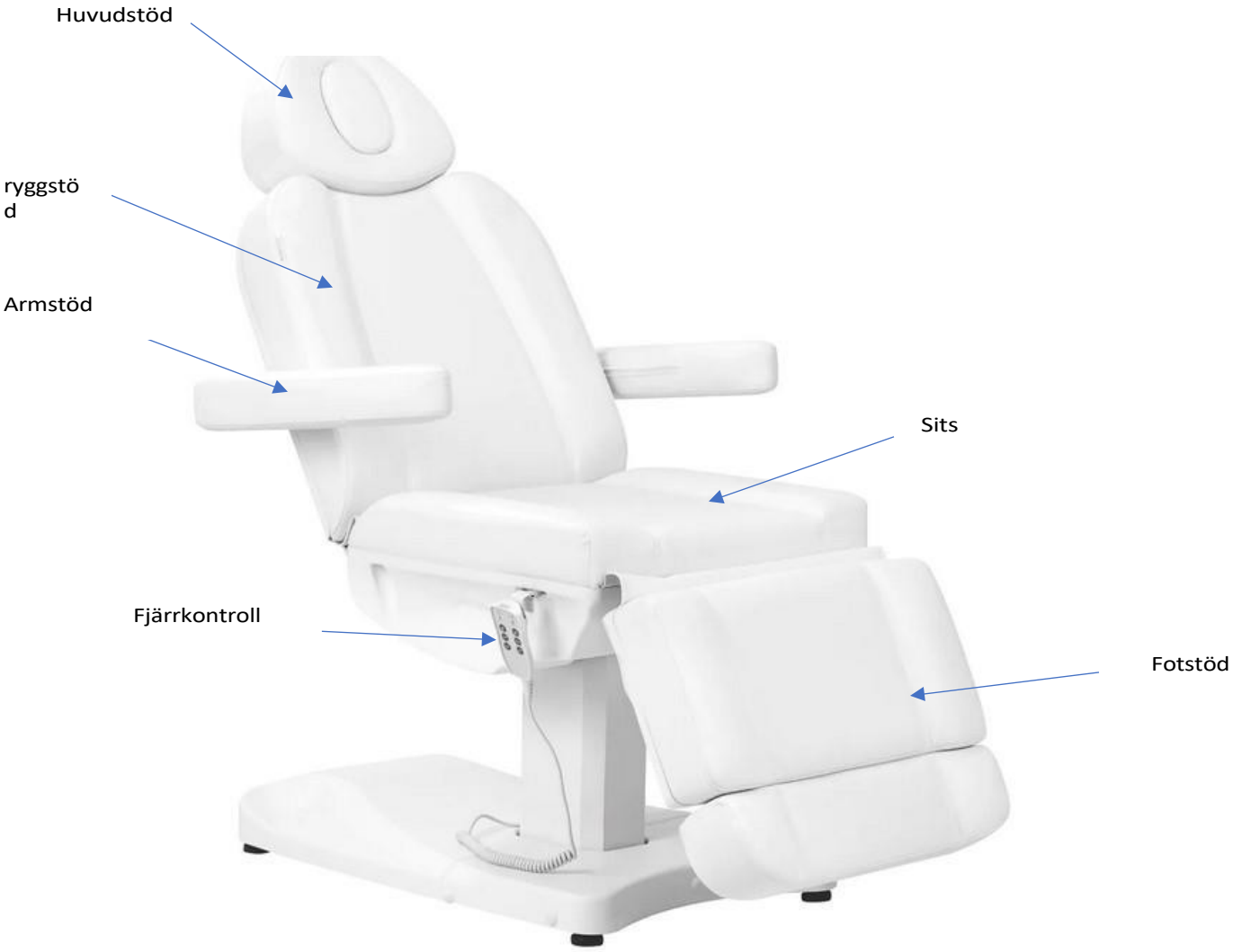

Varning för fotstödet:

1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet och fotstödet.
3. Se till att avståndet mellan uttagen inte överstiger 2 meter.

Försiktighetsåtgärder


1. Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta nätkabeln till ett jordat uttag.
2. Bind inte fast nätsladden i enheten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden lätt kan tas bort i en nödsituation.
3. Ta bort nätsladden innan du flyttar den elektriska skönhetsstolen så att den inte fastnar mellan några av stolens delar.
4. Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ur sladden, inte använda stolen och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Använd endast den ursprungliga nätsladden.
5. Tillåt inte en person som inte utför behandlingen att styra fjärrkontrollen.
6. Placera inga föremål under stolen.
7. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt sitsen för att den ska kunna fällas och fällas ut fritt.

8. Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt sätet som kan skada enheten.
9. Modifiera inte enheten själv. Om fåtöljen inte fungerar korrekt ska du sluta använda den och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.


Fåtöljen kan styras manuellt med fjärrkontrollen och med hjälp av fotpedaler. Stolens höjd, ryggstödets och fotstödets läge kan justeras efter behov.

Fjärrkontrollens funktioner:

1. Justering av sitthöjd (mellan 64-90 cm)
2. Justering av ryggstöd
3. Justering av fotstöd

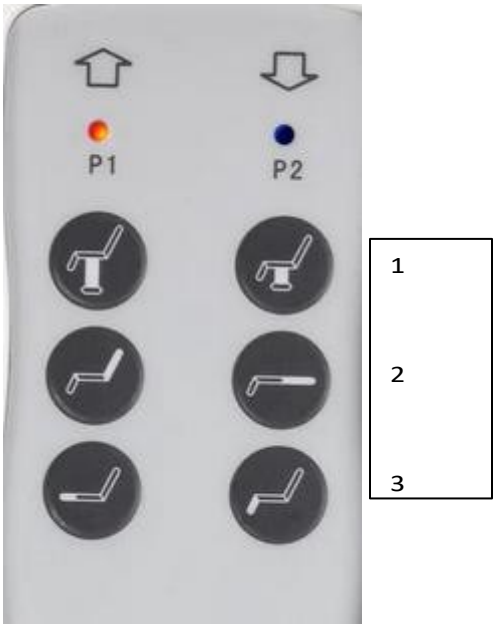


Funktioner för fotpedal:

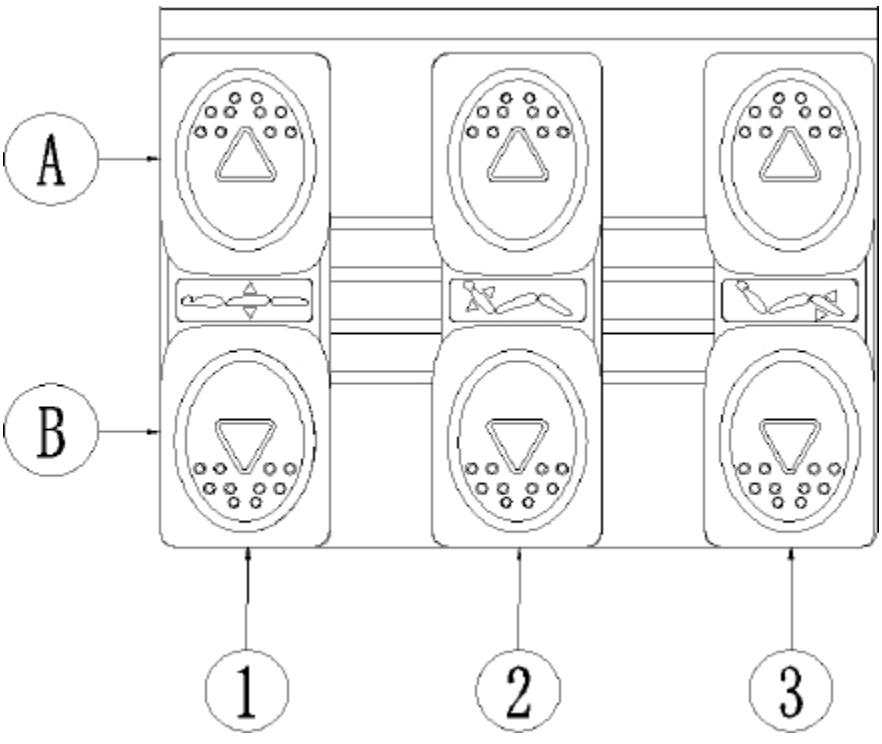

1. Justering av sitshöjden. Tryck på A för att höja sätet eller på B för att sänka sätet.
2. Justering av ryggstödets läge. Tryck på A för att höja ryggstödet eller på B för att sänka ryggstödet.
3. Justera fotstödet. Tryck på A för att höja fotstödet eller på B för att sänka fotstödet.

Förlängning av fotstödet

Stolen har också möjlighet att förlänga fotstödet, vilket underlättar för längre patienter och förbättrar komforten. Den maximala längden på fotstödsförlängningen är ca 17 cm. Fotstödet justeras med hjälp av ett vred på undersidan av fotstödet.

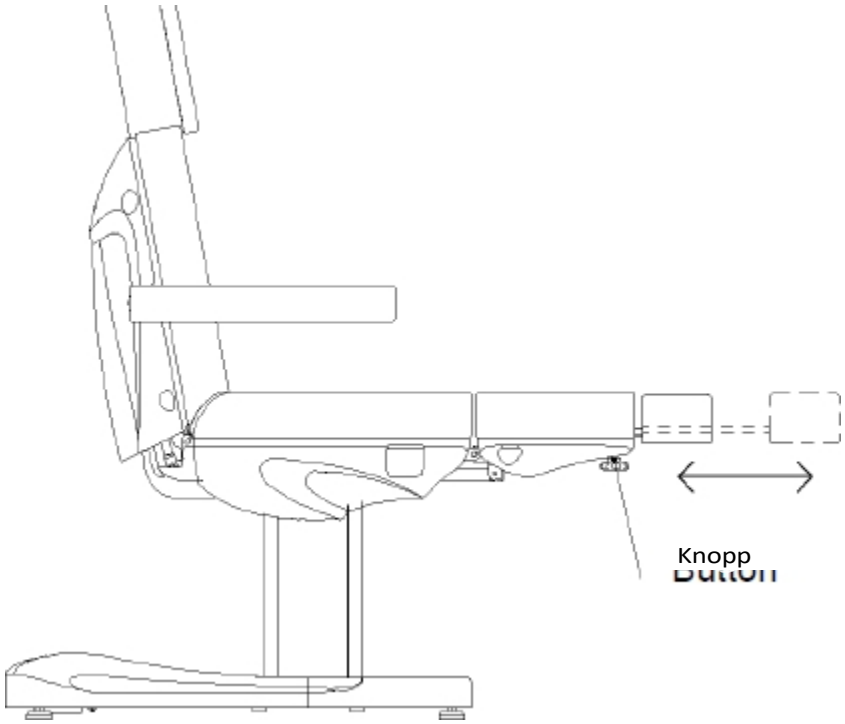


Montering av armstöd:

Skjut in armstöden i hålet på sidan av ryggstödet. Armstödet ska sitta ordentligt fast. Skjut det åt höger eller vänster så att det kommer på plats ordentligt. Gör likadant med det andra armstödet. Armstödet är vinkelrätt mot marken (oberoende av sitsens vinkel). Det kan vridas 180°.

Montera huvudstödet:

Skjut in huvudstödet i hålet på ovansidan av ryggstödet. När huvudstödet är i rätt höjd, dra åt veven som sitter på baksidan för att fixera huvudstödet.
För att sänka eller höja huvudstödet, skruva loss veven, justera huvudstödet och dra åt veven.

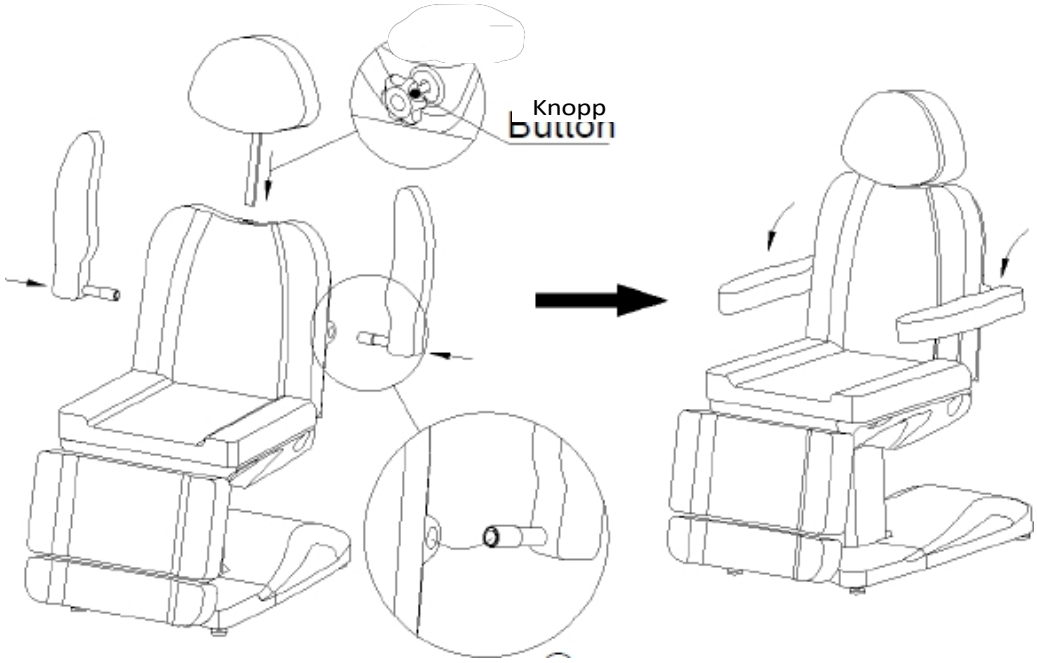

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla ur enheten före rengöring.

För att hålla stolens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användningstillfälle. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Rengöring med ett milt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet, utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som är godkända av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.

4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömförsörjningskabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Kontrollboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.
Om någon del av enheten är skadad ska du dra ut nätsladden och sluta använda den. Kontakta sedan service.

Felsökning och felavhjälpning

Problem	Orsak	Lösning metod
Inget svar när knapparna trycks in på fjärrkontrollen	1. Strömknappen aktiveras eller aktiveras inte. 2. Kontrollera att pedalen är nedtryckt till max. 3. Kontrollera att enheten är inkopplad. 4. Kontrollera att allt är korrekt anslutet.	1. Prova att starta om strömbrytaren. 2. Försök att slå på de andra knapparna och se om de fungerar. 3. Koppla ur enheten och koppla in den igen. 4. Koppla ur kontakterna och sätt i dem igen.
Enheten ger ifrån sig konstiga ljud	Skruv sitter löst	Dra åt skruvarna

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.

2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.

4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,

c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.

7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.

2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om begagnad elektrisk elektrisk och elektronisk utrustning, måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsställen

Insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk eller elektrisk utrustning. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.