ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

Kosmetikstuhl Azzurro Lux 3m



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2025

Scan für verschiedene Sprachen

CE

Achtung!

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das gesamte Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Es ist nicht gestattet, sich direkt auf die Armlehne oder die Fußstütze zu setzen.
3. Heben Sie keine Lasten, die das Gewicht des Sessels überschreiten.
4. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
5. Befestigen Sie das Netzkabel nicht am Gerät. Das Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann zu dessen Beschädigung führen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel im Notfall leicht entfernt werden kann.
6. Bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl bewegen, ziehen Sie das Netzkabel ab, damit es nicht zwischen den Teilen des Stuhls hängen bleibt.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie es sofort ab, verwenden Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
8. Lassen Sie keine Person, die die Behandlung nicht durchführt, die Fernbedienung bedienen.
9. Legen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
10. Stellen Sie sicher, dass um den Sessel herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er problemlos zusammengeklappt und auseinandergeklappt werden kann.
11. Stellen Sie sicher, dass sich keine scharfen oder schädlichen Gegenstände in der Nähe des Sessels befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
12. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Benutzung ein und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
13. Werfen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sessel und springen Sie nicht darauf.

Montage

1. Setzen Sie die Kopfstütze in die Öffnung oben an der Rückenlehne ein (Abb. 1).
2. Stellen Sie die linke und rechte Armlehne mit dem Bolzen im Sitz ein und verbinden Sie sie miteinander. Drehen Sie sie anschließend um 90° gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 2).


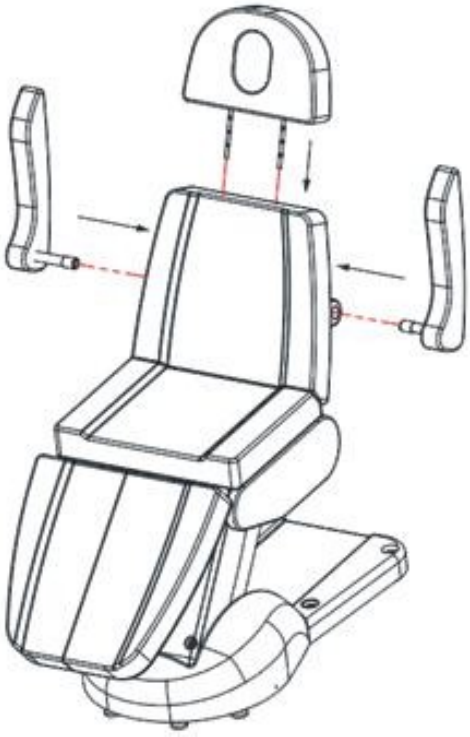


Abb. 1



Abb. 2

Fernbedienung

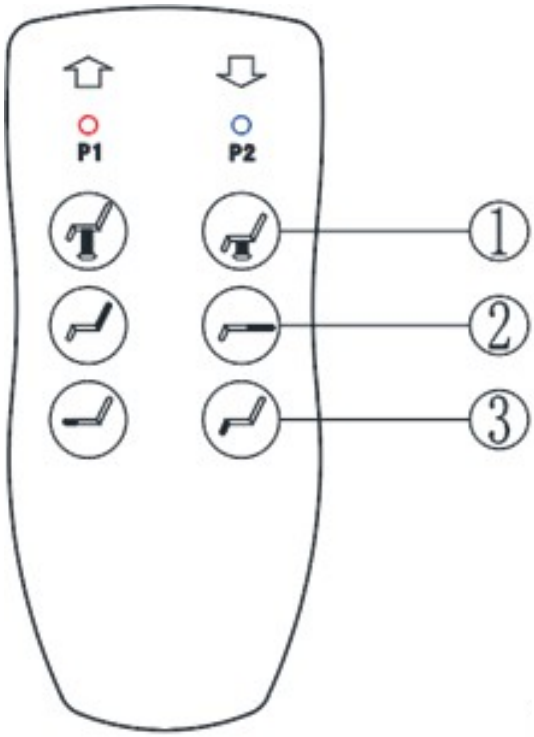

1. Drücken Sie die Taste , um den Sitz anzuheben.

1. Drücken Sie die Taste , um den Sitz abzusenken.

2. Drücken Sie die Taste , um den Neigungswinkel der Rückenlehne zu vergrößern.


2. Drücken Sie die Taste , um den Neigungswinkel der Rückenlehne zu verringern.

3. Drücken Sie die Taste „ “ , um den Neigungswinkel der Fußstütze zu vergrößern.


3. Drücken Sie die Taste „ “, um den Neigungswinkel der Fußstütze zu verringern.

Zusätzliche Funktionen

- Ziehen Sie den Griff nach hinten und halten Sie ihn gedrückt, um den N e igungswinkel der Fußstütze anzupassen.

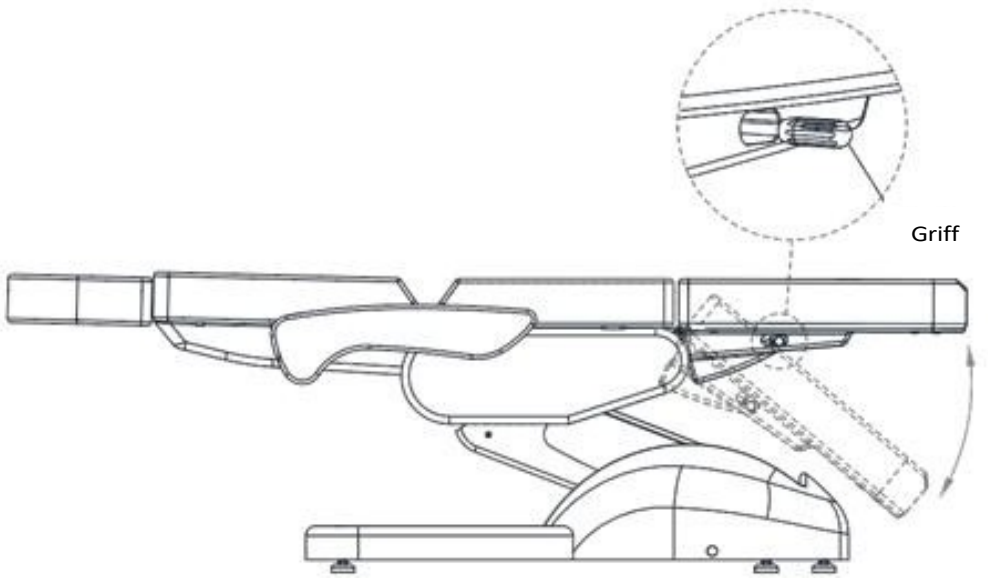

- Die Höhe des Kopfstützen kann durch Hochziehen oder Herunterdrücken eingestellt werden.

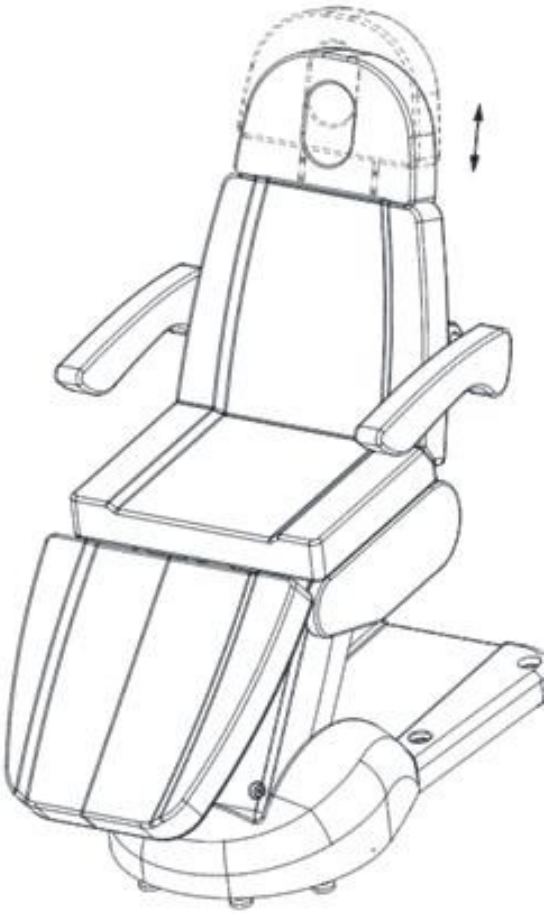

Wartungsmaßnahmen:

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, sollte sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Um Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente zu reinigen, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab.

mit einem Tuch. Zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen oder Ecken eignet sich eine kleine Bürste. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit für das Gerät. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Edelstahloberflächen

- Am besten eignet sich eine milde Reinigungslösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie chlorhaltige Lösungen.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zum Reinigen keine Wasserdüsen (Dusche, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Überflutung mit Flüssigkeit führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder Säuren.

IV Oberfläche des Sessels

- Wischen Sie die Oberfläche des Sessels gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Vor der Wartung des Geräts muss es vom Stromnetz getrennt werden.

- Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
- Verwenden Sie den elektrischen Kosmetikstuhl und das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Achtung!

- Wenn Sie Mängel feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an einen autorisierten
  . Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb öffnen oder austauschen
  / die Steuereinheit öffnen oder austauschen.
- Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie die Nutzung ein. Benachrichtigen Sie anschließend den Kundendienst.

Fehlerbehebung:

Problem	Diagnose	Lösung
Die Tasten reagieren nicht	- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist - Überprüfen Sie, ob alle Stecker des Transformators korrekt angeschlossen sind	- Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein - Ziehen Sie alle Verbindungskabelstecker ab und schließen Sie sie wieder an
Beim Anheben des Sessels treten Geräusche und Vibrationen auf	- Lose Schrauben	- Ziehen Sie die Schrauben fest
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht	- Das Kabel der Fernbedienung ist nicht richtig angeschlossen oder die Fernbedienung ist defekt	– Schließen Sie das Kabel erneut an. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie die Fernbedienung

Technische Daten:

Abmessungen: 2000 x 810 x 610–910
mm Maximale Belastung: 140 kg
Nettogewicht: 76 kg
Einstellbarer Höhenbereich: 610–910 mm
Eingangsspannung: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.

3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, feuchten Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch, Rauch oder seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.

6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in eine Öffnung gelangen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug aufgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.

9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Verbrauchte Elektrogeräte, Instrumente und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Es sind die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten zu beachten. Zum Schutz der Umwelt natural gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie dem Recycling zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch an die Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk übergeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.