ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrické kosmetické křeslo Azzurro 708A




Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.


Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry přístroje:

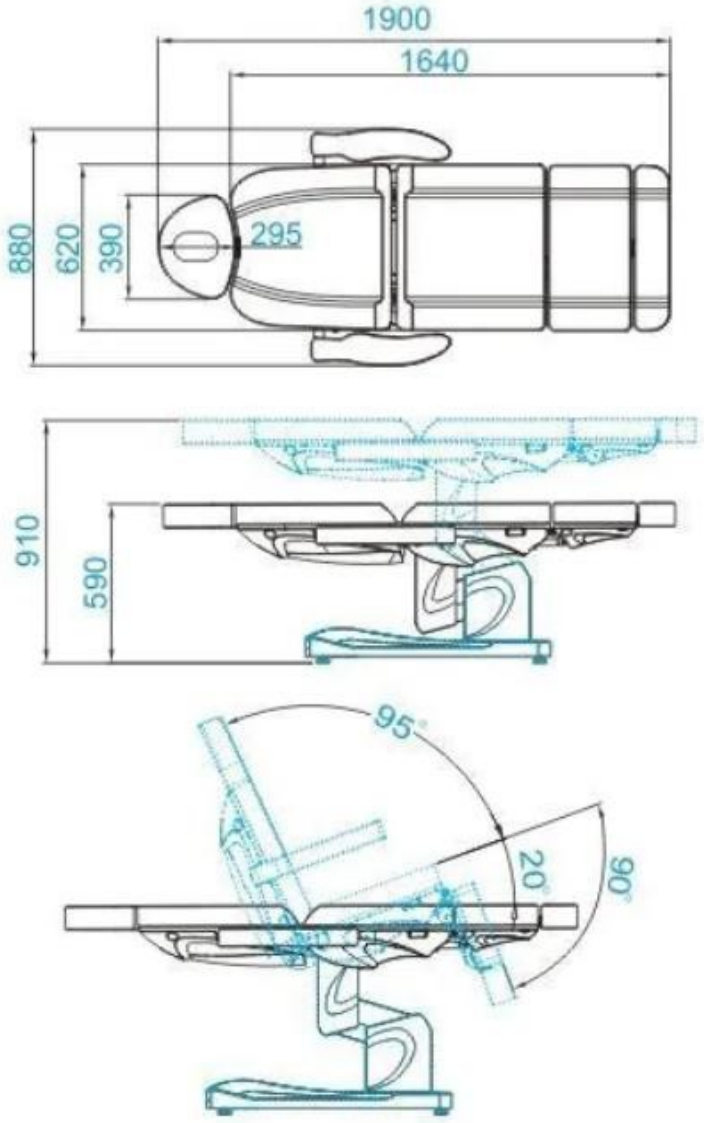

Maximální zatížení křesla: Maximální hmotnost křesla: 140 kg

Konstrukce přístroje:

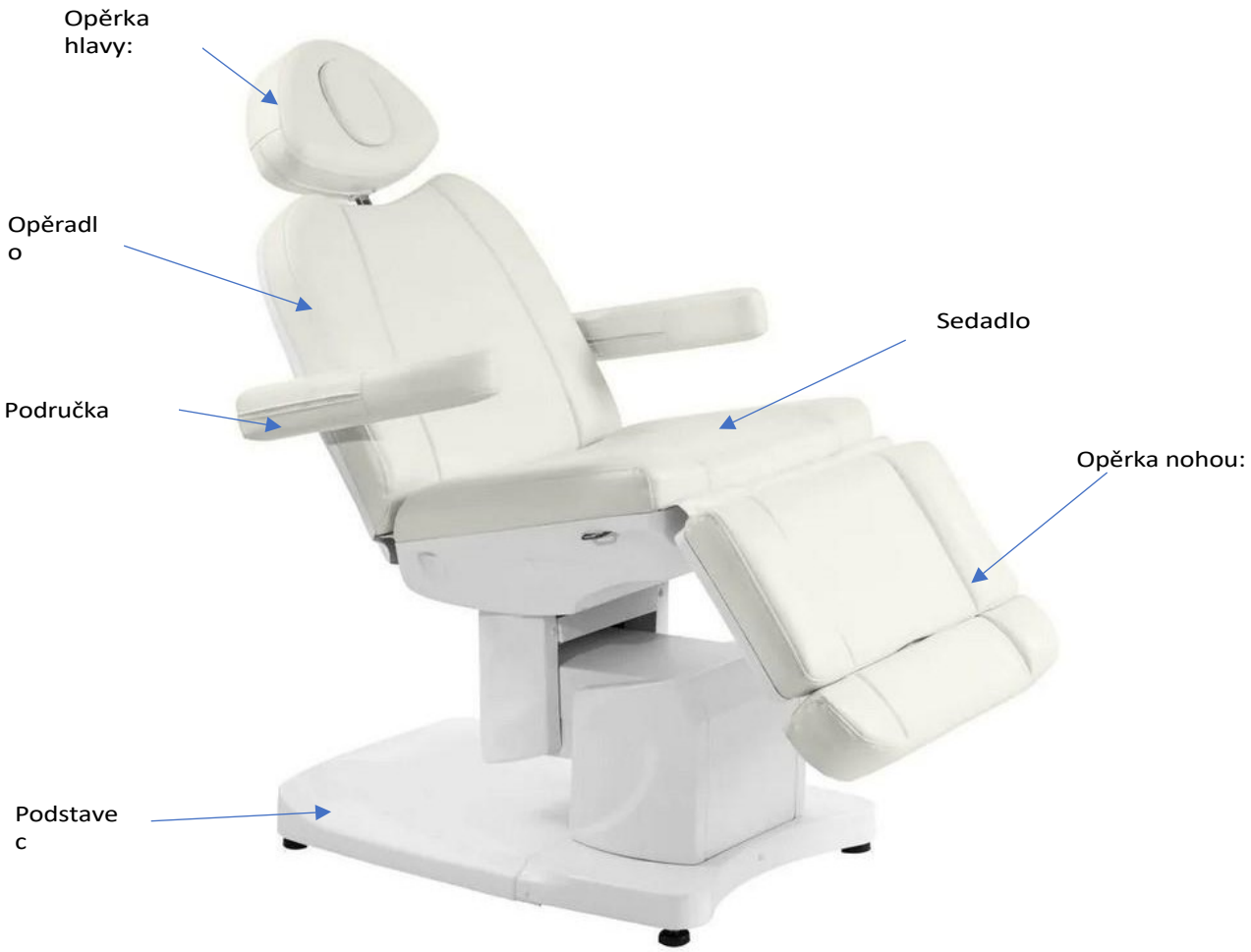

Použití zařízení:

Sedačka je nastavitelná pomocí dálkového ovladače, kterým lze nastavit výšku sedačky, sklon opěradla a opěrek nohou a nastavit sedačku do kolébkové polohy.


1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110V~240V.

Instalace opěrky hlavy


Opěrku hlavy zasuňte do příslušné mezery v horní části opěradla. Po umístění opěrky hlavy do správné výšky utáhněte knoflík tak, aby opěrka hlavy pevně držela. Chcete-li opěrku hlavy snížit, mírně vyšroubujte knoflík, opěrku hlavy snižte a knoflík utáhněte.

Instalace opěrky rukou

Zasuňte loketní opěrku do otvoru umístěného na boku opěradla. Loketní opěrka by měla být pevně připevněna. Otáčejte s ní ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, aby správně zapadla na své místo.

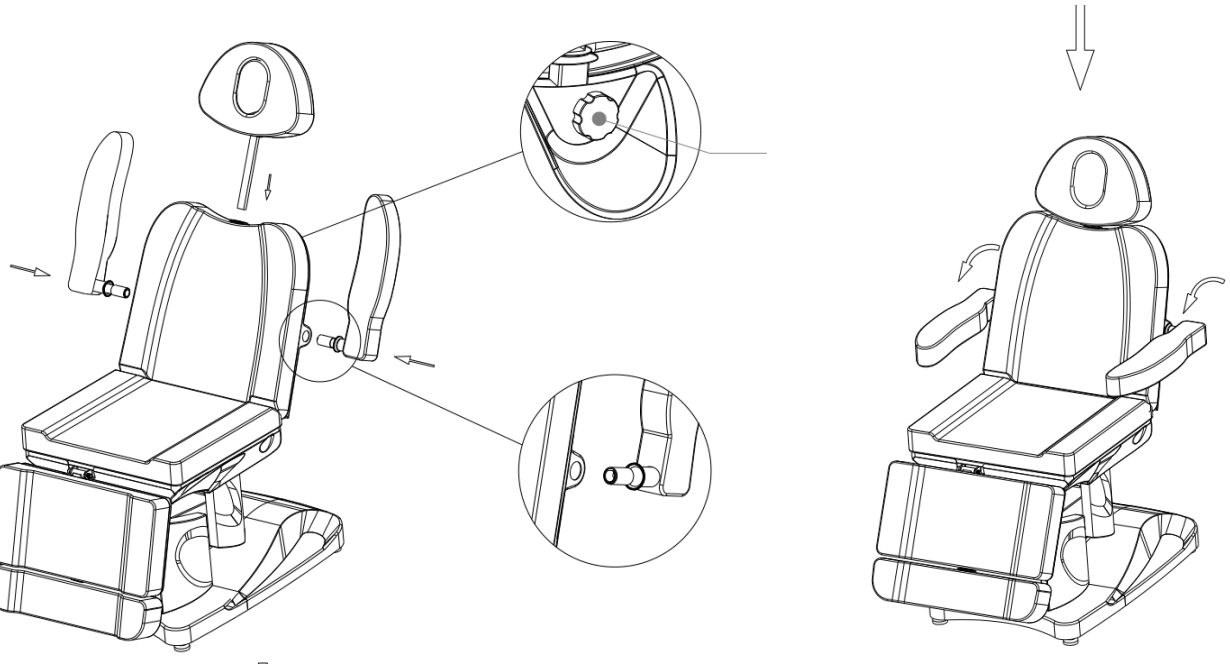

Funkce dálkového ovládání:

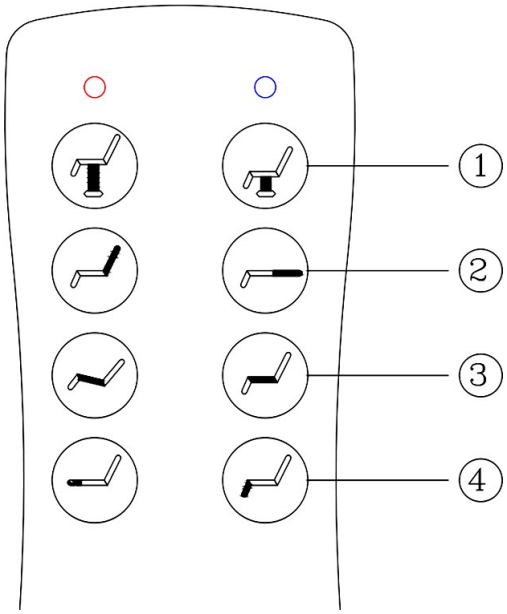

1. Stisknutím tlačítka zvednete sedadlo nebo stisknutím tlačítka sedadlo snížíte.


2. Stisknutím nebo nastavíte úhel opěradla.

3. Stisknutím nebo nastavíte úhel sedáku.

4. Stiskněte tlačítko . nebo pro nastavení úhlu opěrky nohou.


Nastavení výšky sedadla:

Stisknutím tlačítka zvednete sedadlo (které je v poloze sklopení). Stisknutím tlačítka se sedadlo spustí.

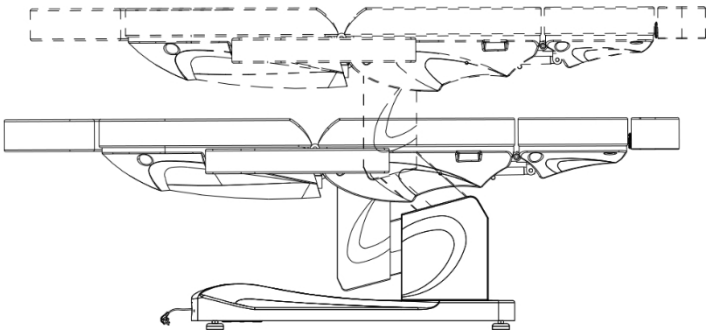


Nastavení opěradla:

Stisknutím tlačítka nastavíte opěradlo do polohy vsedě nebo jej zvednete, nebo stisknutím tlačítka opěradlo snížíte (např. do polohy vleže).

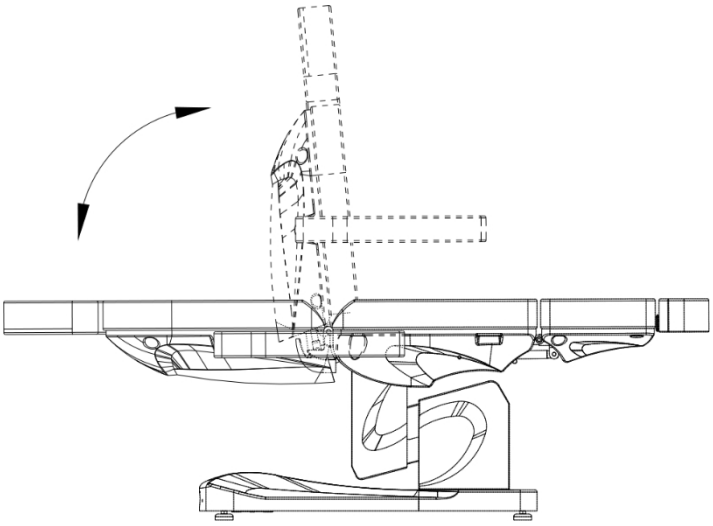


Nastavení úhlu sedadla:

Stisknutím tlačítka nebo nastavíte úhel, pod kterým je sedadlo nastaveno.

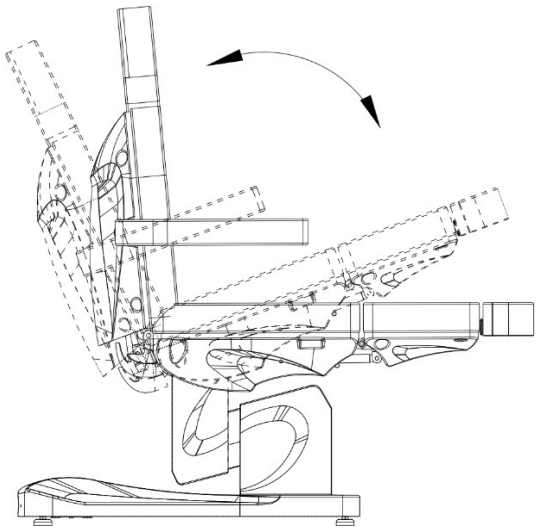


Nastavení opěrky nohou:


Stiskněte tlačítko . pro nastavení opěrky nohou do vodorovné polohy (nebo pro její zvýšení), nebo pro snížení opěrky nohou.

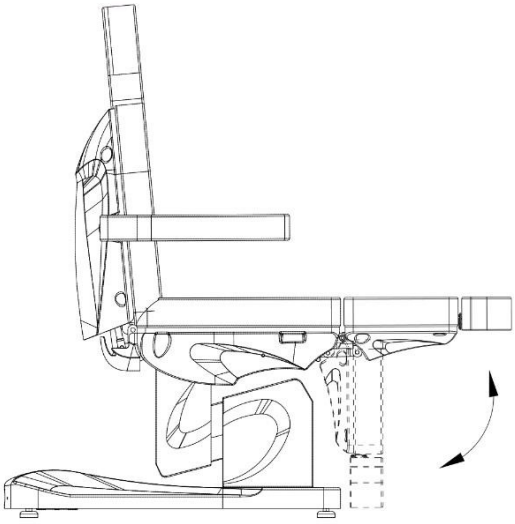

Nastavení opěrky nohou:

Uvolněte knoflík ve spodní části opěrky nohou a natáhněte ji na správnou délku, poté knoflík utáhněte.

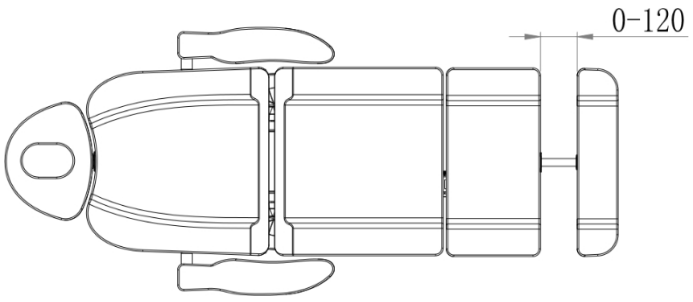

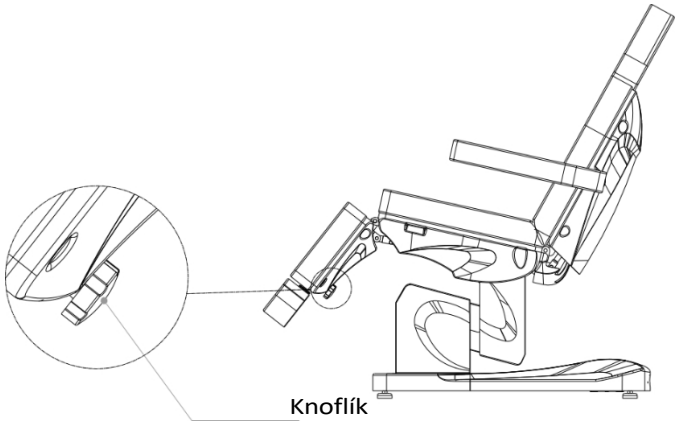

Čištění a dezinfekce přístroje: Vyčistěte a vydezinfikujte přístroj:

- Před čištěním odpojte přístroj od napájení.

- Aby byl povrch židle v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů se dobře hodí malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).

- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.

- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým, měkkým hadříkem.

Údržba

Před údržbou musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození spotřebiče, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně. Veškerá

údržba a opravy musí být zdokumentovány

Odstraňování závad

Problém	**Příčina**	**Způsob řešení**
Tlačítka na dálkovém ovladači nereagují.	1. Přepínač ovládání napájení se aktivuje nebo neaktivuje. 2. Sedadlo může být již vmaximální poloze. 3. Spotřebič není připojen k napájení.	1. Zkuste jej zapnout a vypnout. 2. Zkontrolujte, zda jsou ostatní tlačítka funkční. 3. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti. Pokud tomu tak není, připojte jej.
Přístroj vydává při zvedání a spouštění podivné zvuky.	Uvolněný šroub.	Zkontrolujte . i utáhněte všechny šrouby.
Světlo se nerozsvítí, i když je vypínač zapnutý.	Spálená pojistka.	Vyměňte pojistku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.

7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.

2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použitá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na následujících sběrných místech
Sběrná místa pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdávány do

k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.