ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Azzurro 708A elektromos kozmetikai szék




Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai széket arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.


Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

A készülék méretei:

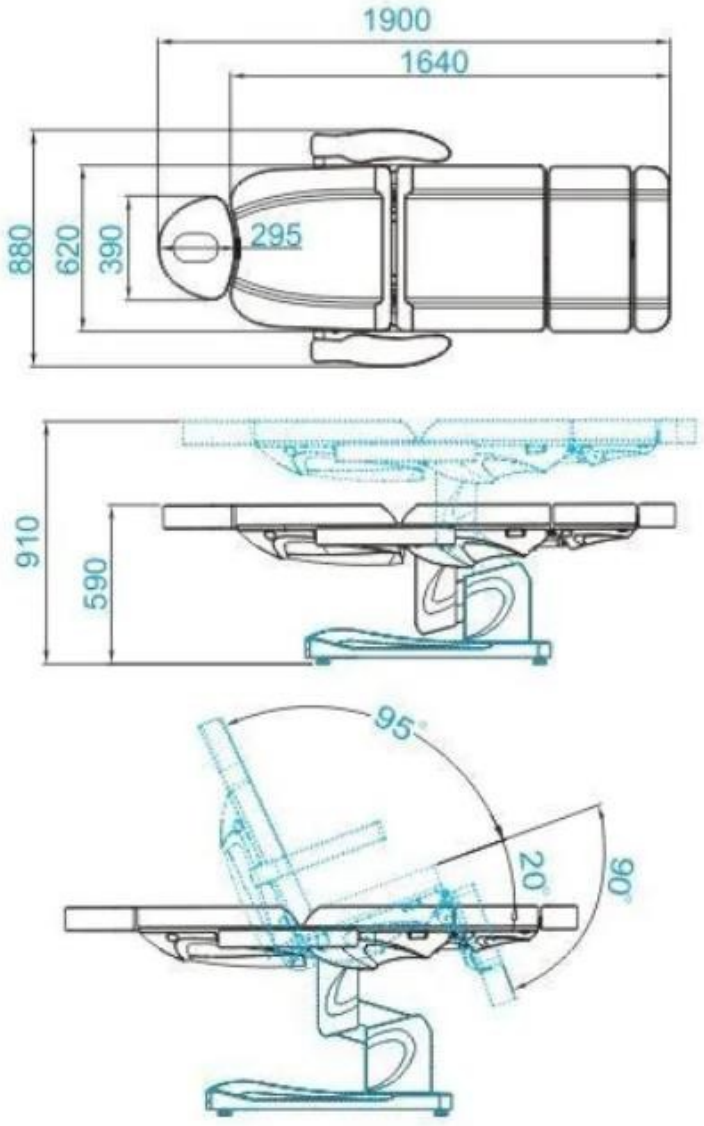

Maximális székterhelés: 140 kg

A készülék felépítése:

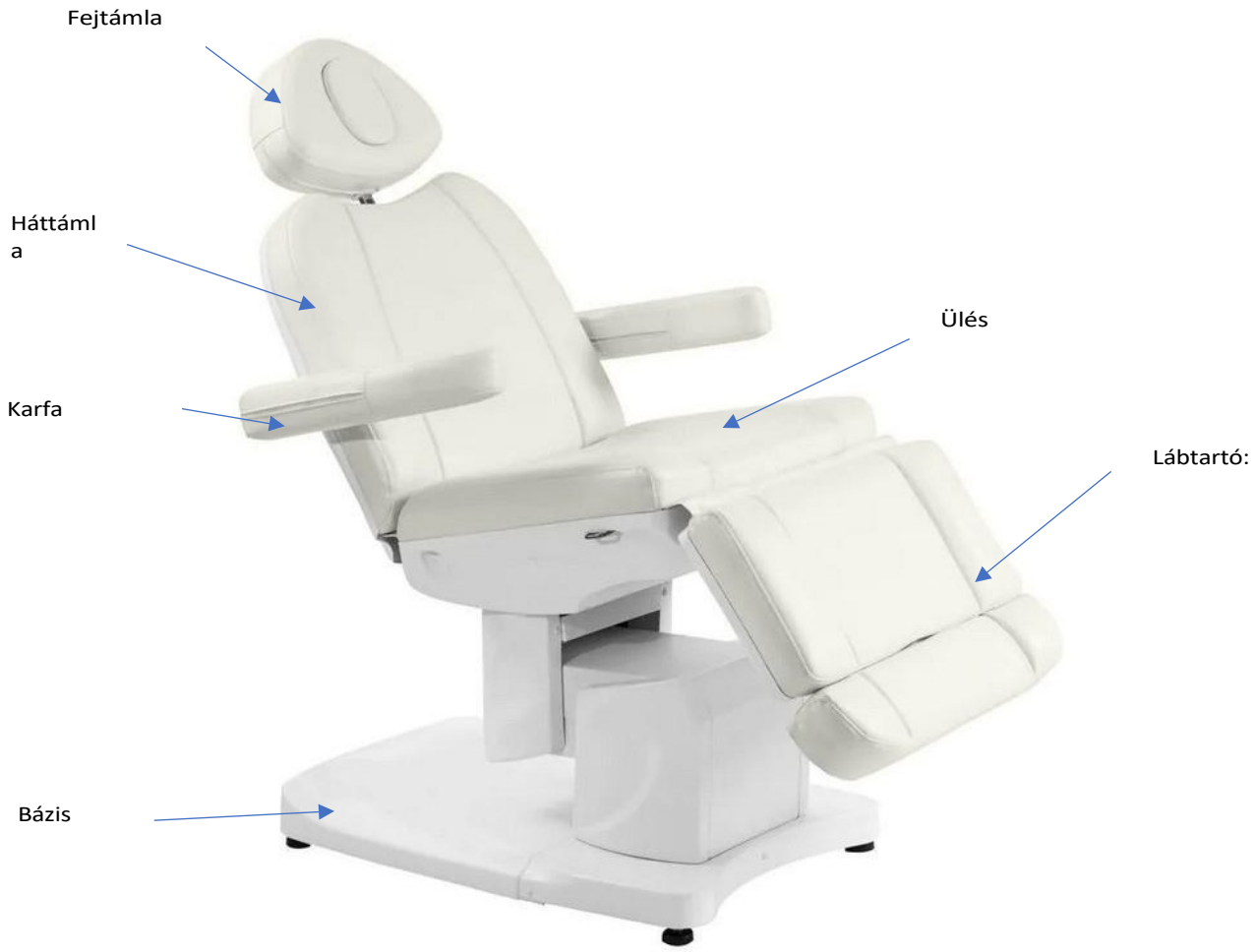

A készülék használata:

Az ülés állítható a távirányítóval, amellyel beállíthatja az ülés magasságát, a háttámla és a lábtartók dőlésszögét, valamint az ülést bölcsőhelyzetbe állíthatja.


1. Csatlakoztassa a tápkábelt a 110V~240V-os külső tápegységhez.

A fejtámla felszerelése


A fejtámla felszereléséhez csúsztassa be a háttámla tetején lévő megfelelő résbe. Ha a fejtámlát a megfelelő magasságba helyezte, húzza meg a gombot, hogy a fejtámla szilárdan tartson. A fejtámla leengedéséhez csavarja ki kissé a gombot, engedje le a fejtámlát, majd húzza meg a gombot.

A kartámasz felszerelése

Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található furatba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

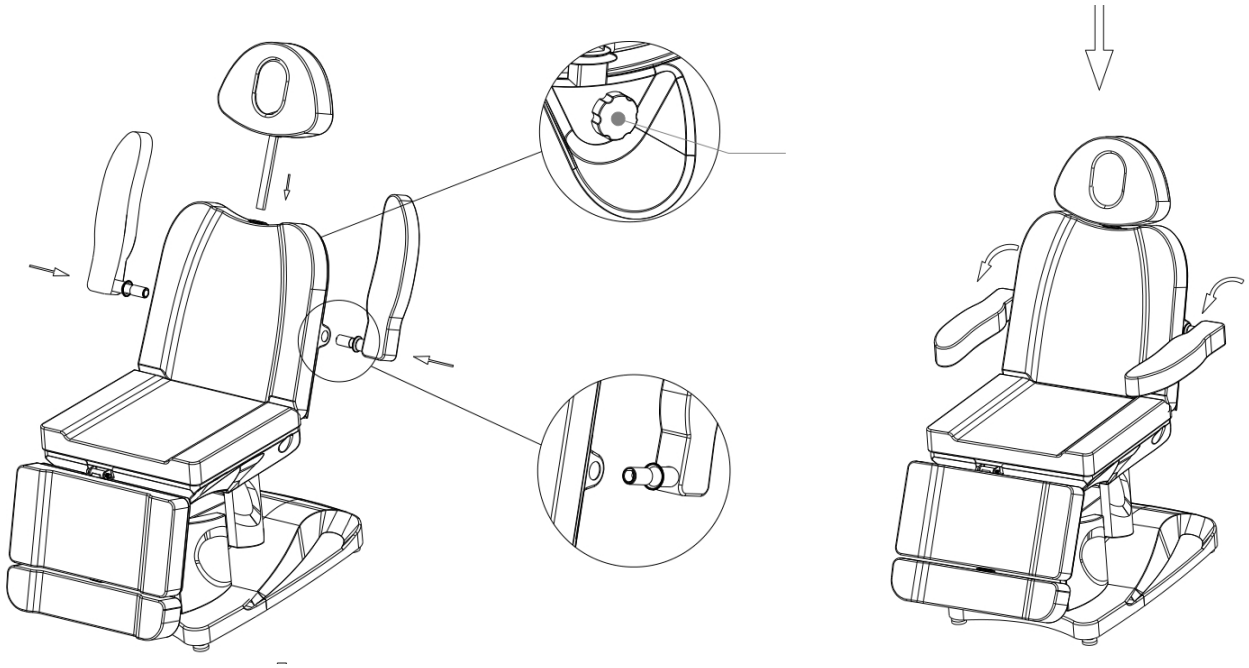

Távirányító funkciók:

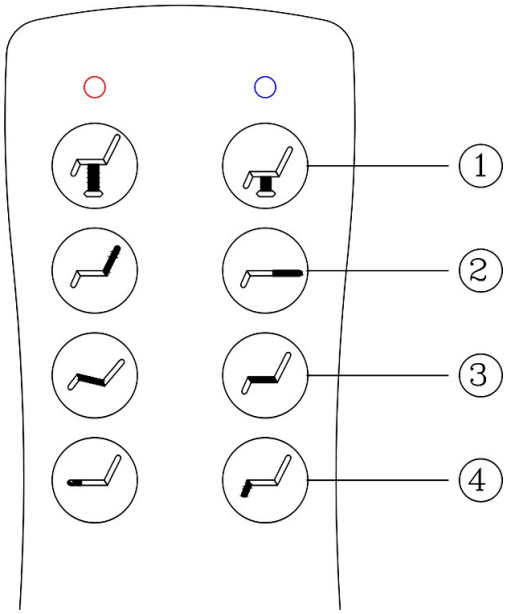

1. Nyomja meg a gombot az ülés megemeléséhez vagy a gombot az ülés leengedéséhez.


2. Nyomja meg a vagy a gombot a háttámla dőlésszögének beállításához.

3. Nyomja meg a vagy a gombot az ülés szögének beállításához.

4. Nyomja meg a gombot. vagy a lábtartó szögének beállításához.


Állítsa be az ülés magasságát:

Nyomja meg a gombot az ülés felemeléséhez (amely hátradőlési helyzetben van). A gomb megnyomásával az ülés leengedhető.

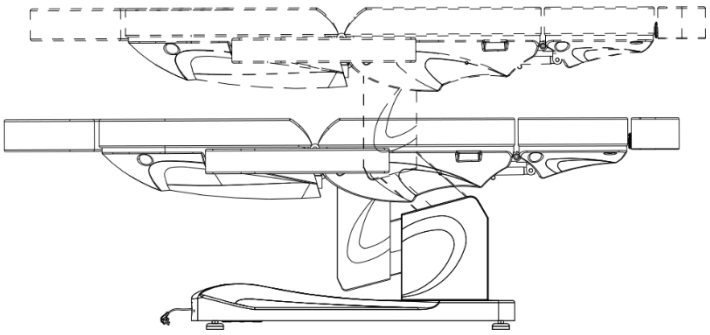


A háttámla beállítása:

Nyomja meg a gombot a háttámla ülő helyzetbe állításához vagy megemeléséhez, vagy a gombot a háttámla leengedéséhez (pl. fekvő helyzetbe).

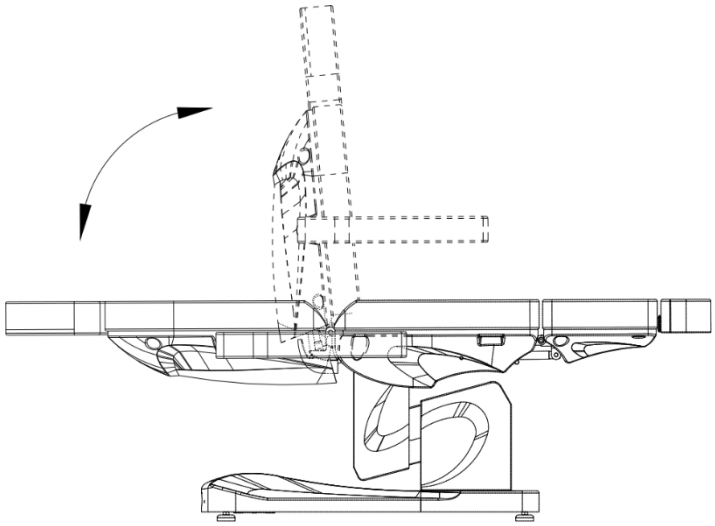


Az ülés szögének beállítása:

Nyomja meg a vagy a gombot az ülés beállítási szögének beállításához.

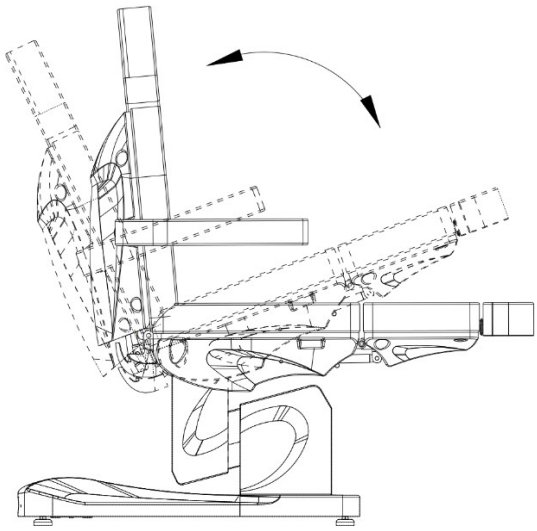


A lábtartó beállítása:


Nyomja meg a gombot. a lábtartó vízszintes helyzetbe állításához (vagy megemeléséhez), vagy a lábtartó leengedéséhez.

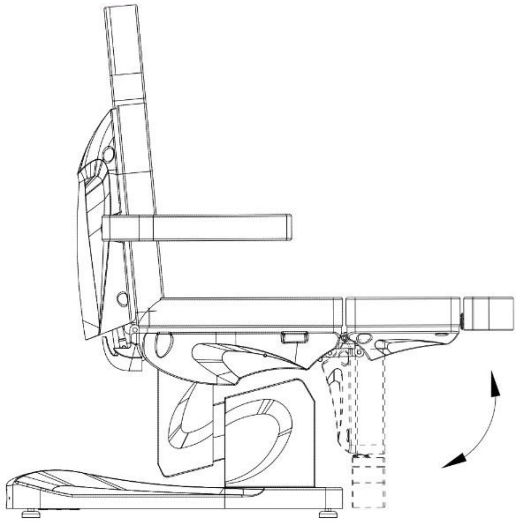

A lábtartó beállítása:

Lazítsa meg a lábtartó alján lévő gombot, és hosszabbítsa ki a megfelelő hosszúságúra, majd húzza meg a gombot.

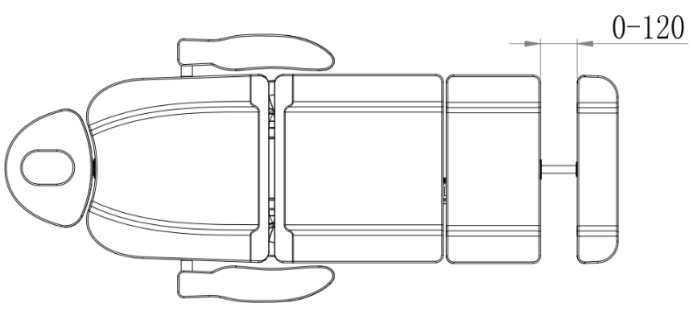

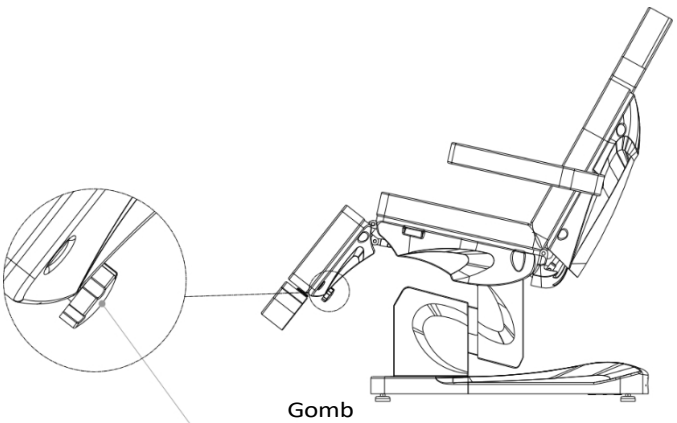

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről.

- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A tisztítás enyhe tisztítószeres oldattal a legjobb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.

- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.

- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

A készüléket karbantartás előtt le kell választani az elektromos hálózatról.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek

megfelelően. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell

Hibaelhárítás

Probléma	**Ok**	**A megoldás módja**
A távirányító gombjai nem reagálnak.	1. Kapcsolja be a címet. A teljesítményszabályozó nem vagy nem lép működésbe. 2. Ülés lehet a már a maximális helyzetben van. 3. A készülék nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz.	1. Próbálja meg be- és kikapcsolni. 2. Ellenőrizze, hogy a többi gomb működik-e. 3. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva. Ha nem, akkor csatlakoztassa.
A készülék furcsa hangokat ad ki emeléskor és leengedéskor.	Meglazult a csavar.	Ellenőrizze a címen. i Húzza meg aaz összes csavart.
A lámpa nem kapcsol be annak ellenére, hogy a kapcsoló be van kapcsolva.	Kiégett biztosíték.	Cserélje ki a biztosítékot.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék kozmetikai rendelőkben való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet tartani.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.


2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

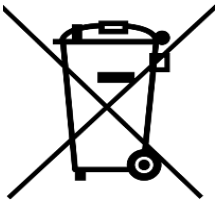

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és a következő gyűjtőhelyeken kell leadni
használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyei. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat a következő helyeken kell leadni

újrafeldolgozásra. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.