ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Azzurro 708A




Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.


Poznámka! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery zariadenia:

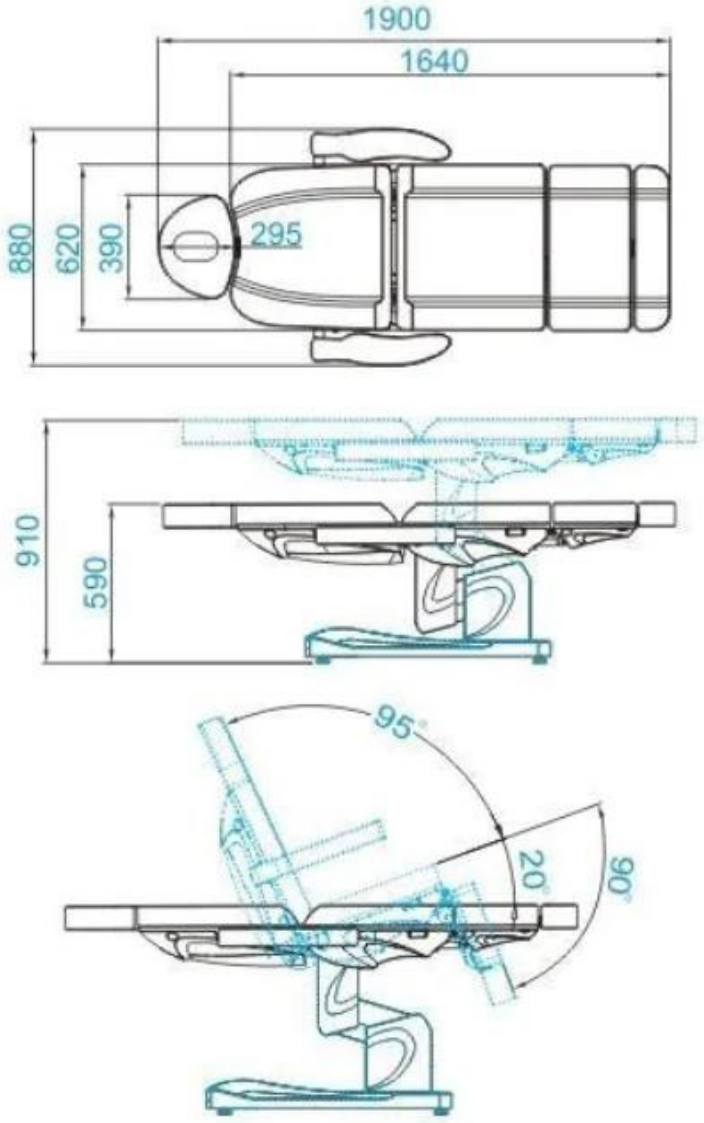

Maximálne zaťaženie stoličky: Maximálna hmotnosť stoličky: 140 kg

Konštrukcia zariadenia:

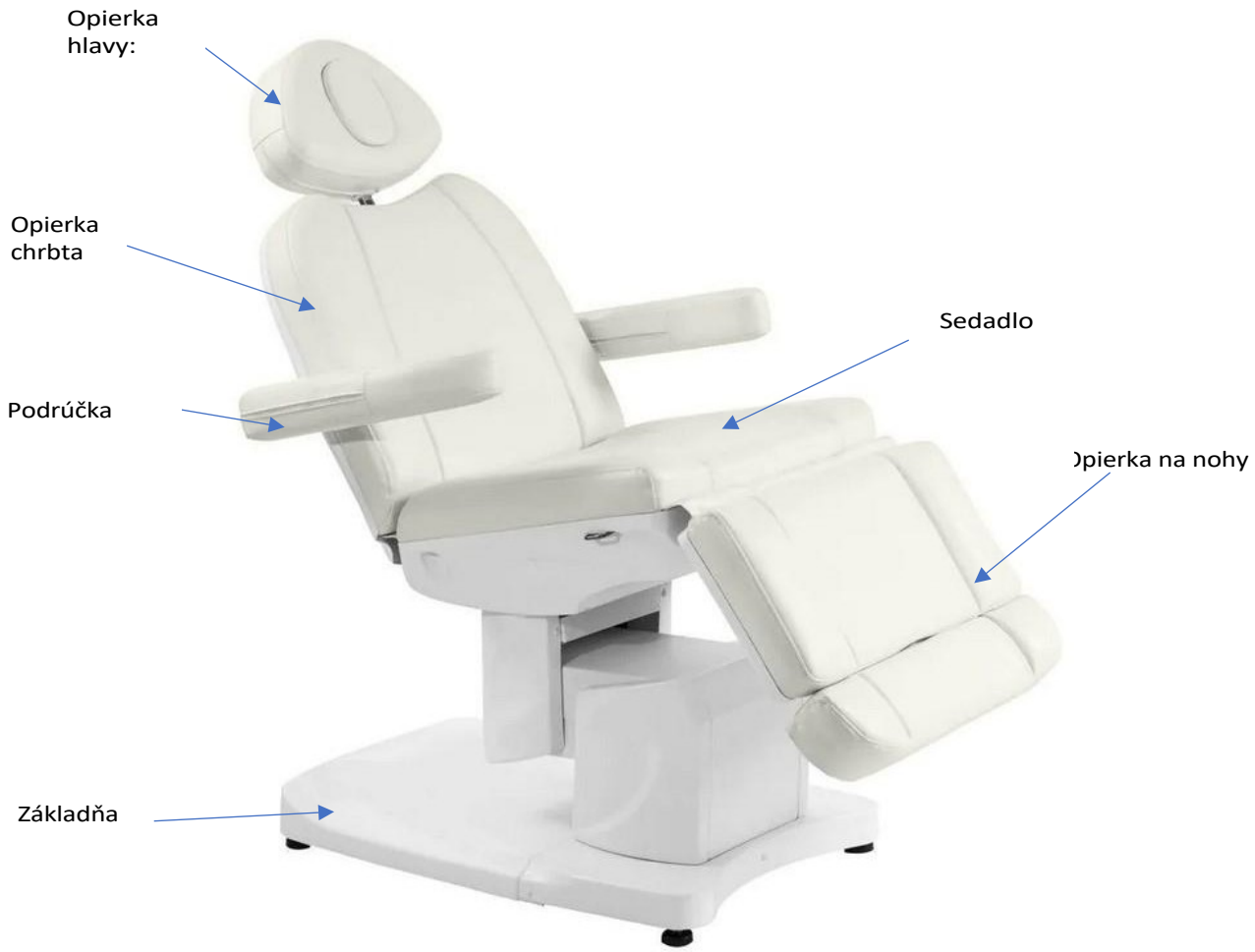

Použitie zariadenia:

Sedačka je nastaviteľná pomocou diaľkového ovládača, ktorým môžete nastaviť výšku sedadla, sklon operadla a opierky nôh, ako aj nastaviť sedadlo do kolísky.


1. Pripojte napájací kábel k externému zdroju napájania 110V~240V.

Inštalácia opierky hlavy


Opierku hlavy zasuňte do príslušnej medzery v hornej časti operadla. Po umiestnení opierky hlavy do správnej výšky utiahnite gombík tak, aby opierka hlavy pevne držala. Ak chcete opierku hlavy znížiť, mierne odskrutkujte gombík, znížte opierku hlavy a gombík utiahnite.

Inštalácia opierky rúk

Zasuňte lakťovú opierku do otvoru umiestneného na boku operadla. Opierka na ruku by mala byť pevne pripevnená. Otáčajte ňou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby správne zapadla na svoje miesto.

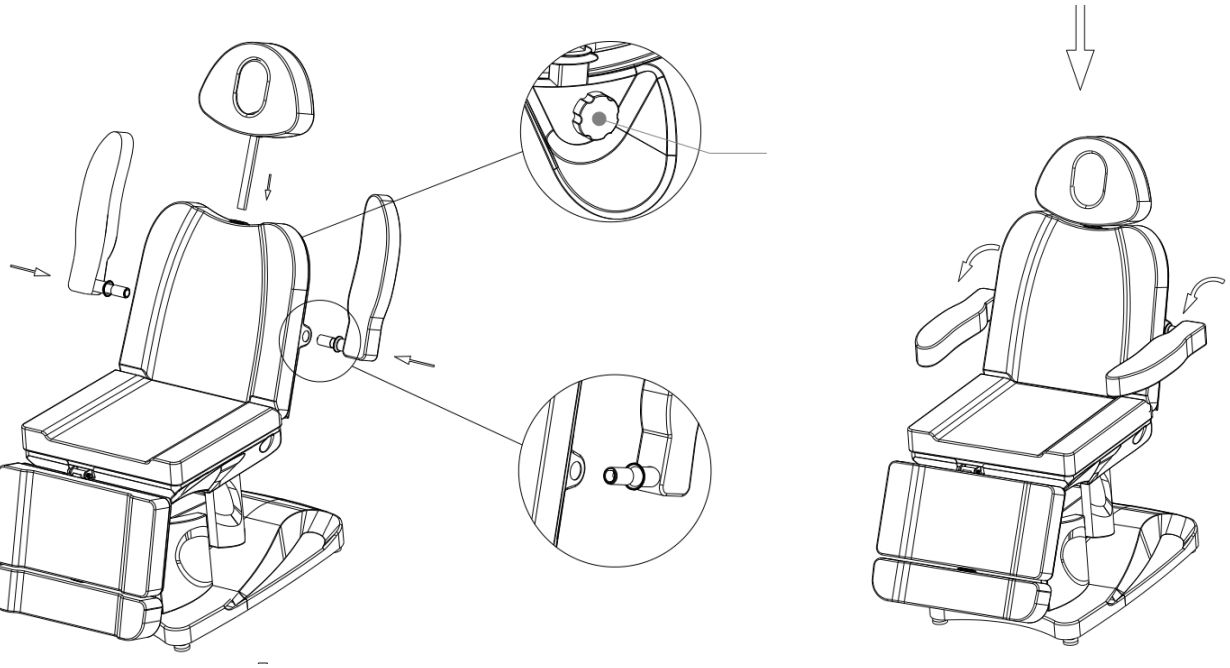

Funkcie diaľkového ovládania:

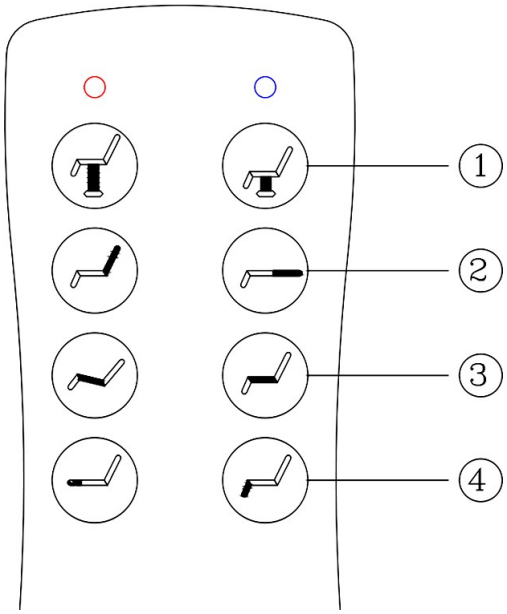

1. Stlačením tlačidla zdvihnete sedadlo alebo znížite sedadlo.


2. Stlačením tlačidla alebo nastavíte uhol operadla.

3. Stlačením tlačidla alebo nastavíte uhol sedadla.

4. Stlačte tlačidlo . alebo na nastavenie uhla opierky nôh.


Nastavenie výšky sedadla:

Stlačením tlačidla zdvihnete sedadlo (ktoré je v polohe na ležanie). Tlačidlo zníži sedadlo.

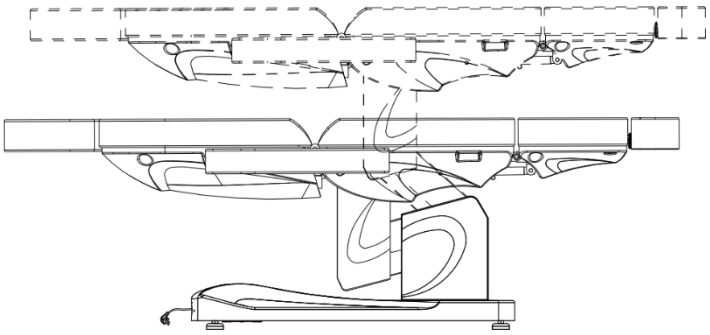


Nastavenie operadla:

Stlačením tlačidla nastavíte operadlo do polohy na sedenie alebo ho zdvihnete, alebo stlačením tlačidla operadlo spustíte (napr. do polohy na ležanie).

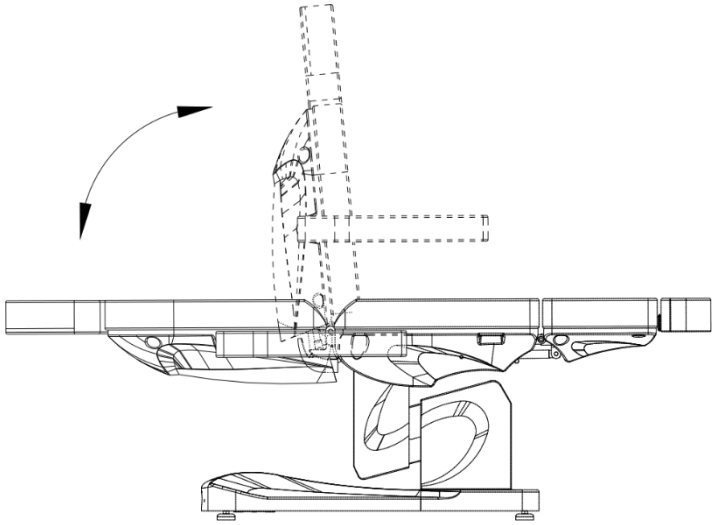


Nastavenie uhla sedadla:

Stlačením tlačidla alebo nastavíte uhol, pod ktorým je sedadlo nastavené.

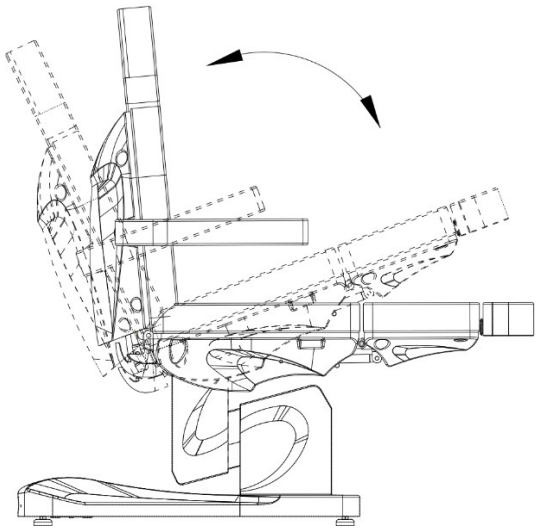


Nastavenie opierky nôh:


Stlačte . pre nastavenie opierky nôh do vodorovnej polohy (alebo pre jej zvýšenie), alebo pre zníženie opierky nôh.

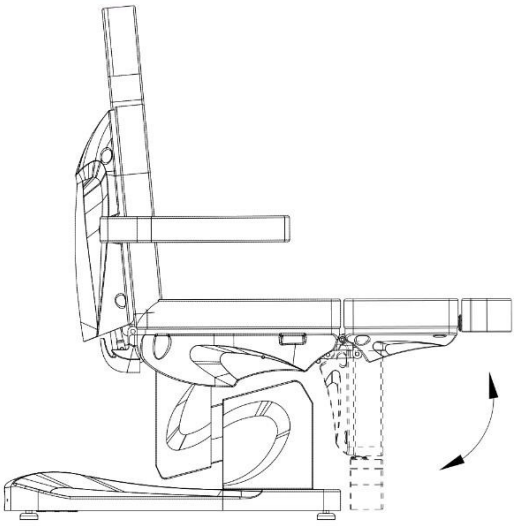

Nastavenie opierky nôh:

Uvoľnite gombík v spodnej časti opierky nôh a predĺžte ju na správnu dĺžku, potom gombík utiahnite.

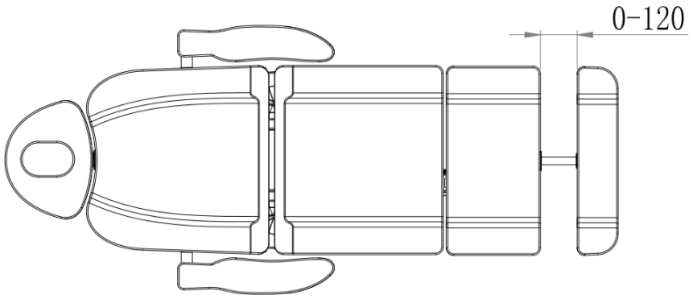

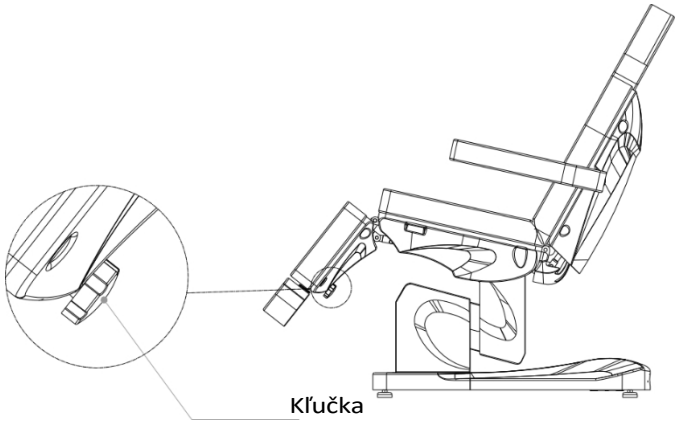

Čistenie a dezinfekcia prístroja:

- Pred čistením odpojte spotrebič od napájania.

- Aby bol povrch stoličky v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Ak chcete vyčistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku bude najlepšie. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).

- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a n e v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne. Všetky práce

na údržbe a opravách musia byť zdokumentované

Odstraňovanie porúch

Problém	**Príčina**	**Spôsob riešenia**
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní nereagujú.	1. Prepínač ovládanie napájania sa aktivuje alebo neaktivuje. 2. Sedadlo môže byť . už vmaximálnej polohe. 3. Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti.	1. Skúste ho zapnúť a vypnúť. 2. Skontrolujte, či ostatné tlačidlá fungujú. 3. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k s i e t i . Ak nie, potom ho zapojte.
Zariadenie vydáva pri zdvíhaní a spúšťaní zvláštne zvuky.	Uvoľnená skrutka.	Skontrolujte . i Utiahnite všetky skrutky.
Svetlo sa nezapína, aj keď je vypínač zapnutý.	Spálená poistka.	Vymeňte poistku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.

2. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže jednotka poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných p o r ú c h sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.

2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať ich na nasledujúcich zberných miestach zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdávať do

na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.