ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona cosmetica elettrica Sillon Luxury 3 motori con comando a pedale

C502 3 motori / 150223



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Cerca diverso lingue

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del primo utilizzo e di conservarle per riferimento futuro.

La **poltrona cosmetica Sillon Luxury** combina un design moderno, un funzionamento intuitivo e un'ampia funzionalità. Dotata di tre attuatori controllati da un telecomando con cavo, consente una regolazione precisa in base alle preferenze individuali. L'azionamento a pedale garantisce all'utente comodità e precisione nella regolazione della posizione della poltrona senza l'uso delle mani.

Dati tecnici	
Tensione di ingresso	220-230 V
Potenza elettrica	200W
Frequenza nominale	50
Materiale di rivestimento	Pelle sintetica
Comandi	Telecomando con cavo e comando a pedale
Temperatura ambiente	(+)10 °C – (+)40 °C
Umidità ambientale	30% - 75%

Nota


Per l'imballaggio vengono utilizzati cartoni e scatole esterne, per un totale di 10 strati di carta, che garantiscono una protezione adeguata del prodotto. Si consiglia di conservare l'imballaggio originale per un utilizzo futuro, in particolare in caso di resi durante il periodo di garanzia.

La poltrona può essere sollevata solo dalla posizione del poggiatesta e del poggiapiedi, non da entrambi i lati dei braccioli. Per motivi di sicurezza, sono necessarie due persone per estrarre la poltrona dal cartone.

La poltrona elettrica per trattamenti estetici deve essere utilizzata in ambienti chiusi e asciutti. Temperatura
La temperatura ambiente deve essere compresa tra (+)10 °C e (+)40 °C, mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 75%. Se questa poltrona cosmetica è stata esposta a temperature inferiori a 0 °C, ad esempio durante il trasporto, prima di metterla in funzione è necessario attendere almeno 5 ore affinché raggiunga la temperatura ambiente.

Struttura del dispositivo:

1. Poggiatesta
2. Schienale
3. Bracciolo
4. Seduta
5. Poggiapiedi
6. Telecomando con cavo
7. Comandi a pedale
8. Cilindro di sollevamento
9. Coperchio in plastica

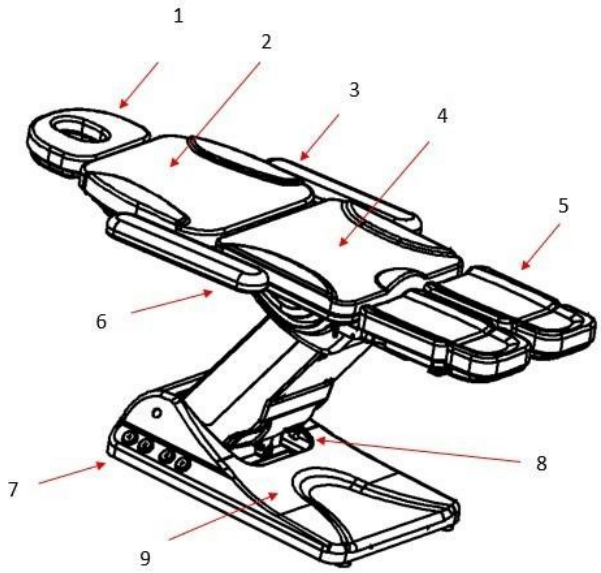


Istruzioni di montaggio della poltrona

- Posizionare la poltrona nel luogo in cui verrà utilizzata
- Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente


Descrizione delle funzioni di comando del telecomando

1. **Regolazione dell'altezza del sedile.**

   L'intervallo di regolazione dell'altezza è compreso tra 60 cm e 82 cm dal pavimento

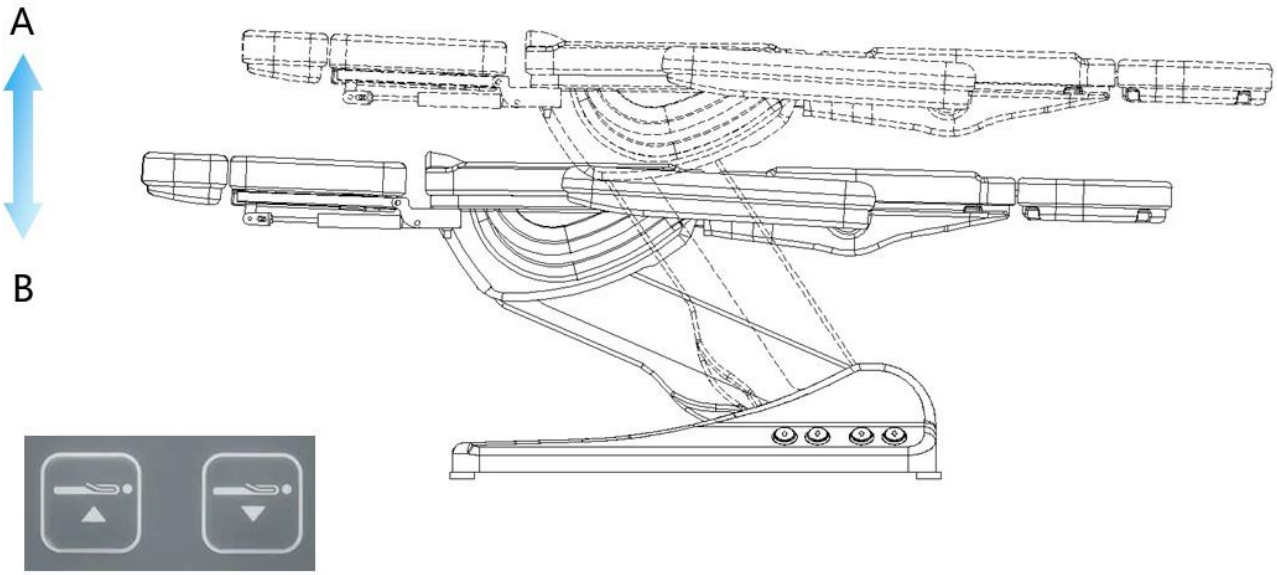


2. **Regolazione dell'inclinazione dello schienale –** intervallo 0 - 80°

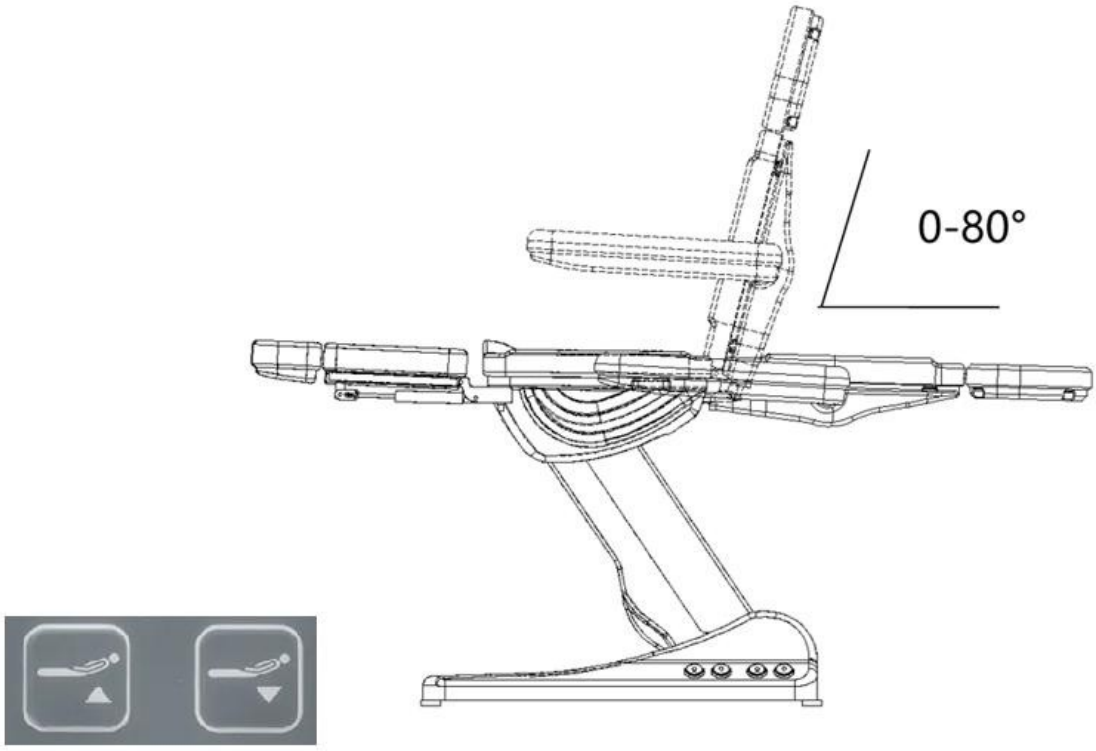

3. **Regolazione dell'inclinazione delle gambe –** intervallo 0~90°

   Premere la maniglia dell'asta pneumatica per modificare la posizione del poggiapiedi.

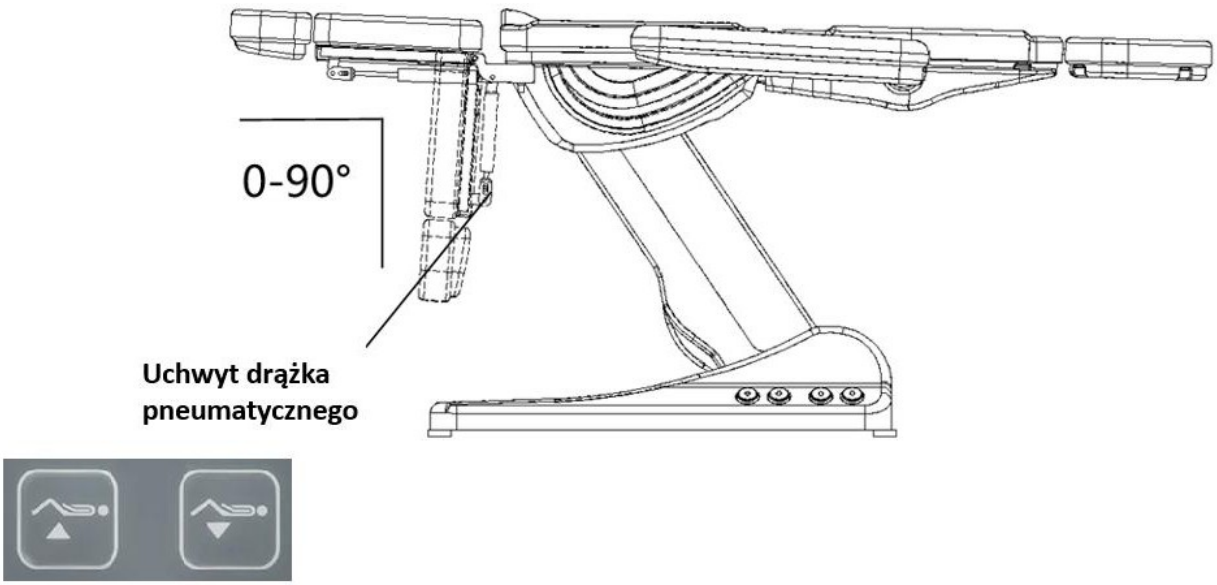


4. **Illuminazione della parte inferiore della base**



5. **Attenzione! La funzione di riscaldamento in questo modello è disattivata. Il telecomando è universale e può essere utilizzato su molti modelli.**

Funzione di estensione telescopica del poggiatesta e del poggiapiedi – estensione di 12 cm

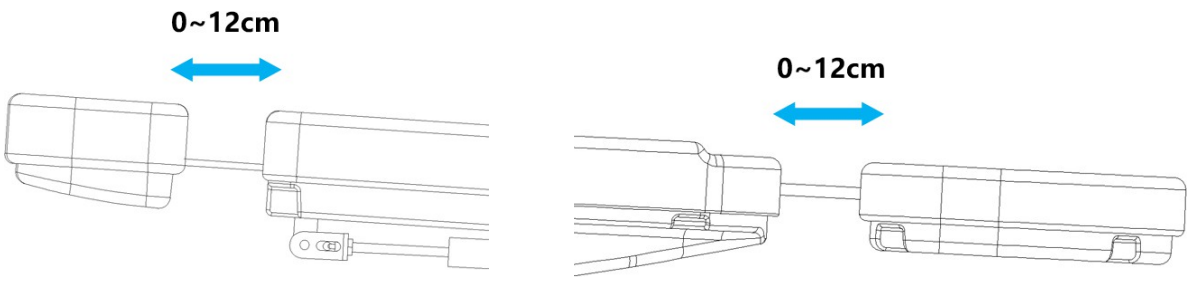

Poggiatesta


Poggiapiedi

Montaggio dei braccioli

La poltrona deve essere in posizione orizzontale. Inserire il bracciolo nell'apertura situata sul lato dello schienale, muoverlo a destra e a sinistra per farlo scattare in posizione. Ripetere la stessa operazione con l'altro bracciolo.
Il bracciolo è perpendicolare al pavimento indipendentemente dall'angolo di inclinazione della poltrona. Il suo raggio di movimento è di 180°.

Attenzione

Il carico massimo è di 150 kg. Si prega di non sedersi direttamente sullo schienale reclinato, sui braccioli
e sul poggiapiedi.

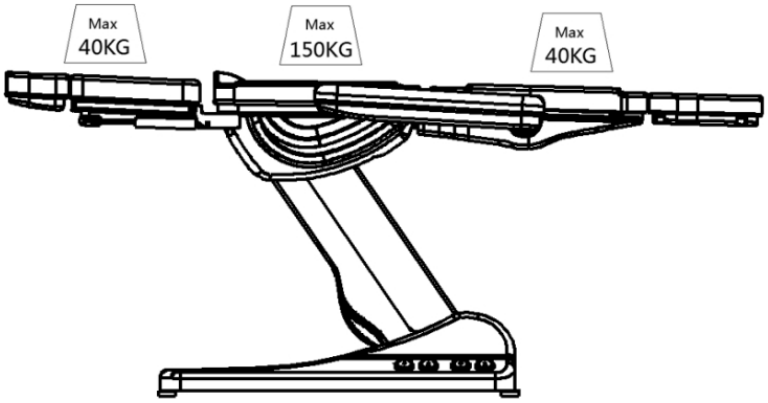

Manutenzione

Per mantenere in buono stato la superficie del lettino cosmetico, è necessario pulirlo e mantenerlo regolarmente.

Prima di procedere alla pulizia, ricordarsi di staccare il cavo dalla presa di alimentazione.

- Le superfici metalliche e plastiche e i comandi devono essere puliti con un panno umido e una soluzione detergente delicata. Negli angoli e in altri punti difficili da raggiungere utilizzare una piccola spazzola. Durante la pulizia si consiglia di non utilizzare una quantità eccessiva di liquido
- Superfici in acciaio inossidabile: pulire con una soluzione detergente delicata. Per rimuovere macchie difficili e ostinate è possibile utilizzare ammoniaca e la maggior parte dei solventi. Evitare soluzioni a base di cloro.
- Superfici metalliche verniciate o cromate: non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.
- Superficie del letto: utilizzare un panno pulito e morbido. È possibile utilizzare una piccola quantità di detergente speciale per la pulizia e l'impermeabilizzazione delle pelli sintetiche.

Tutte le superfici devono essere asciutte prima di collegare l'alimentazione e riutilizzare il dispositivo.

Non pulire a temperature elevate e in condizioni di elevata umidità dell'aria.


Non esporre il dispositivo a fattori che potrebbero causare la contaminazione con liquidi.

Raccomandazioni:

1. Assicurati di aver installato il dispositivo su una superficie piana e stabile per ridurre il rischio di cadute e danni.
2. Non lasciare mai il dispositivo collegato incustodito.
3. Utilizzare il dispositivo secondo l'uso previsto descritto nelle istruzioni.
4. Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.
5. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è stato fatto cadere, danneggiato o è caduto in acqua.
6. Non tirare direttamente il cavo per staccare la spina dalla presa.
7. Prodotto da utilizzare esclusivamente in ambienti interni. Non esporlo alle intemperie.

8. Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporcizia. Si consiglia di pulire l'apparecchio con un panno umido.
9. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo.

Dimensioni dell'apparecchio

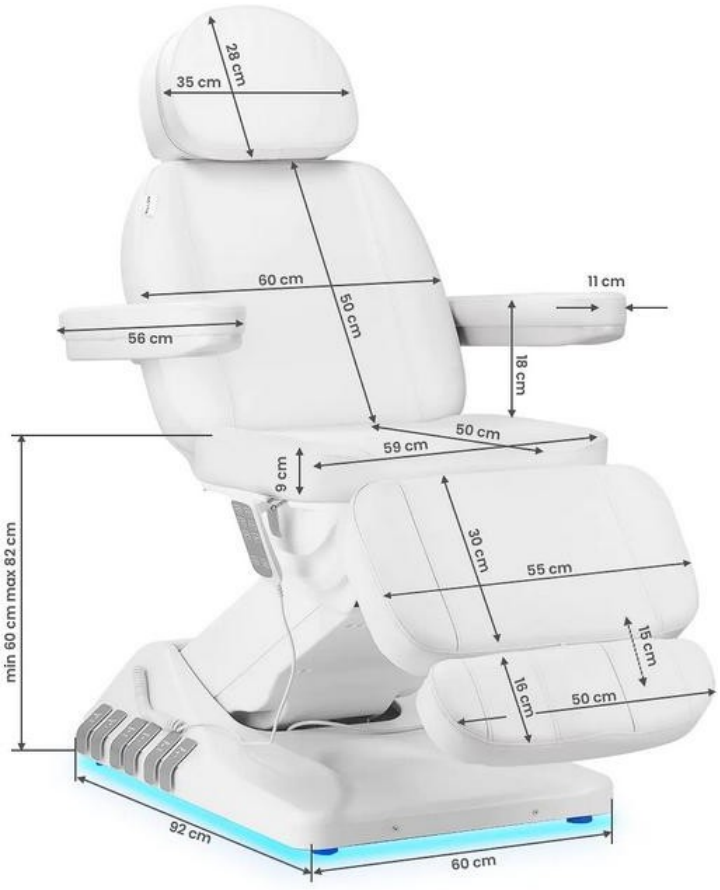

Misure di sicurezza:

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo del dispositivo esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate. Assicurarsi che nessun liquido penetri nel dispositivo.
4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) il dispositivo emana uno strano odore, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) il dispositivo è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo dell'apparecchio.
7. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'apparecchio. Se un oggetto indesiderato dovesse finire all'interno, scollegare il cavo dalla presa di corrente e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio

potrebbe danneggiarsi.

9. Per garantire la durata prevista del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danni o addirittura di incendio.

ATTENZIONE

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, nonché da persone non familiarizzate con il funzionamento di questo apparecchio, purché siano adeguatamente sorvegliate o istruite sul suo corretto utilizzo in modo sicuro e siano consapevoli dei rischi connessi.
3. Non lasciare il dispositivo incustodito quando bambini o persone che non hanno una conoscenza sufficiente del suo funzionamento si trovano nelle vicinanze.
4. L'apparecchio non è destinato al gioco dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento dell'apparecchio



Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È necessario seguire le norme relative allo smaltimento di questo
tipo di apparecchiature e non gettarle nei contenitori dei rifiuti domestici.

Alla fine del loro ciclo di vita, questi dispositivi contengono ancora componenti riciclabili di valore, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio presso i punti di raccolta appropriati o alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Conservazione e trasporto

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (–)20 °C e (+)40 °C esclusivamente nell'imballaggio originale. Conservare in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio da (+)10 °C a (+)40 °C. Durante i processi
Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare né far cadere il dispositivo, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.