ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Elektriline kosmeetikatool Sillon Luxury 3 mootorit, jalgadega juhtimine

C502 3 mootorit / 150223



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

Scan for erinev keeled

Täname, et valisite meie toote.
Palun lugege enne esmakordset kasutamist kasutusjuhendit ja hoidke see alles.

Kosmeetiline tool Sillon Luxury ühendab endas kaasaegse välimuse, intuitiivse kasutamise ja laia funktsionaalsuse. See on varustatud kolme juhtimispuldiga, mis võimaldavad täpselt kohandada tooli vastavalt individuaalsetele eelistustele. Jalgadega käivitatav mootor tagab kasutajale mugavuse ja täpsuse tooli asendi reguleerimisel ilma käsi kasutamata.

Tehnilised andmed	
Sissetulev pinge	220–230 V
Elektriline võimsus	200 W
Nimissagedus	50 Hz
Polsterstoff	Sünteetiline nahk
Juhtimine	Juhtmega pult ja jalgpedaal
Ruumi temperatuur	(+)10 °C – (+)40 °C
Õhuniiskus	30% - 75

Märkus


Pakendamiseks kasutatakse kartongi ja väliskartongi, kokku 10 paberikihti, mis tagavad toote nõuetekohase kaitse. Soovitame originaalpakendi alles jätta tulevikus kasutamiseks, eriti tagastamiste puhul garantiiperioodil.

Tugitooli võib tõsta ainult peatoe ja jalatoe positsioonist, mitte mõlemalt küljelt käetoest. Ohutuse tagamiseks on tugitooli kartongist väljavõtmiseks vaja kaht inimest.

Elektrilist kosmeetikatooli tuleb kasutada suletud, kuivades ruumides. Temperatuur
ruumis peaks temperatuur olema vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C ja suhteline õhuniiskus 30% kuni 75%. Kui kosmeetikatool on olnud alla 0 °C temperatuuri mõjualas, näiteks transpordi ajal, tuleb enne kasutamist oodata vähemalt 5 tundi, et seade jõuaks saavutada toatemperatuuri.

Seadme ehitus:

1. Peatugi
2. Seljatugi
3. Käetoed
4. Istmikuosa
5. Jalatoe
6. Juhtmega pult
7. Jalaga juhtimine
8. Tõstemehhanism
9. Plastikkate

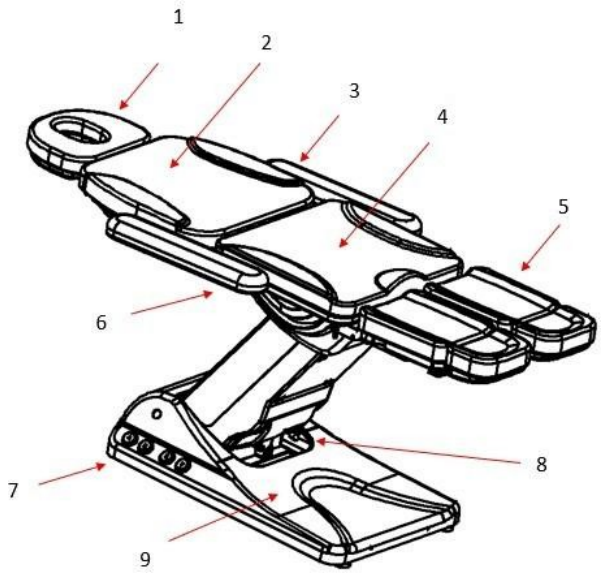


Istme paigaldusjuhend

- Asetage tool kasutuspaika
- Ühendage toitepistik pistikupesaga


Puldiga juhtimise funktsioonide kirjeldus

1. **Istme kõrguse reguleerimine.**

   Kõrguse reguleerimisvahemik on 60 cm – 82 cm põrandast

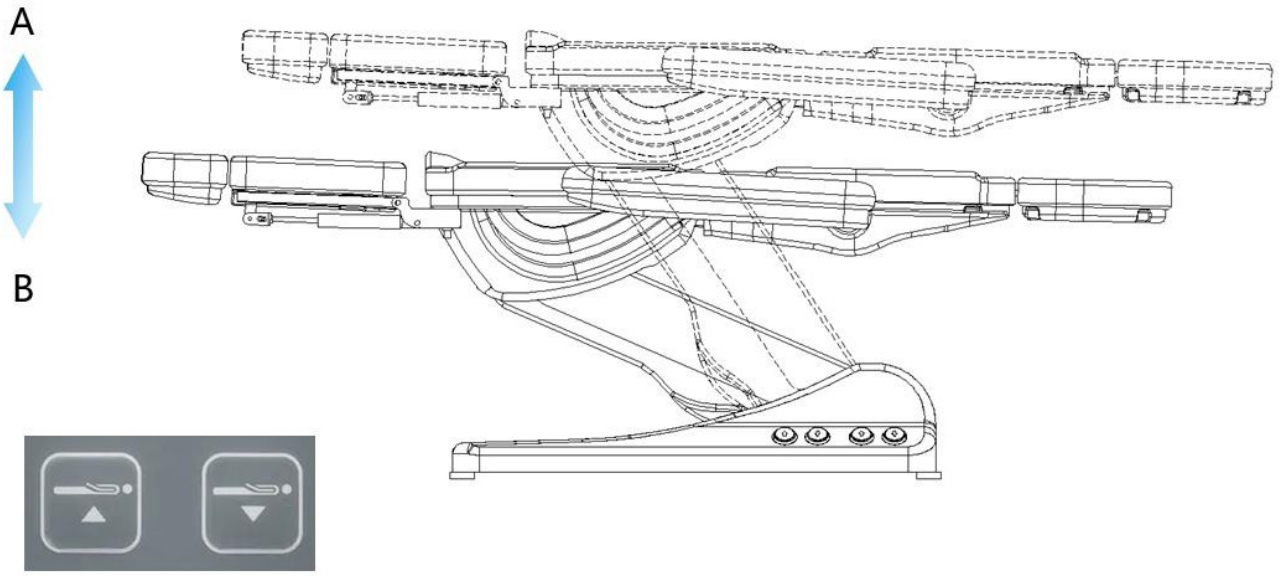


2. **Seljatoe kaldenurga reguleerimine –** vahemik 0–80°

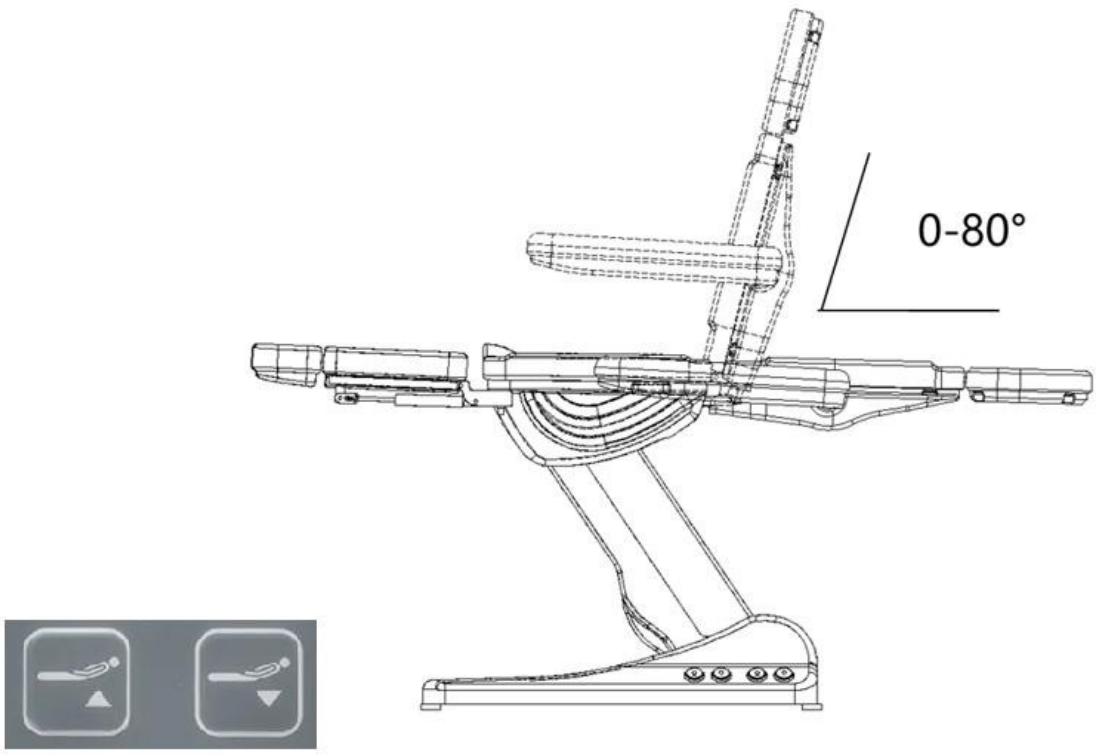

3. **Jalgade kaldenurga reguleerimine –** vahemik 0–90°

   Vajutage pneumaatilise toru käepidemeid, et muuta jalatoe asendit.

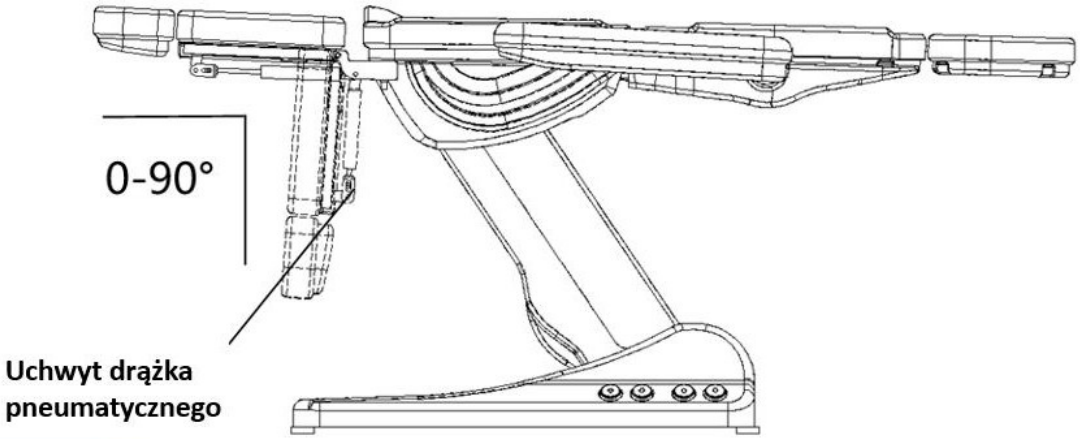




4. **Aluse alaosa valgustus**




5. **Tähelepanu! Selles mudelis ei ole soojendusfunktsioon aktiivne. Pult on universaalne ja sobib paljudele mudelitele.**

Teleskoopiline peatoe ja jalatoe väljatõmbefunktsioon – pikendamine 12 cm

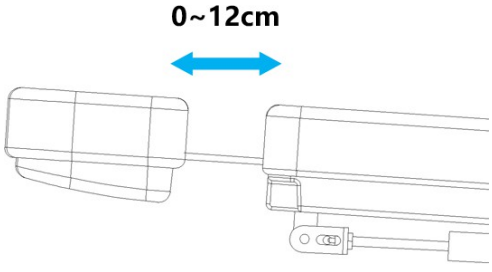

Peatugi

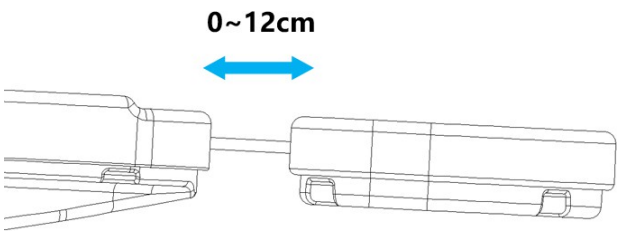


Jalatoe

Käetoestete paigaldamine

Tugitool peab olema horisontaalses asendis. Lükake käetugi küljele asuvasse avasse, liigutage seda paremale ja vasakule, et see sobiks õigesse asendisse. Tehke sama teise käetoega.
Käetugi on alusega risti, sõltumata tooli kaldenurgast. Selle liikumisulatus on 180°.

Tähelepanu

Maksimaalne koormus on 150 kg. Palun ärge istuge otse lahtivõetud seljatoele, käetoele ja jalatoele.

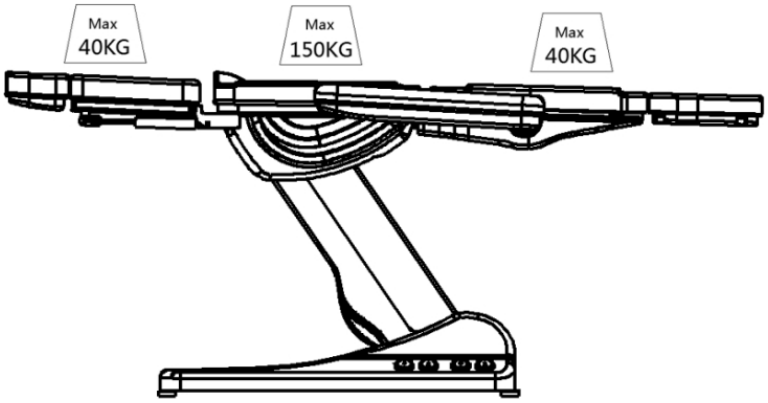

Hooldus

Kosmeetikatooli pinna heas seisukorras hoidmiseks tuleb seda regulaarselt puhastada ja hooldada. Enne puhastamist tuleb vooluvõrgust pistik välja tõmmata.

- Metall- ja plastpinnad ning juhtimisseadmed tuleb puhastada niiske lapiga ja delikatnym roztworem czyszczącym. Nurgades ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades tuleb kasutada väikest harja. Puhastamise ajal soovitame mitte kasutada liiga palju vedelikku
- Roostevabast terasest pinnad – puhastada pehme detergendilahusega. Raske ja püsiva mustuse eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältida kloori sisaldavaid lahuseid.
- Värvitud või kroomitud metallpinnad – puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega happeid.
- Voodi pind – kasutage puhast, pehmet lappi. Võite kasutada väikest kogust spetsiaalset puhastus- ja impregneerimisvahendit sünteetilise naha jaoks.


Kõik pinnad peavad olema kuivad enne toiteallika ühendamist ja uuesti kasutamist. Ärge puhastage kõrgel temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures.
Ärge asetage seadet keskkonda, kus see võib vedelikega kokku puutuda.

Soovitused:

1. Veenduge, et seade on paigaldatud tasasele ja stabiilsele pinnale, et vähendada kukkumise ja kahjustuste ohtu.
2. Ärge jätke ühendatud seadet kunagi järelevalveta.
3. Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbele.
4. Ärge kasutage seda seadet kunagi, kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
5. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on kukkunud, kahjustunud või vette kukkunud.
6. Ärge tõmmake pistikupesa pistikupesast välja otse juhtme kaudu.
7. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke seda otsese ilmastiku mõju alla.

8. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse kogunemist. Seadet on soovitatav puhastada niiske lapiga.
9. Ärge mähkige toitejuhet seadme ümber.

Seadme mõõtmed

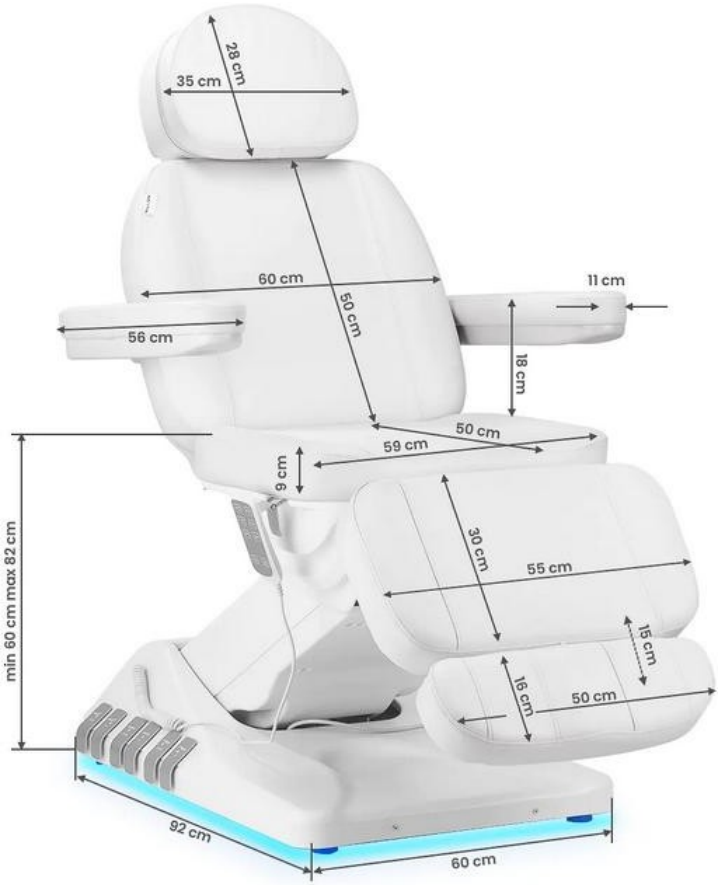

Ohutusmeetmed:

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadet tohib kasutada ainult kvalifitseeritud kosmeetikud, et vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) töötaja.
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seade on sattunud kokkupuutesse vedelikuga,
   b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pistikupesast välja tõmmata pärast iga seadme kasutamist.
7. Ärge asetage seadme sisse võõraid esemeid. Kui soovimatu ese satub seadme sisse, eemaldage toitekaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade

võib see kahjustuda.

9. Seadme kindlaksmääratud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisse- ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toide peab vastama nimikilbil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib see rikkuda või isegi põlema süttida.

TÄHELEPANU

1. Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, füüsilise ja vaimse võimekusega ning ka isikud, kes ei ole seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme ohutu ja nõuetekohase kasutamise kohta ning kui neile on selgitatud sellega seotud ohud.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib põhjustada tervise kahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonna kaitsmiseks tuleb vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Tuleb järgida selle ja mitte visata seda olmejäätmete konteineritesse.

Kui seadme kasutusiga on lõppenud, sisaldab see endiselt täisväärtuslikke ja ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need viia ringlussevõtuks asjakohastesse kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ladustamine ja transport

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on (+)10°C kuni (+)40 °C. Protsesside ajal ladustamisel ja transportimisel ei tohi seadet visata ega kukutada, seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.