ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Azzurro 708B poltrona estetica elettrica 4 motori



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nell'area in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa adeguata.

Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.

Dimensioni dell'apparecchio:



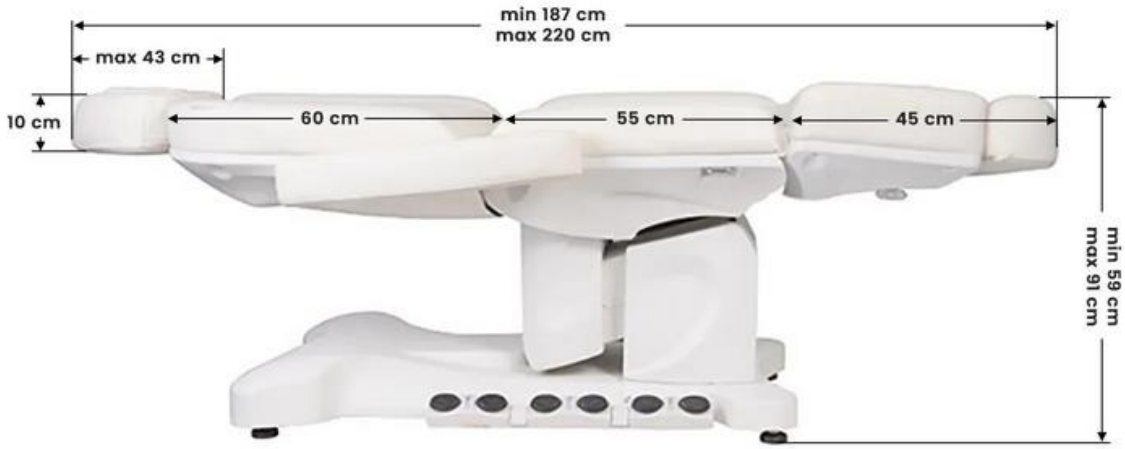

Struttura dell'apparecchio:



Attenzione:

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo e sul poggiapiedi.
3. Assicurarsi che la distanza tra le prese non superi i 2 metri.

Attenzione

1. Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Non legare il cavo di alimentazione all'unità. Sollevando o tirando il cavo di alimentazione si rischia di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
3. Rimuovere il cavo di alimentazione prima di spostare la poltrona elettrica, per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo il cavo di alimentazione originale.

5. Non permettere a una persona che non esegue il trattamento di controllare il telecomando.
6. Non collocare oggetti sotto la poltrona.
7. Accertarsi che intorno al sedile vi sia spazio sufficiente per poterlo piegare e dispiegare liberamente.
8. Assicurarsi che intorno al sedile non vi siano oggetti appuntiti o pericolosi che possano danneggiare l'unità.
9. Non modificare l'unità da soli. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Funzioni del telecomando:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

1. Interruttore On/Off
2 Regolazione dell'altezza
3 Regolazione dello schienale
4. Regolazione del sedile
5. regolazione del poggiapiedi
6. premere per impostare la modalità automatica
7-9 La modalità automatica consente di impostare e memorizzare l'altezza del sedile.
Posizionamento di sedile, sedile, schienale e poggiapiedi. Regolare l'allineamento del sedile come richiesto, quindi tenere premuto il pulsante SET fino all'accensione della luce blu, quindi premere il pulsante P1 per memorizzare le impostazioni. È possibile memorizzare 3 diverse impostazioni utilizzando i pulsanti P1, P2, P3 (7-9).
10. premere per illuminare l'unità.
11. regolare la luminosità della luce
Funzione di gonfiaggio dello schienale - premere per disattivare il gonfiaggio
13. Funzione pompaggio schienale - premere, per attivare il gonfiaggio
14. Funzione di riscaldamento - premere per disattivare il riscaldamento
15. Funzione di riscaldamento - premere per attivare il riscaldamento


Funzioni di comando a pedale:

L'apparecchio è dotato di 4 pedali. Ognuno è responsabile di una funzione diversa.

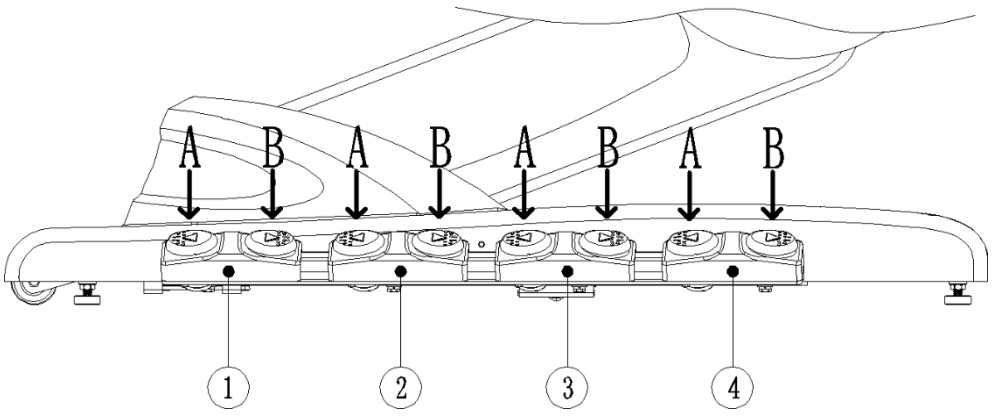

1. Regolazione dell'altezza


Accendere l'interruttore di alimentazione. Quindi premere il pedale 1  per regolare l'altezza del sedile.

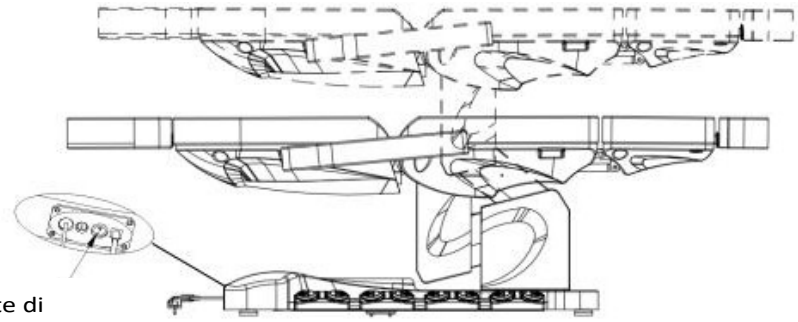

Pulsante di accensione


2. Regolazione dello schienale

Sul pedale 2, premere  per regolare la posizione dello schienale.

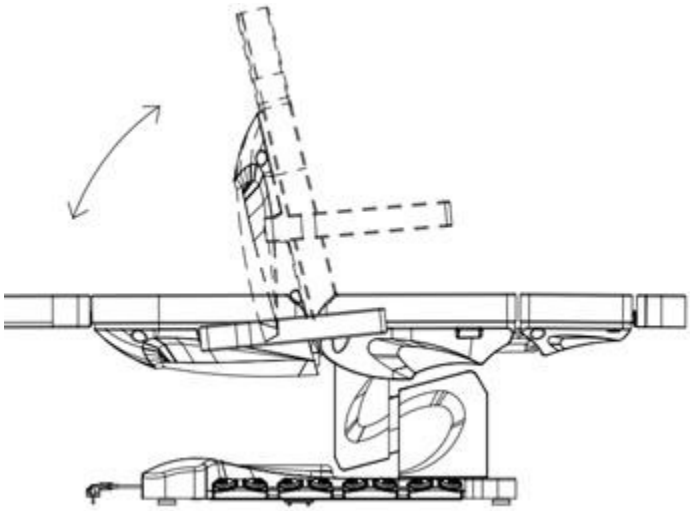


3. Regolazione del sedile

Sul pedale 3, premere  per regolare la posizione e l'inclinazione del sedile.

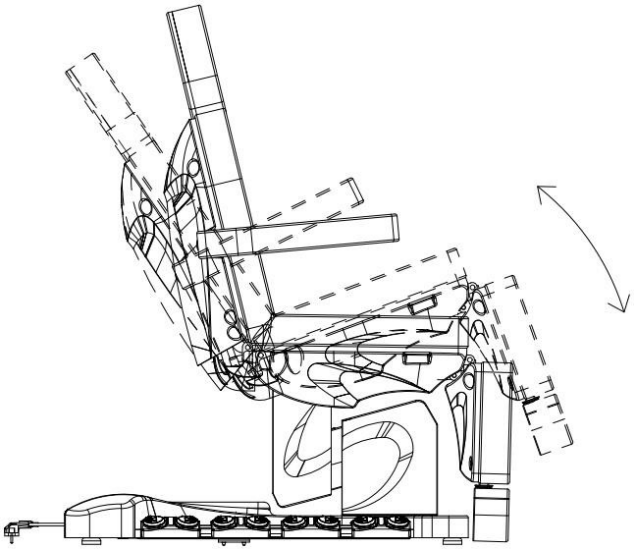


4. Regolazione del poggiapiedi


Sul pedale n. 4, premere  per regolare la posizione della pedana

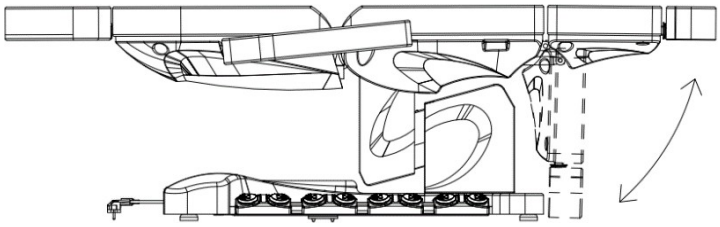

5. Estensione del poggiapiedi

La poltrona dispone anche dell'opzione di estensione del poggiapiedi, che facilita l'esecuzione di trattamenti su persone più alte e migliora il comfort.
La regolazione del poggiapiedi avviene tramite la manopola posta sul lato inferiore del poggiapiedi. Svitando la manopola si può estendere il poggiapiedi.

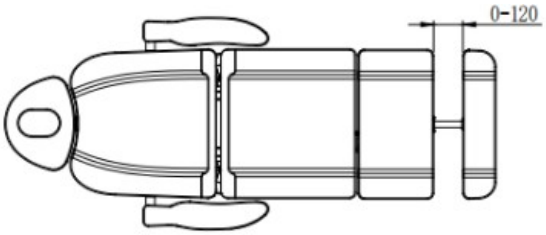

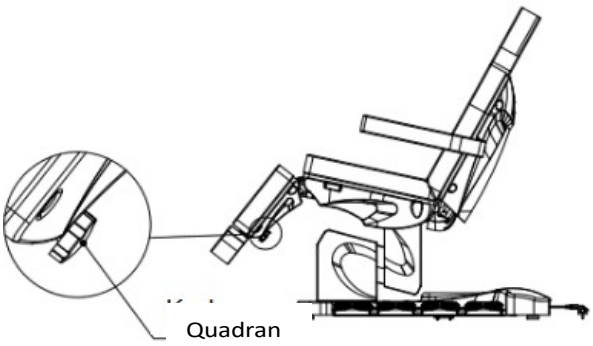


Installazione del bracciolo:

Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo a destra o a sinistra in modo che entri correttamente in posizione. Procedere allo stesso modo con l'altro bracciolo. Il bracciolo è perpendicolare al suolo (indipendentemente dall'angolo del sedile). Può essere ruotato di 180°.

Installazione del poggiatesta:

Far scorrere il poggiatesta nel foro situato nella parte superiore dello schienale. Quando il poggiatesta è all'altezza corretta, stringere la manovella situata sul retro per fissare il poggiatesta.

Per abbassare o estendere il poggiatesta, svitare la manovella, regolare il poggiatesta e serrare la manovella.

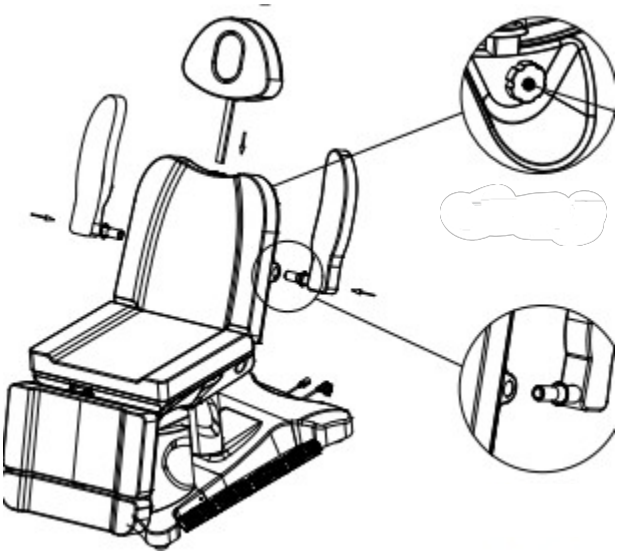

Pulizia e disinfezione dell'unità:

Scollegare l'unità prima di pulirla.

Per mantenere la superficie del sedile in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passate un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo fissaggio
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. se gli accessori sono montati
5. Il normale funzionamento del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e contattare un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.
Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'utilizzo. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	**Causa**	**Metodi di soluzione**
Pedale controllo pedale non reagisce	1. Pulsante il pulsante di accensione si attiva o non si attiva. 2. Controllare, se pedale è premuto al massimo. 3. Controllare, che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente. 4. Controllare, che tutto sia stato correttamente collegato correttamente.	1. Provare a riavviare il pulsante di accensione. 2. Provare ad accendere altri pulsanti e vedere se funzionano. 3. Scollegare dispositivo i ricollegarlo. 4. Scollegare i connettori e ricollegarli.
Il dispositivo fa strani rumori quando si abbassa il sedile	Vite allentata	Serrare le viti
Le spie del pedale non si accendono	Fusibile bruciato	Sostituire il fusibile

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).

3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,

c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva

2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai seguenti punti di raccolta

raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.