ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Azzurro 708B elektrischer Kosmetikstuhl 4 Motoren



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

Abmessungen des Geräts:



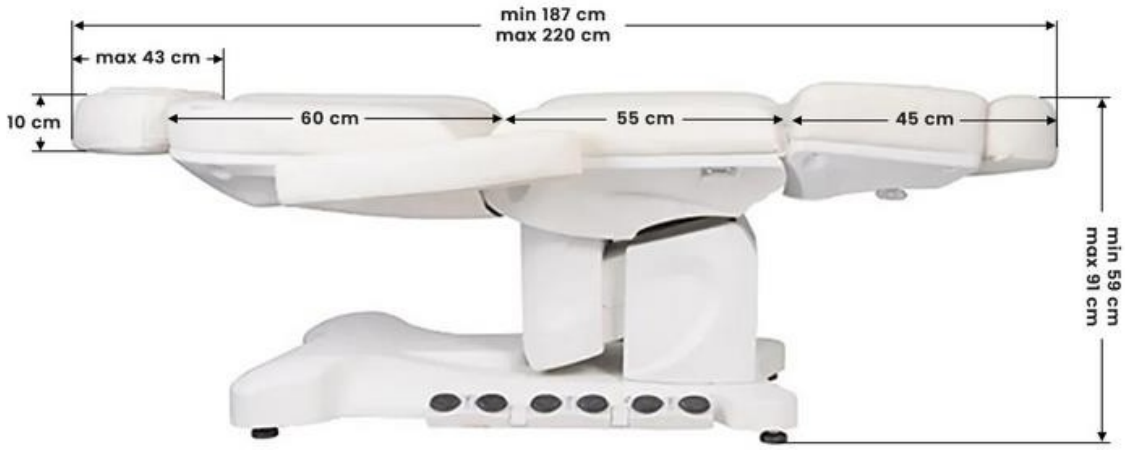

Aufbau des Geräts:



Achtung!

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne und die Fußstütze.
3. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

Vorsicht

1. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
2. Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in einer Notsituation leicht entfernt werden kann.
3. Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie den elektrischen Kosmetiksessel bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Sessels eingeklemmt wird.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie sofort das Kabel ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.

5. Lassen Sie die Fernbedienung nicht von einer Person bedienen, die nicht an der Behandlung teilnimmt.
6. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
7. Vergewissern Sie sich, dass um den Sitz herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er ungehindert ein- und ausgeklappt werden kann.
8. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Sitzes keine scharfen oder schädlichen Gegenstände befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
9. Nehmen Sie keine eigenen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie ihn nicht mehr in Betrieb und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.


Funktionen der Fernbedienung:



1. Ein/Aus-Schalter
2 Höhenverstellung
3 Einstellung der Rückenlehne
4. Sitzverstellung
5. Einstellung der Fußstütze
6. drücken, um den Automatikmodus einzustellen
7-9 Der Automatikmodus ermöglicht die Einstellung und Speicherung der Höhe
Einstellung von Sitz, Sitzfläche, Rückenlehne und Fußstütze. Stellen Sie den Sitz wie gewünscht ein, halten Sie dann die SET-Taste gedrückt, bis das blaue Licht aufleuchtet, und drücken Sie dann die P1-Taste, um die Einstellungen zu speichern. Mit den Tasten P1, P2, P3 (7-9) können Sie 3 verschiedene Einstellungen speichern.
10. drücken, um das Gerät zu beleuchten.
11. Helligkeit des Lichts einstellen
Aufblasfunktion der Rückenlehne - drücken, um das Aufblasen zu deaktivieren
13. Funktion pumpen Rückenlehne - drücken, auf Aufpumpen zu aktivieren
14. Heizfunktion - drücken, um die Heizung auszuschalten
15. Heizfunktion - drücken, um die Heizung zu aktivieren


Funktionen der Fußsteuerung:

Das Gerät verfügt über 4 Fußschalterpedale. Jedes ist für eine andere Funktion zuständig.

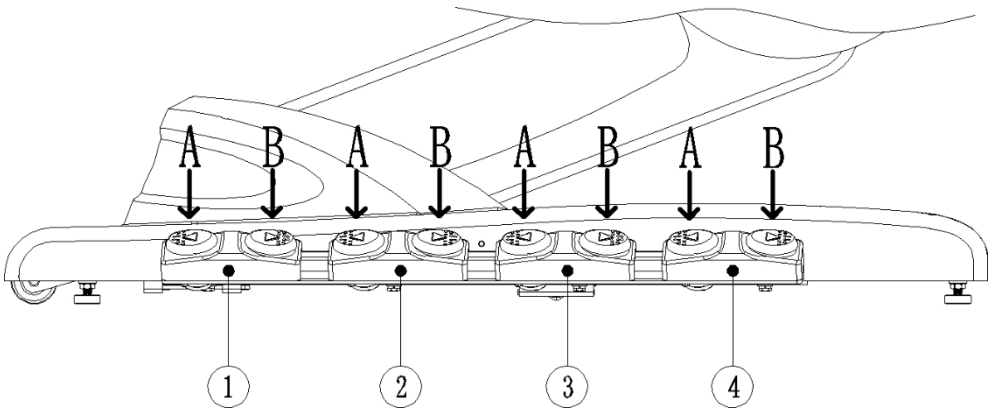

1. Höhenverstellung


Schalten Sie den Netzschalter ein. Drücken Sie dann auf Pedal 1  um die Höhe des Sitzes einzustellen.

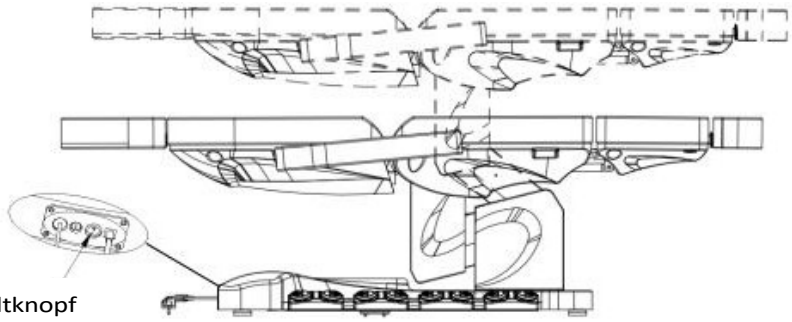

Einschaltknopf


2. Einstellung der Rückenlehne

Drücken Sie auf Pedal 2.  um die Position der Rückenlehne einzustellen.

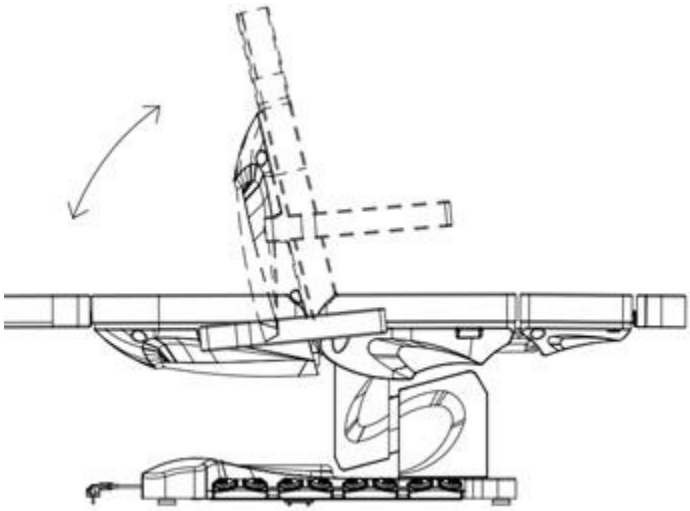


3. Einstellung des Sitzes

Drücken Sie auf Pedal 3.  um die Position und Neigung des Sitzes einzustellen.

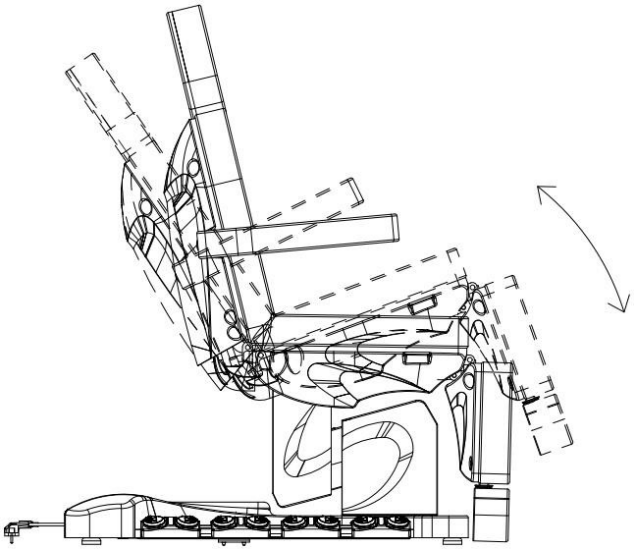


4. Einstellung der Fußstütze


Am Pedal Nr. 4 drücken Sie  um die Position der Fußstütze einzustellen

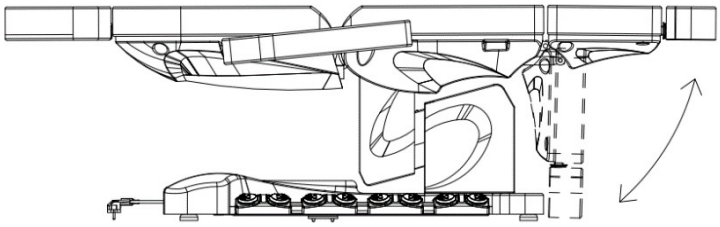

5. Fußstützenverlängerung

Der Stuhl bietet auch die Möglichkeit, die Fußstütze zu verlängern, was die Behandlung größerer Personen erleichtert und den Komfort erhöht.
Die Fußstütze wird mit dem Drehknopf an der Unterseite der Fußstütze verstellt. Durch Herausdrehen des Knopfes kann die Fußstütze verlängert werden.

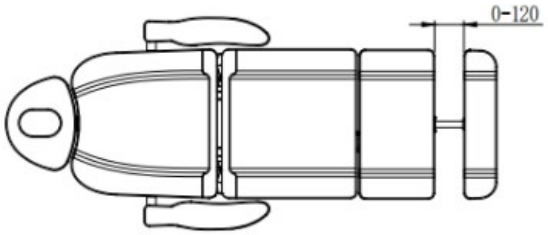

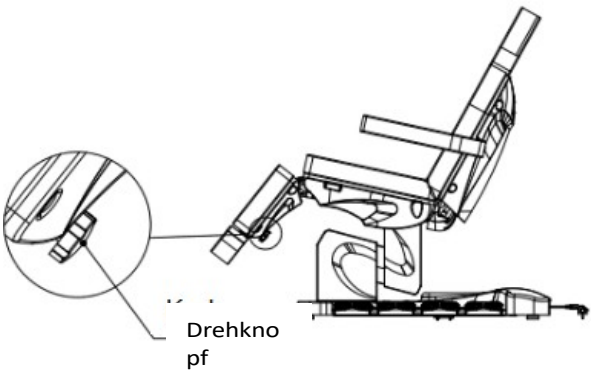


Montage der Armlehne:

Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte fest angebracht sein. Drehen Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig einrastet. Verfahren Sie mit der anderen Armlehne genauso. Die Armlehne steht senkrecht zum Boden (unabhängig von der Neigung des Sitzes). Sie kann um 180° gedreht werden.

Einbau der Kopfstütze:

Schieben Sie die Kopfstütze in das Loch an der Oberseite der Sitzlehne. Wenn sich die Kopfstütze in der richtigen Höhe befindet, ziehen Sie die Kurbel an der Rückseite fest, um die Kopfstütze zu sichern.

Um die Kopfstütze zu senken oder zu verlängern, schrauben Sie die Kurbel ab, stellen die Kopfstütze ein und ziehen die Kurbel wieder fest.

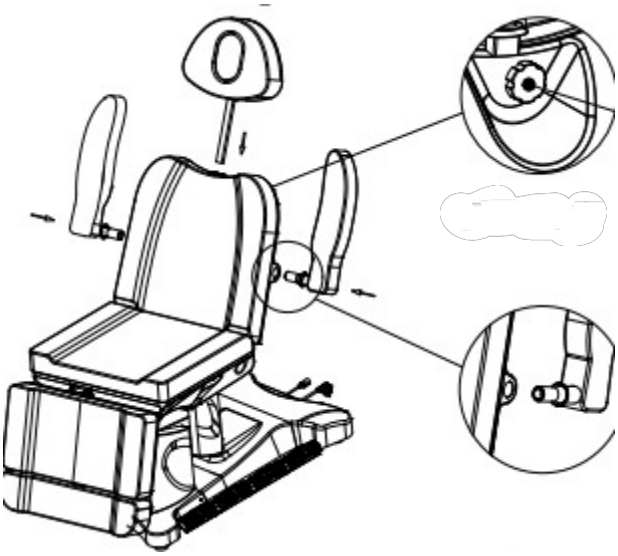

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Um die Oberfläche des Sitzes in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

Zum Reinigen von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

Die Reinigung mit einer milden Spülmittellösung funktioniert am besten. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

IV Sitzoberfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

Kontrollieren Sie die Bedienelemente und deren Verkabelung einmal pro Woche. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:

1. Stromversorgungskabel und deren Befestigung
2. Motorverdrahtung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. die normale Funktion des Schließsystems

Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.
Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Benachrichtigen Sie dann den Kundendienst.

Problembewältigung

Problem	**Ursache**	**Methoden zur Lösung**
Pedal Steuerung Fußpedal reagiert nicht	1. Taste Einschalttaste betätigt oder nicht betätigt. 2. Prüfen, ob Pedal bis zum Maximum durchgedrückt ist. 3. Prüfen Sie, dass das Gerät eingesteckt ist. 4. Prüfen Sie, dass alles richtig richtig richtig angeschlossen ist.	1. Versuchen Sie, den Netzschalter neu zu starten. 2. Versuchen Sie, andere Tasten einzuschalten und zu sehen, ob sie funktionieren. 3. Trennen Sie die Verbindung das Gerät i Schließen Sie es wieder an. 4. Ziehen Sie die Stecker ab und schließen Sie sie wieder an.
Gerät macht seltsame Geräusche beim Absenken des Sitzes	Schraube locker	Schrauben festziehen
Lampen der Fußschalterpedale leuchten nicht auf	Sicherung durchgebrannt	Sicherung auswechseln

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,

c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie

2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und bei folgenden Sammelstellen abgegeben werden

Sammlung von Elektronik- und Elektroaltgeräten. Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.