ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Azzurro 708B elektriline kosmeetikatool 4 mootoriga



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.

Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:



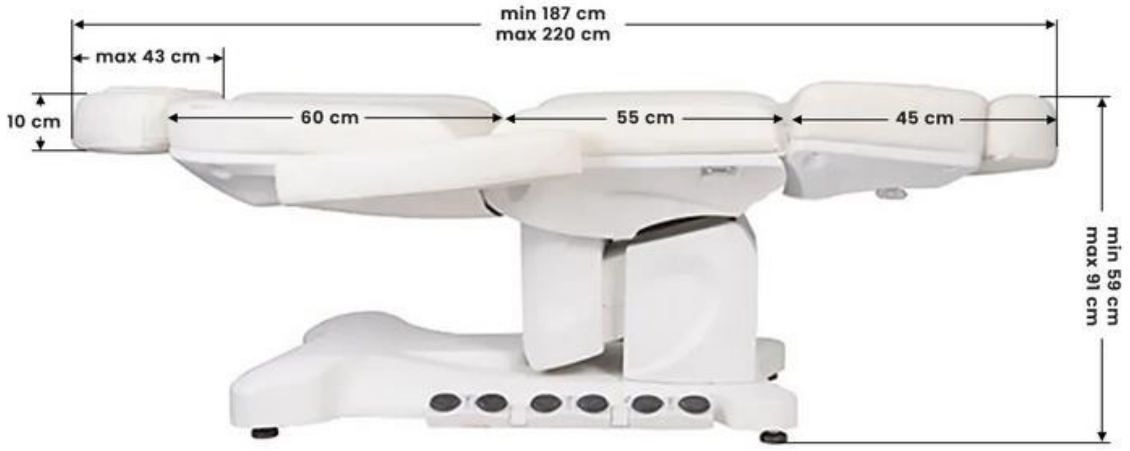

Seadme ehitus:



Hoiatus:

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käetoele ja jalatoele.
3. Veenduge, et püstikutevaheline kaugus ei ületaks 2 meetrit.

Ettevaatust

1. Ohutuse tagamiseks ühendage toitejuhe alati maandatud pistikupessa.
2. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
3. Eemaldage toitejuhe enne elektrilise ilutooli liigutamist, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, tõmmake juhe kohe välja, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.

5. Ärge lubage hooldust mitte teostaval isikul juhtida juhtpulti.
6. Ärge asetage tooli alla mingeid esemeid.
7. Veenduge, et istme ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.
8. Veenduge, et istme ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
9. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

1. Sisse/välja lüliti
2 Kõrguse reguleerimine
3 Seljatoe reguleerimine
4. istme reguleerimine
5. jalatoe reguleerimine
6. vajutage automaatse režiimi seadistamiseks
7-9 Automaatrežiim võimaldab teil seadistada ja meelde jätta kõrguse
Istme, istme, seljatoe ja jalatoe paigutus. Reguleerige istme reguleerimine vastavalt vajadusele, seejärel vajutage ja hoidke all nuppu SET, kuni sinine tuli süttib, seejärel vajutage seadete salvestamiseks nuppu P1. Nuppude P1, P2, P3 (7-9) abil saate meelde jätta 3 erinevat seadistust.
10. Vajutage seadme valgustamiseks.
11. reguleerige valguse heledust
Seljatoe paisutamise funktsioon - vajutage paisutamise deaktiveerimiseks
13. Funktsioon pumpamine seljatugi - vajutage, et aktiveerida paisutamine
14. Soojendusfunktsioon - vajutage, et lülitada soojendus välja
15. Küttefunktsioon - vajutage kütte aktiveerimiseks


Jalajuhtseadme funktsioonid:

Seadmel on 4 jalgjuhtimispedaali. Igaüks neist vastutab erineva funktsiooni eest.

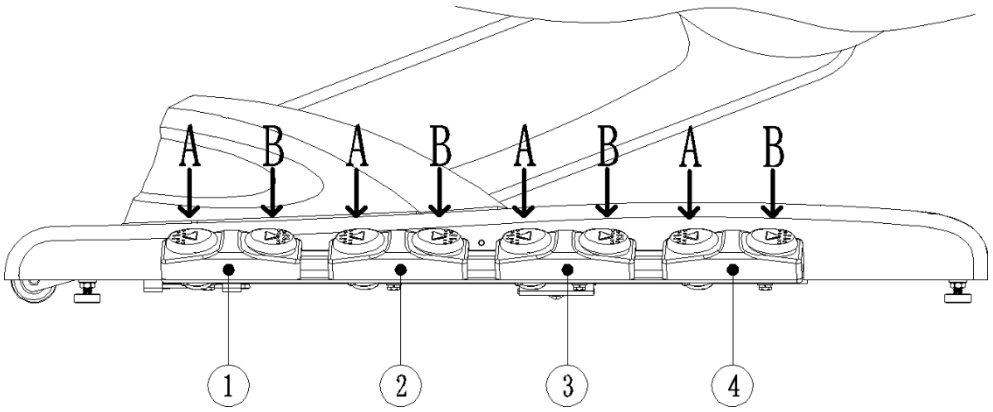

1. Kõrguse reguleerimine


Lülitage sisse t o i t e l ü l i t i . Seejärel vajutage pedaali 1  et reguleerida istme kõrgust.

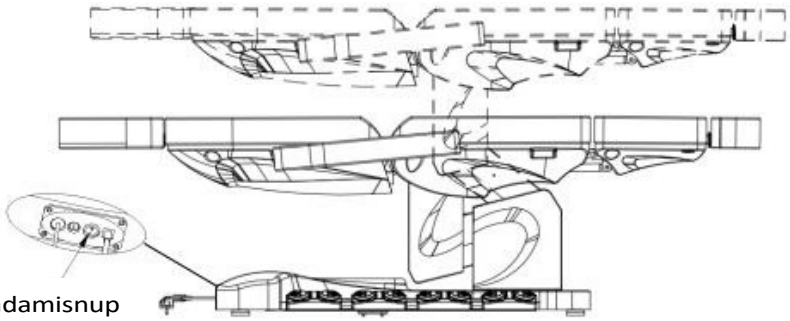

Võimendamisnup
p


2. Seljatoe reguleerimine

Vajutage pedaalil 2  et reguleerida seljatoe asendit.

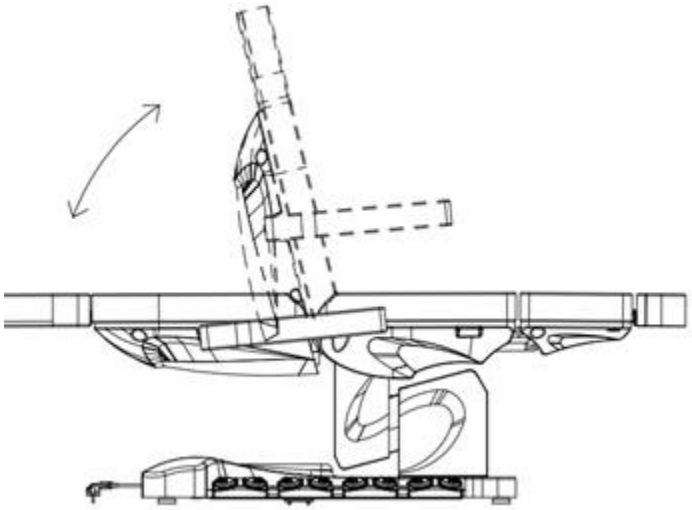


3. Istme reguleerimine

Vajutage pedaalil 3  et reguleerida istme asendit ja kallet.

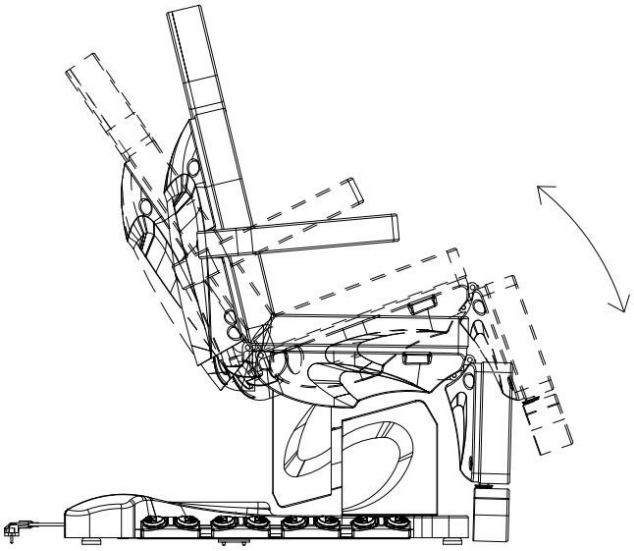


4. Jalatoe reguleerimine


Vajutage pedaalil nr 4  et reguleerida jalatoe asendit

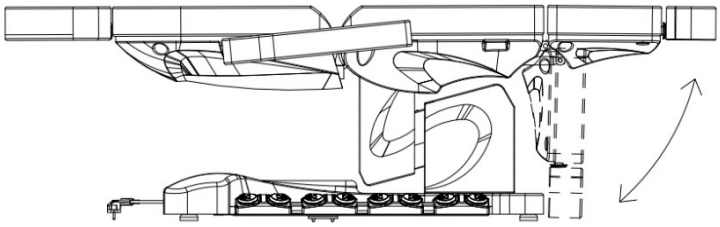

5. Jalatoe pikendus

Toolile on paigaldatud ka jalatoe pikendamise võimalus, mis hõlbustab pikematel inimestel ravi teostamist ja parandab mugavust.
Jalatoe reguleerimine toimub jalatoe allosas oleva nupu abil. Nupu lahti keerates saab jalatoe pikendada.

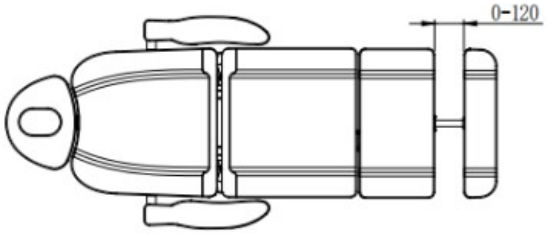

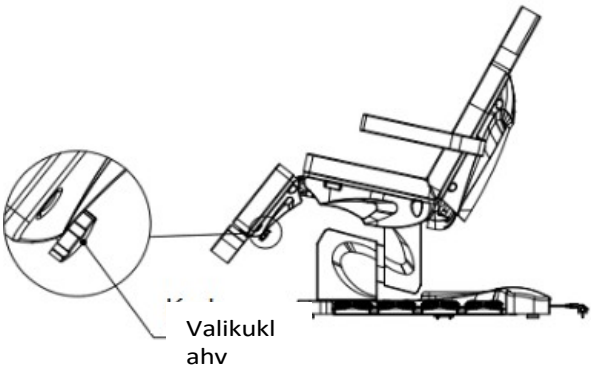


Käetoe paigaldamine:

Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse auku. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda paremale või vasakule, et see õigesti paika asetuks. Tehke sama ka teise käetoega. Käetugi on maapinnaga risti (sõltumata istme nurgast). Seda saab pöörata 180°.

Peatoe paigaldamine:

Lükake peatugi istme seljatoe ülaosas asuvasse auku. Kui peatugi on õigel kõrgusel, pingutage seljatoe kinnitamiseks seljatoel asuv vänt.

Peatoe alandamiseks või pikendamiseks keerake väntvõlli lahti, reguleerige peatuge ja pingutage väntvõlli.

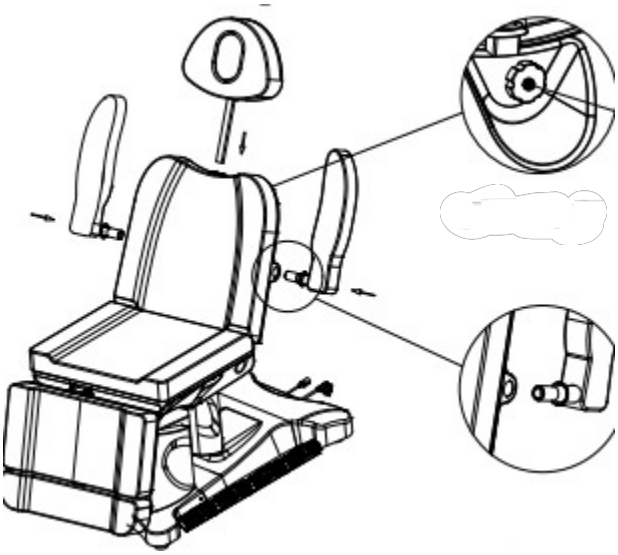

Puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist ühendage seade lahti.

Et istme pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage puhastada ja desinfitseerida tooli pärast iga kasutamist. Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike hari sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee pihustid).
- Ärge puhastage seadet kõrge temperatuuri ja kõrge niiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istmepinda ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata töötajate teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist kosmeetikatooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord iga kuue kuu tagant järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme.
Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage hooldust.

Probleemide lahendamine

Probleem	**Põhjus**	**Lahenduse meetodid**
Pedaal kontroll jalgpedaal ei reageeri	1. Nupp toitenupp aktiveerub või ei aktiveeru. 2. Kontrollige, kas pedaal on maksimaalselt alla vajutatud. 3. Kontrollige,kas kas seade on ühendatud. 4. Kontrollige, kas kas kõik on õigesti õigesti ühendatud.	1. Proovige uuesti käivitada toitenuppu. 2. Proovige teisi nuppe sisse lülitada ja vaadake, kas need töötavad. 3. Ühendage lahti seade i ühendage see uuesti. 4. Ühendage pistikud lahti ja ühendage uuesti.
Seade teeb kummalist müra, kui iste alla lastakse	Kruvi on lahti	Pingutage kruvisid
Jalgpedaali laternad ei põle	Põlenud kaitselüliti	Vahetage kaitselüliti välja

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Ltd.).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutiline intervall.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.

2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.

3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile

2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle järgmistes kogumispunktides.

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.