ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique électrique Azzurro 708B 4 moteurs



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lisez les instructions et effectuez les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
2. S'assurer que le fauteuil est en état de marche.
3. Placer le fauteuil cosmétique dans l'endroit où il sera utilisé.
4. Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.

Remarque ! Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique.

Dimensions de l'appareil :



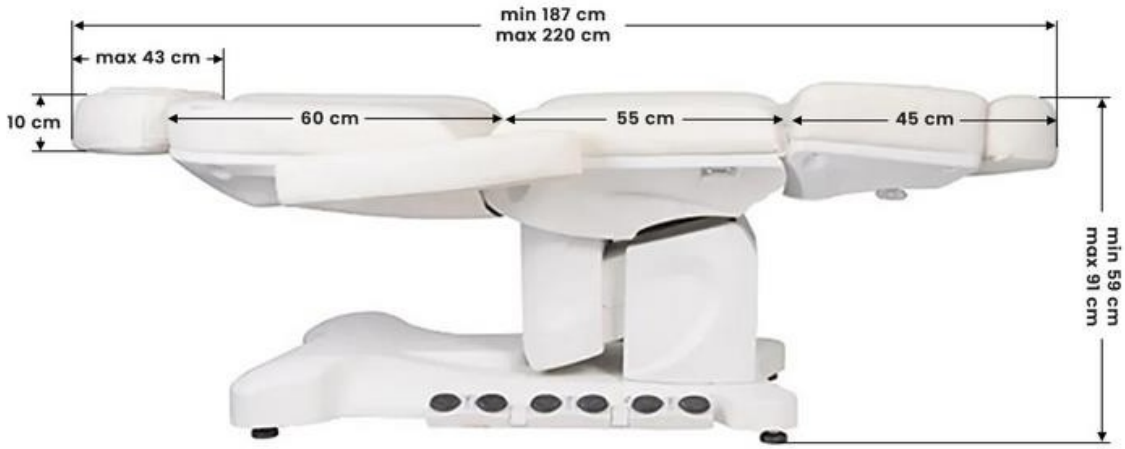

Construction de l'appareil :



Avertissement :

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne vous asseyez pas directement sur l'accoudoir et le repose-pieds.
3. Veillez à ce que la distance entre les prises ne dépasse pas 2 mètres.

Attention : Pour des raisons de sécurité, il faut toujours brancher le cordon d'alimentation sur le secteur.

1. Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
2. Ne pas attacher le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veiller à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
3. Retirer le cordon d'alimentation avant de déplacer le fauteuil de beauté électrique afin qu'il ne reste pas coincé entre certaines parties du fauteuil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et contactez un centre de service agréé. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation d'origine.

5. Ne permettez pas à une personne qui n'effectue pas le traitement de contrôler la télécommande.
6. Ne placez aucun objet sous le fauteuil.
7. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du siège pour qu'il puisse être plié et déplié librement.
8. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou dangereux autour du siège qui pourraient endommager l'appareil.
9. Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.


Fonctions de la télécommande :



1. Interrupteur marche/arrêt
2 Réglage de la hauteur
3. Réglage du dossier
4. réglage de l'assise
5. réglage du repose-pieds
6. appuyer pour régler le mode automatique
7-9 Le mode automatique permet de régler et de mémoriser la hauteur du dossier.
Positionnement du siège, de l'assise, du dossier et du repose-pieds. Réglez l'alignement du siège selon vos besoins, puis appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume, puis appuyez sur la touche P1 pour mémoriser les réglages. Vous pouvez mémoriser 3 réglages différents à l'aide des touches P1, P2, P3 (7-9).
10. appuyez sur pour éclairer l'appareil.
11. régler la luminosité de la lumière
Fonction de gonflage du dossier - appuyer pour désactiver le gonflage
13. Fonction pompage dossier - appuyer, pour pour activer le gonflage
14. Fonction chauffage - appuyer pour désactiver le chauffage
15. Fonction de chauffage - appuyer pour activer le chauffage


Fonctions de commande au pied :

L'appareil est équipé de 4 pédales de commande. Chacune est responsable d'une fonction différente.

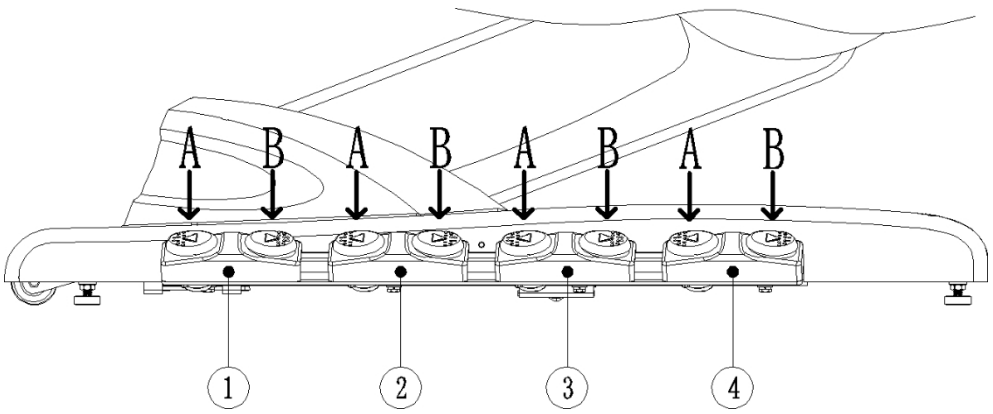

1. Réglage de la hauteur


Mettez l'appareil sous tension. Appuyez ensuite sur la pédale 1  pour régler la hauteur du fauteuil.

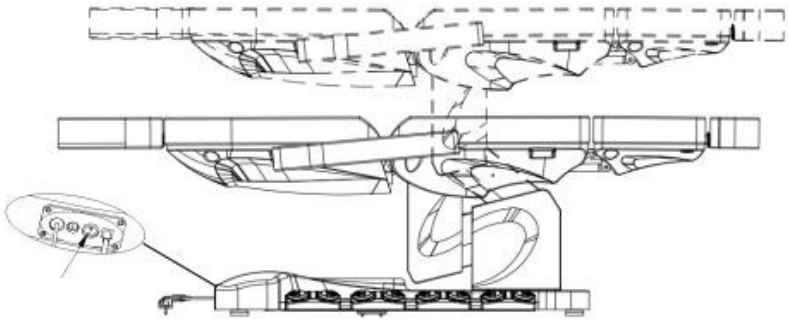

Bouton d'alimentation


2. Réglage du dossier

Sur la pédale 2, appuyez sur  pour régler la position du dossier.

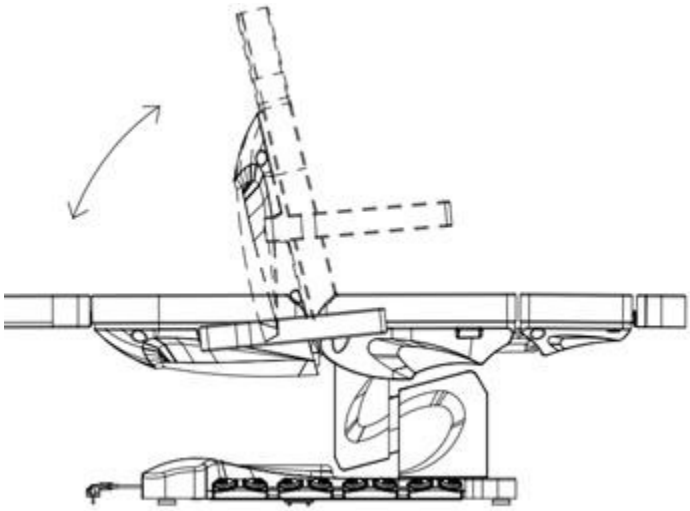


3. Réglage de l'assise

Sur la pédale 3, appuyez sur  pour régler la position et l'inclinaison du siège.

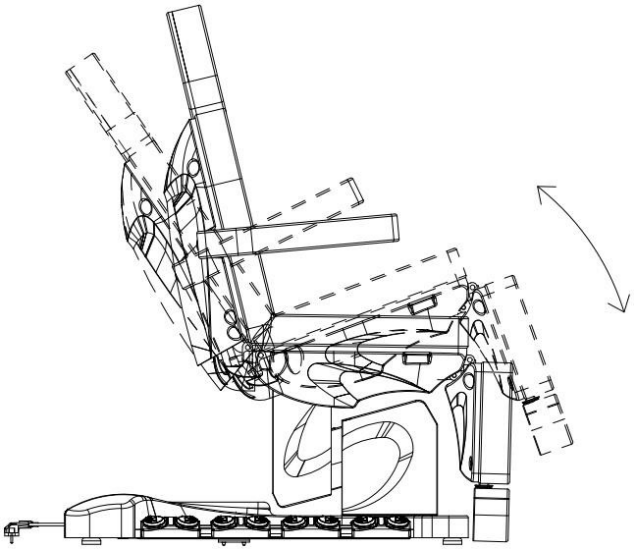


4. Réglage du repose-pieds


Sur la pédale n° 4, appuyez sur  pour régler la position du repose-pieds

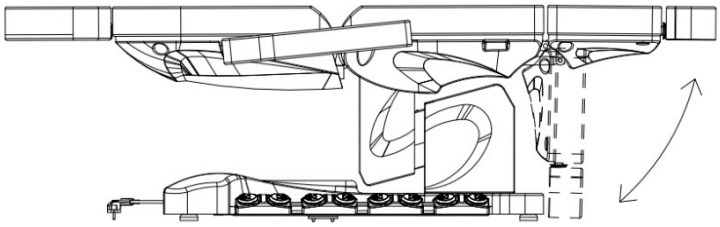

5. Extension du repose-pieds

Le fauteuil dispose également d'une option permettant d'allonger le repose-pieds, ce qui facilite les traitements sur les personnes de grande taille et améliore le confort.
Le repose-pieds se règle à l'aide de la molette située sous le repose-pieds. Le fait de dévisser le bouton permet d'allonger le repose-pieds.

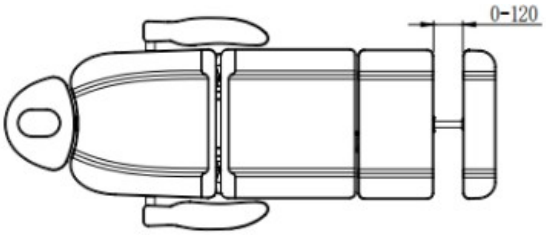

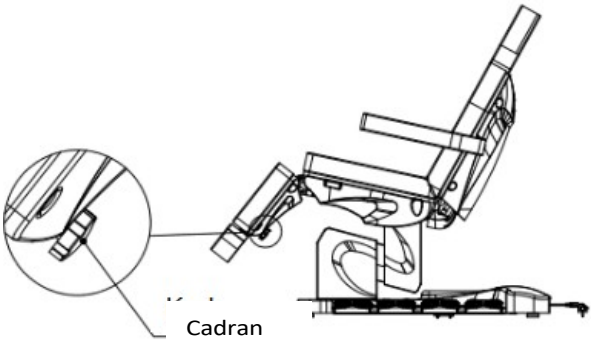


Installation du repose-bras :

Glissez l'accoudoir dans le trou situé sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être fermement fixé. Tournez-le vers la droite ou la gauche pour qu'il s 'insère correctement. Faites de même avec l'autre accoudoir. L'accoudoir est perpendiculaire au sol (quel que soit l'angle du siège). Il peut être tourné de 180°.

Installation de l'appui-tête :

Faites glisser l'appui-tête dans le trou situé en haut du dossier du siège. Lorsque l'appui-tête est à la bonne hauteur, serrez la manivelle située au dos pour fixer l'appui-tête.

Pour abaisser ou allonger l'appui-tête, dévissez la manivelle, ajustez l'appui-tête et resserrez la manivelle.

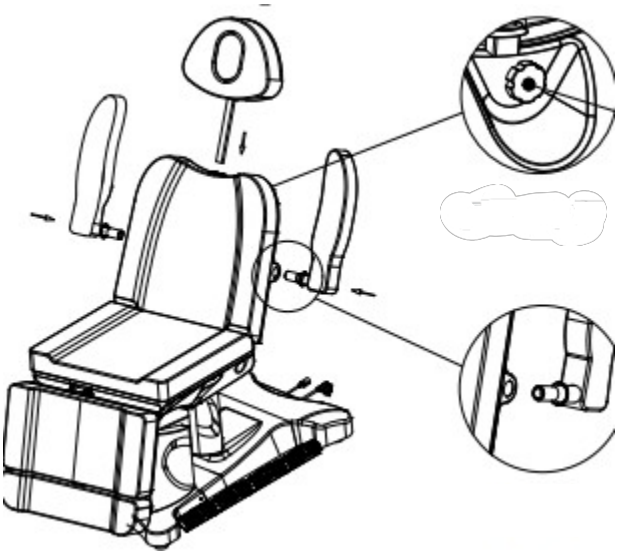

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Pour maintenir la surface du siège en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. Pensez à nettoyer et à désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, essuyez-les avec un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les zones ou les coins difficiles d'accès. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures ou à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. N'utilisez pas le fauteuil esthétique électrique ou ses accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Mesures d'entretien

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifier l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Le boîtier de commande et son câblage
4. La présence d'accessoires
5. Le fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'unité de commande/actionnement.
Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

Résolution de problèmes

Problème	**Cause**	**Méthodes de solution**
Pédale commande La pédale ne réagit pas	1. Bouton Le bouton d'alimentation s'actionne ou ne s'actionne pas. 2. Vérifier, si la pédale est enfoncée au maximum. 3. Vérifier que l'appareil l'appareil est branché. 4. Vérifier que si tout a été correctement branché correctement.	1. Essayez de redémarrer le bouton d'alimentation. 2. Essayez d'activer d'autres boutons et voyez s'ils fonctionnent. 3. Déconnecter l'appareil i rebranchez-le. 4. Débranchez les fiches et rebranchez-les.
L'appareil fait des bruits étranges lors de l'abaissement du siège	Vis desserrées	Serrer les vis
Les lampes de la pédale de commande ne s'allument pas	Fusible brûlé	Remplacer le fusible

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,

c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.

3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive

2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte suivants

la collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.