ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Fotel kosmetyczny elektryczny Azzurro 708B 4 silniki



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

III


CE


Przed użyciem fotela kosmetycznego zapoznaj się z instrukcją i wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
2. Upewnij się, że fotel jest sprawny.
3. Umieść fotel kosmetyczne w miejscu, gdzie będzie używany.
4. Podłącz wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka.

Wskazówka! Dzieci i niedoświadczone osoby nie mogą korzystać z tego urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane i nie mogą bawić się w pobliżu fotela kosmetycznego.

Wymiary urządzenia:

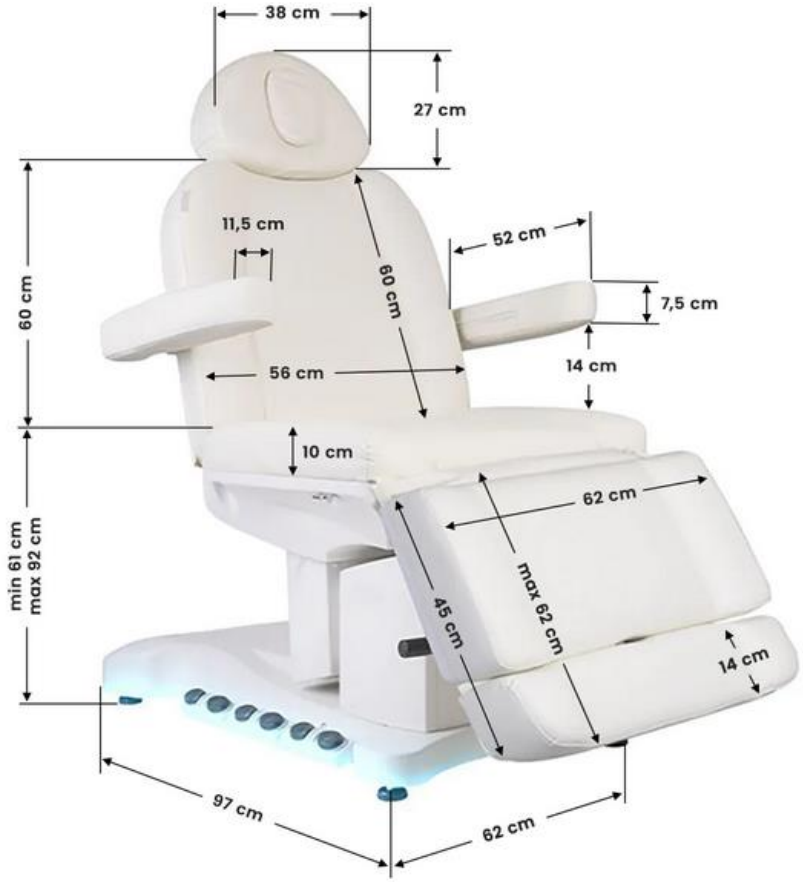

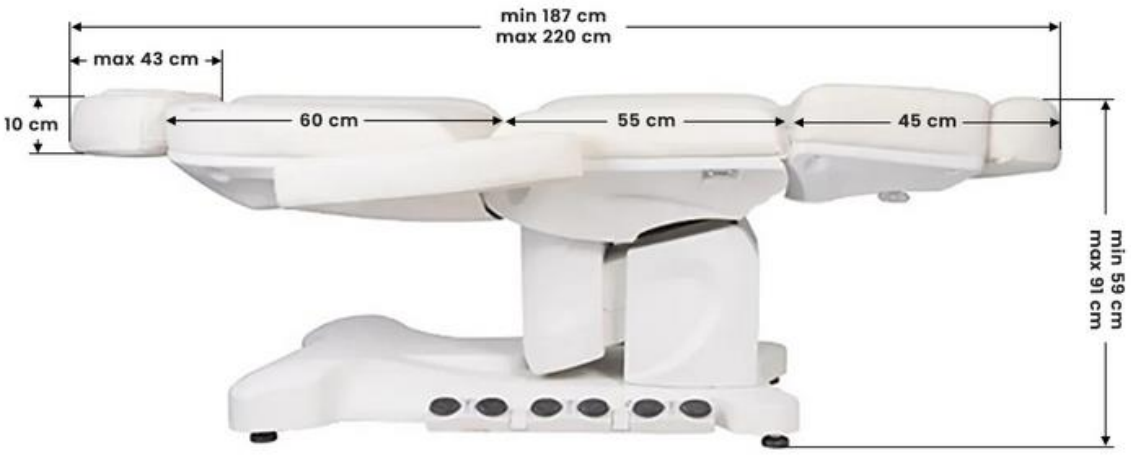

Budowa urządzenia:



Ostrzeżenie:

1. Podnóżek nie jest przeznaczony do podtrzymywania pełnego ciężaru osoby dorosłej.
2. Nie wolno siedzieć bezpośrednio na podłokietniku oraz podnóżku.
3. Upewnij się, że odległość między gniazdkami nie przekracza 2 metrów.

Uwaga

1. Ze względów bezpieczeństwa zawsze podłączaj przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem.
2. Nie przywiązuj przewodu zasilającego do urządzenia. Podnoszenie lub pociągnie za przewód zasilający może spowodować jego zniszczenie. Upewnij się, że przewód zasilający można łatwo wyjąć w sytuacji awaryjnej.
3. Przed przeniesieniem elektrycznego fotela kosmetycznego należy wyjąć przewód zasilający, aby nie utknął on pomiędzy jakimiś częściami fotela.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast odłącz przewód, nie używaj fotela i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Używaj tylko oryginalnego przewodu zasilającego.

5. Nie pozwól, aby osoba, która nie wykonuje zabiegu sterowała pilotem sterującym.
6. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod fotelem.
7. Upewnij się, że wokół fotela jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby można było go swobodnie składać i rozkładać.
8. Upewnij się, że wokół fotel nie znajdują się żadne ostre lub szkodliwe przedmioty, które mogłyby zniszczyć urządzenie.
9. Nie modyfikuj samodzielnie urządzenia. Jeśli fotel nie działa prawidłowo, przestań go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Funkcje pilota sterującego:




1. Włącznik/Wyłącznik
2. Regulacja wysokości
3. Regulacja oparcia
4. Regulacja ułożenia siedziska
5. Regulacja podnóżka
6. Naciśnij, aby ustawić tryb automatyczny

7-9. Tryb automatyczny pozwala ustawić i zapamiętać wysokość fotela, ułożenie siedziska, oparcia i podnóżka. Dostosuj ułożenie fotela według potrzeb, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż zapali się niebieskie światełko, następnie naciśnij przycisk P1, aby zapamiętać dane ustawienia. Można zapamiętać 3 różne ustawienia za pomocą przycisku P1, P2, P3 (7-9).

10. Naciśnij, aby podświetlić urządzenie.
11. Regulacja jasności światła
12. Funkcja pompowania oparcia – naciśnij, aby wyłączyć pompowanie
13. Funkcja pompowania oparcia – naciśnij, aby włączyć pompowanie
14. Funkcja podgrzewania – naciśnij, aby wyłączyć podgrzewanie
15. Funkcja podgrzewania – naciśnij, aby włączyć podgrzewanie


Funkcje sterowania nożnego:

Urządzenie posiada 4 pedały sterowania nożnego. Każdy z nich odpowiada za inną funkcję.

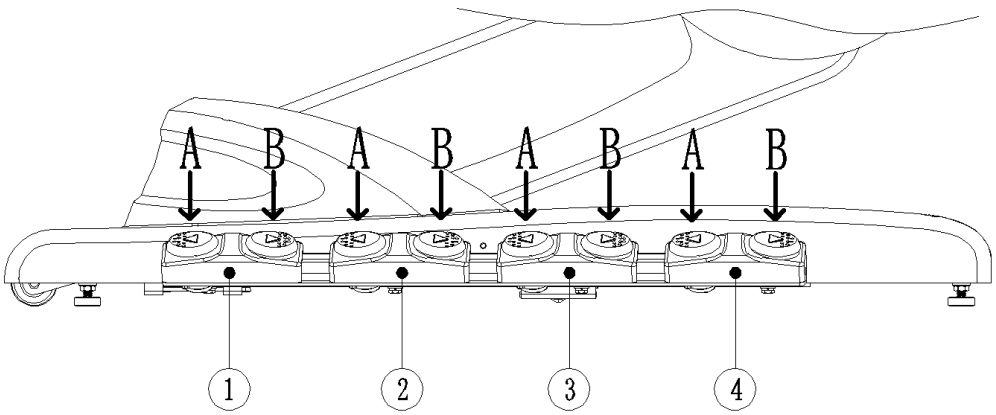

1. Dostosowanie wysokości


   Włącz przełącznik zasilania. Następnie na pedale nr 1 wciśnij , aby dostosować wysokość fotela.

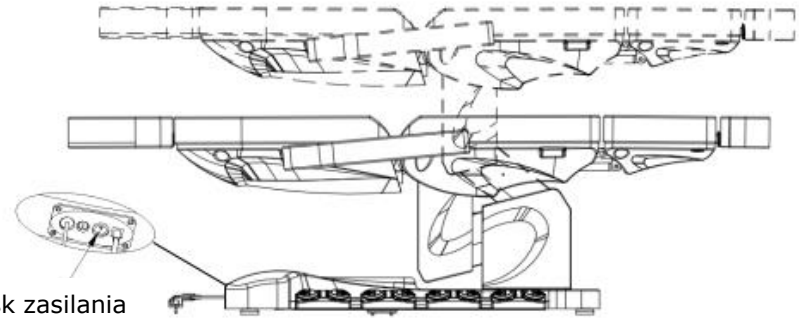

Przycisk zasilania


2. Dostosowanie oparcia

Na pedale nr 2 wciśnij , aby dostosować ułożenie oparcia.

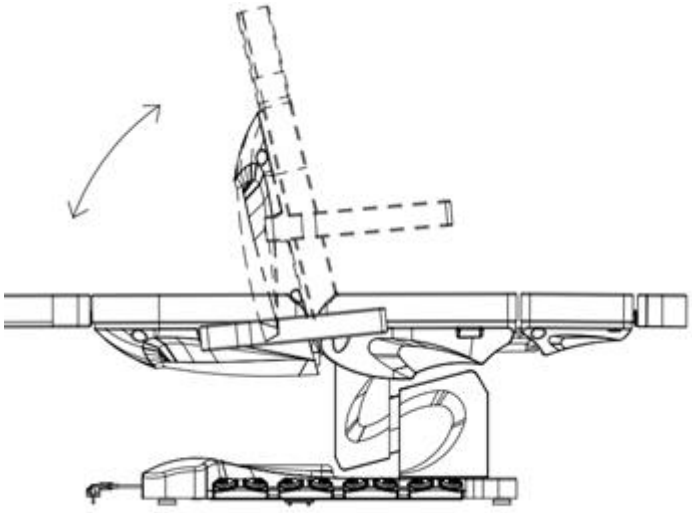


3. Dostosowanie siedziska

   Na pedale nr 3 wciśnij , aby dostosować pozycje i nachylenie siedziska.

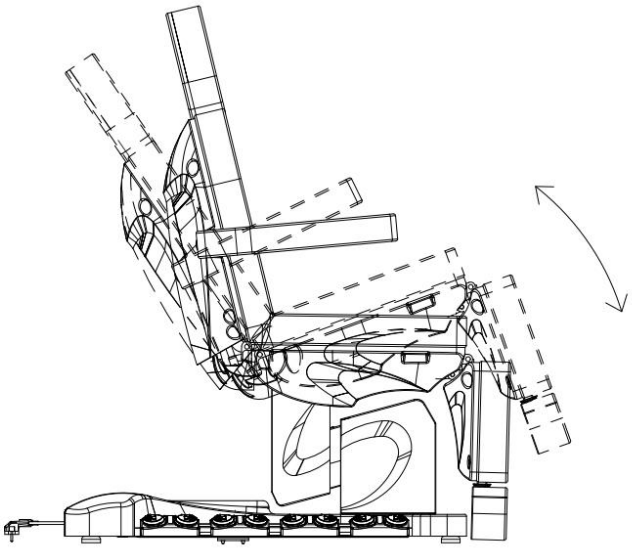


4. Dostosowanie podnóżka


   Na pedale nr 4 wciśnij , aby dostosować pozycje podnóżka

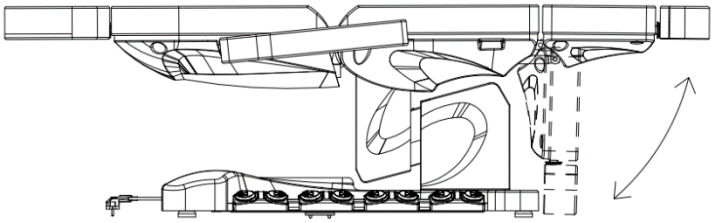

5. Wydłużenie podnóżka

   Fotel posiada także opcję wydłużenia podnóżka, co ułatwia wykonywanie zabiegów u wyższych osób oraz poprawia komfort pracy.
   Do regulacji podnóżka służy pokrętło znajdujące się na spodzie podnóżka. Odkręcenie pokrętła pozwoli na wysunięcie podnóżka.

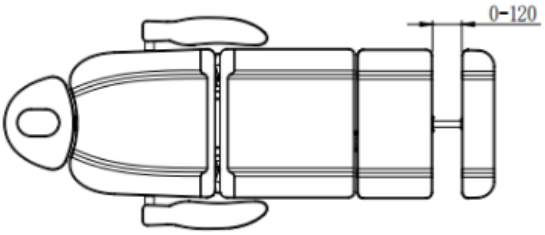


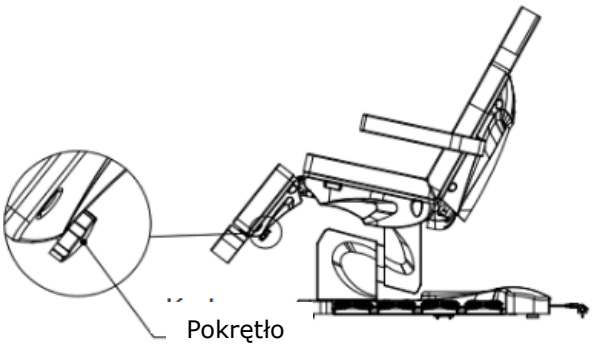

Instalacja podłokietnika:

Wsuń podłokietnik w otwór znajdujący się z boku oparcia. Podłokietnik powinien zostać stabilnie przymocowany. Przekręć go w prawo lub lewo, aby odpowiednio wszedł na miejsce. Zrób to samo z drugim podłokietnikiem. Podłokietnik jest prostopadły do podłoża (bez względu na kąt fotela). Można go obrócić o 180°.

Instalacja zagłówka:
Wsuń zagłówek w otwór znajdujący się w górnej części oparcia fotela. Kiedy zagłówek będzie znajdował się na odpowiedniej wysokości, dokręć korbkę znajdującą się z tyłu, aby przymocować zagłówek.
Aby obniżyć lub wysunąć zagłówek należy odkręcić korbkę, dostosować zagłówek i dokręcić korbkę.

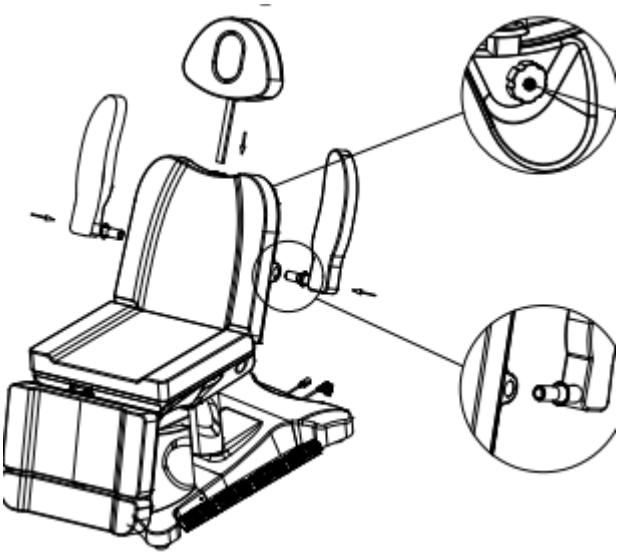

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia:

Odłącz urządzenie do prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
Aby utrzymać powierzchnię fotela w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić. Pamiętaj, aby czyścić i dezynfekować fotel po każdym użyciu. Zaleca się wykonać dokładną dezynfekcję raz w miesiącu.

I Powierzchnie metalowe i plastikowe
Aby wyczyścić metalowe i plastikowe powierzchnie oraz elementy sterujące przetrzyj je wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.

II Powierzchnie ze stali nierdzewnej
Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Amoniak i większość rozpuszczalników mogą być stosowane do usuwania trudnych plam. Unikaj roztworów na bazie chloru.

III Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe
- Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne) do czyszczenia.
- Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza, nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia cieczą.
- Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

IV Powierzchnia fotela

- Wytrzyj powierzchnię fotela równomiernie specjalnym środkiem do czyszczenia skóry, a następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką.

Konserwacja

Przed konserwacją urządzenia należy odłączyć je od prądu.

1. Naprawy powinny być wykonywane przez doświadczony i upoważniony przez producenta personel. Naprawa przez nieautoryzowany personel może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
3. Nie używaj elektrycznego fotela kosmetycznego ani akcesoriów, jeśli nie działają prawidłowo.
4. Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane.

Środki utrzymania

Sprawdzaj elementy sterujące i ich okablowanie raz w tygodniu. Sprawdzaj stan i funkcję, następujących rzeczy co najmniej raz na sześć miesięcy:

1. Przewód zasilający i jego mocowanie
2. Okablowanie silnika
3. Skrzynka sterownicza i jej okablowanie
4. Czy akcesoria są zamocowane
5. Normalne działanie systemu blokującego

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek wady, przestań używać sprzętu i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Tylko doświadczony lub autoryzowany personel może otworzyć lub wymienić siłownik / jednostkę sterującą.
Jeśli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, odłącz przewód zasilający i przestań go używać. Następnie powiadom serwis.

Rozwiązywanie problemów

Problem	**Przyczyna**	**Metody rozwiązania**
Pedał sterowania nożnego nie reaguje	1.Przycisk zasilania uruchamia się lub nie. 2.Sprawdź, czy pedał jest maksymalnie wciśnięty. 3.Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu. 4.Sprawdź, czy wszystko zostało prawidłowo podłączone.	1.Spróbuj zrestartować przycisk zasilania. 2.Spróbuj włączyć inne przyciski i zobacz, czy działają. 3.Odłącz urządzenie i podłącz jeszcze raz. 4.Odłącz wtyczki i podłącz jeszcze raz.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki podczas obniżania fotela	Poluzowana śruba	Dokręć śruby
Lampki przy pedałach sterowania nożnego nie świecą się	Spalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,

c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.


2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

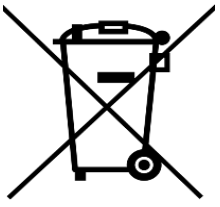

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą

2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów

zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.