ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Azzurro 708B 4 motoare



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

III

CE


Înainte de a utiliza fotoliul cosmetic, citiți instrucțiunile și efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în zona în care va fi utilizat.
4. Conectați ștecherul la o priză adecvată.

Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiunile aparatului:



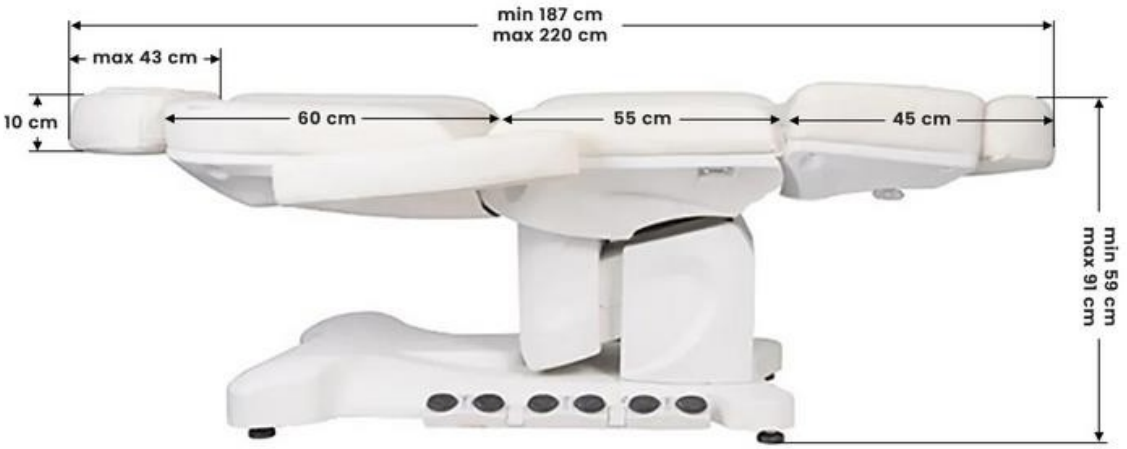

Construcția aparatului:



Avertisment:

1. Suportul pentru picioare nu este proiectat să susțină întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră și pe suportul pentru picioare.
3. Asigurați-vă că distanța dintre prize nu depășește 2 metri.

Avertisment

1. Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
2. Nu legați cablul de alimentare de unitate. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință într-o situație de urgență.
3. Scoateți cablul de alimentare înainte de a muta scaunul electric de înfrumusețare, astfel încât acesta să nu rămână blocat între unele părți ale scaunului.
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat cablul, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.

5. Nu permiteți unei persoane care nu efectuează tratamentul să controleze telecomanda.
6. Nu așezați niciun obiect sub scaun.
7. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului pentru a-i permite acestuia să fie pliat și desfășurat liber.
8. Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora unitatea.
9. Nu modificați singur unitatea. Dacă scaunul nu funcționează corect, nu îl mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.

Funcțiile telecomenzii:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

1. Comutator pornire/oprire
2 Reglarea înălțimii
3 Reglarea spătarului
4. Reglarea scaunului
5. Reglarea suportului pentru picioare
6. Apăsați pentru a seta modul automat
7-9 Modul automat vă permite să setați și să memorați înălțimea Poziționarea scaunului, șezutului, spătarului și suportului pentru picioare. Reglați alinierea scaunului după cum este necesar, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul SET până când se aprinde lumina albastră, apoi apăsați butonul P1 pentru a memora setările. Puteți memora 3 setări diferite utilizând butonul P1, P2, P3 (7-9).
10 Apăsați pentru a ilumina unitatea.
11. reglați luminozitatea luminii
Funcția de umflare a spătarului - apăsați pentru a dezactiva umflarea
13. Funcție pompare spătar - apăsați, pentru activați umflarea
14. Funcția de încălzire - apăsați pentru a opri încălzirea
15. Funcția de încălzire - apăsați pentru a activa încălzirea


Funcții de control cu piciorul:

Aparatul are 4 pedale de control cu piciorul. Fiecare este responsabilă pentru o funcție diferită.

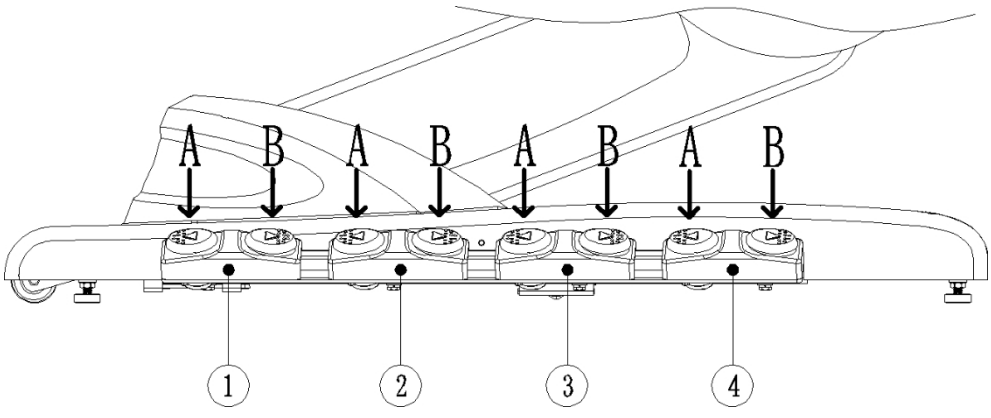

1. Reglarea înălțimii


Porniți comutatorul de alimentare. Apoi apăsați pe pedala 1  pentru a regla înălțimea scaunului.

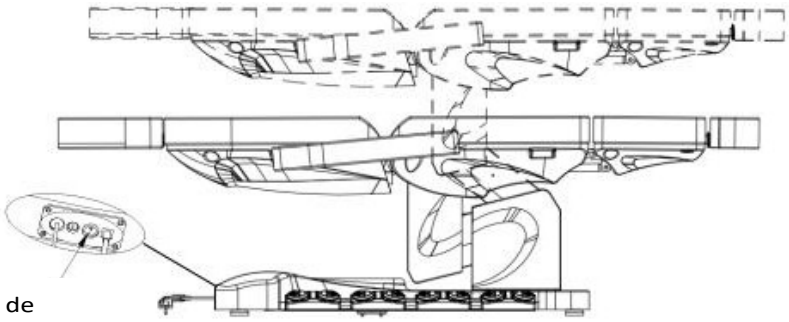

Butonul de pornire


2. Reglarea spătarului

Pe pedala 2, apăsați  pentru a regla poziția spătarului.

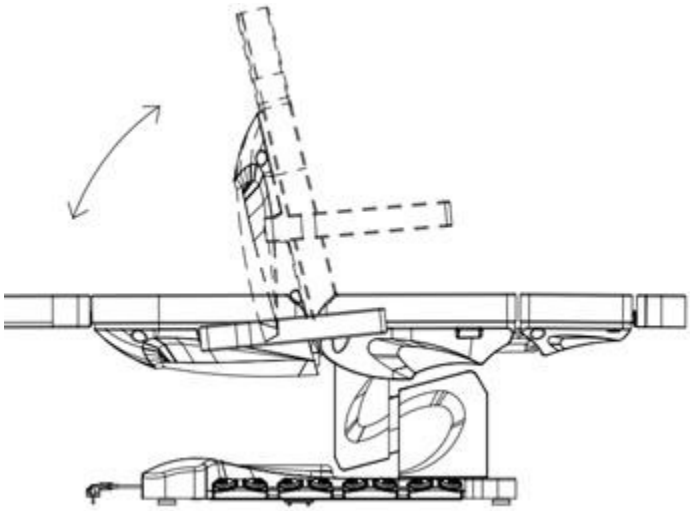


3. Reglarea scaunului

Pe pedala 3, apăsați  pentru a regla poziția și înclinarea scaunului.

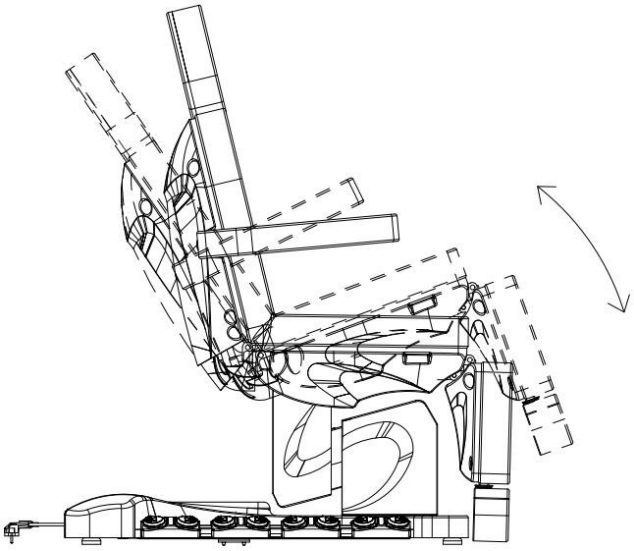


4. Reglarea suportului pentru picioare


Pe pedala nr. 4, apăsați  pentru a regla poziția suportului pentru picioare

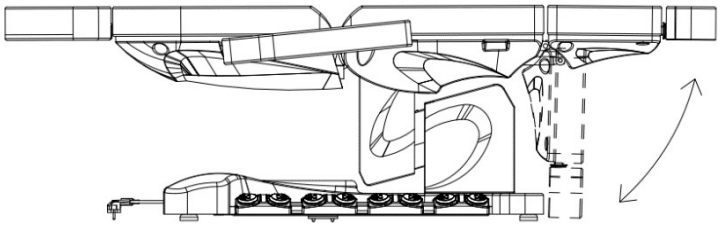

5. Prelungirea suportului pentru picioare

Scaunul are, de asemenea, opțiunea de a extinde suportul pentru picioare, ceea ce facilitează efectuarea tratamentelor pe persoane mai înalte și îmbunătățește confortul.
Suportul pentru picioare este reglat cu ajutorul butonului de pe partea inferioară a suportului pentru picioare. Deșurubarea butonului va permite extinderea suportului pentru picioare.

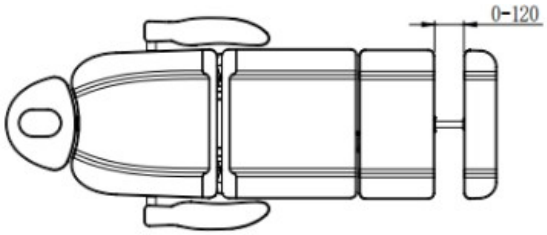

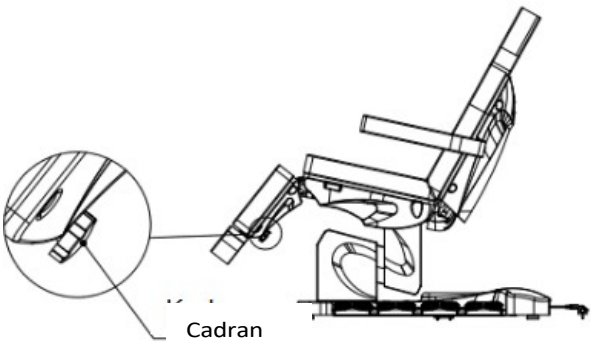


Instalarea suportului pentru brațe:

Glisați cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Răsuciți-l la dreapta sau la stânga astfel încât să intre corect în poziție. Procedați la fel cu celălalt cotieră. Cotiera este perpendiculară pe sol (indiferent de unghiul scaunului). Acesta poate fi rotit la 180°.

Instalarea tetierei:

Glisați tetiera în orificiul situat în partea superioară a spătarului scaunului. Când tetiera este la înălțimea corectă, strângeți manivela situată în spate pentru a fixa tetiera.

Pentru a coborî sau a extinde tetiera, deșurubați manivela, reglați tetiera și strângeți manivela.

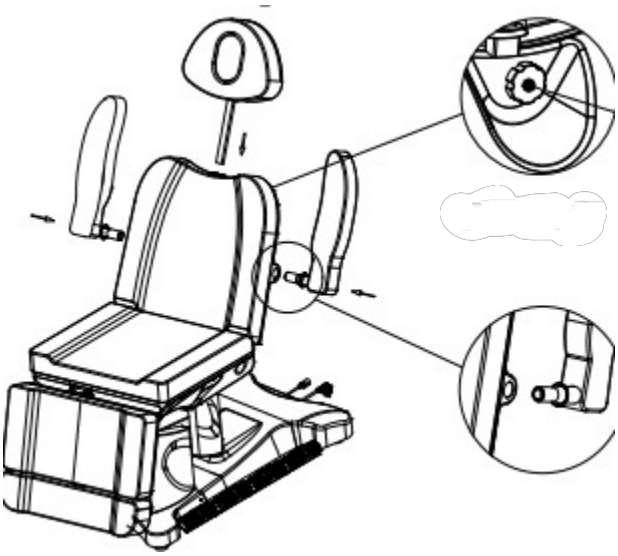

Curățarea și dezinfectarea unității:

Deconectați unitatea înainte de curățare.

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe din metal și plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

Curățarea cu o soluție ușoară de detergent funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul cosmetic electric sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corect.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablajul motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă observați defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul cu experiență sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare/control.
Dacă orice parte a echipamentului este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu îl mai utilizați. Apoi anunțați service-ul.

Rezolvarea problemelor

Problema	**Cauză**	**Metode de rezolvare**
Pedala control picior Pedala de nu reacționează	1. Buton butonul de alimentare acționează sau nu acționează. 2. Verificați, dacă pedala este apăsată la maximum. 3. Verificați, că aparatul este conectat la priză. 4. Verificați, că totul a fost corect conectat corect.	1. Încercați să reporniți butonul de alimentare. 2. Încercați să porniți alte butoane și vedeți dacă acestea funcționează. 3. Deconectați dispozitivul i conectați-l din nou. 4. Deconectați fișele și conectați-le din nou.
Dispozitivul face zgomote ciudate la coborârea scaunului	Șurub slăbit	Strângeți șuruburile
Lămpile pedalei de comandă nu se aprind	Siguranță arsă	Înlocuiți siguranța

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,

c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva

2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la următoarele puncte de colectare

colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.