ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Azzurro 708B 4 motorji



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da je stol v brezhibnem stanju.
3. Kozmetični stol postavite v prostor, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtaknite omrežni vtič v ustrezno vtičnico.


Opomba! Otroci in neizkušene osebe naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:



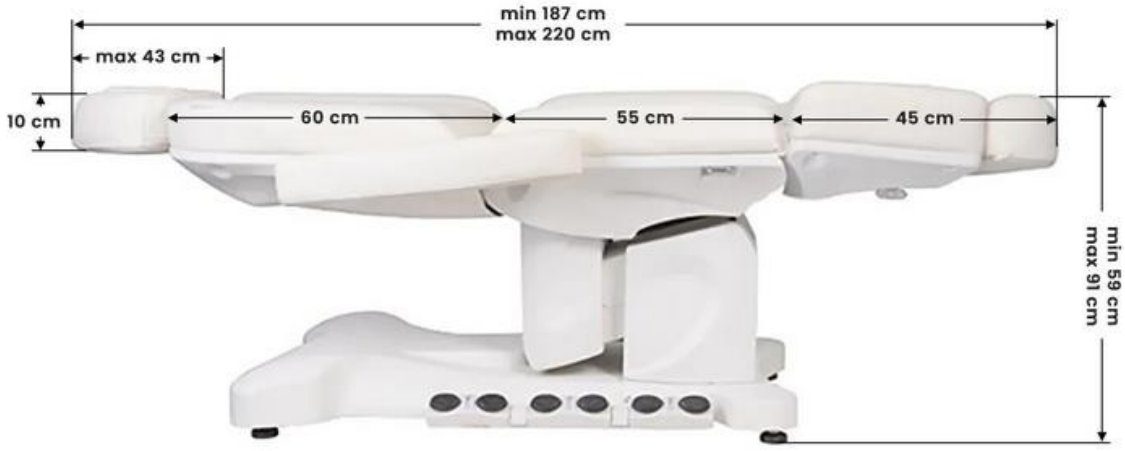

Konstrukcija naprave:

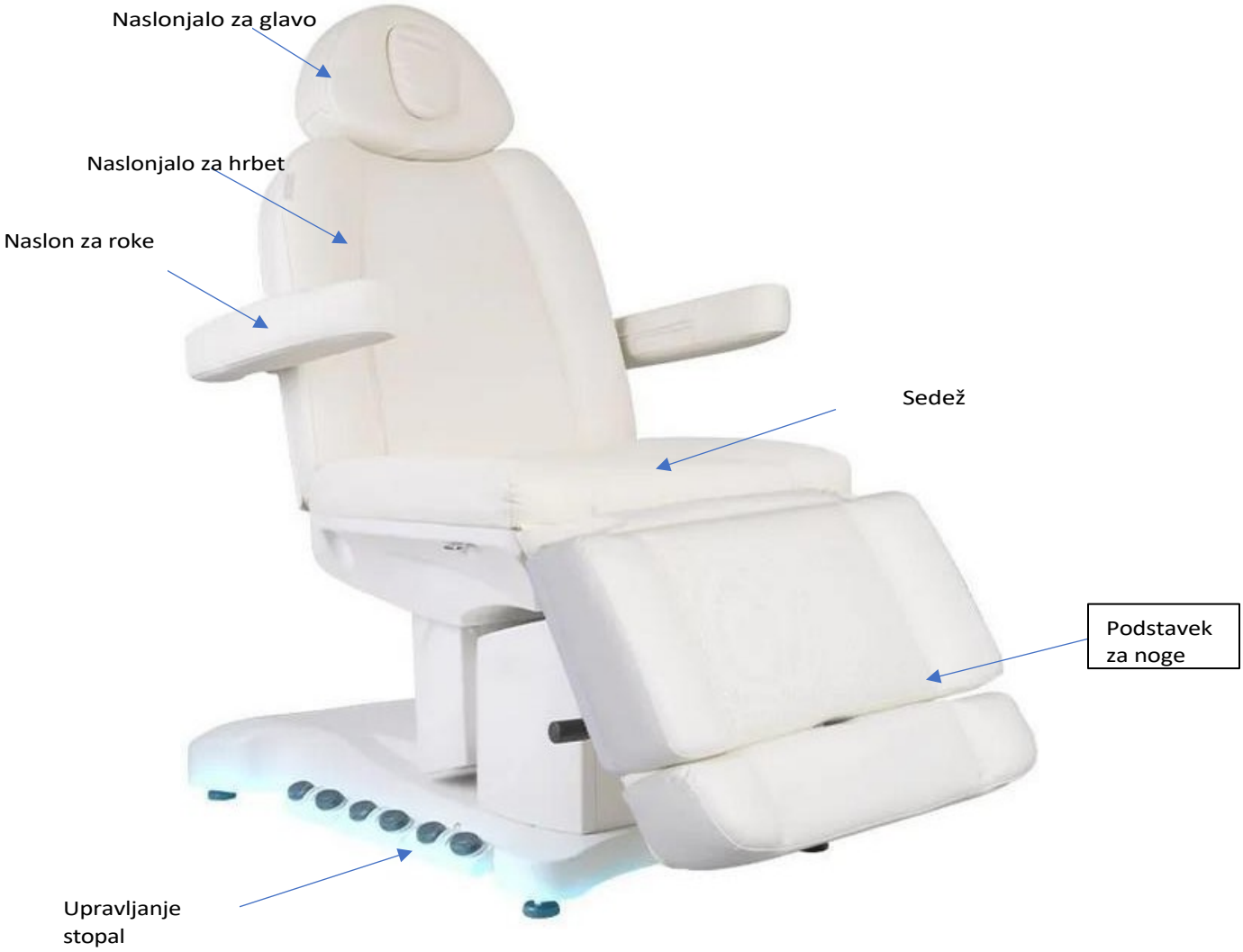

Opozorilo:

1. Podstavek za noge ni namenjen prenašanju celotne teže odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslon za roke in naslon za noge.
3. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Opozorilo:

1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.

5. Osebi, ki ne izvaja tretmaja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
6. Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
7. Prepričajte se, da je okoli sedeža dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razstaviti.
8. Prepričajte se, da okoli sedeža ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali enoto.
9. Enote ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.


Funkcije daljinskega upravljalnika:



1. Stikalo za vklop/izklop
2 Nastavitev višine
3 Nastavitev naslonjala za hrbet
4. nastavitev sedeža
5. nastavitev naslona za noge
6. pritisnite za nastavitev samodejnega načina
7-9 Avtomatski način omogoča nastavitev in pomnjenje višine
Postavitev sedeža, sedeža, naslona in naslona za noge. Po potrebi prilagodite nastavitev sedeža, nato pritisnite in držite gumb SET, dokler se ne prižge modra lučka, nato pa pritisnite gumb P1, da shranite nastavitve. S pomočjo gumbov P1, P2 in P3 (7-9) si lahko zapomnite 3 različne nastavitve.
10. Pritisnite , da se enota prižge.
11. prilagodite svetlost svetlobe
Funkcija napihovanja naslonjala za hrbet - pritisnite , da deaktivirate napihovanje
13. Funkcija črpanje naslonjalo - pritisnite, na . aktivira napihovanje
14. Funkcija ogrevanja - pritisnite za izklop ogrevanja
15. Funkcija ogrevanja - pritisnite , da aktivirate ogrevanje


Funkcije nožnega upravljalnika:

Funkcije nožnega upravljanja: aparat ima 4 pedala za upravljanje z nogami. Vsak je odgovoren za drugo funkcijo.

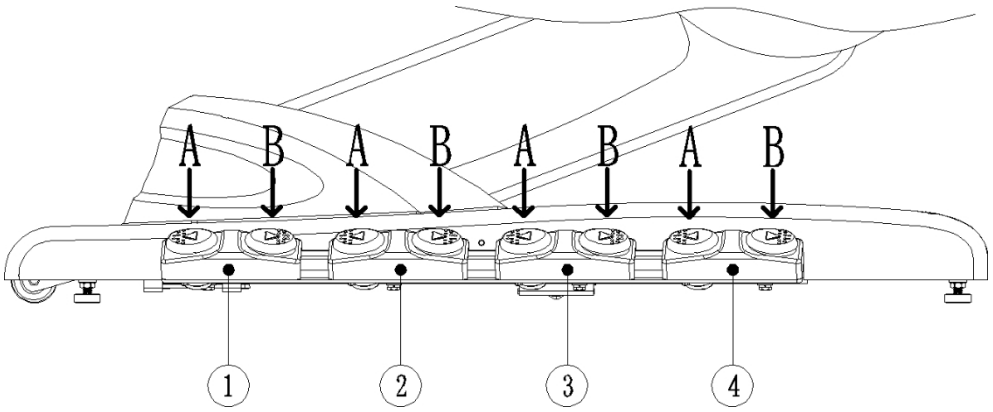

1. Nastavitev višine


   Vklopite stikalo za napajanje. Nato pritisnite na pedal 1  za nastavitev višine sedeža.

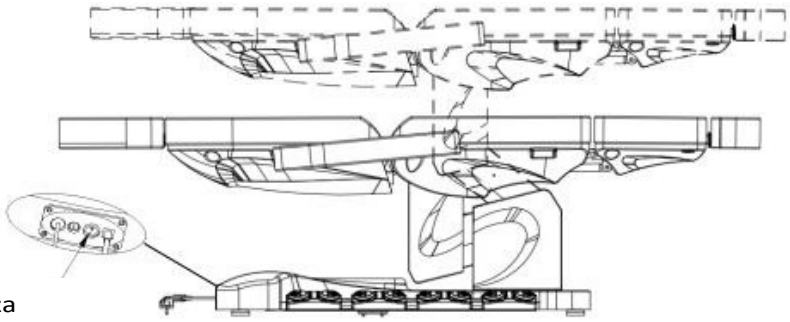

Gumb za napajanje


2. Nastavitev naslonjala za hrbet

Na pedalu 2 pritisnite  za nastavitev položaja naslonjala za hrbet.

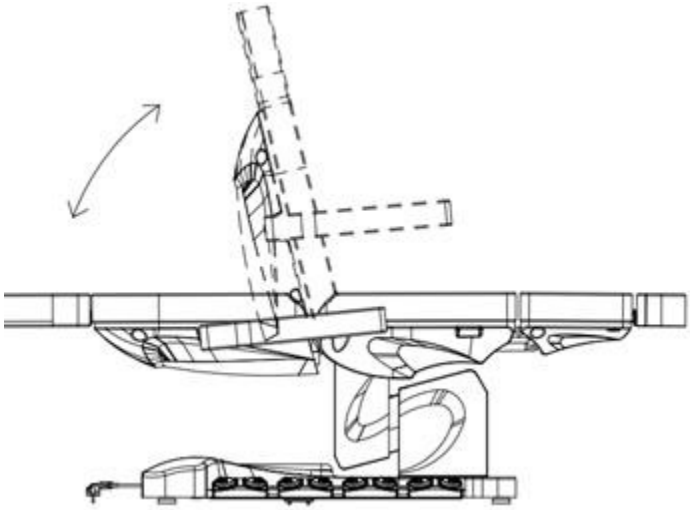


3. Nastavitev sedeža

   Na pedalu 3 pritisnite  za nastavitev položaja in nagiba sedeža.

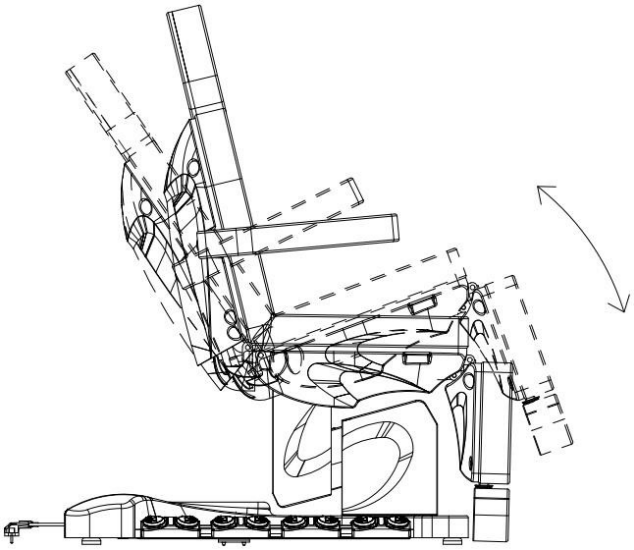


4. Nastavitev naslona za noge


   Na pedalu št. 4 pritisnite  za nastavitev položaja naslona za noge

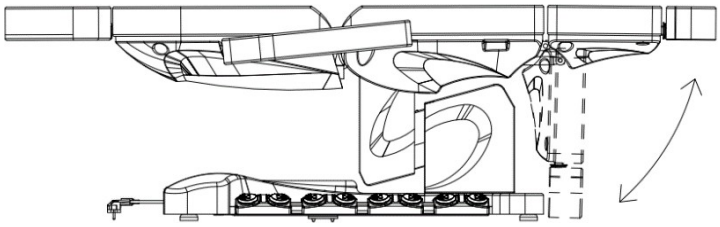

5. Podstavek za noge se podaljša

   Stol ima tudi možnost podaljšanja naslona za noge, kar olajša izvajanje posegov pri višjih osebah in izboljša udobje.
   Podstavek za noge nastavite z gumbom na spodnji strani podstavka za noge. Če gumb odvijete, lahko podnožje podaljšate.

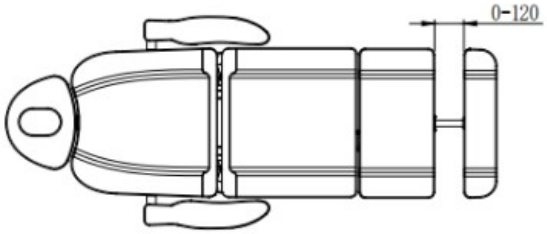

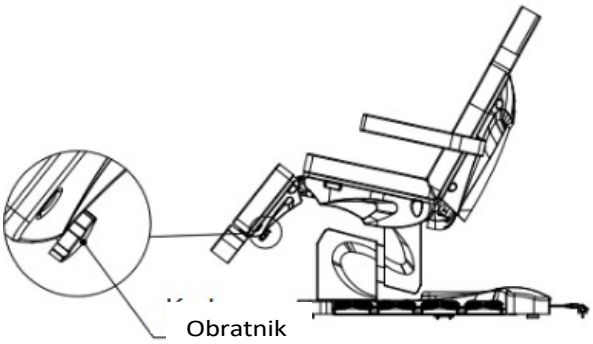


Namestitev naslona za roke:

Vstavitev naslona za roke: naslon za roke potisnite v luknjo na strani naslona za roke. Naslon za roko mora biti trdno pritrjen. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno n a m e s t i . Enako storite z drugim naslonom za roke. Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.

Namestitev naslona za glavo:

Naglavni naslon potisnite v odprtino na vrhu naslona sedeža. Ko je naslon za glavo v pravilni višini, zategnite ročico na hrbtišču, da naslon za glavo pritrdite.
Če želite naslon za glavo spustiti ali podaljšati, odvijte ročico, nastavite naslon za glavo in zategnite ročico.

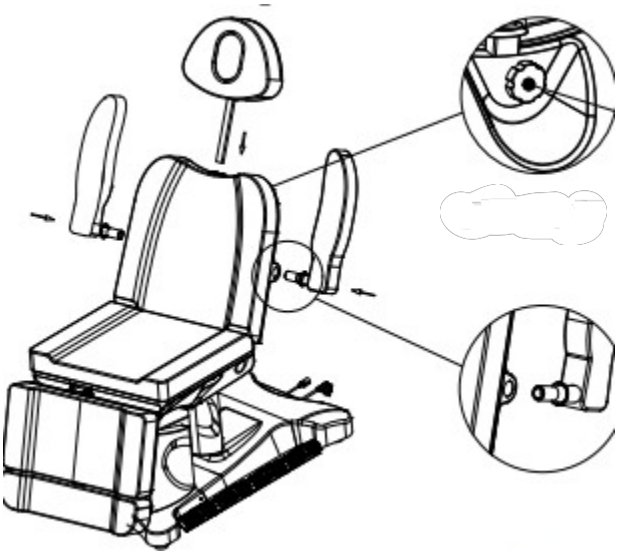

Čiščenje in razkuževanje enote:

Pred čiščenjem odklopite enoto iz električnega omrežja.

Da bi ohranili površino sedeža v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Lakirane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Enote ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter je ne i z p o s t a v l j a j t e pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Ne uporabljajte električnega kozmetičnega stola ali dodatkov, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema za zaklepanje

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja samo izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Reševanje problemov

Problem	**Vzrok**	**Metode reševanja**
Pedal upravljanje nožni pedal se ne odziva	1. Gumb gumb za vklop se sproži ali ne sproži. 2. Preverite, ali pedal je pritisnjena do maksimuma. 3. Preverite, ali je na spletni strani je naprava priključena na električno omrežje. 4. Preverite, ali je je bilo vse pravilno pravilno priključeno.	1. Poskusite ponovno zagnati gumb za vklop. 2. Poskusite vklopiti druge gumbe in preverite, ali delujejo. 3. Odklopite napravo i in jo ponovno priključite. 4. Odklopite vtiče in jih znova priključite.
Naprava naredi čudne zvoke pri spuščanju sedeža	Vijak je zrahljan	Privijte vijake
Svetilke pedala za upravljanje z nogo ne svetijo	Pregorela varovalka	Zamenjajte varovalko

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med nego.

2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.

4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,

c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.

7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino p r i d e tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na napisni ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z direktivo

2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.