ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Azzurro 708B 4 motory



Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

III

CE


Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.

Poznámka! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery zariadenia:



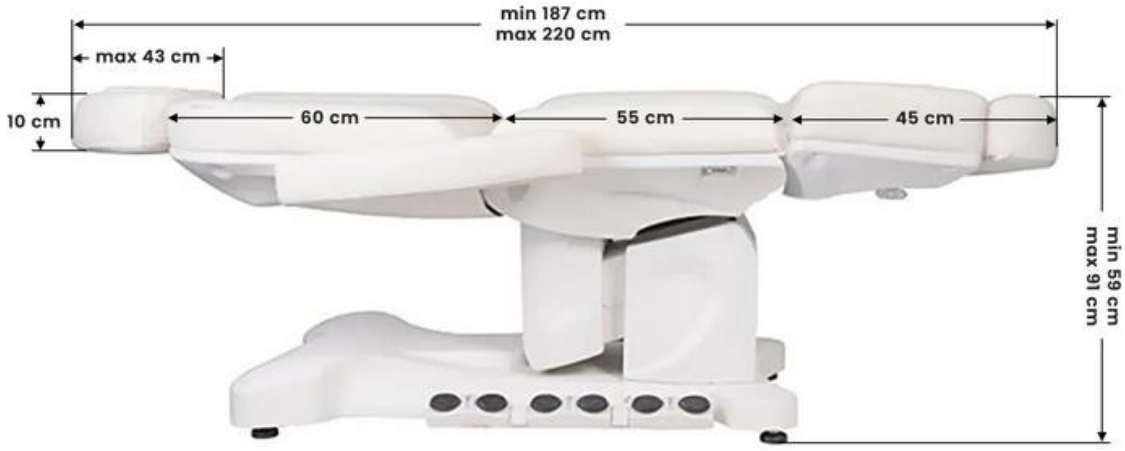

Konštrukcia spotrebiča:



Upozornenie:

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby uniesla plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesedajte si priamo na opierku rúk a nôh.
3. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Upozornenie

1. Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
2. Napájací kábel k jednotke nepripájajte. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Uistite sa, že napájací kábel sa dá v núdzovej situácii ľahko odpojiť.
3. Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, kreslo nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.

5. Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrenie, ovládala diaľkový ovládač.
6. Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
7. Uistite sa, že je okolo sedadla dostatočný voľný priestor, aby sa dalo voľne skladať a rozkladať.
8. Uistite sa, že v okolí sedadla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
9. Jednotku sami neupravujte. Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Funkcie diaľkového ovládania:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

1. Vypínač zapnutia/vypnutia
2 Nastavenie výšky
3 Nastavenie operadla
4. Nastavenie sedadla
5. nastavenie opierky nôh
6. stlačením nastavíte automatický režim
7-9 Automatický režim umožňuje nastaviť a zapamätať si výšku
Polohovanie sedadla, operadla a opierky nôh. Podľa potreby upravte nastavenie sedadla, potom stlačte a podržte tlačidlo SET, kým sa nerozsvieti modrá kontrolka, a potom stlačte tlačidlo P1 na uloženie nastavení. Pomocou tlačidiel P1, P2, P3 (7-9) si môžete zapamätať 3 rôzne nastavenia.
10 Stlačte tlačidlo , aby sa prístroj rozsvietil.
11. Nastavenie jasu svetla
Funkcia nafukovania operadla - stlačením deaktivujete nafukovanie
13. Funkcia čerpanie opierka chrbta - stlačte, na aktivovať nafukovanie
14. Funkcia vyhrievania - stlačením vypnete vyhrievanie
15. Funkcia ohrevu - stlačením aktivujete ohrev


Funkcie nožného ovládania:

Spotrebič je vybavený 4 nožnými ovládacími pedálmi. Každý z nich zodpovedá za inú funkciu.

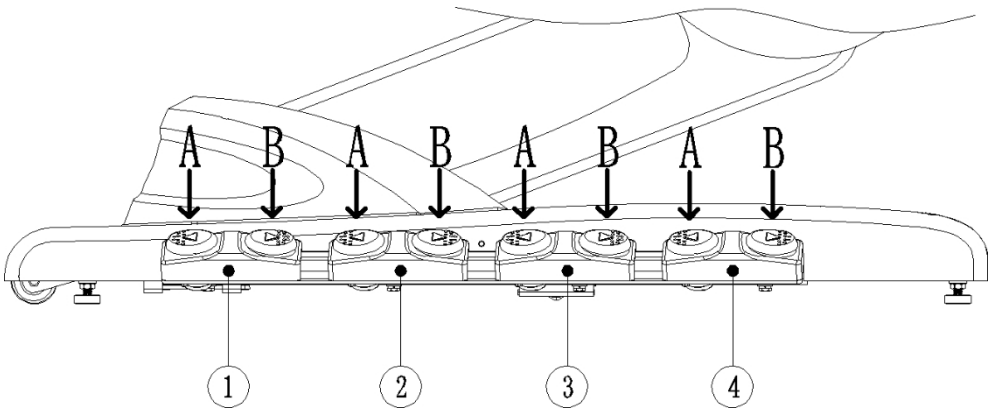

1. Nastavenie výšky


   Zapnite vypínač napájania. Potom stlačte pedál 1  na nastavenie výšky sedadla.

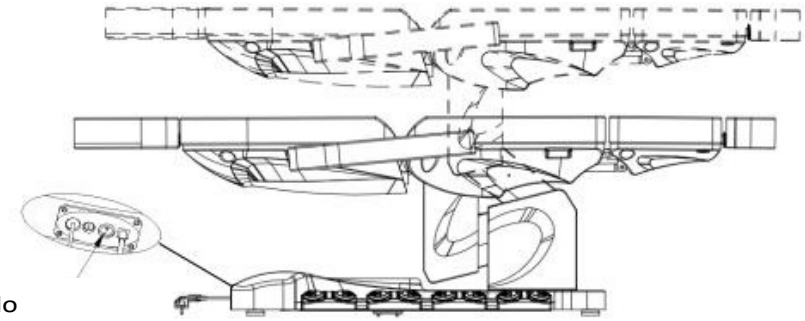

Tlačidlo napájania


2. Nastavenie operadla

Na pedáli 2 stlačte  na nastavenie polohy operadla.

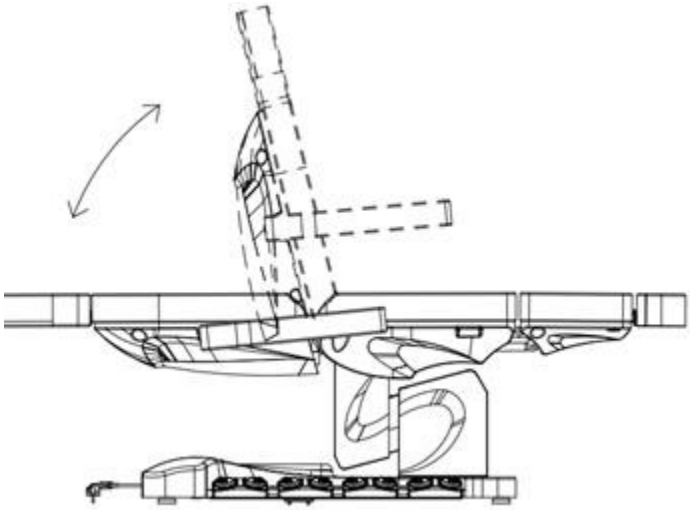


3. Nastavenie sedadla

Na pedáli 3 stlačte  pre nastavenie polohy a sklonu sedadla.

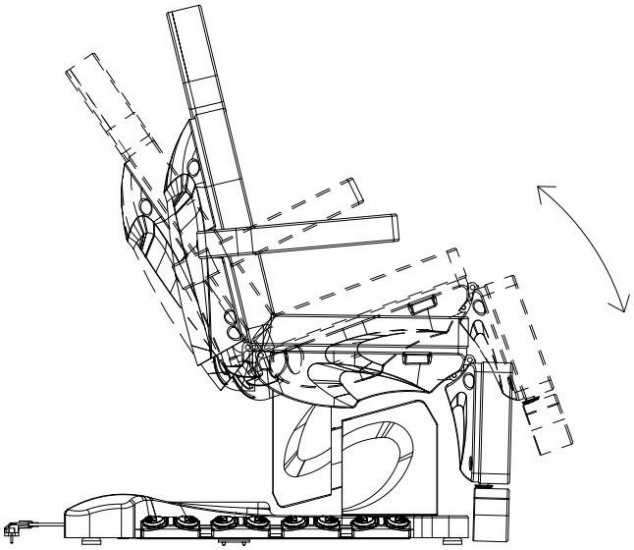


4. Nastavenie opierky nôh


Na pedáli č. 4 stlačte  na nastavenie polohy opierky nôh

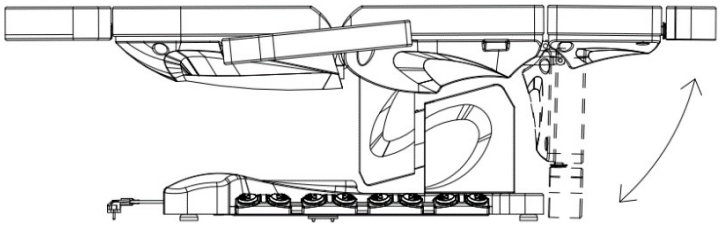

5. Vysunutie opierky nôh

Kreslo má tiež možnosť predĺžiť opierku nôh, čo uľahčuje vykonávanie ošetrení u vyšších osôb a zvyšuje pohodlie.
Opierka nôh sa nastavuje pomocou gombíka na spodnej strane opierky nôh. Odskrutkovaním gombíka sa opierka nôh predĺži.

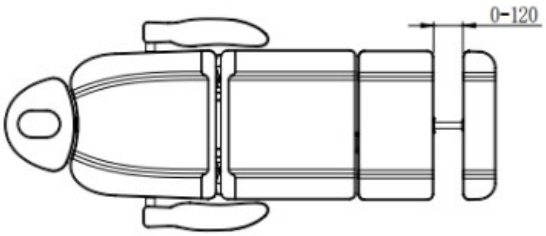

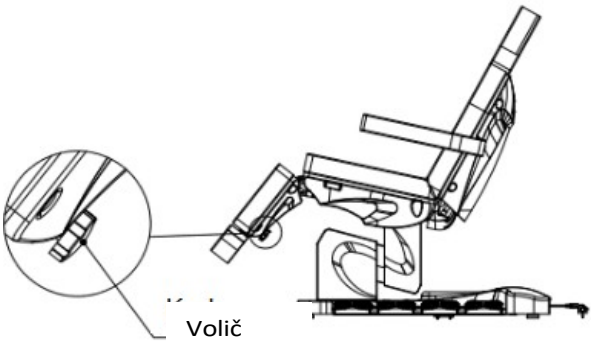


Inštalácia podrúčky:

Zasuňte podrúčku do otvoru umiestneného na boku operadla. Opierka na ruku by mala byť pevne pripevnená. Otočte ju doprava alebo doľava, aby sa správne zasunula na miesto. To isté urobte aj s druhou opierkou na ruku. Opierka na ruku je kolmo k zemi (bez ohľadu na uhol sedadla). Možno ju otočiť o 180°.

Inštalácia opierky hlavy:

Zasuňte opierku hlavy do otvoru v hornej časti operadla sedadla. Keď je opierka hlavy v správnej výške, utiahnite kľučku umiestnenú na zadnej strane, aby ste opierku hlavy upevnili.
Ak chcete opierku hlavy znížiť alebo predĺžiť, odskrutkujte kľuku, nastavte opierku hlavy a kľuku dotiahnite.

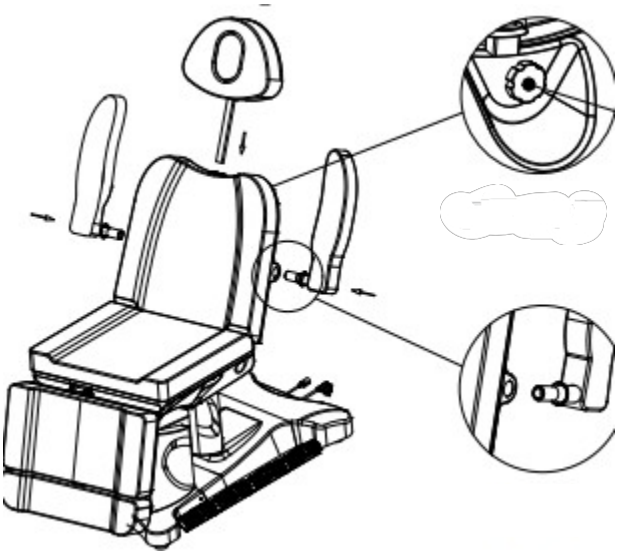

Čistenie a dezinfekcia jednotky:

Pred čistením odpojte jednotku od elektrickej siete.

Aby sa povrch sedadla udržal v dobrom stave, musí sa pravidelne čistiť. Po každom použití nezabudnite kreslo vyčistiť a vydezinfikovať. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Jednotku nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a n e v y s t a v u j t e ju podmienkam, ktoré by mohli viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Ak elektrické kozmetické kreslo alebo príslušenstvo nefunguje správne, nepoužívajte ho.
4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.
Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom informujte servis.

Riešenie problémov

Problém	**Príčina**	**Metódy riešenia**
Pedál ovládanie nožný pedál nereaguje	1. Tlačidlo Tlačidlo napájania sa aktivuje alebo neaktivuje. 2. Skontrolujte, či pedál je stlačený na maximum. 3. Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do siete. 4. Skontrolujte, či je na stránke je všetko správne správne pripojené.	1. Skúste reštartovať tlačidlo napájania. 2. Skúste zapnúť iné tlačidlá a zistite, či fungujú. 3. Odpojte stránku zariadenie i znovu ho pripojte. 4. Odpojte zástrčky a znova ich pripojte.
Zariadenie robí zvláštne zvuky pri spúšťaní sedadla	Uvoľnená skrutka	Utiahnite skrutky
Kontrolky nožného ovládacieho pedálu nesvietia	Prepálená poistka	Vymeňte poistku

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou

2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať na nasledujúcich zberných miestach

zber odpadových elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.