ACTIVESHOP®

# NAVODILA ZA UPORABO

## Električni kozmetični stol Sillon Lux 273b s 3 motorji

CH-273E/ 144069



Uvoznik:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, stavba DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026

Poiskati drugačno jezikov

Hvala, da ste izbrali naš izdelek.
Pred prvo uporabo se seznanite z navodili za uporabo in jih shranite za kasneje.

**Električni kozmetični stol Lux 273B** je opremljen s 3 servomotorji, ki se upravljajo z daljinskim upravljalnikom na kablu.
Enostavna uporaba in prilagajanje individualnim potrebam znatno olajšata izvajanje različnih posegov. Značilna, elegantna obdelava ob ohranjeni preprostosti naredi ta stol privlačen element vsakega specializiranega salona.

| **Tehnični podatki** | |
|---|---|
| Vhodna napetost | ~230 V |
| Električna moč | 150 W |
| Nazivna frekvenca | 50 Hz |
| Material oblazinjenja | Umetno usnje |
| Upravljanje | Žični daljinski upravljalnik |
| Največja obremenitev | 140 kg |

**Konstrukcija stola**

1. Naslon za glavo
2. Odprtina v naslonu za glavo
3. Naslon
4. Naslon za roke
5. Sedež
6. Podnožje
7. Žični daljinski upravljalnik
8. Plastični pokrov




**Montaža**

1. Namestite naslon za glavo, kot je prikazano na spodnji sliki.




2. Namestite naslone za roke – naslonjalo stola raztegnite v ležeči (vodoravni) položaj, nato naslon za roke privijte na določeno mesto, pri čemer sledite navodilom na slikah.

**Korak 1**



**Korak 2**

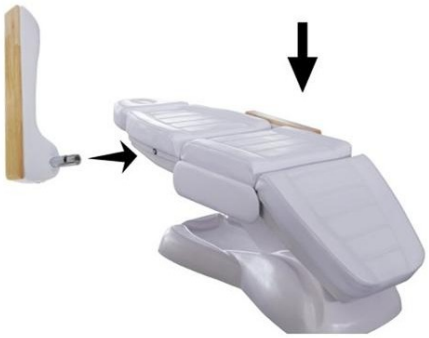

**Korak 3**



**Korak 4**



3. Priključite napajalni kabel na električno omrežje.

**Funkcije daljinskega upravljalnika**

Da nastavite sedež v želeno lego, morate na daljinskem upravljalniku pritisniti in držati izbrano tipko:




Nastavitev naklona naslona

Nastavitev naklona podnožja

Nastavitev višine stola (v razponu 65–82 cm)


Za večje udobje lahko daljinski upravljalnik obesit
na kovinski nosilec na desni strani sedeža, da ga
imate vedno pri roki.



**Funkcije nastavitve fotelja:**

- Konstrukcija omogoča raztezanje stola v ležeči položaj.
- Praktična odprtina v naslonjalu za glavo, diskretno skrita pod blazino.
- Premikljivi nasloni za roke v obsegu 180°.
- Izvlečni naslon za glavo

**Dimenzije naprave**

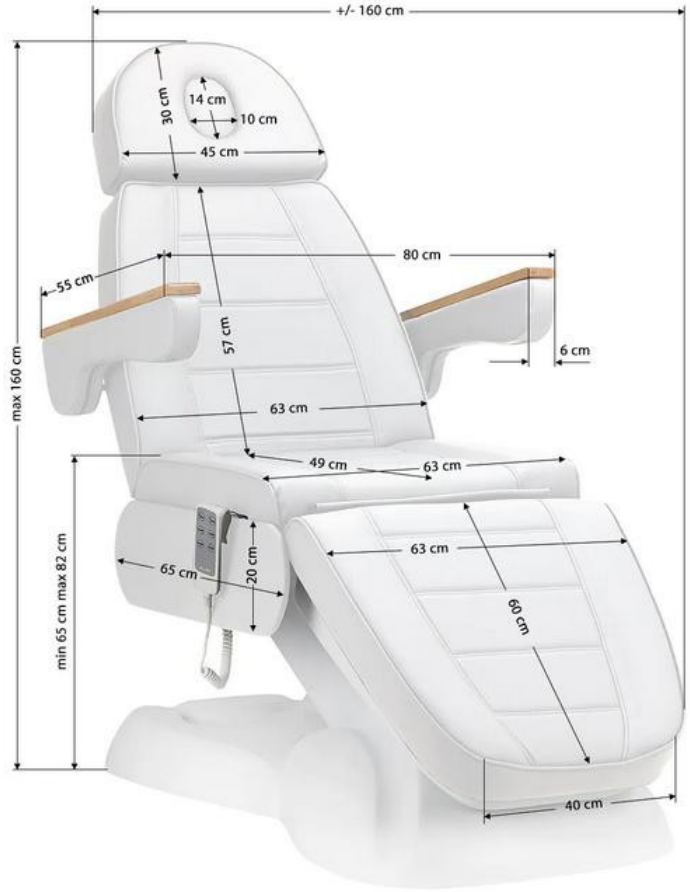


Fotelj v položaju, raztegnjenem v ravno ležišče, doseže dolžino 207 cm.

**Opomba**
Največja obremenitev fotelja: 140 kg.
Ne presegajte največje obremenitve fotelja in ne sedajte na naslonjala za roke.

**Čiščenje in vzdrževanje**

Da bi ohranili fotelj v dobrem tehničnem stanju, zagotovili njegovo dolgo življenjsko dobo in pravilno delovanje naprave, priporočamo redno vzdrževanje in upoštevanje naslednjih pravil čiščenja.

**Opomba:** Pred začetkom kakršnih koli del vedno izklopite napravo z glavnim stikalom in izvlecite vtič iz vtičnice

- Čiščenje površin iz umetnega usnja:
  Usnje obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte močnih čistil, kot so

topila, bencina in pripravkov na osnovi alkohola. Uporabite lahko izdelke za nego umetnega usnja, ki so na voljo na trgu, in upoštevajte navodila na embalaži.

Pustite, da se oblazinjenje stola naravno posuši. Za sušenje površine ne uporabljajte naprav za pihanje. Za brisanje naprave ne uporabljajte džinsa ali barvnih tkanin, da barva ne bi prodrla v površino stola.

- Čiščenje kovinskih in plastičnih površin
  Površine obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih mest ali kotov je primerna majhna krtačka. Ne uporabljajte preveč tekočine za čiščenje naprave. Nato napravo razkužite z ustrezno tekočino.
- Površine iz nerjavečega jekla
  Najbolje je, da jih očistite z blagim detergentom. Amoniak in večina topil se lahko uporabljajo za odstranjevanje trdovratnih madežev. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora**.**
- Barvane ali kromirane kovinske površine
  - Za čiščenje ne uporabljajte vodnih šob.
  - Ne čistite pri visoki temperaturi in visoki vlažnosti zraka. Naprave ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
  - Za čiščenje ne uporabljajte topil in kislin.

Če je kateri koli del stola poškodovan, izklopite napravo, izključite napajalni kabel iz vtičnice in o okvari obvestite pooblaščeni servis.

**Priporočila**

1. Prepričajte se, da ste napravo namestili na ravno in stabilno površino, da zmanjšate tveganje padca in poškodb.
2. Nikoli ne puščajte priključene naprave brez nadzora.
3. Napravo uporabljajte v skladu z namenom, opisanim v navodilih.
4. Nikoli ne uporabljajte te naprave, če ima poškodovan kabel ali vtič.
5. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali če je padla, poškodovana ali padla v vodo.
6. Za izklop naprave iz vtičnice ne vlecite neposredno za kabel.
7. Izdelek je namenjen izključno za uporabo v zaprtih prostorih. Ne izpostavljajte ga neposrednim vremenskim vplivom.
8. Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije. Najbolje je, da napravo čistite z vlažno krpo.
9. Napajalnega kabla ne ovijajte okoli naprave.

**Varnostni ukrepi**

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporaba naprave izključno s strani usposobljenega kozmetičnega osebja preprečuje neželene učinke med postopkom.
2. Naprave ne smete razstavljati niti poskušati uporabljati za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila mora opravljati izključno pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami. Poskrbite, da v napravo ne pridejo nobene tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) je tekočina prišla v stik z napravo,
   b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) naprava se je prevrnila ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih,

kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti po vsakem zaključku dela z napravo izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V notranjost naprave ne smete vstavljati tujih predmetov. Če se nezaželen predmet znajde v notranjosti, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili predvideno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajanje mora biti v skladu s specifikacijami na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

**OPOZORILO**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki niso seznanjene z delovanjem te opreme, če jim je zagotovljen ustrezen nadzor ali navodila o pravilni in varni uporabi ter če razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
4. Naprava ni namenjena za igro otrok. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato napravo uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

**Odlaganje naprave**



Zaradi varstva okolja je v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi treba izrabljeno električno opremo zbrati ločeno in jo odnesti na zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo. Upoštevajte navodila za odstranjevanje te vrste opreme in ga ne odlagajte v zabojnike za gospodinjske odpadke.

Ob koncu življenjske dobe naprave še vedno vsebujejo uporabne sestavne dele, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo na ustreznih zbirnih mestih ali podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

**Skladiščenje in prevoz**

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (–)20 °C in (+)40 °C izključno v originalni embalaži. Napravo je treba shranjevati v dobro prezračenem prostoru pri relativni vlagi, ki ne presega 90 %. Delovna temperatura je od (+)10 °C do (+)40 °C. Med skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati na tla ter je ne smete izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.