ACTIVESHOP®


GEBRAUCHSANWEISUNG

Kosmetik-Assistent 084




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Abmessungen des Geräts:

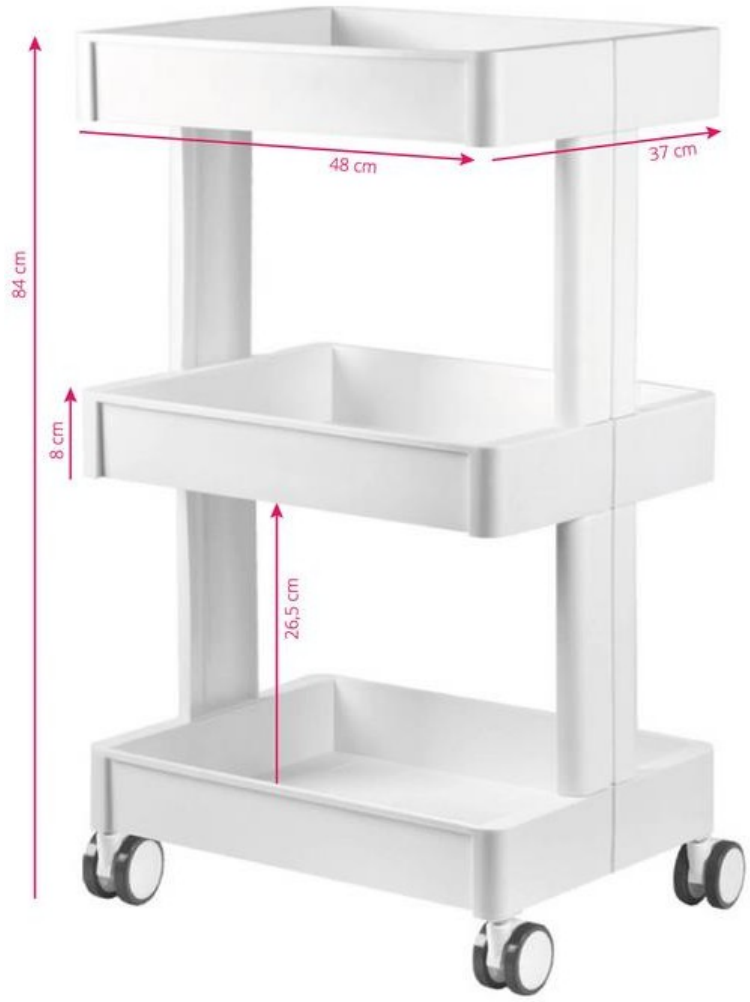

Der Satz umfasst:

- 4 Lenkrollen
- 3 Einlegeböden
- 4 Seitenwände des Tisches

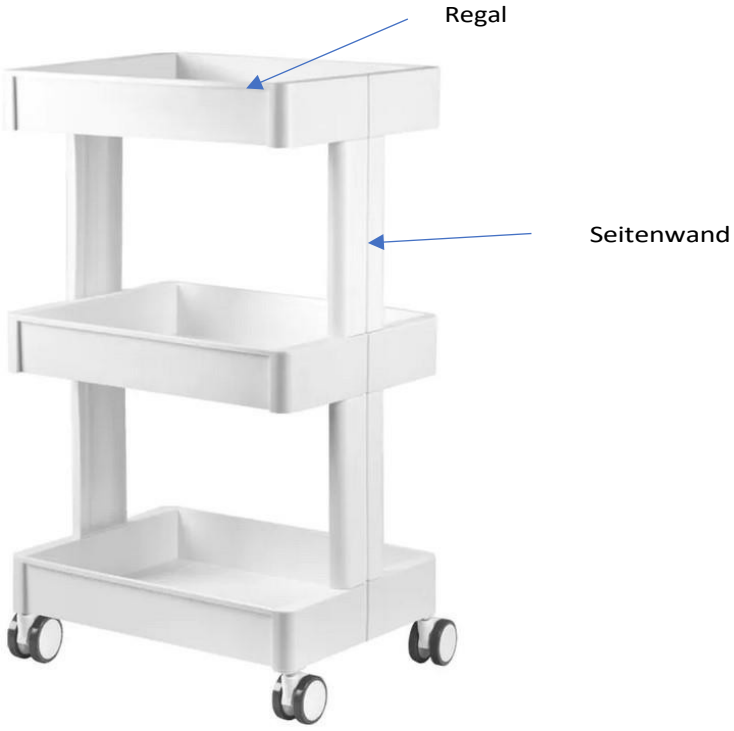

Aufbauanleitung

Der Tisch besteht aus 3 Regalböden, die über die Seitenwände miteinander verbunden werden müssen. Das untere Regal hat an der Unterseite Löcher für die Montage von Rollen. Stecken Sie die Seitenwand in die Nuten des Regals. Stellen Sie die Wand aufrecht hin und schieben Sie sie in die Nasen des Regals. Wie auf dem Bild unten.



Dann legen wir ein weiteres Regal darauf und drücken es fest an, damit das Regal gut hält. Wie auf dem Bild unten.

Das Regal hat auf beiden Seiten Laschen, in die Sie die Seitenteile einsetzen müssen, um es zu befestigen und das Gerät zusammenzubauen.



Anleitung für den Zusammenbau der Rollen

Bringen Sie die Rollen am unteren Regalboden an. Das untere Regal hat an der Unterseite Löcher für die Rollen (eines in jeder Ecke). Der Stift muss in das Loch gesteckt werden, um die Rolle zu fixieren. Wie auf dem Bild unten.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verbiegen Sie die Komponenten des Geräts nicht.
2. Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit dem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit aus.
3. Überlasten Sie das Gerät nicht mit zu viel Gewicht.
4. Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit Feuer und brennbaren Stoffen.
5. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Oberfläche.
6. Werfen Sie das Gerät nicht.
7. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
8. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Regeln für die Entsorgung dieses Gerätetyps . Um den Schutz der

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und müssen daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C

°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.